

Manuel d'utilisation ACCED V2

Sécurité

Présentation

Entretien

Fonctionnement

Changement consommables

Déplacement des robots


Gestion machine

Présentation de Médian


SOMMAIRE

- **Sécurité :**
 - 4A Sécurité
- **Présentation :**
 - 4B Présentation de l'ACCED V2
 - 4C Descriptif de l'écran tactile
- **Entretien :**
 - 4D Entretien quotidien du module
 - 4E Préparation à la prise de poste
- **Fonctionnement :**
 - 4F Lancement du cycle mode blister
 - 4G Lancement du cycle mode Vrac
 - 4H Lancement du cycle sachet poudre
 - 4I Lancement d'un cycle de cueillette en DN et validation
 - 4J Lancement d'un cycle de cueillette en sortie globale
 - 4K Lancement d'un cycle de retour produits
 - 4L Gestion des boîtes rejets
 - 4M Gestion des périmés
- **Gestion des consommables :**
 - 4N Changement des consommables
 - 4O Ticket imprimante
- **Déplacement des robots :**
 - 4P Placer le robot en position de bouclage W_lopos
- **Gestion machine :**
 - 4Q Comprendre et gérer les taquins
 - 4R Comprendre et gérer les boîtes bloquées
 - 4S Comment réagir aux messages
- **Présentation de Médian :**
 - 4T Médian

Sécurité

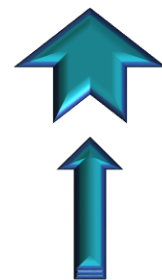

04.A - Sécurité

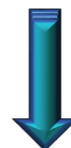

Sécurité

Conseils de sécurité




Respecter scrupuleusement ces conseils de sécurité afin d'éviter tout risque et dommage pour les personnes et les biens.




Avant toute opération sur la machine, la documentation doit avoir été lue et comprise.

Travaux sur l'appareil

L'entretien et les réparations devront être impérativement effectuées par du personnel qualifié, habilité et certifié par la société ECO-DEX.

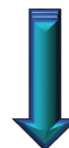

Sécurité

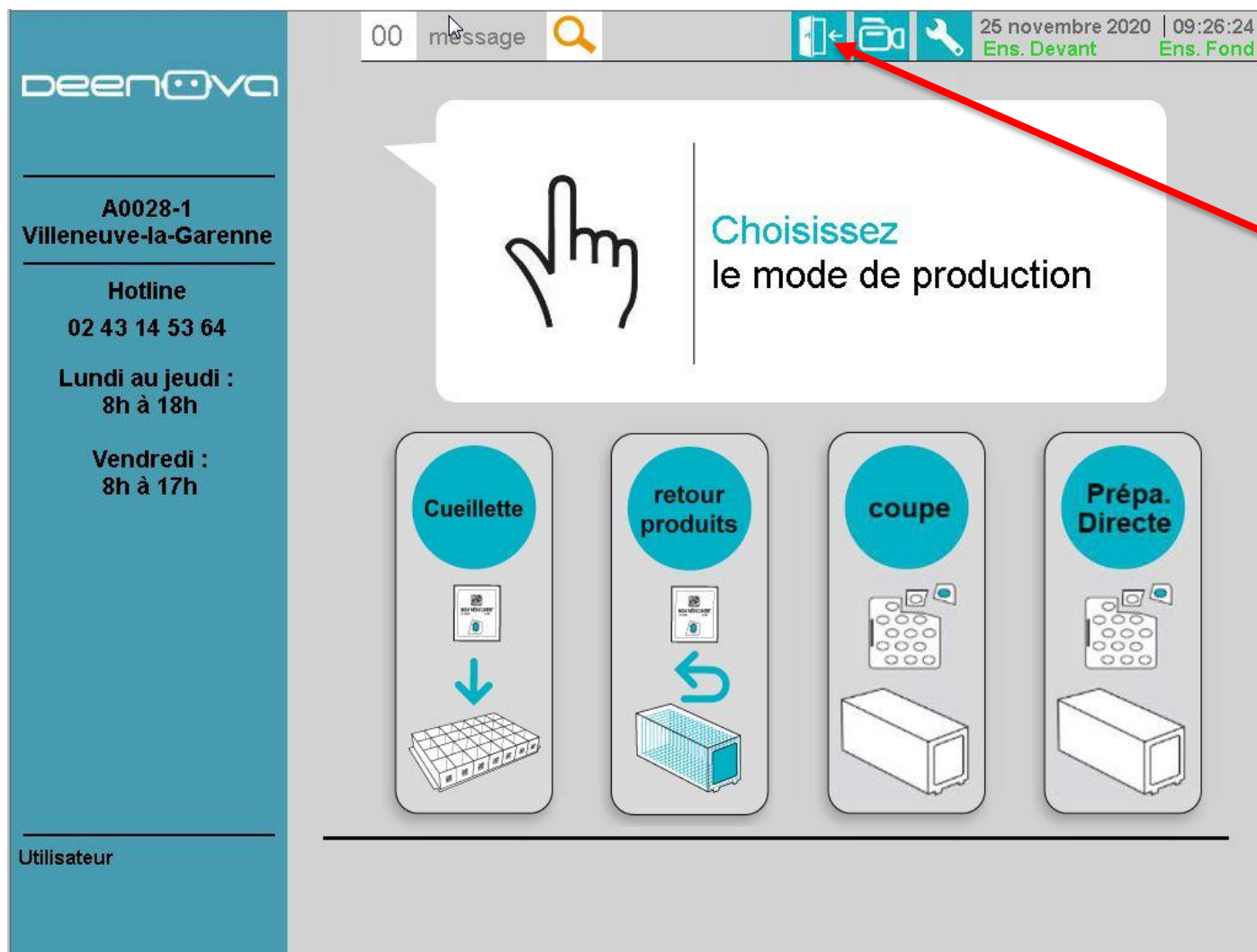

Pour entrer dans le module, faire une demande d'accès.

Sécurité

⚠ *Il est strictement interdit de démonter les éléments de sécurité.*

⚠ *Toujours vérifier que la lumière soit allumée dans le module avant d'entrer.*

ENTRER



DANGER




Sécurité


L'outil de coupe




*Une cale de sécurité est fournie avec la machine.
Toujours utiliser la cale lorsque vous travaillez dans la zone
de coupe. Ex : nettoyage ou retrait d'une dose unitaire.*

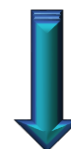

Présentation

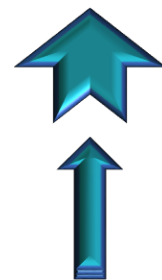

04.B - Présentation de l'ACCED V2

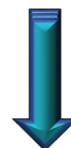



Présentation de l'ACCED V2

Comment se présente-t-il ?




Présentation de l'ACCED V2


Comment se présente-t-il ?

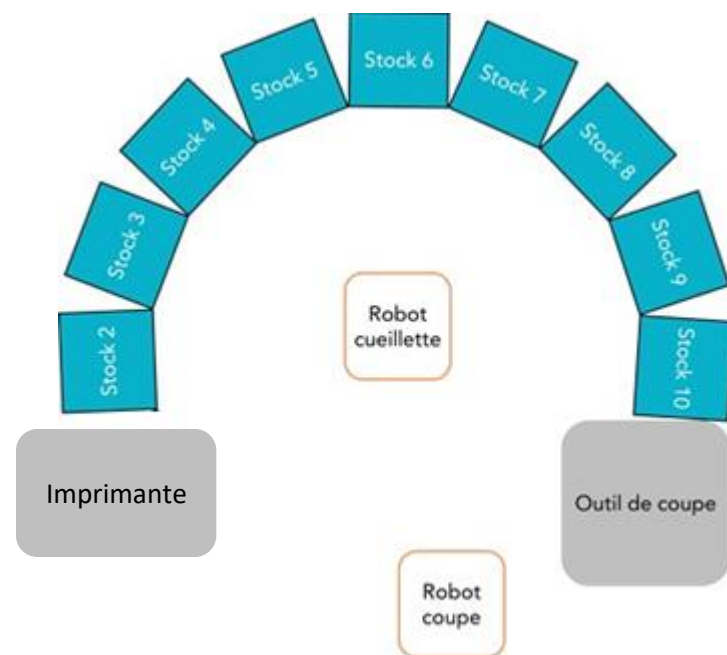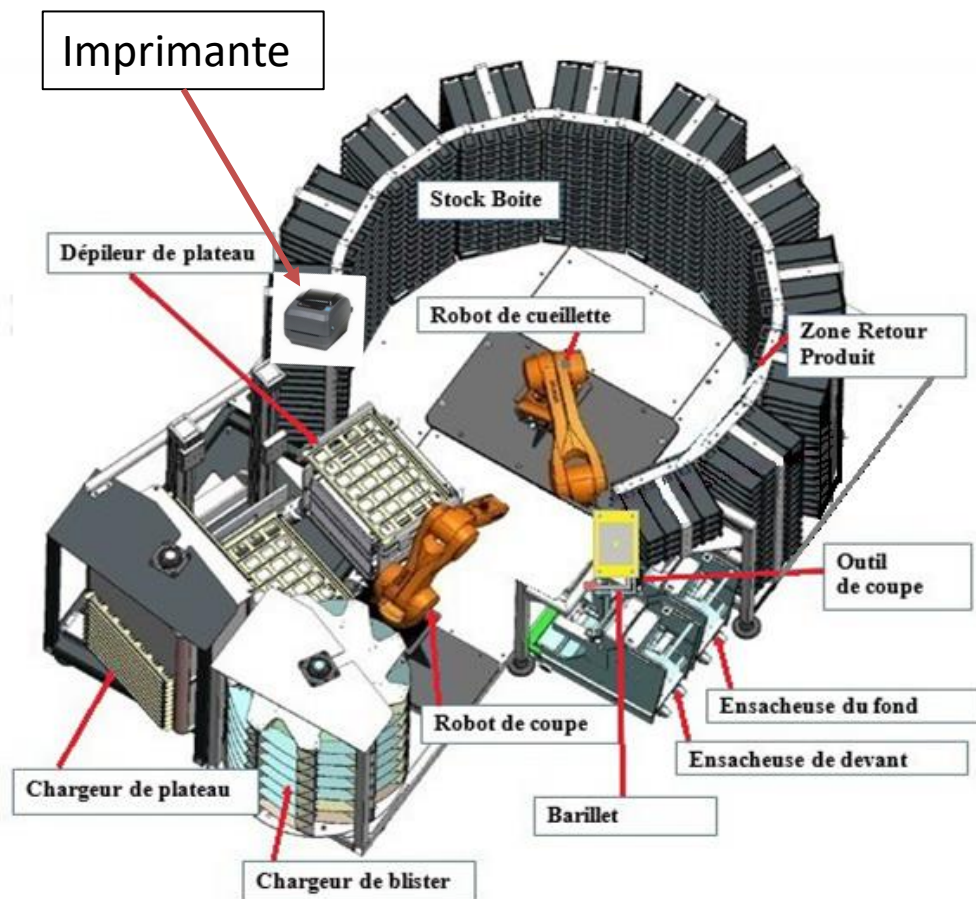

Présentation de l'ACCED V2

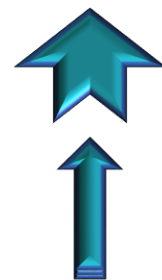

Présentation de la fonction conditionnement

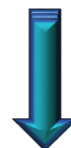



Présentation de l'ACCED V2

A quoi sert cette fonction?

Au sur-conditionnement en sachet individuel tracé.

Au conditionnement de doses unitaires à partir de médicaments en vrac ou en fraction.

A la découpe de doses unitaires depuis des blisters de médicaments.

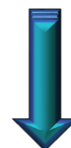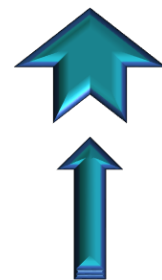

Présentation de l'ACCED V2

Comment l'utiliser :

Prendre l'étui de médicaments que l'on souhaite introduire dans l'automate.

Scanner le Datamatrix présent sur l'emballage.



L'ACCED reconnaît le produit et affiche l'ensemble des informations relatives à celui-ci.



Présentation de l'ACCED V2

Comment l'utiliser : (suite)


Après vérification de la concordance des informations affichées avec celles du produit, valider grâce à l'écran tactile la demande de production de doses unitaires.

L'ACCED autorise la découpe du médicament et l'opérateur est invité à les déposer dans le magasin suivant les instructions affichées à l'écran.


A la fermeture de la trappe, le cycle automatisé démarre.

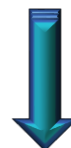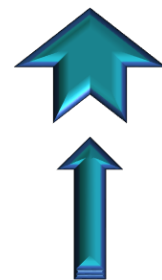

Présentation de l'ACCED V2

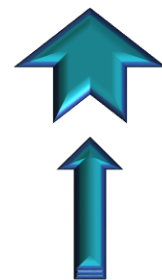


Présentation de la fonction cueillette

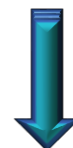

Présentation de l'ACCED V2

Comment se présente-t-elle ?

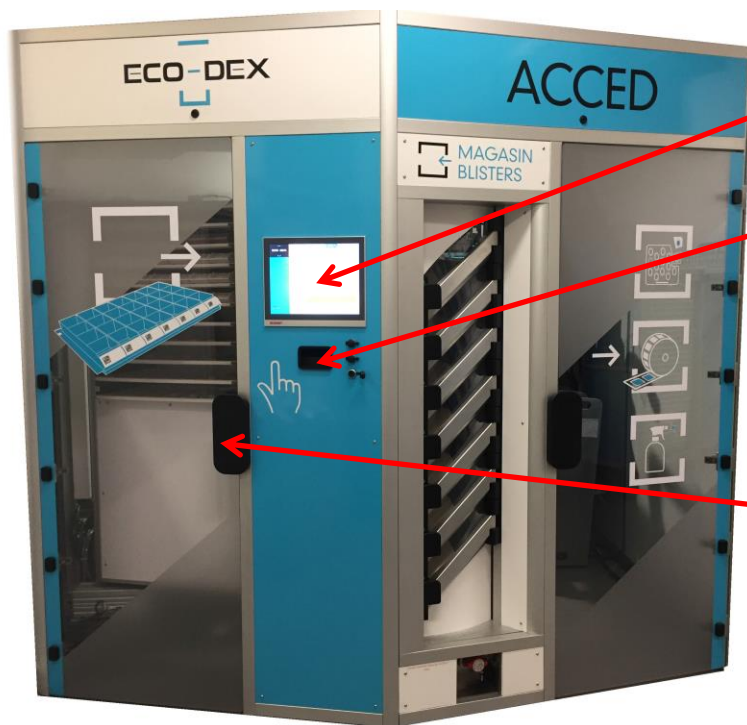

Un écran tactile de contrôle.

Un lecteur optique pour s'identifier.

Une porte d'accès au CPU.

Présentation de l'ACCED V2

Cycle de cueillette :

L'utilisateur entre les premiers plateaux en commençant par une ouverture porte CPU.



Ensuite il sélectionne le ou les service(s) à lancer.

A ce moment l'automate vient chercher le plateau avec les piluliers.

L'automate scanne chaque pilulier et leur attribue une ordonnance.

Le robot de cueillette va chercher les produits dans le stock.

Puis il ramène les piluliers en fin de cueillette.

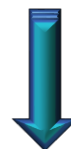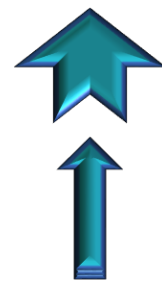

Présentation de l'ACCED V2



Cycle de cueillette : (suite)

L'automate demande alors à l'opérateur de s'identifier.


L'opérateur scanne son badge ou saisit son code.

A ce moment la porte CPU se déverrouille.


Et l'opérateur doit récupérer les plateaux.

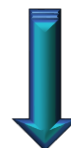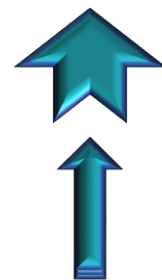


Présentation de l'ACCED V2

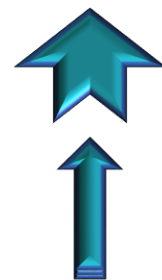

Présentation de la fonction retour produits

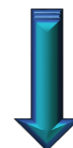

Présentation de l'ACCED V2

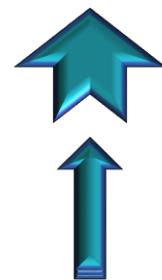

Cycle de retour produits :

L'utilisateur selectionne le mode retour sur l'interface.


Il s'identifie puis L'automate déverrouille la porte et propose de charger les boites PASS dans la zone retour.

L'utilisateur charge les boites PASS pleines de retours dans la zone dédiée.


Au verrouillage de la porte, l'automate débute les retours et vient lire sachet après sachet afin de les ranger dans le stock.



Présentation

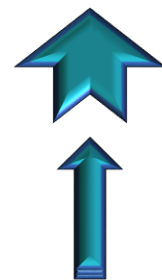

04.C - Descriptif de l'écran tactile

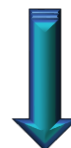

Descriptif de l'écran tactile

Logo entreprise

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne


Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h


Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Utilisateur

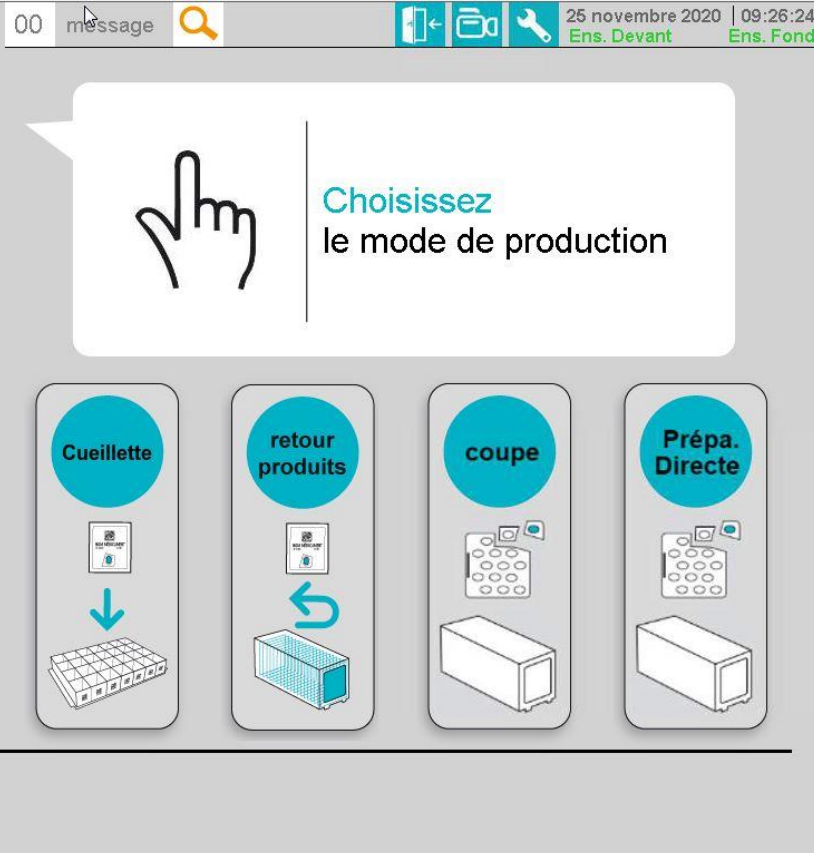


Descriptif de l'écran tactile

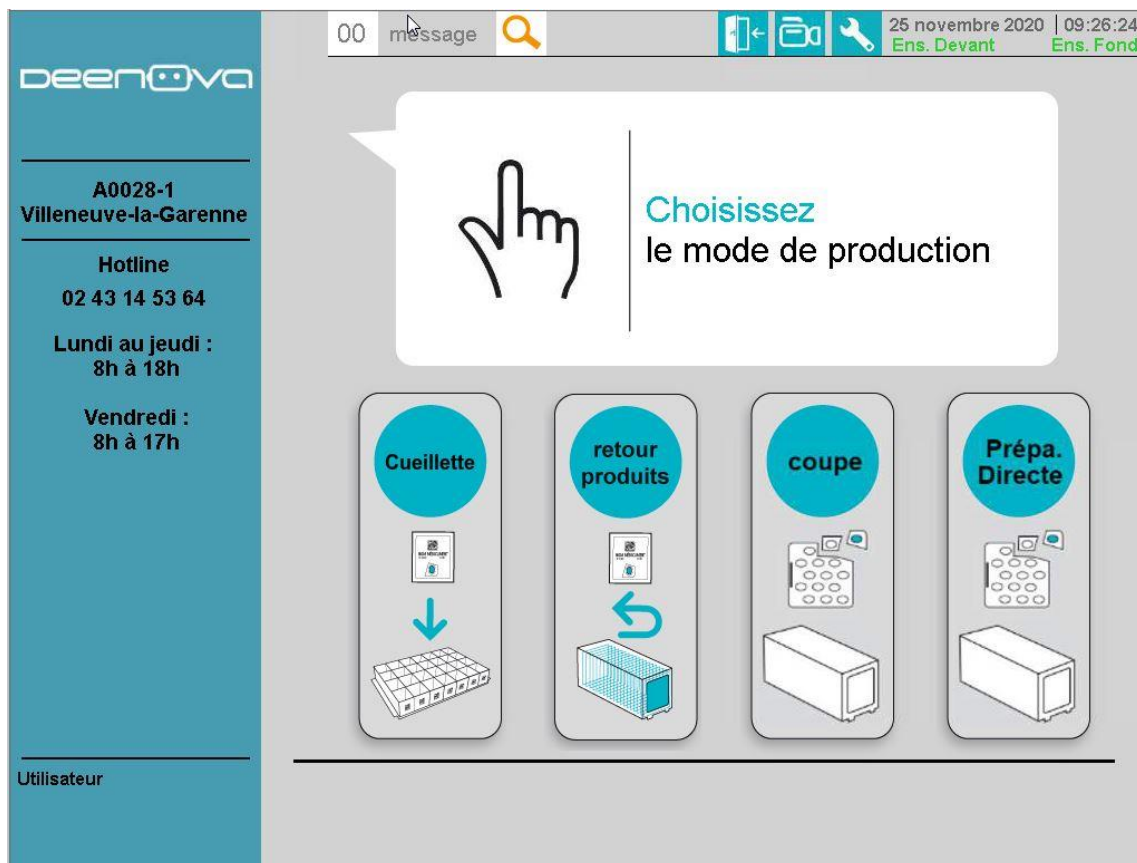


Information ou instruction à suivre sous forme de bulle.

Choix du type de production.

Zone d'action

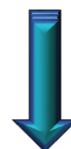

Descriptif de l'écran tactile

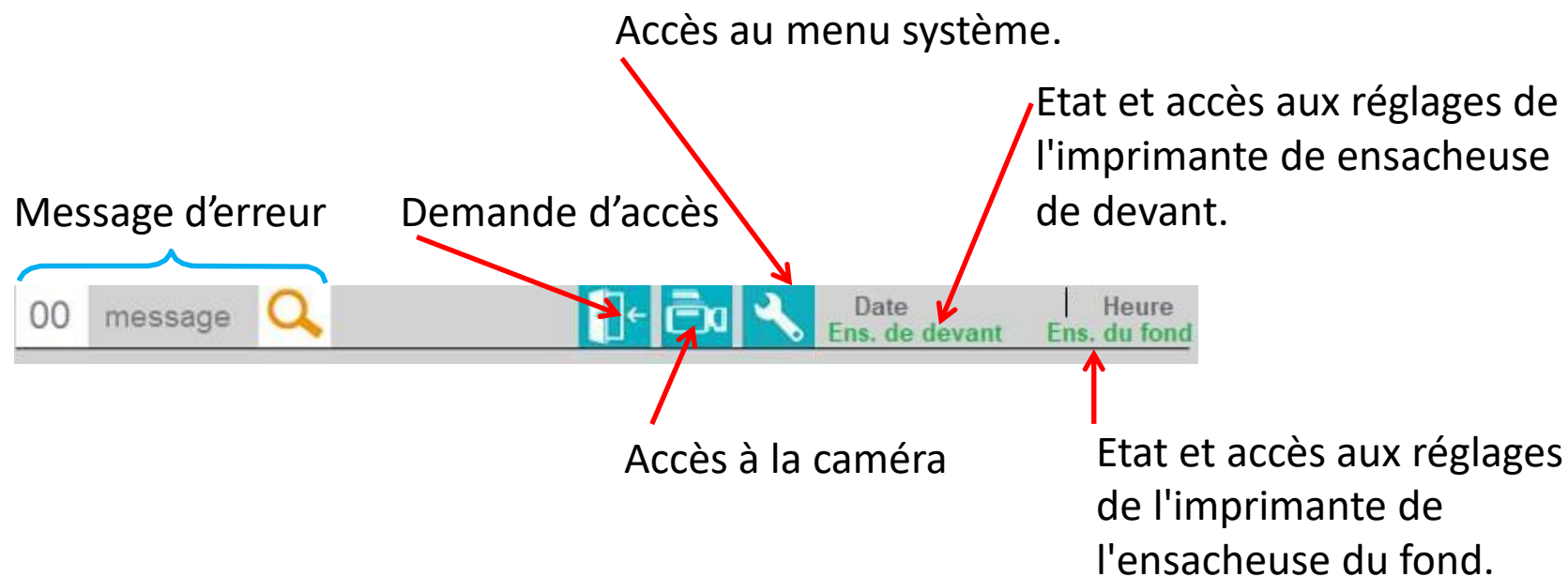

Descriptif de l'écran tactile



Le type de production : Cueillette

00 message

16 décembre 2020 | 10:26:37
Ens. Devant | Ens. Fond

deenoVA

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Choisissez les services à lancer

	Unité NSMAS 1- : Mas 1 Temps estimé : 17:29:46 4145 préparations 79 piluliers 13 lits 7 jours	☐
	Unité NSMAS 2- : Mas 2 Temps estimé : 15:21:26 4299 préparations 99 piluliers 15 lits 7 jours	☐
	Unité NSMAS 3- : Mas 3 Temps estimé : 01:04:04 5289 préparations 91 piluliers 13 lits 7 jours	☐

Abandon

Confirmer


Faisabilité

Effacer la sélection

Permet de sélectionner le mode de lancer la production par services

Descriptif de l'écran tactile

Le type de production : Coupe

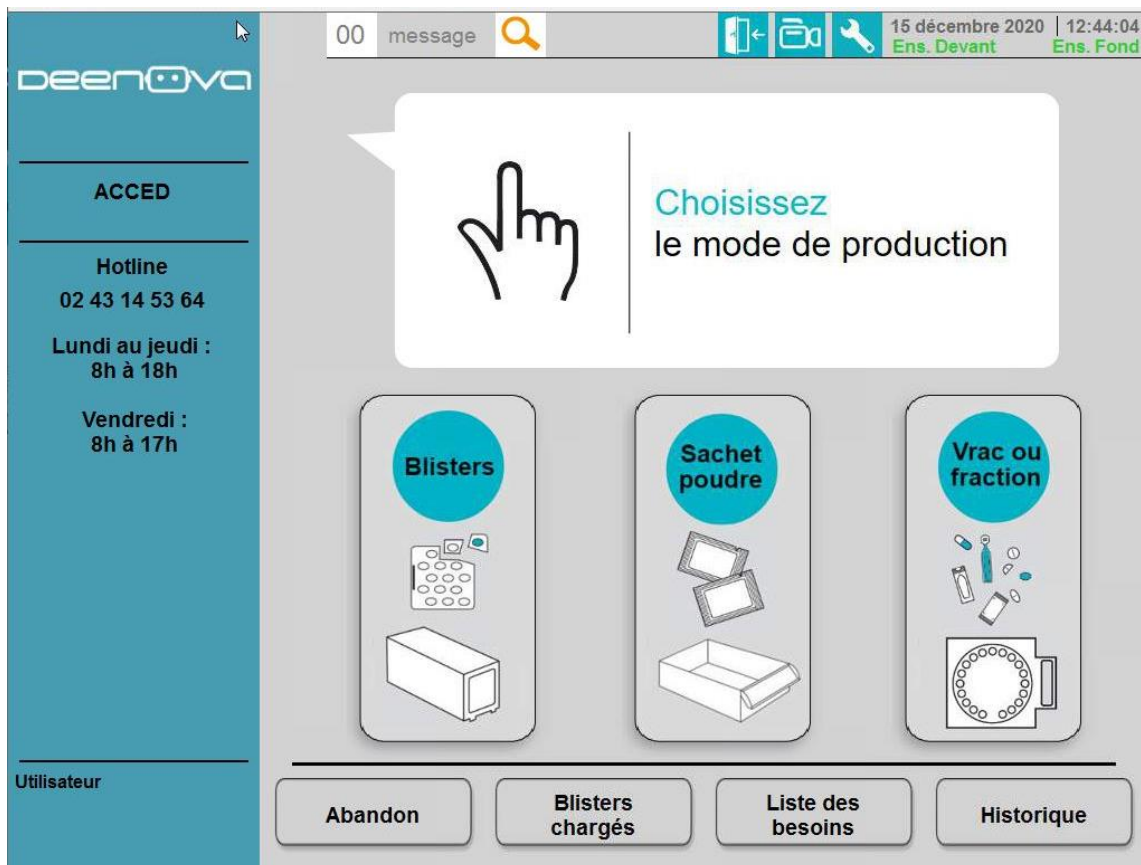

Permet de sélectionner le mode de production, Blister ou Vrac.

Descriptif de l'écran tactile



Le type de production : Coupe

Bouton "Blisters chargés"

Blisters
chargés

Liste des
besoins

Historique

00 message 🔍 15 décembre 2020 | 12:51:00
Ens. Devant Ens. Fond

LISTE DES PRODUITS CHARGES FACE N° 1

Trappe n° 1	
Trappe n° 2	
Trappe n° 3	
Trappe n° 4	
Trappe n° 5	Référence : 728 CIP : 3400955900122 UCD : 9022055 Désignation : AMIODARONE (CORDARONE) 200MG COMPRIME Date de péremption : 31/12/2022 Lot : 0R148 Quantité : 40
Trappe n° 6	Référence : 38418 CIP : 3400930180037 UCD : 9450408 Désignation : HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG (=1/2 ESIDREX 25MG) Date de péremption : 30/11/2021 Lot : HYM19004-12A Quantité : 90
Trappe n° 7	Référence : 1240 CIP : 3400930181775 UCD : 9207553 Désignation : ALPRAZOLAM 0.25MG COMPRIME Date de péremption : 30/06/2021 Lot : 8098449 Quantité : 60

Utilisateur

Abandon

Permet de
consulter les
produits déjà
chargés, par
trappe et par face,
du chargeur
blister.

Descriptif de l'écran tactile

Le type de production : Coupe

Bouton "Liste des besoins"

Blisters
chargés

Liste des
besoins

Historique

00 message     15 décembre 2020 | 12:52:17
Ens. Devant Ens. Fond

deanova

LISTE DES ENTREES PRODUITS

Référence	Désignation	Fraction	Quantités produites
288	ACEBUTOLOL (SECTRAL) 200MG	100	0/10
1240	ALPRAZOLAM 0.25MG COMPRIME	100	0/60
728	AMIODARONE (CORDARONE) 200MG	100	0/60
513	AMLODIPINE 5MG GELULE	100	0/90
4679	ATORVASTATINE (TAHOR) 10MG	100	0/100
945	BETAHISTINE 8MG COMPRIME #	100	0/10
19537	BISOPROLOL 1,25MG COMPRIME	100	0/80
5068	BISOPROLOL 2,5MG COMPRIME	100	0/140
5069	BISOPROLOL 5MG COMPRIME	100	0/50
1519	CARBIDOPA + LEVODOPA (SINEMET)	100	0/20
22342	CIRCADIN LP 2MG COMPRIME #	100	119/130
1219	CITALOPRAM 20MG COMPRIME	100	0/20
18467	DULOXETINE (CYMBALTA) 30MG	100	0/30
25539	ELIQUIS 2.5MG COMPRIME APIXABAN	100	0/130
20093	ESCITALOPRAM (SEROPLEX) 5MG	100	0/30
4990	EXEMESTANE (AROMASINE) 25 MG	100	0/10
19533	FUROSEMIDE (LASILIX FAIBLE) 20MG	100	0/30
1642	FUROSEMIDE (LASILIX) 40MG	100	176/180
1149	GABAPENTINE 300MG GELULE	100	0/40

Utilisateur

Abandon

Permet de
consulter la liste
des produits
rentrés dans
l'automate.

Descriptif de l'écran tactile

Le type de production : Coupe

Bouton "Historique"

Blisters
chargés

Liste des
besoins

Historique

00 message

15 décembre 2020 | 12:53:28
Ens. Devant Ens. Fond

HISTORIQUE DE PRODUCTION

Référence	Désignation	Fraction	Quantités produites
22342	CIRCADIN LP 2MG COMPRIME #	100	119
8594	METFORMINE 1000MG COMPRIME	100	20
1153	PRAZEPAM 10MG COMPRIME	100	29
20223	VENLAFAXINE LP 75MG GELULE	100	30



Utilisateur

Abandon

Permet de
consulter
l'historique des
conditionnements
fait depuis le debut
de la journée.

Descriptif de l'écran tactile

Le type de production : Préparation directe

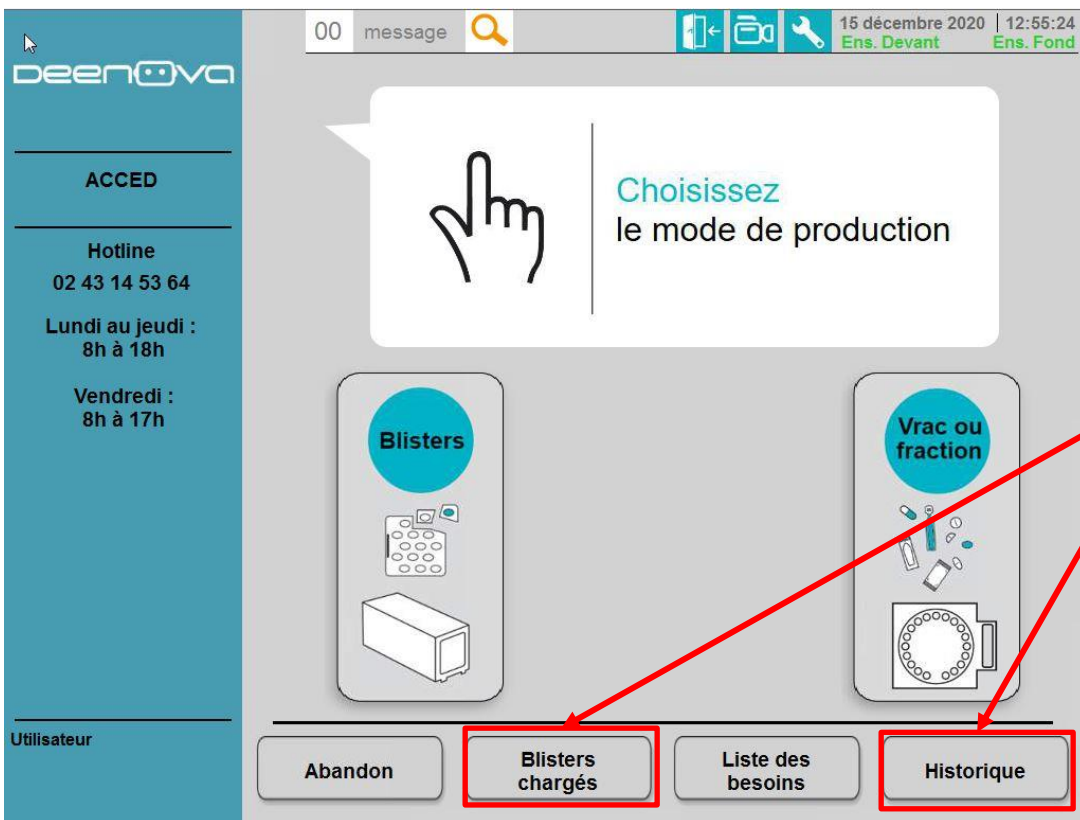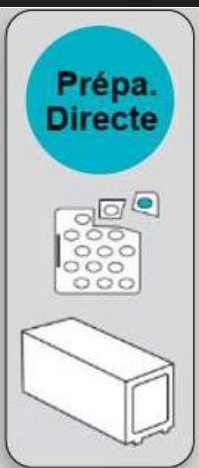

Permet de sélectionner le mode de production, Blister ou Vrac.

On retrouvera les même bouton qu'en coupe normal

Descriptif de l'écran tactile

Le type de production : Préparation directe

Bouton "Blisters chargés"

Blisters
chargés

Liste des
besoins

Historique

00 message

15 décembre 2020 | 12:51:00
Ens. Devant Ens. Fond

LISTE DES PRODUITS CHARGES FACE N° 1

Trappe n° 1	
Trappe n° 2	
Trappe n° 3	
Trappe n° 4	
Trappe n° 5	Référence : 728 CIP : 3400955900122 UCD : 9022055 Désignation : AMIODARONE (CORDARONE) 200MG COMPRIME Date de péremption : 31/12/2022 Lot : 0R148 Quantité : 40
Trappe n° 6	Référence : 38418 CIP : 3400930180037 UCD : 9450408 Désignation : HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG (=1/2 ESIDREX 25MG) Date de péremption : 30/11/2021 Lot : HYM19004-12A Quantité : 90
Trappe n° 7	Référence : 1240 CIP : 3400930181775 UCD : 9207553 Désignation : ALPRAZOLAM 0.25MG COMPRIME Date de péremption : 30/06/2021 Lot : 8098449 Quantité : 60


Abandon

Utilisateur

On y retrouve les
même
fonctionnalité que
dans le mode
coupe

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Général

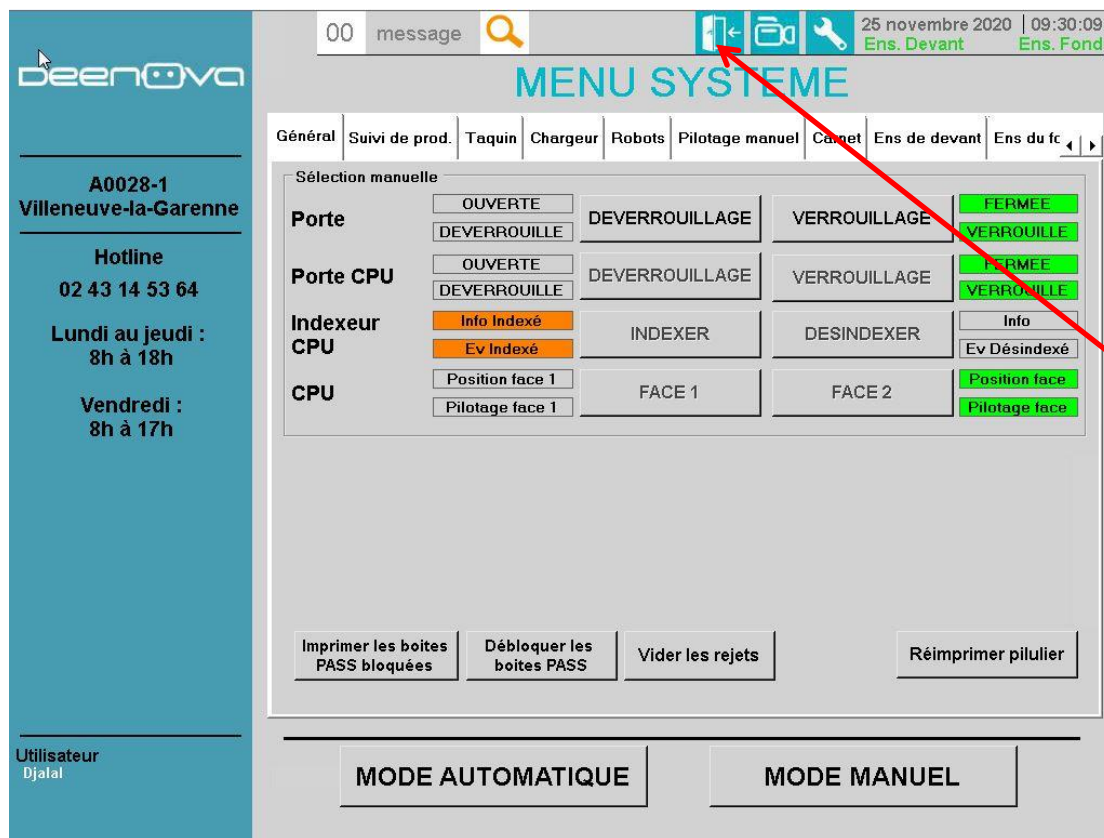


Permet de vérifier l'état des portes automate et CPU, et de forcer le verrouillage ou déverrouillage de l'une d'elles.

Préférer l'utilisation de la demande d'accès avant d'utiliser le forçage.


Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Général.

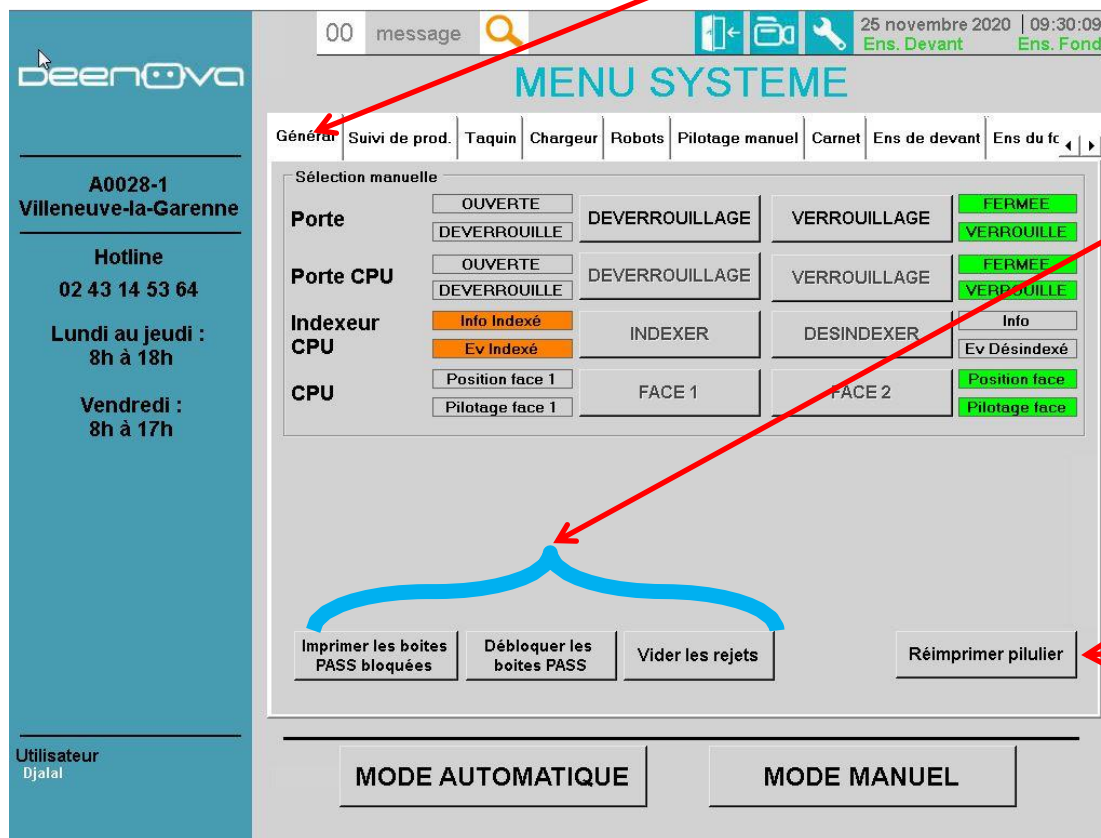

Permet d'imprimer la liste des boîtes PASS bloquées en cueillette, les débloquent en une seule fois et remettre le compteur de rejets à zéro

Permet la réimpression de pilulier.

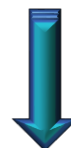

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Suivi de prod/Coupe



Deenova

00 message

15 décembre 2020 | 13:07:30
Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général Suivi de prod. Taquin Chargeur Robots Pilotage manuel Ens de devant Ens du fond Imp

Colpe Cueillette

Compteurs du jour

Goulotte	325	Chargement	0
Coupe	340	Produit dans boîte PASS	334
Barillet	0	Produit dans boîte PASS	0
Boîte PASS rangé dans le stock	12	Boîte PASS en mode préparation directe	0
Nombre de coupes par heure		437,4	

Ensacheuse de devant

Défaut présence dose	0	Défaut de lecture	1
Sachet test	1	Erreur pour test	1
Erreur axe détection produit	0	Défaut présence sachet	0

Ensacheuse du fond


Défaut présence dose	2	Défaut de lecture	1
Sachet test	3	Erreur pour test	0
Erreur axe détection produit	0	Défaut présence sachet	0

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Utilisateur Djalal


Permet d'obtenir des informations relatives au sur- conditionnement de produit.

Permet d'obtenir des informations sur les défauts des ensacheuses

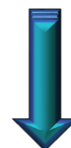


Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Suivi de prod/Cueillette

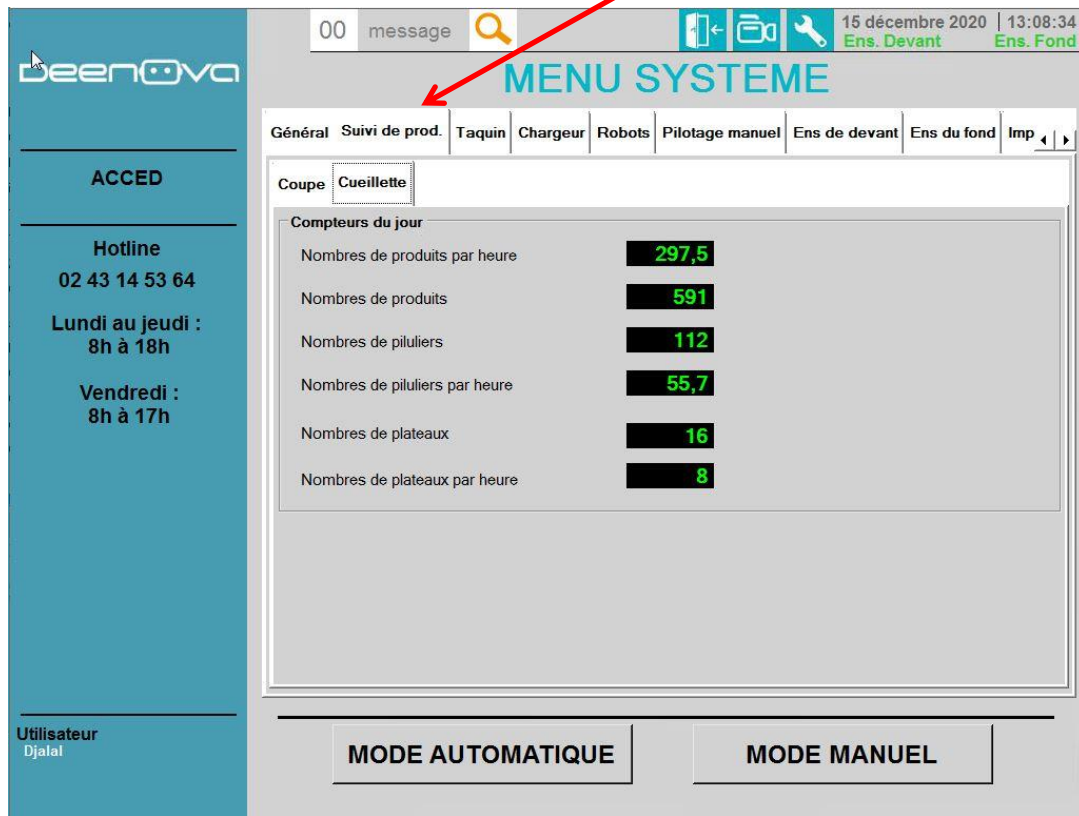


Permet d'obtenir des informations relatives à la cueillette

Permet d'obtenir des informations sur les défauts des ensacheuses

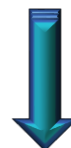

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Taquin

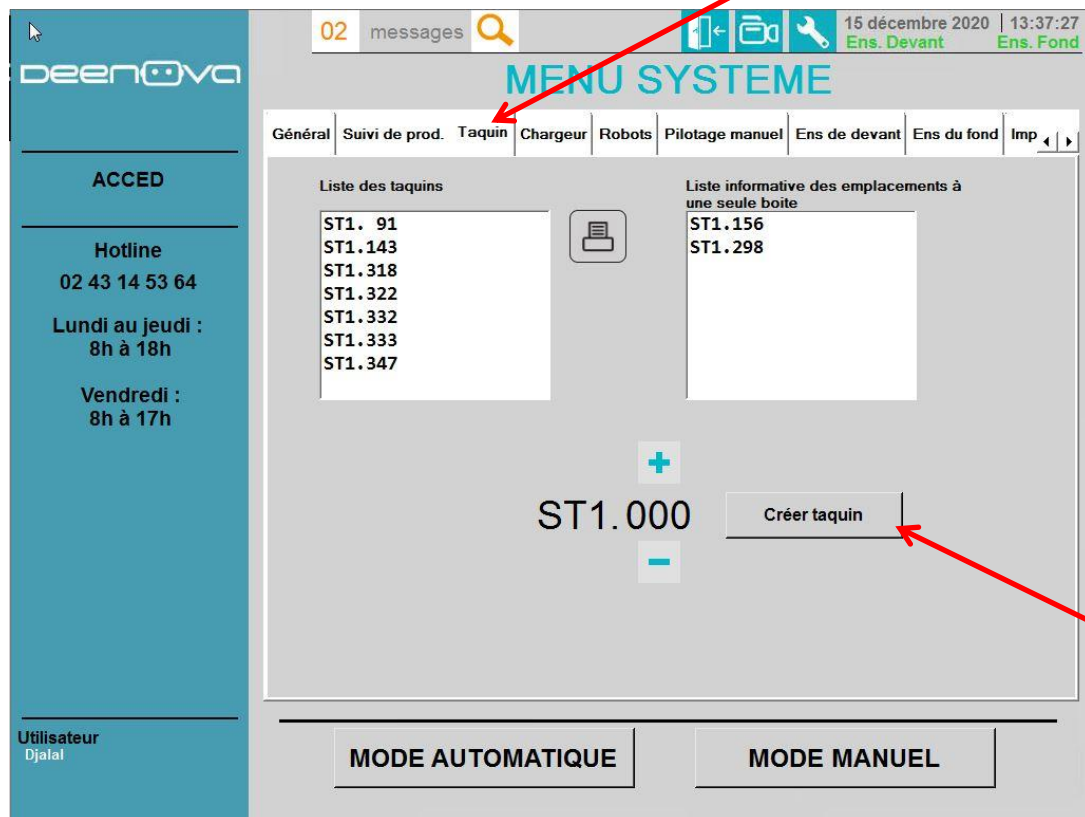


Voir la documentation
([04.P - comprendre et gérer les taquins](#))

Permet de consulter la liste des taquins, des emplacements à une seule boîte.

Permet de créer un nouveau taquin en saisissant l'adresse d'un emplacement.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Chargeur

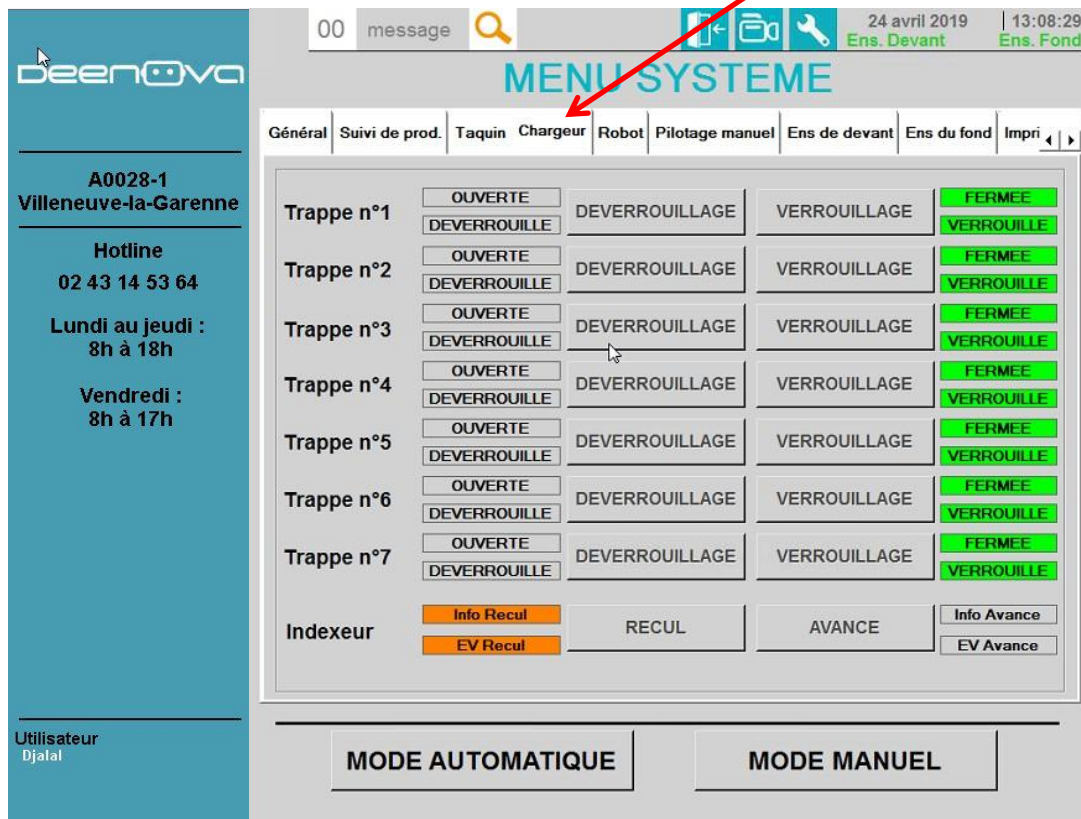


Permet d'ouvrir et fermer les trappes.

⚠ Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Robot

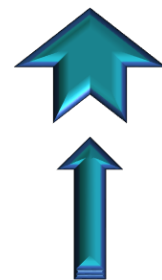

deenoVA

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

00 message

25 novembre 2020 | 09:37:16
Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Taquin Chargeur Robots Pilotage manuel Carnet Ens de devant Ens du fond Imprimante Automat

Robot coupe

Pince	Info Ouverte	OUVERTURE	FERMETURE	Info Fermée
Capteur pince	EV Ouverte			EV Fermée
Aspiration blister	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Arrêt

Robot cueillette

Aspiration sachet	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Verin sachet poudre	Info Recul	RECULER	AVANCER	Info Avance
	EV recul			EV Avance
Aspiration sachet poudre	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche

Lecteur DataMatrix


Robot

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Permet de contrôler l'état des outils du robot et de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration blister, l'aspiration sachet, l'ouverture et la fermeture de la pince, l'avance ou le recul du vérin sachet poudre.




Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

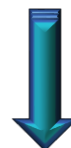


Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Pilotage Manuel

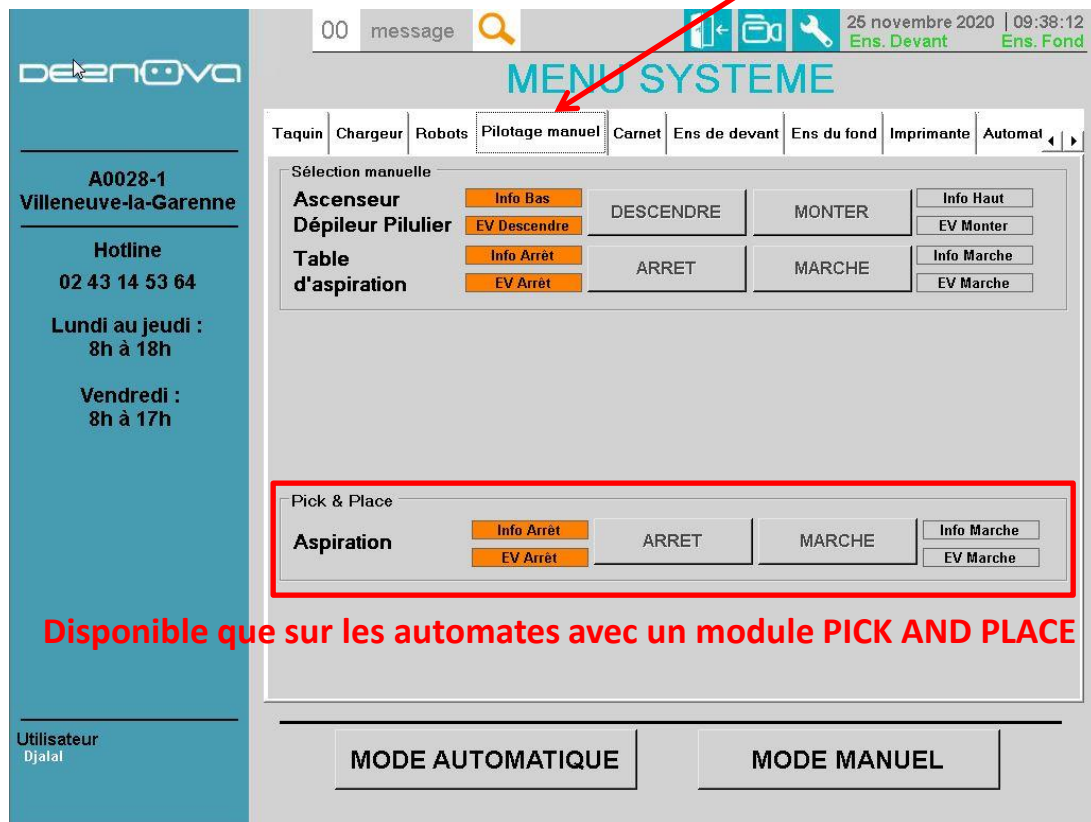

Permet de contrôler l'état de l'ascenseur et de la table d'aspiration. De forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration de la table ainsi que la montée ou la descente de l'ascenseur.

⚠ Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

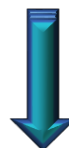

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Ensacheuse de devant

00 message

24 avril 2019 13:09:08

Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général Suivi de prod. Taquin Chargeur Robot Pilotage manuel **Ens de devant** Ens du fond Impri

Sélection manuelle

Aspiration plaque	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Aspiration ventouse	Info Arrêt	RECULER	AVANCER	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Cuillère	Info Fermée	FERMER	OUVRIR	Info Ouverte
	EV Fermée			EV Ouverte
Scellage sachet	Info Recul	RECULER	OUVRIR	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Contre partie	Info Recul	ARRET	MARCHE	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Soufflage	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Chauffe	Info Pas OK	ARRET	MARCHE	Info OK
	Arrêt			Marche

Cycle test

Test ensacheuse Pas à pas

☐ Cycle test en continu

Longueur sachet

87 Valider Annuler

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Permet de contrôler l'état de l'ensacheuse ainsi que de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration plaque, l'aspiration ventouse, le soufflage, la chauffe, le recule ou l'avance de la contrepartie et du vérin de scellage, l'ouverture ou la fermeture de la cuillère.

⚠ Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Ensacheuse de devant

00 message 24 avril 2019 13:09:08
Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général Suivi de prod. Taquin Chargeur Robot Pilotage manuel **Ens de devant** Ens du fond Impri

Sélection manuelle

Aspiration plaque	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Aspiration ventouse	Info Arrêt	RECULER	AVANCER	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Cuillère	Info Fermée	FERMER	OUVRIR	Info Ouverte
	EV Fermée			EV Ouverte
Scellage sachet	Info Recul	RECULER	OUVRIR	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Contre partie	Info Recul	ARRET	MARCHE	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Soufflage	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Chauffe	Info Pas OK	ARRET	MARCHE	Info OK
	Arrêt			Marche

Cycle test

Test ensacheuse Pas à pas

☐ Cycle test en continu

Longueur sachet

87 Valider Annuler

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Permet de faire un sachet test

Permet de modifier la longueur du sachet en fonction de sa longueur réelle.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Ensacheuse du fond

00 message 24 avril 2019 13:09:27 Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général Suivi de prod. Taquin Chargeur Robot Pilotage manuel Ens de devant **Ens du fond** Impri

Sélection manuelle

Aspiration plaque	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Aspiration ventouse	Info Arrêt	RECULER	AVANCER	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Cuillère	Info Fermée	FERMER	OUVRIR	Info Ouverte
	EV Fermée			EV Ouverte
Scellage sachet	Info Recul	RECULER	OUVRIR	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Contre partie	Info Recul	ARRET	MARCHE	Info Avance
	EV Recul			EV Avance
Soufflage	Info Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche
	EV Arrêt			EV Marche
Chauffe	Info Pas OK	ARRET	MARCHE	Info OK
	Arrêt			Marche

Cycle test

Test ensacheuse Pas à pas

☐ Cycle test en continu

Longueur sachet

87 Valider Annuler

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Permet de contrôler l'état de l'ensacheuse ainsi que de forcer la marche ou l'arrêt de l'aspiration plaque, l'aspiration ventouse, le soufflage, la chauffe, le recul ou l'avance de la contrepartie et du vérin de scellage, l'ouverture ou la fermeture de la cuillère.

Ceci n'est possible qu'en mode manuel.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Ensacheuse du fond

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

00 message

24 avril 2019 | 13:09:27

Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général | Suivi de prod. | Taquin | Chargeur | Robot | Pilotage manuel | **Ens de devant** | **Ens du fond** | Impri

Sélection manuelle

Aspiration plaque	Info Arrêt EV Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche EV Marche
Aspiration ventouse	Info Arrêt EV Arrêt	RECULER	AVANCER	Info Marche EV Marche
Cuillère	Info Fermée EV Fermée	FERMER	OUVRIR	Info Ouverte EV Ouverte
Scellage sachet	Info Recul EV Recul	RECULER	OUVRIR	Info Avance EV Avance
Contre partie	Info Recul EV Recul	ARRET	MARCHE	Info Avance EV Avance
Soufflage	Info Arrêt EV Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche EV Marche
Chauffe	Info Pas OK Arrêt	ARRET	MARCHE	Info OK Marche

Cycle test

Test ensacheuse Pas à pas

☐ Cycle test en continu

Longueur sachet

87 Valider Annuler


MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Permet de faire un sachet test

Permet de modifier la longueur du sachet en fonction de sa longueur réelle.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Imprimante

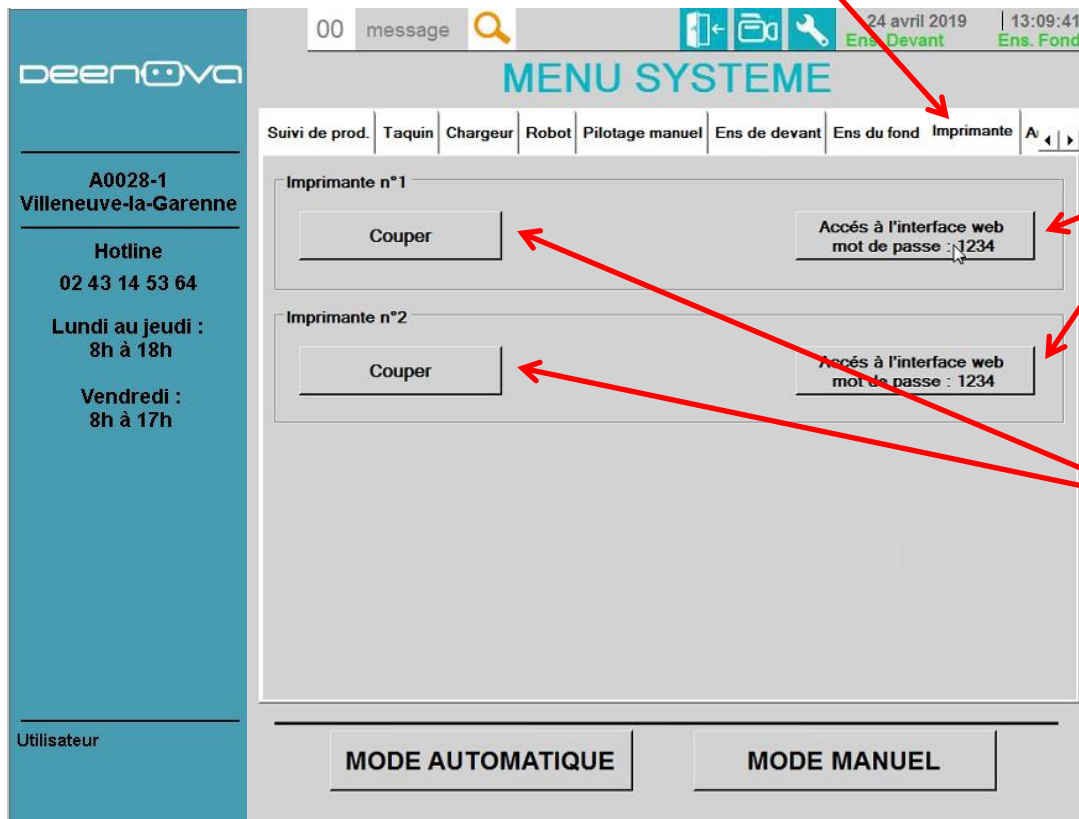


Réservé au personnel technique ECO-DEX.

Permet de couper un ticket, lors de la réimpression d'un pilulier ou de l'impression d'un ticket test.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Automatisation.

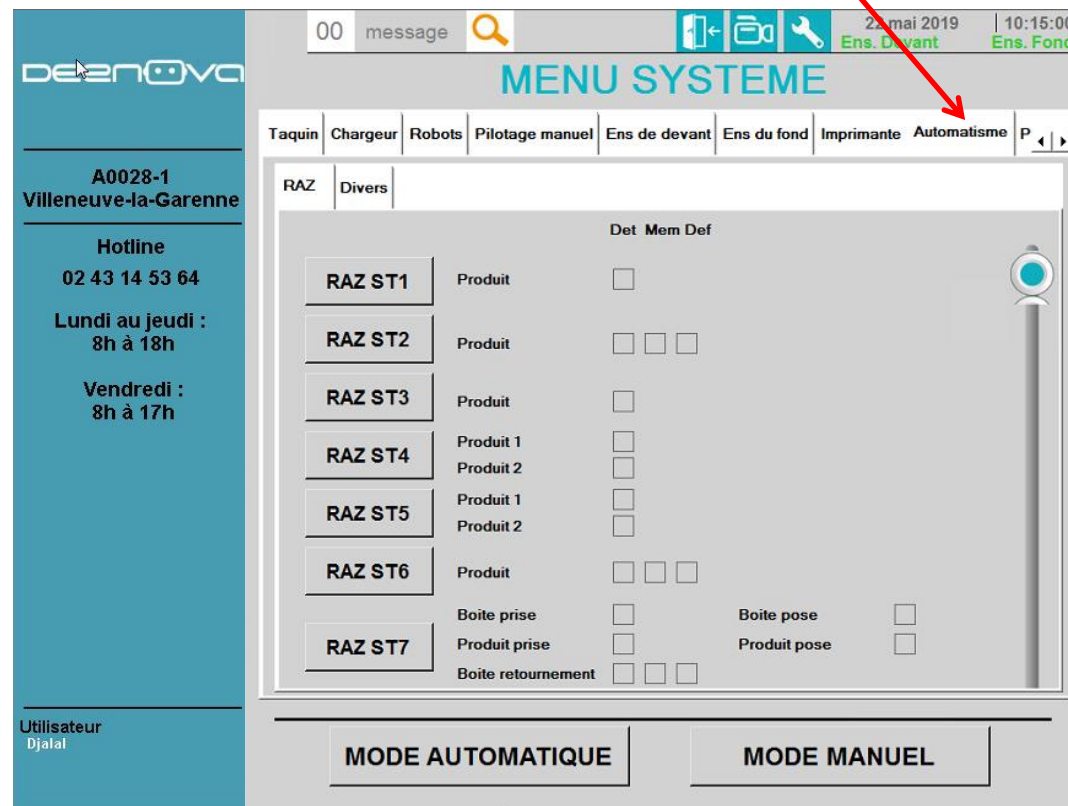

MENU SYSTEME

Taquin | Chargeur | Robots | Pilotage manuel | Ens de devant | Ens du fond | Imprimante | **Automatisme** | P

RAZ | Divers

		Det	Mem	Def
RAZ ST1	Produit	☐		
RAZ ST2	Produit	☐	☐	☐
RAZ ST3	Produit	☐		
RAZ ST4	Produit 1	☐		
	Produit 2	☐		
RAZ ST5	Produit 1	☐		
	Produit 2	☐		
RAZ ST6	Produit	☐	☐	☐
	Boite prise	☐		
RAZ ST7	Produit prise	☐		
	Boite retournement	☐	☐	☐
			Boite pose	☐
			Produit pose	☐

MODE AUTOMATIQUE | **MODE MANUEL**




Il est réservé au personnel technique ECO-DEX.



L'accès est contrôlé par une demande d'identification.

Descriptif de l'écran tactile

Le menu système : L'onglet Pointage

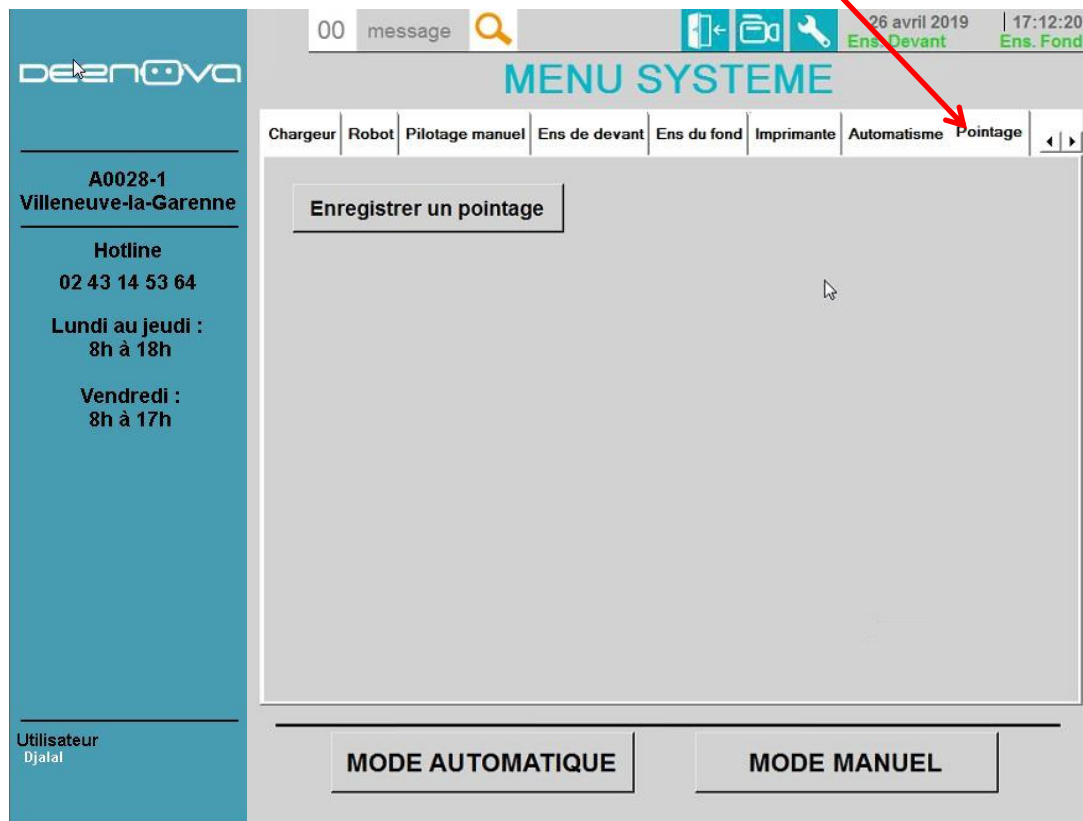


Il est réservé au personnel technique ECO-DEX.




L'accès est contrôlé par une demande d'identification.


Entretien

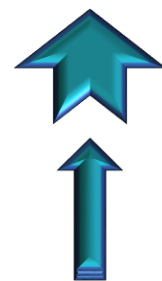

04.D - Entretien quotidien du module

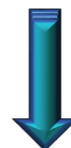

Entretien quotidien du module

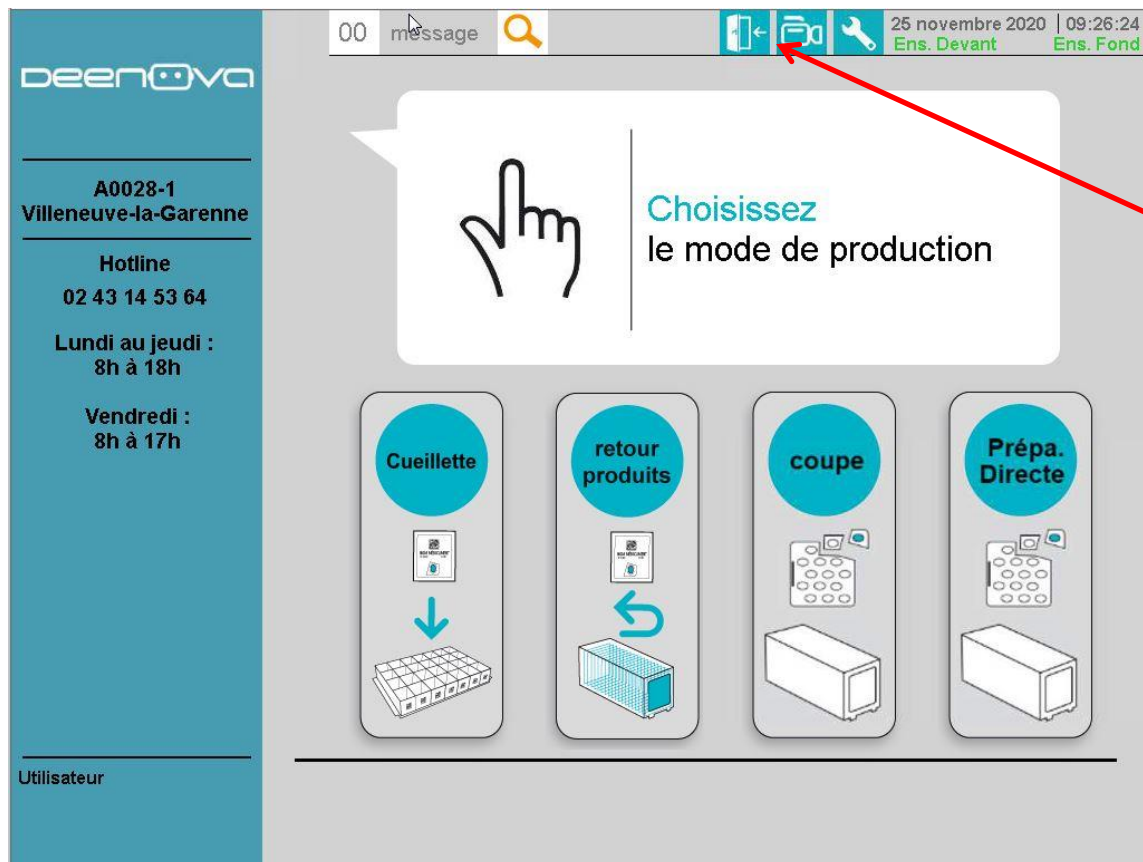

Afin d'entrer dans le module, faire une demande d'accès.

Entretien quotidien du module

Les ensacheuses





Sortir les ensacheuses.

Vérifier qu'il n'y ait pas de
dose unitaire dans les
entonnoirs.

Vérifier la ventouse de la plaque.


Nettoyer le bas de l'ensacheuse.

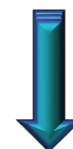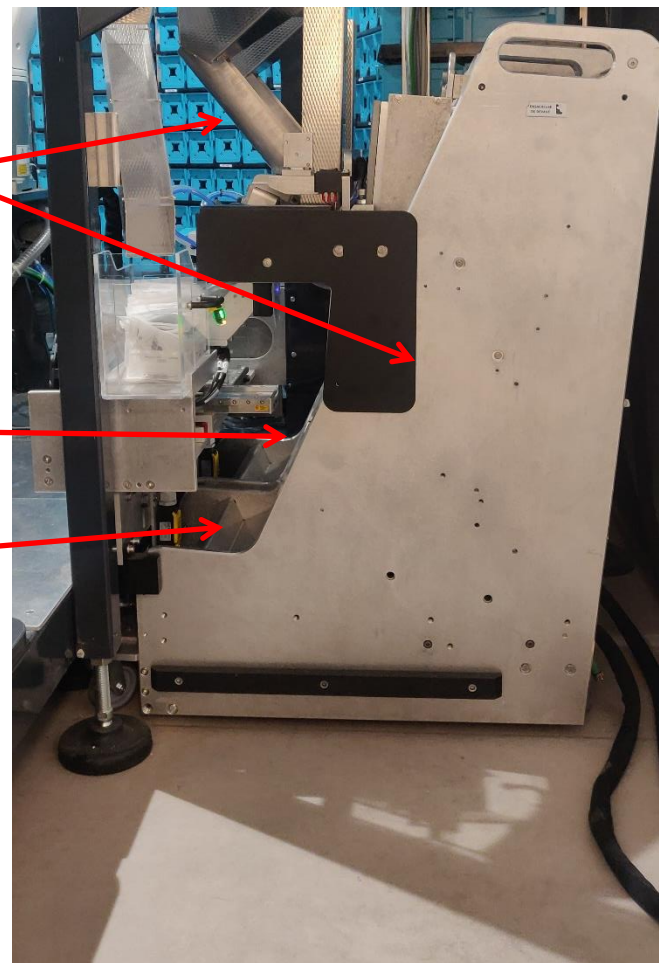


Entretien quotidien du module




Reculer l'imprimante à l'aide du loquet.

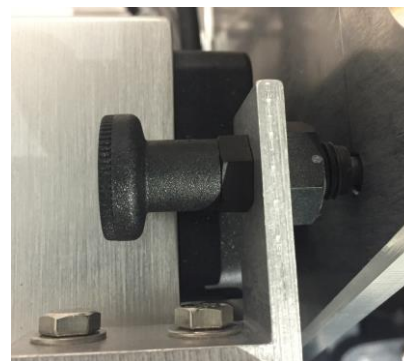


Enlever la cassette de l'imprimante grâce au bouton et vérifier que le ruban ne soit ni plié ni froissé.

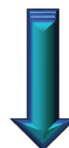

Faire de même sur les deux ensacheuses.

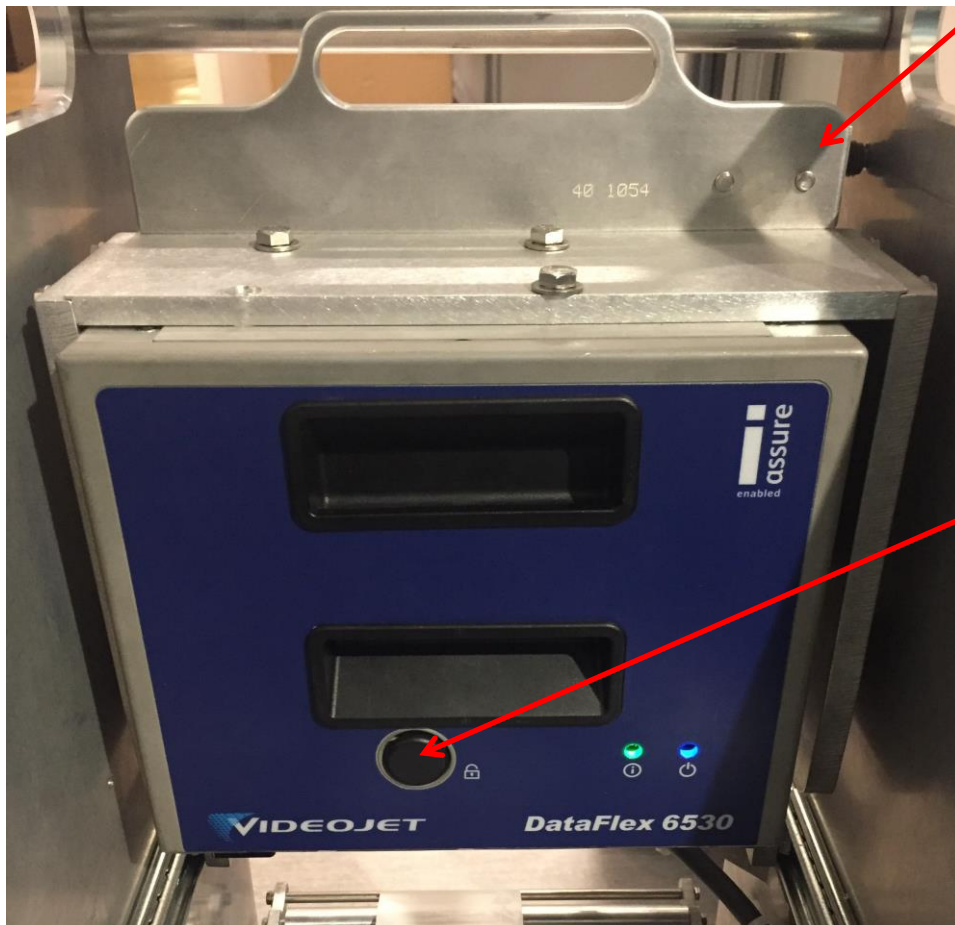



Entretien quotidien du module

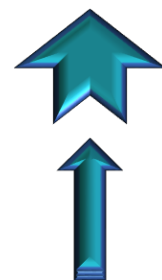

Vérifier que rien ne soit collé sur la résistance de scellage.




recommandation de nettoyage :
Utiliser un abaisse langue en bois.

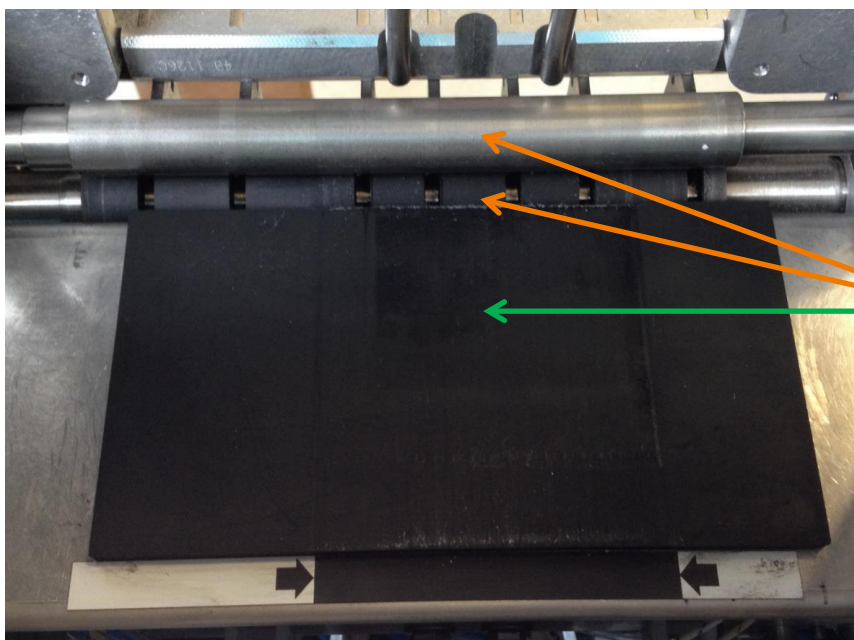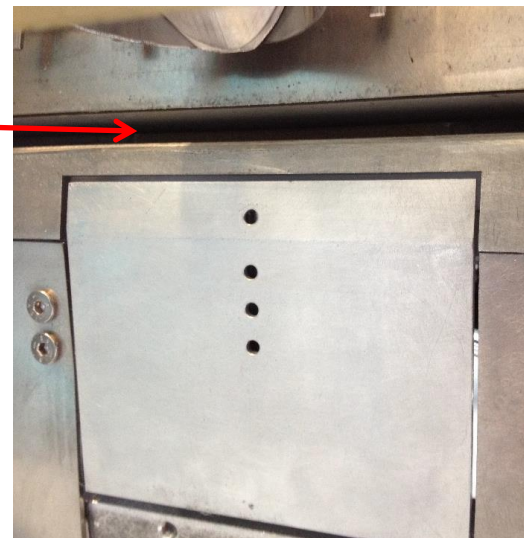

Nettoyer les rouleaux et la plaque de contre impression.

Recommandation de nettoyage:
utiliser de l'anti-adhésif ou de l'alcool non camphré.

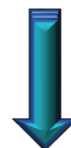


Entretien quotidien du module

La boîte chute


Vider la poubelle de chutes située devant les ensacheuses.

Cette boîte peut également être vérifiée au cours de la journée.

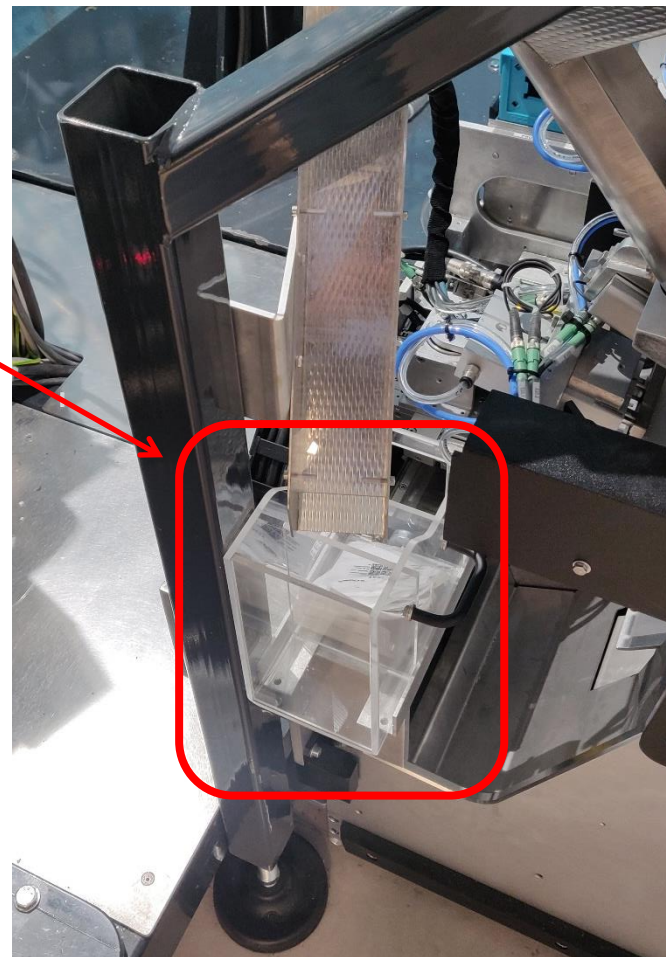


Entretien quotidien du module

La zone de coupe

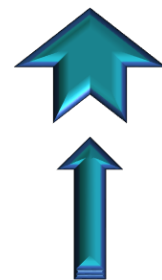


Mettre la cale de sécurité sous l'outil de coupe.

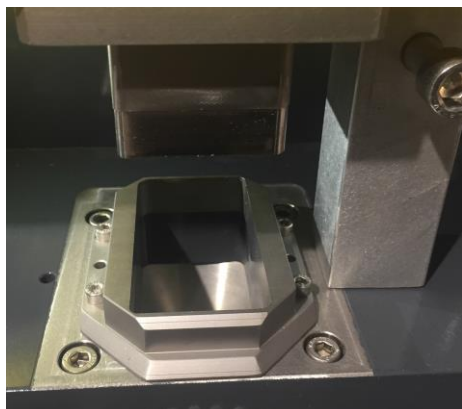

Nettoyer au chiffon non pelucheux la zone de coupe.





Ne pas oublier de retirer la cale de sécurité à la fin de l'intervention.

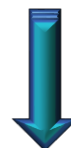


Entretien quotidien du module

Le robot de cueillette

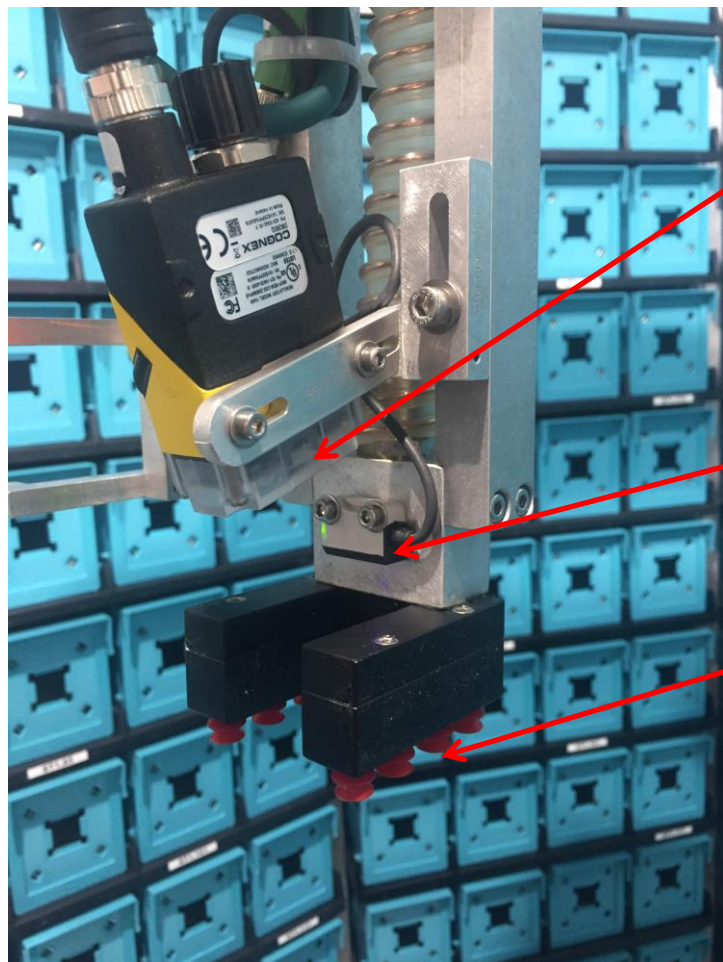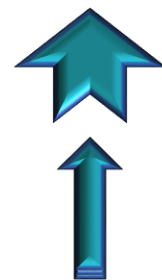

Nettoyer la vitre du lecteur optique.


Nettoyer à l'aide
d'une compresse
les capteurs,
présence sachet
et présence boîte.

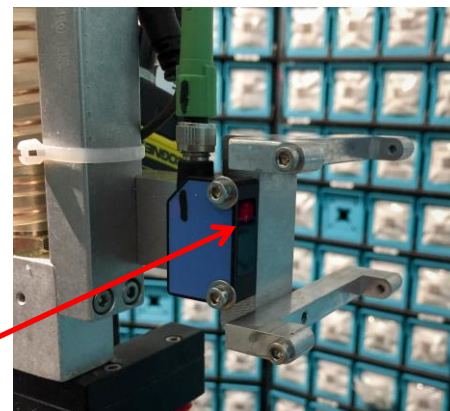

Contrôler l'état des ventouses.





**Attention de ne pas
rayer le verre, ne
pas utiliser d'objet
abrasif.**

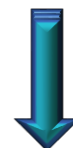



Entretien quotidien du module

La table d'aspiration.

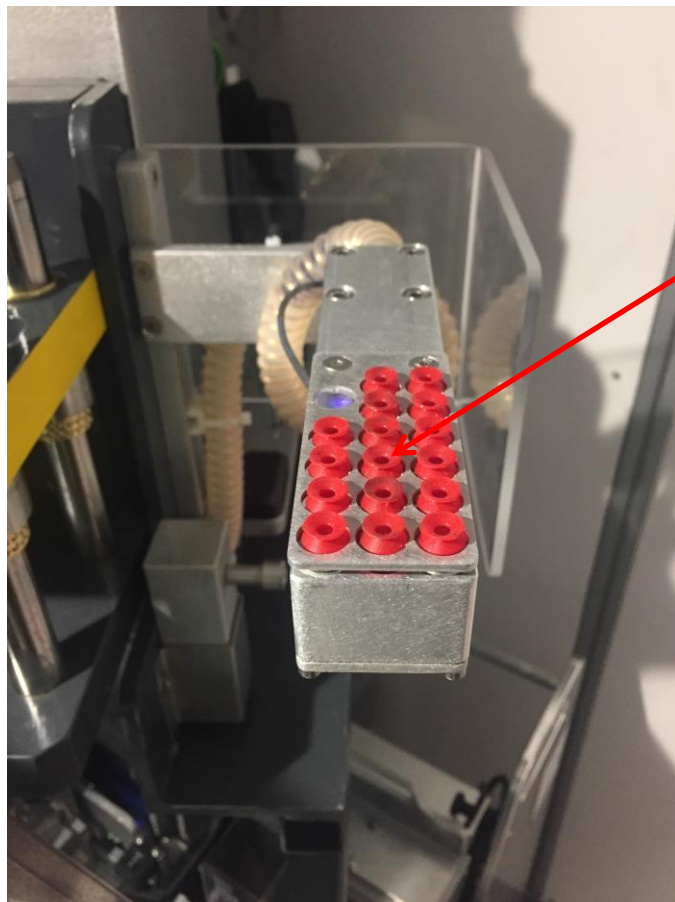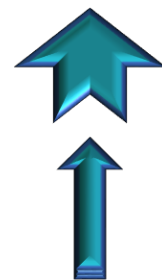

Contrôler l'état des ventouses de la table d'aspiration.

Nettoyer à l'aide d'une compresse le capteur présence blister.

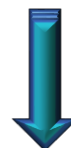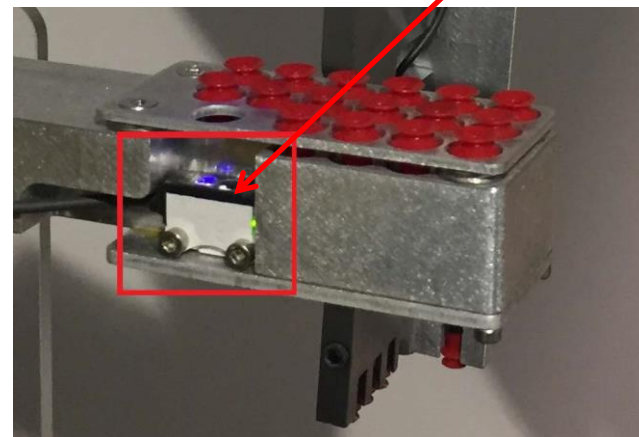

Entretien quotidien du module

Le robot de coupe





Contrôler l'état des ventouses.

Vérifier la présence et le bon fonctionnement de la pointe de touche RENISHAW.




Entretien quotidien du module

La zone de travail

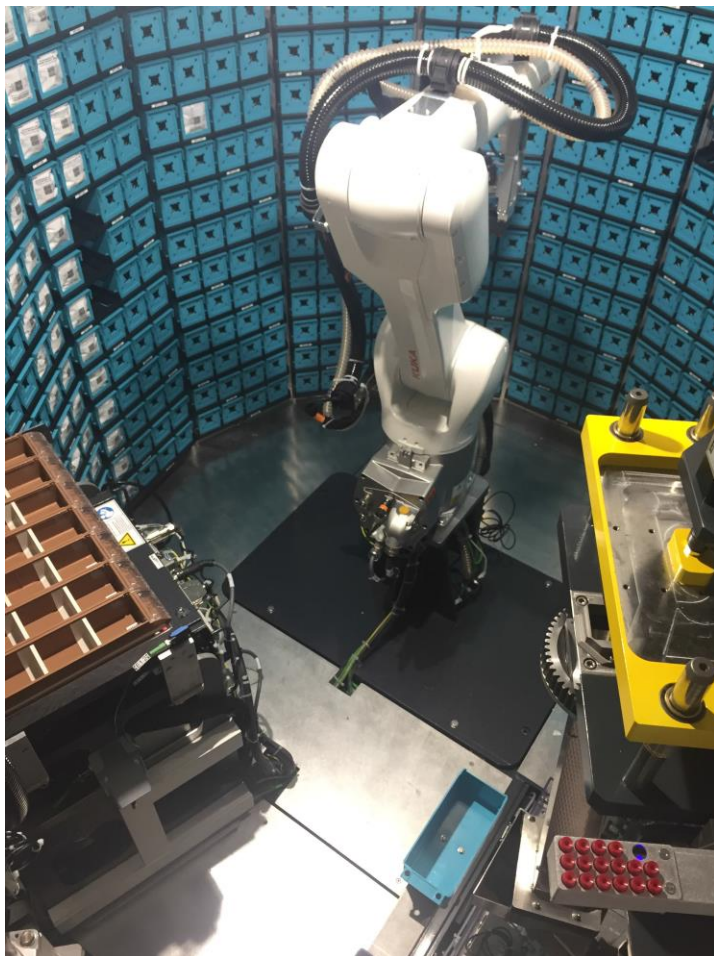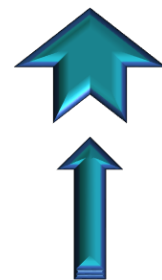


Vérifier qu'il n'y ait pas de sachet au sol.

Repositionner le facing des boites PASS.

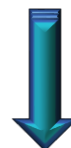

Entretien quotidien du module



Le facing boite

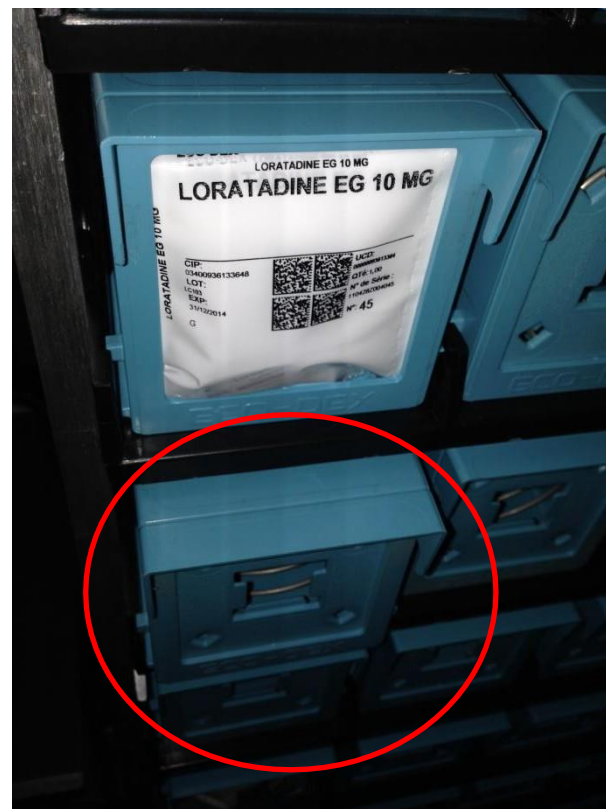

Vérifier les emplacements du stock.
Les boites PASS doivent être bien positionnées.

Entretien quotidien du module

Le facing boîte

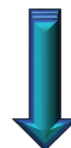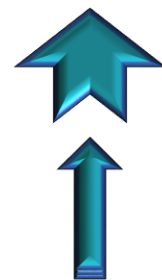

Les sachets doivent être bien rangés.

Entretien quotidien du module

Le facing boîte

Vérifier le bon placement sachet en facing de chaque boîte PASS




Mauvais placement sachet




Bon placement sachet


Entretien

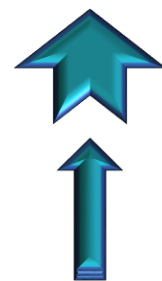

04.E - Préparation du module à la prise de poste

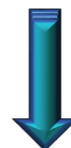

Préparation du module à la prise de poste

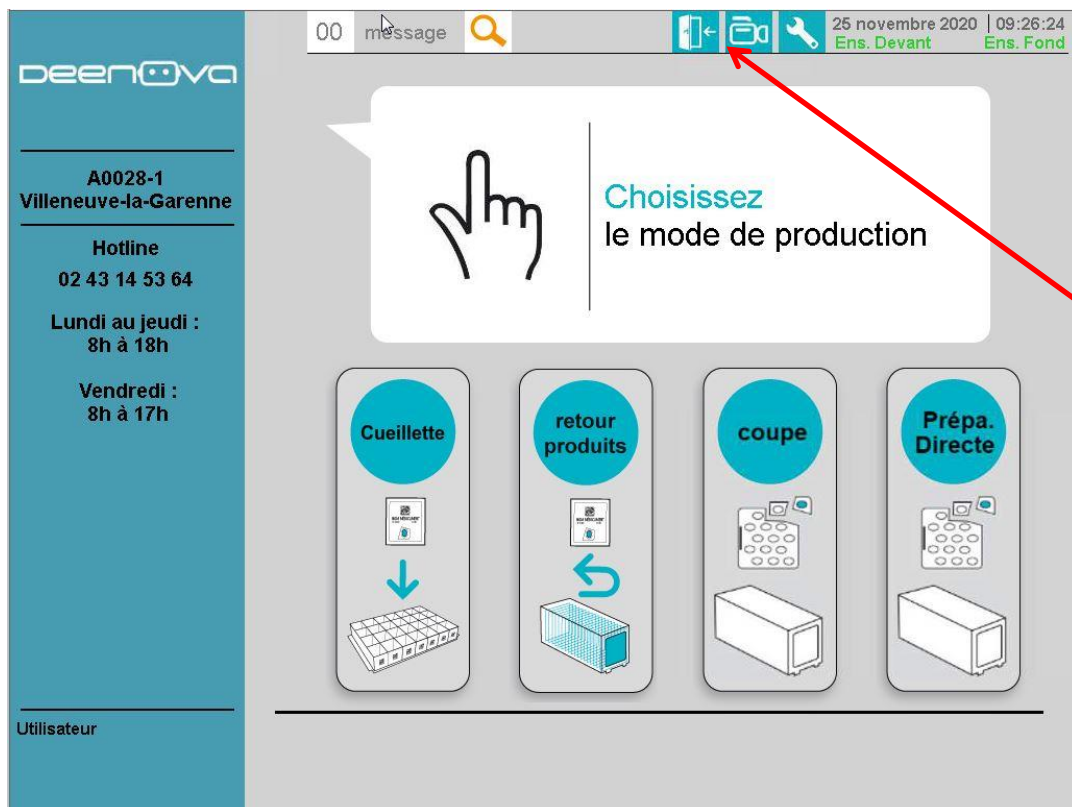

Vérifier qu'il n'y ait pas de message.

Faire une « demande d'accès machine ».


Préparation du module à la prise de poste

Les ensacheuses


Sortir les ensacheuses.

Vérifier qu'il n'y ait pas de dose unitaire dans les entonnoirs.


Nettoyer le bas de l'ensacheuse.

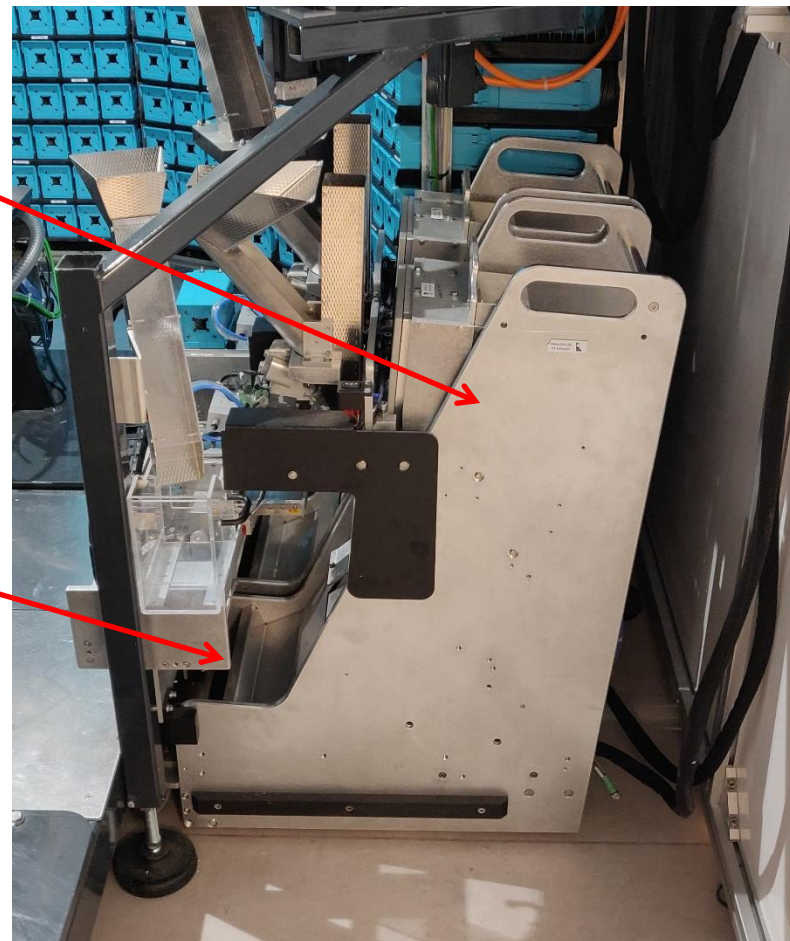


Préparation du module à la prise de poste

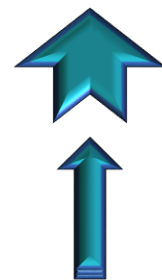


Reculer l'imprimante à l'aide du loquet.

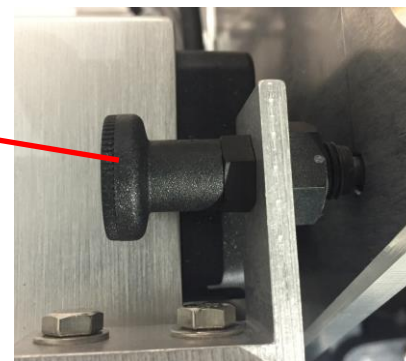


Enlever la cassette de l'imprimante grâce au bouton et vérifier que le ruban ne soit ni plié ni froissé.

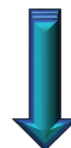

Faire de même sur les deux ensacheuses.

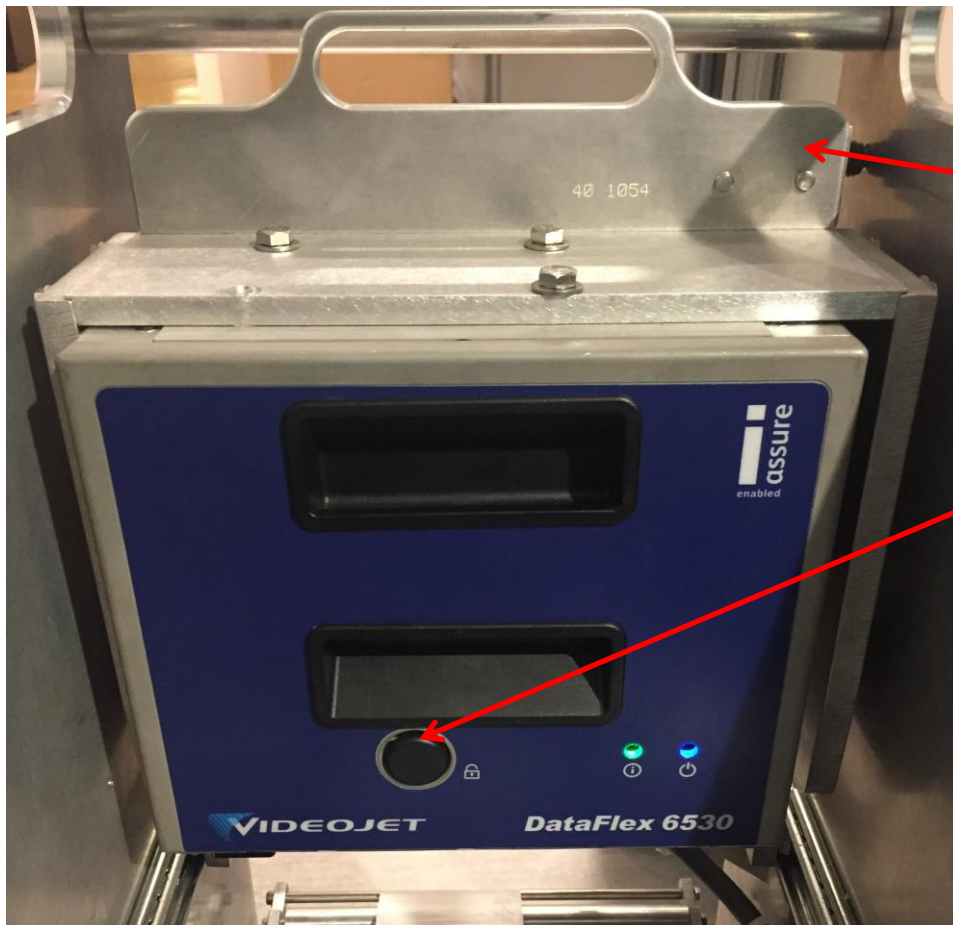

Préparation du module à la prise de poste

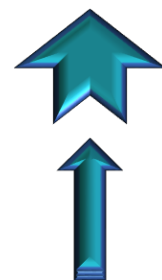



Sur l'interface, cliquer sur "Ens. Devant" pour ouvrir clarity et vérifier qu'il reste suffisamment de ruban thermique.





Puis fermer la fenêtre, renouveler l'opération pour l'ensacheuse du fond en cliquant sur "Ens. Fond".





Préparation du module à la prise de poste

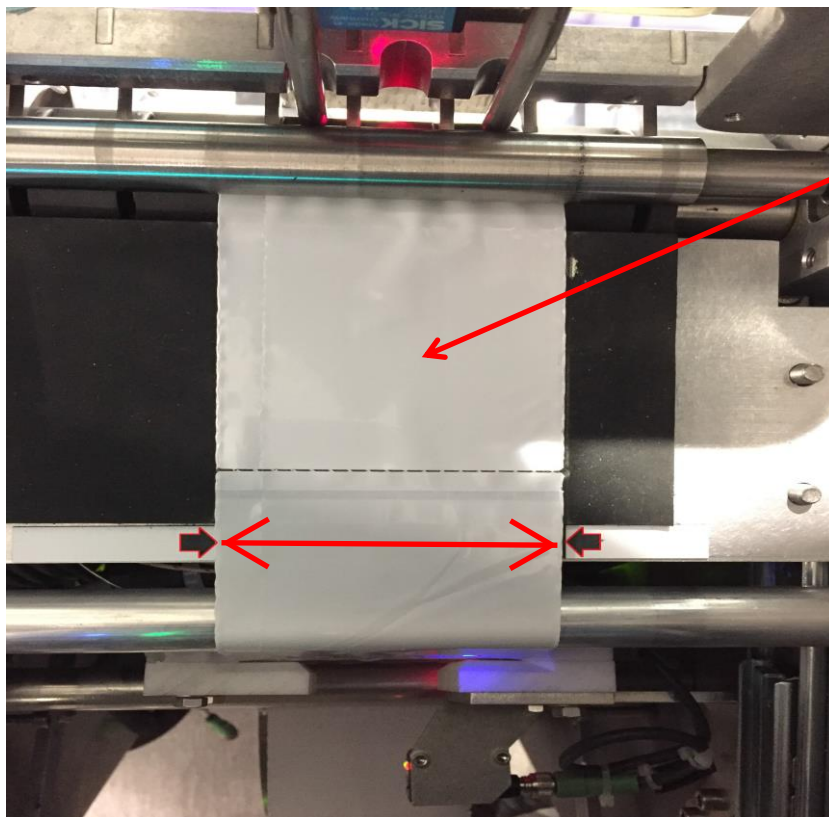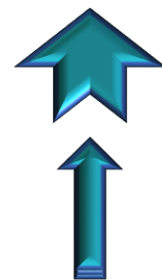

Vérifier le bon positionnement du sachet.

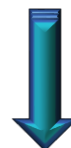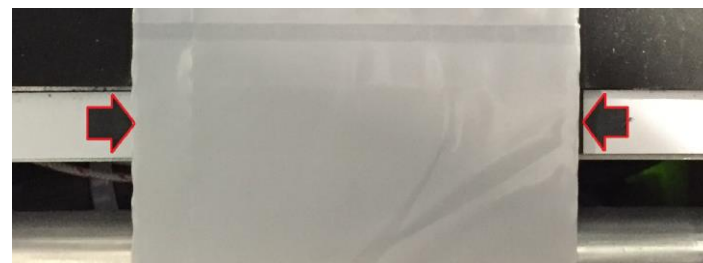


Préparation du module à la prise de poste

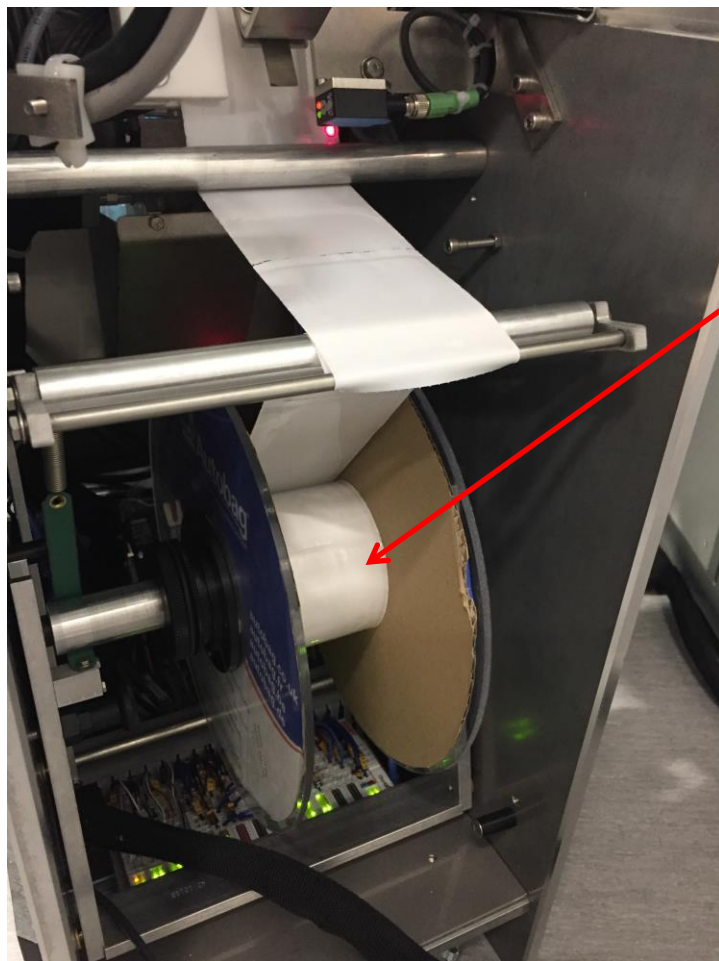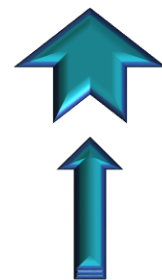

Vérifier qu'il reste suffisamment de sachet.

ici il ne reste quasiment plus de sachet sur la bobine.

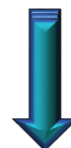

Préparation du module à la prise de poste


Le stock





Vérifier les taquins
(emplacements vides qui permettent
les interversions de boîtes PASS).

Voir la documentation ([04.P -
comprendre et gérer les taquins](#))


Fonctionnement

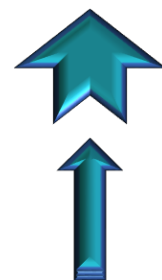

04.F - Lancement du cycle Mode Blister

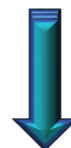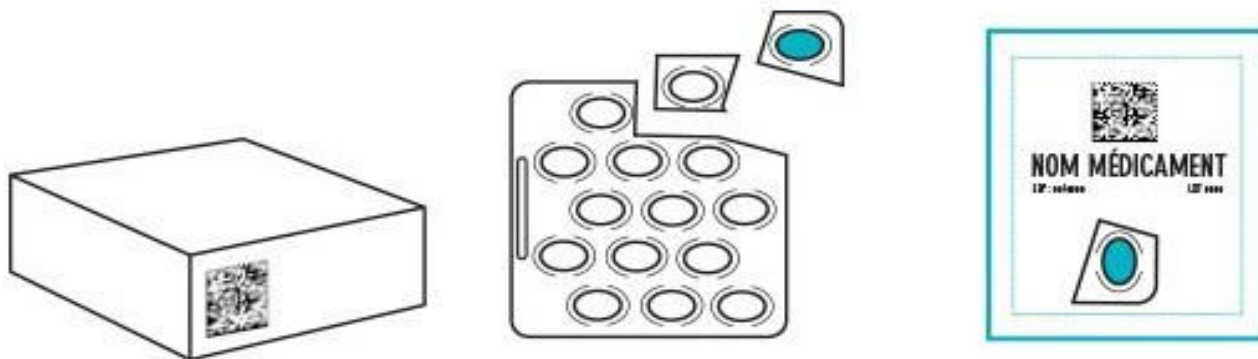


Lancement du cycle Mode Blister

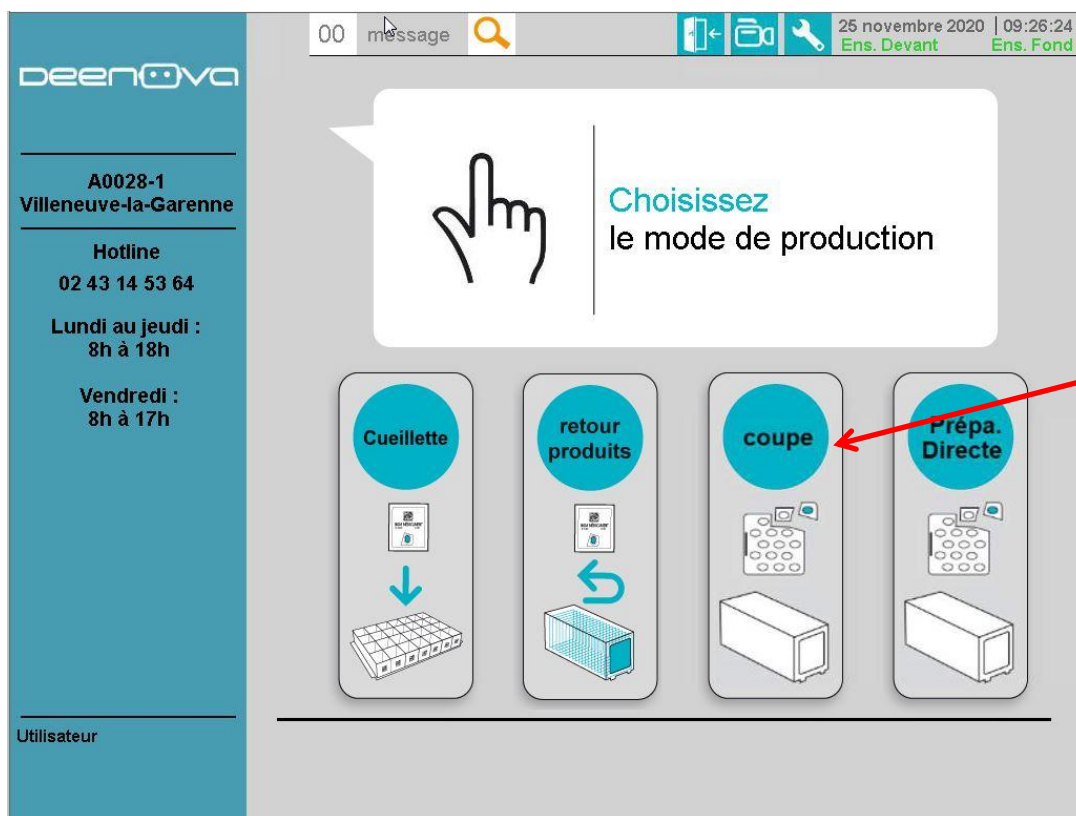


Appuyer sur «coupe».


Lancement du cycle Mode Blister

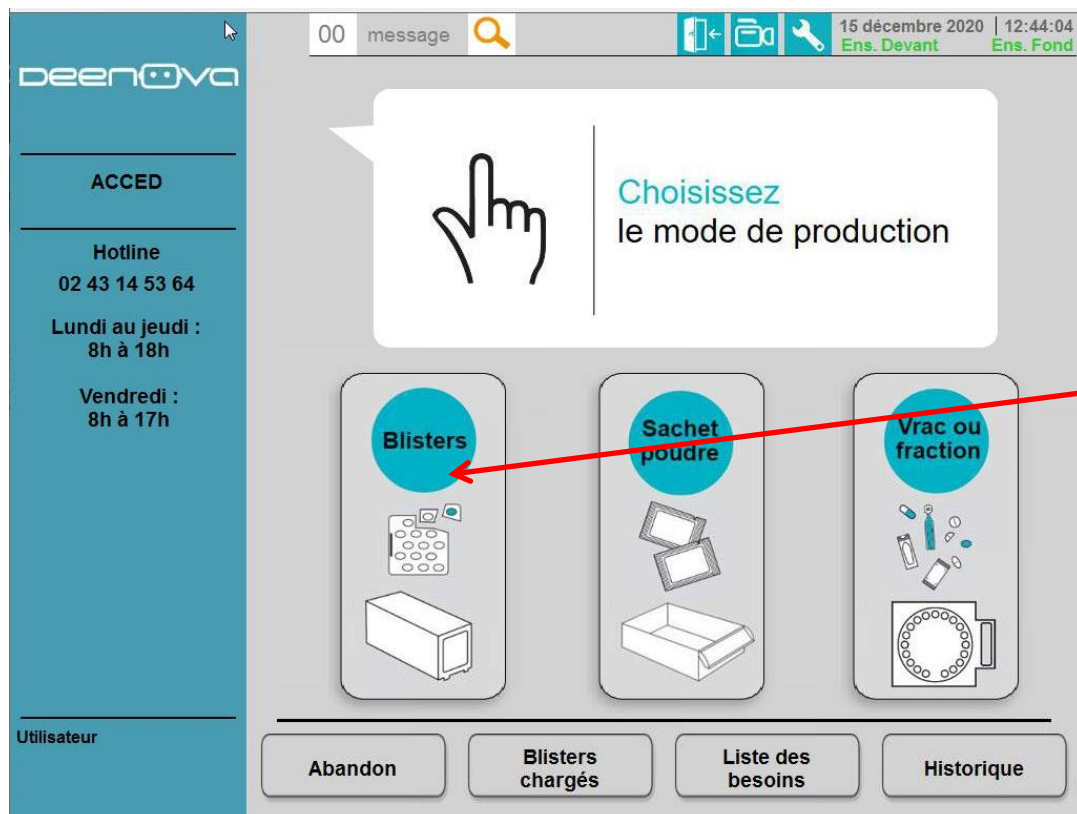

Appuyer sur «Blisters».

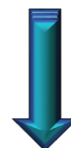

Lancement du cycle Mode Blister

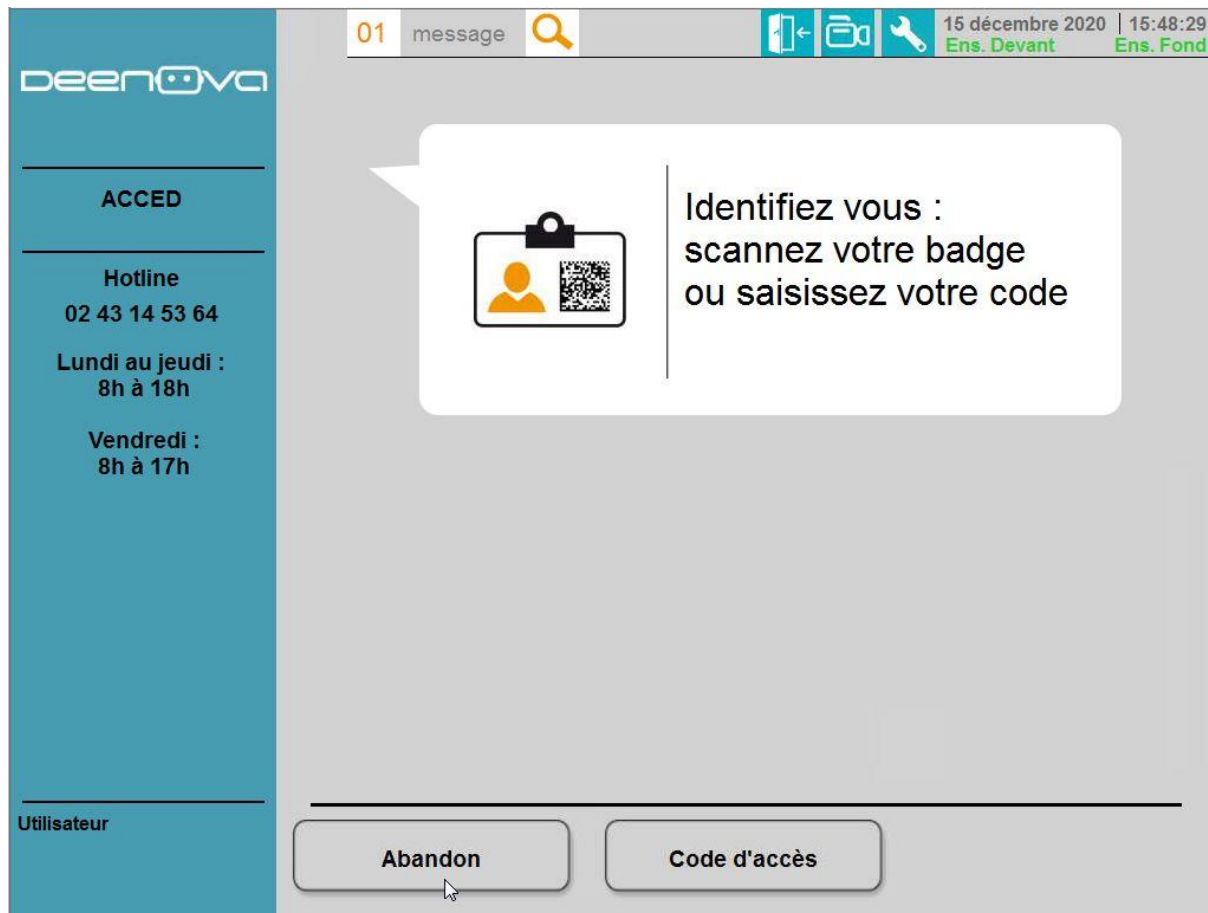

Scanner le badge en le passant devant le lecteur optique.



Lancement du cycle Mode Blister



OU Appuyer sur




Puis
Saisir le numéro de
badge

Valider sur



Lancement du cycle Mode Blister

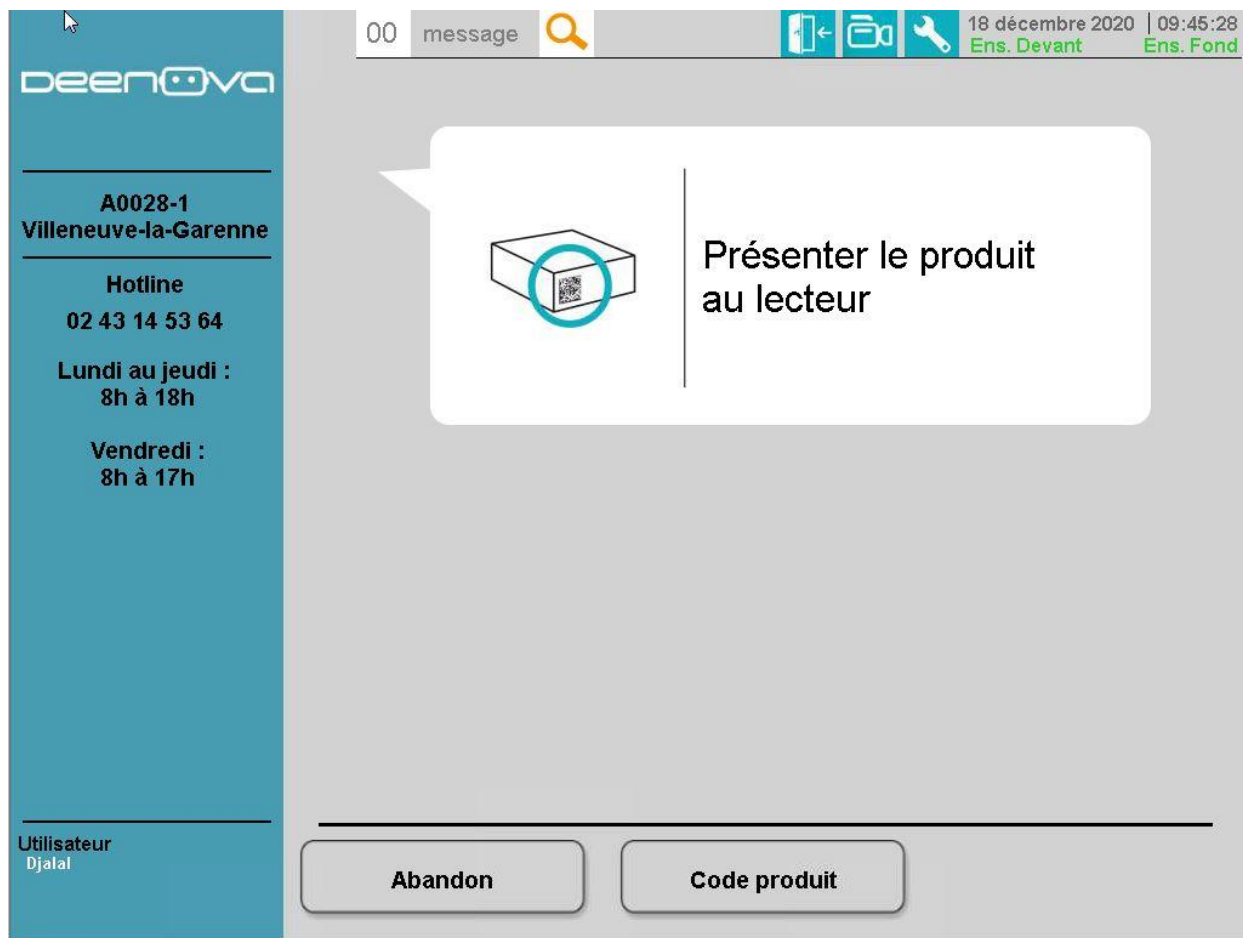

Passer le Datamatrix de l'étui devant le lecteur optique.



Lancement du cycle Mode Blister

The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-1 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and opening hours. The main area displays a status bar at the top with a message icon, a search icon, and system information (date, time, and status). A central dialog box titled 'Saisissez les données du produit' (Enter product data) is open, containing three input fields: 'CIP13 ou CIP7', 'DATE D'EXPIRATION', and 'NUMERO DE LOT'. Below these fields is an 'OK' button. At the bottom of the main interface, there are two buttons: 'Abandon' and 'Code produit'.

OU Appuyer sur




Puis
Saisir le numéro de
CIP, date de
péremption et n° de
lot

Valider sur



Lancement du cycle Mode Blister

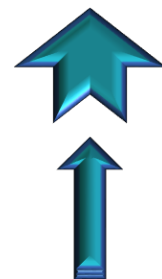

Vérifier que le produit soit bien conforme à celui présenté.

Si les dimensions de celui-ci sont présentes sur la photo de la plaquette, utiliser la **règle du haut** pour les vérifier.

Il est possible d'agrandir les **images** en appuyant dessus.

Pour valider appuyer sur



DEENOVA

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

00 message

18 décembre 2020 | 09:48:00
Ens. Devant Ens. Fond

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Identification produit

Confirmer le produit

Fiche produit ▶ EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

LEVOTHYROX 125 MCG CPR
CIP13: 3400930066010
3 blisters de 10 produits
60 produits par boîte PASS - Quantité à produire: 10

Abandon **Confirmer**

Lancement du cycle Mode Blister

02 messages

18 décembre 2020 | 09:50:42
Ens. Devant Ens. Fond

deenoova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

Trappe n° 1 ouverte
Déposer les blisters
enregistrés
Nombre de blisters:3
Fermer la trappe

Fiche produit EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

Nombre de plaquettes chargées :	3
Nombre de comprimés correspondant :	30
Nombre total de comprimés à charger :	10

Ajouter un produit Modifier le nombre de blisters chargés Abandon

Une fois confirmé,
déposez le(s)
blister(s) en suivant le
sens d'introduction
dans la trappe
ouverte.

ici : trappe n°1



Lancement du cycle Mode Blister



Agrandir la photo en cliquant dessus.

Mettre le blister face à vous à côté de la photo afin de bien respecter le sens d'introduction.

Lancement du cycle Mode Blister

02 messages

18 décembre 2020 | 09:54:24
Ens. Devant Ens. Fond

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

Trappe n° 1 ouverte
Déposer les blisters enregistrés
Nombre de blisters:3
Fermer la trappe

Fiche produit ▶ EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

Nombre de plaquettes chargées :	3
Nombre de comprimés correspondant :	30
Nombre total de comprimés à charger :	10

Ajouter un produit **Modifier le nombre de blisters chargés** **Abandon**

Pour ajouter un produit de la même référence et du même lot. Appuyer sur "Ajouter un produit".

Lancement du cycle Mode Blister

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

02 messages

18 décembre 2020 | 09:53:28
Ens. Devant Ens. Fond

Trappe n° 1 ouverte

Nombre de blisters
Maximum : 3

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 Supp
OK

08/2022 / LOT : G00CHE

Nom 3
Nom 30
Nom 10


Ajouter un produit

Modifier le nombre de blisters chargés


Abandon

Modifie le
nombre de
blister charger
par boite
scanné


Lancement du cycle Mode Blister

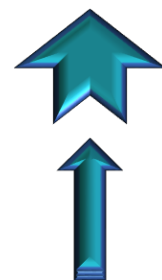

En cas de lot différent :

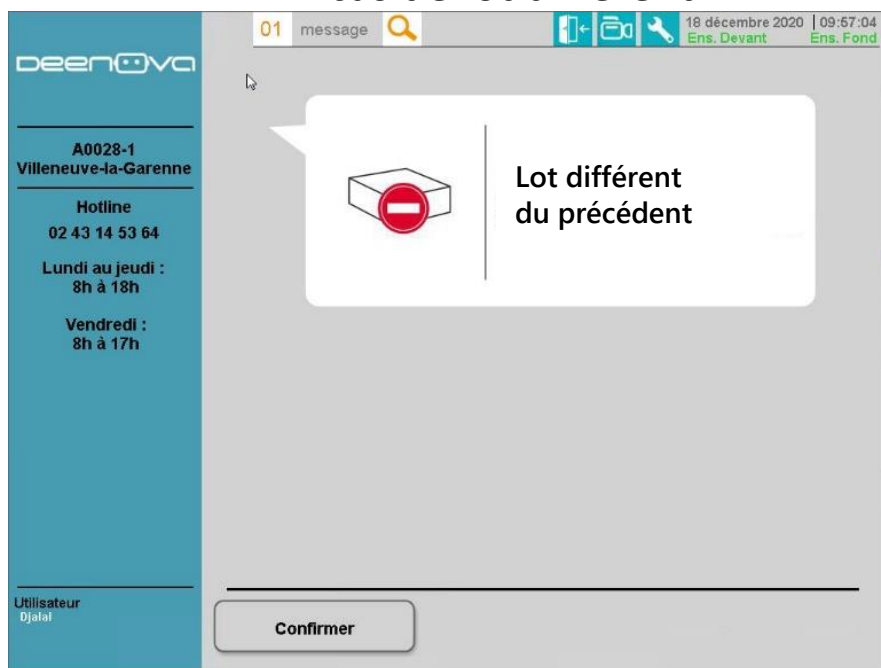


En cas de produit différent :

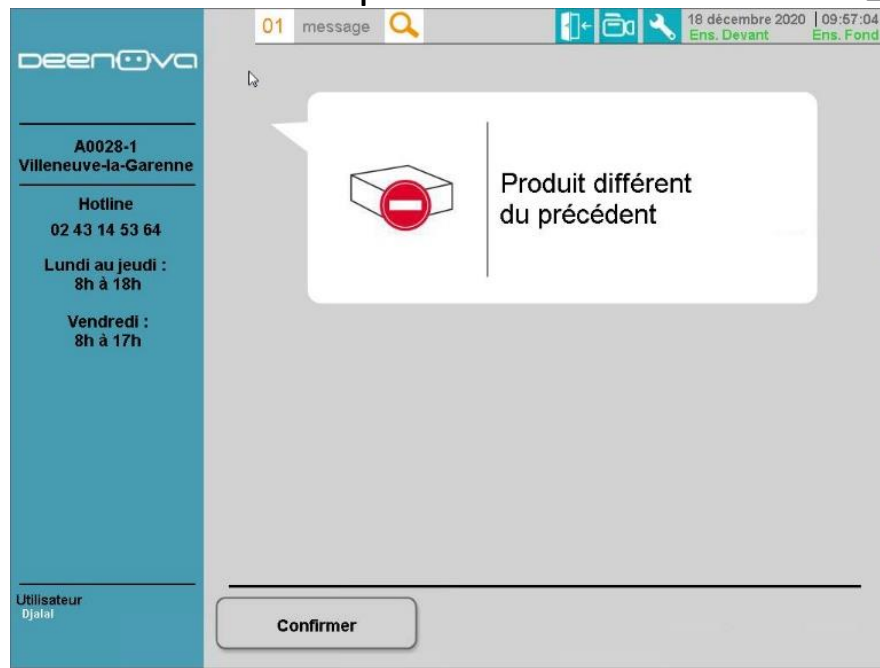


Appuyer sur "Confirmer" pour continuer.



Attention ne surtout pas mettre le(s) blister(s) dans le magasin.

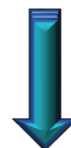

Lancement du cycle Mode Blister

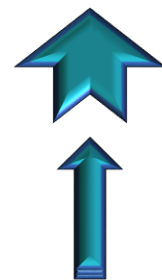


L'opérateur est garant de la bonne découpe des produits :

Le sens d'introduction doit bien être respecté sous peine de risque de fausse coupe.


Les produits doivent être identiques dans le magasin, même référence, même lot.



Le non respect de ces règles essentielles peut entraîner des problèmes à la dispensation des médicaments.

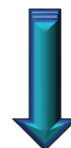


Lancement du cycle Mode Blister

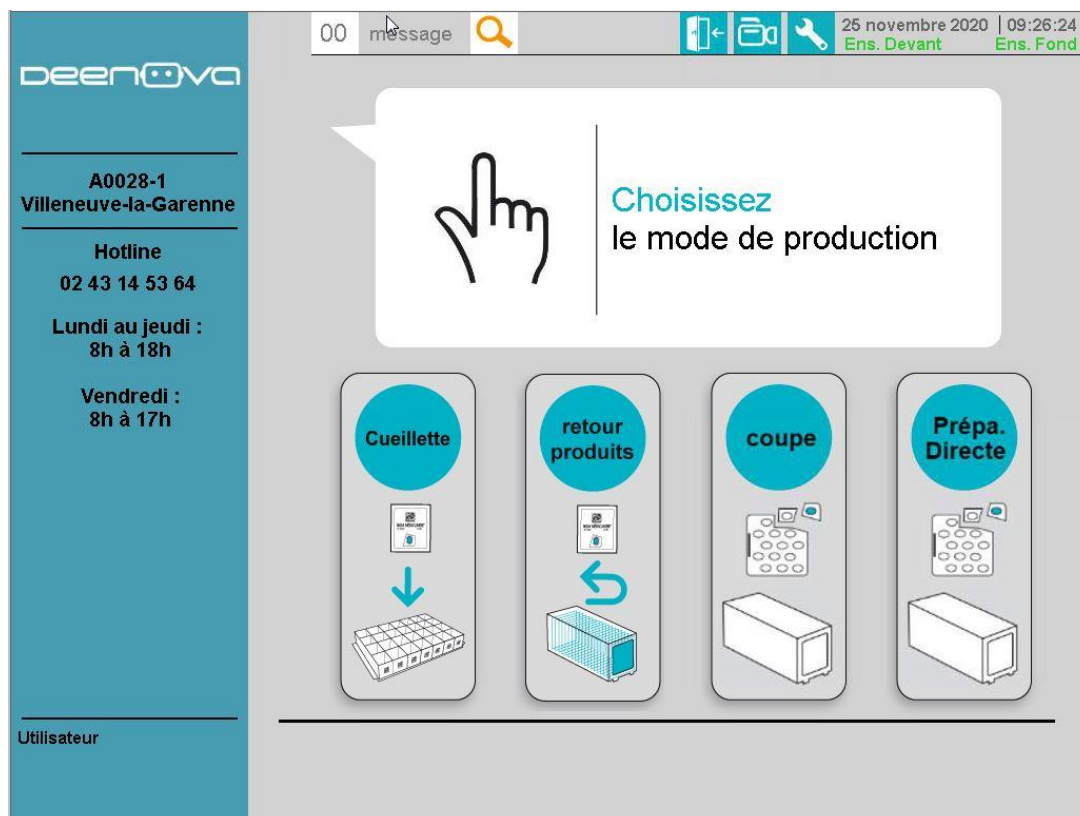


Le retour à cette page, indique la fin du chargement.

Fonctionnement

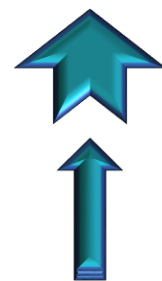

04.G - Lancement du cycle Mode Vrac

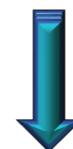

Lancement du cycle Mode Vrac



Le mode BARILLET permet l'ensachage de doses unitaires à partir de médicaments conditionnés en vrac.

Il permet également l'ensachage de fraction de comprimés : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{4}$.

Lancement du cycle Mode Vrac




Il existe différentes tailles de barillet S et L.


Ils sont à choisir en fonction de la taille des comprimés ou gélules à ensacher.

Le produit est disposé au centre du plateau puis réparti manuellement dans les trous.

Lancement du cycle Mode Vrac

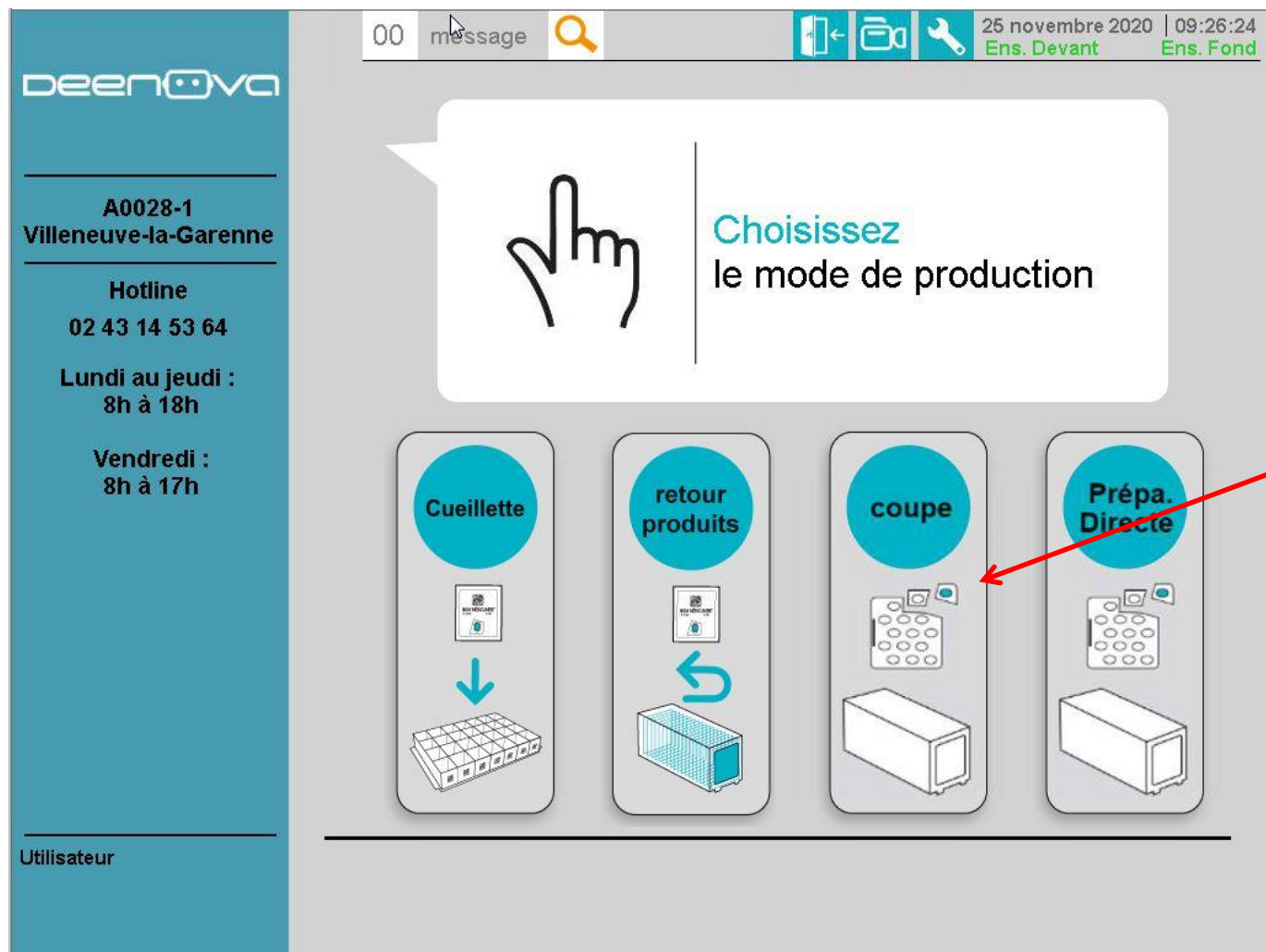

Lancement du cycle Mode Vrac

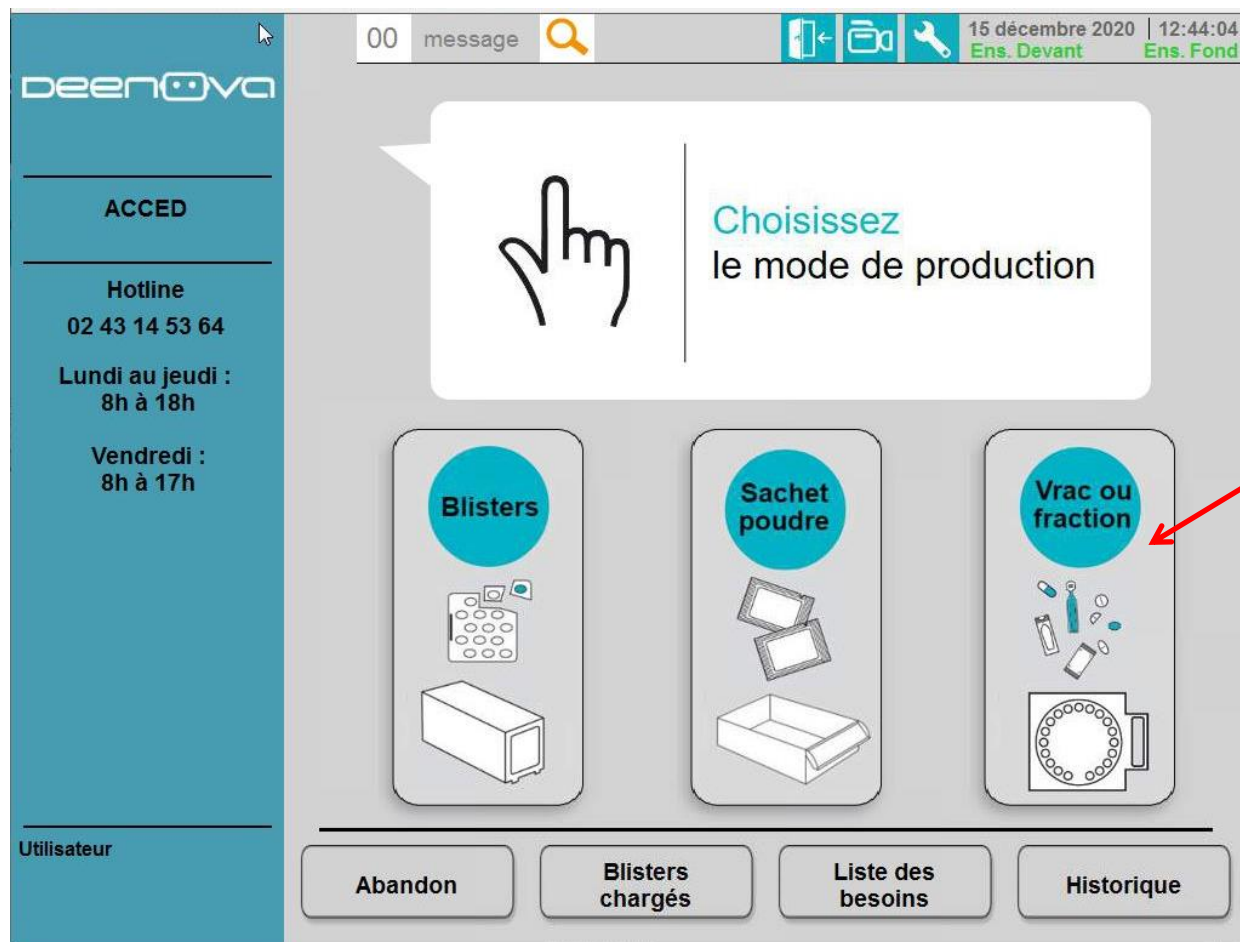


Appuyer sur «Vrac ou fraction».

Lancement du cycle Mode Vrac



Scanner le badge, en le passant devant le lecteur optique.

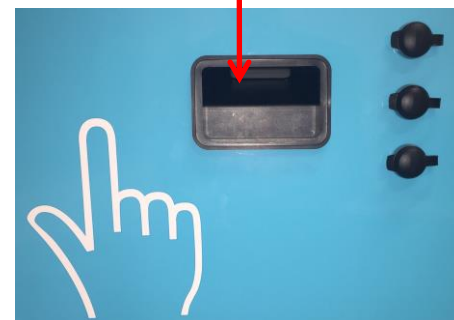

Lancement du cycle Mode Vrac

The screenshot shows the deenova ACCED interface. On the left is a blue sidebar with the deenova logo, the word 'ACCED', contact information (Hotline 02 43 14 53 64, hours: Lundi au jeudi 8h à 18h, Vendredi 8h à 17h), and a 'Utilisateur' field. The main area has a grey header with '01 message', a search icon, and system info (15 décembre 2020, 15:49:46, Ens. Devant, Ens. Fond). A modal window titled 'Saisie du badge' is centered, containing a text input field, a numeric keypad (0-9), a 'Supp' button, and an 'OK' button. A speech bubble next to the modal says 'Identifiez vous : Saisissez votre badge Saisissez votre code'. At the bottom of the main area are 'Abandon' and 'Code d'accès' buttons.

OU Appuyer sur


A button with a key icon and the text 'Code d'accès'.

Puis
Saisir le numéro de
badge

Valider sur

A button with the text 'OK'.


Lancement du cycle Mode Vrac

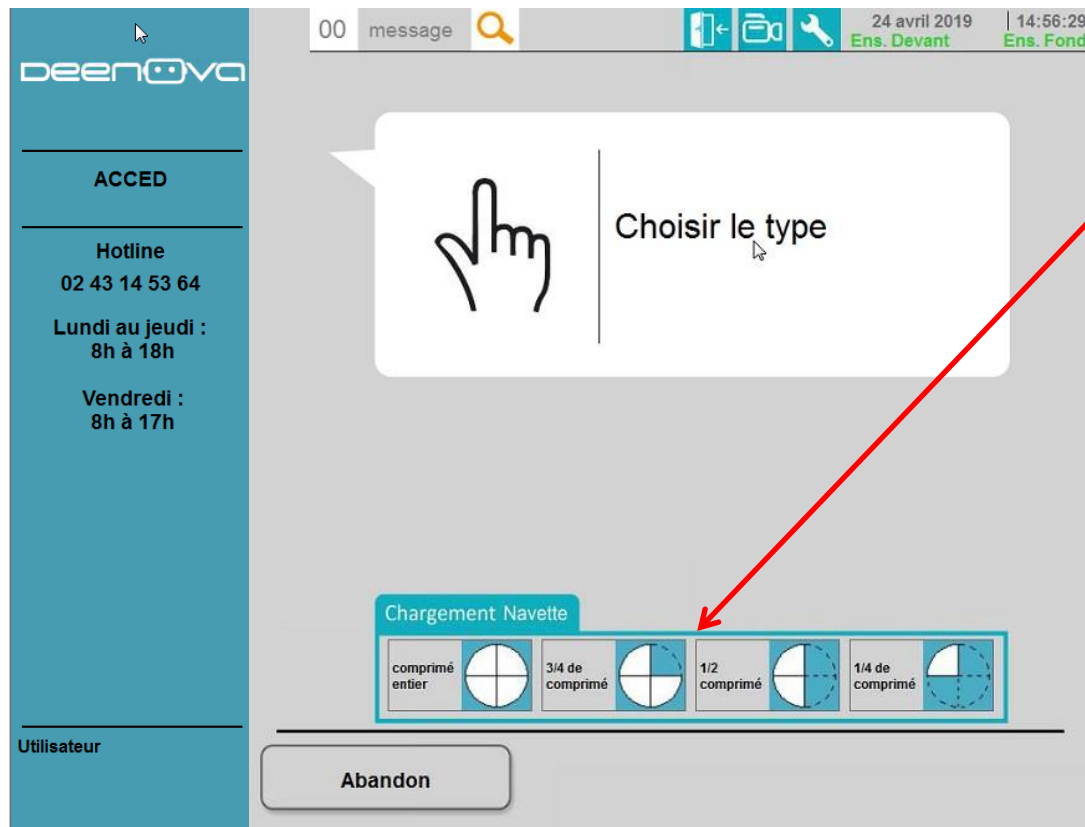


Choisir la fraction à conditionner.





Lancement du cycle Mode Vrac

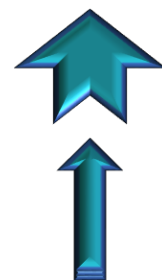


Présenter le **Datamatrix**
du barillet devant le
lecteur optique.

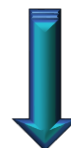


Lancement du cycle Mode Vrac

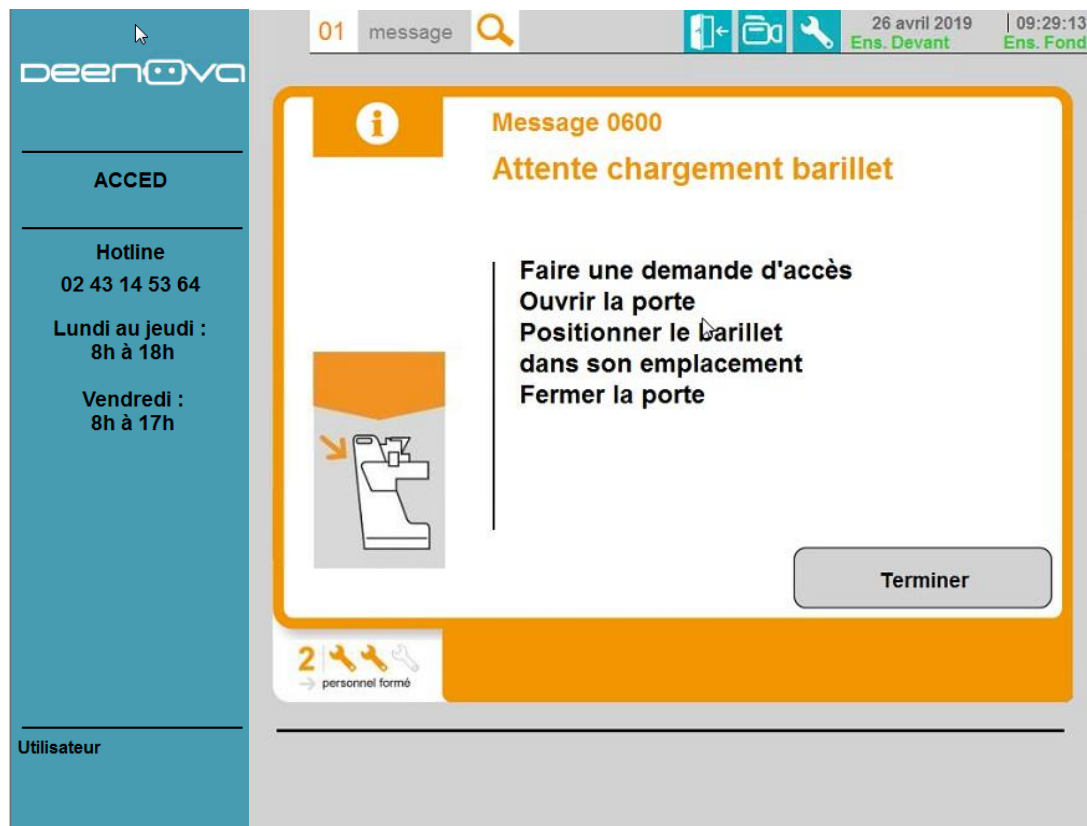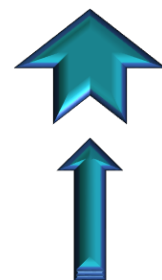


Faire une demande d'accès et ouvrir la porte.

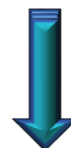



Lancement du cycle Mode Vrac

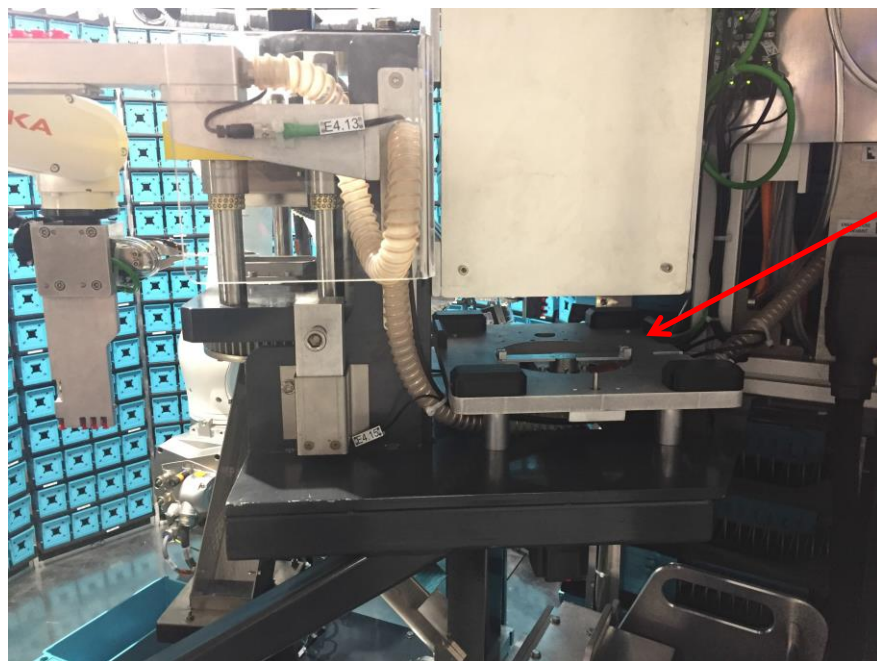

Introduire la navette dans son logement.

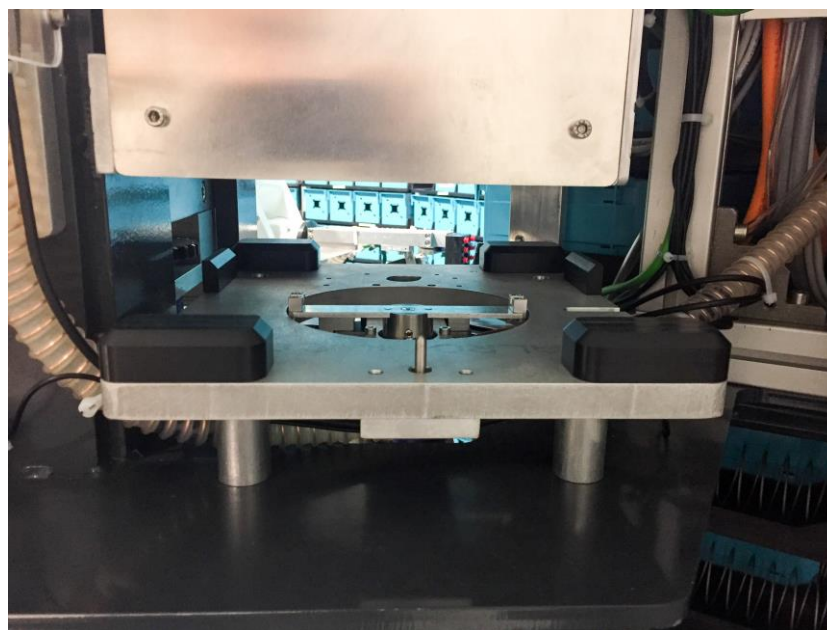


Lancement du cycle Mode Vrac

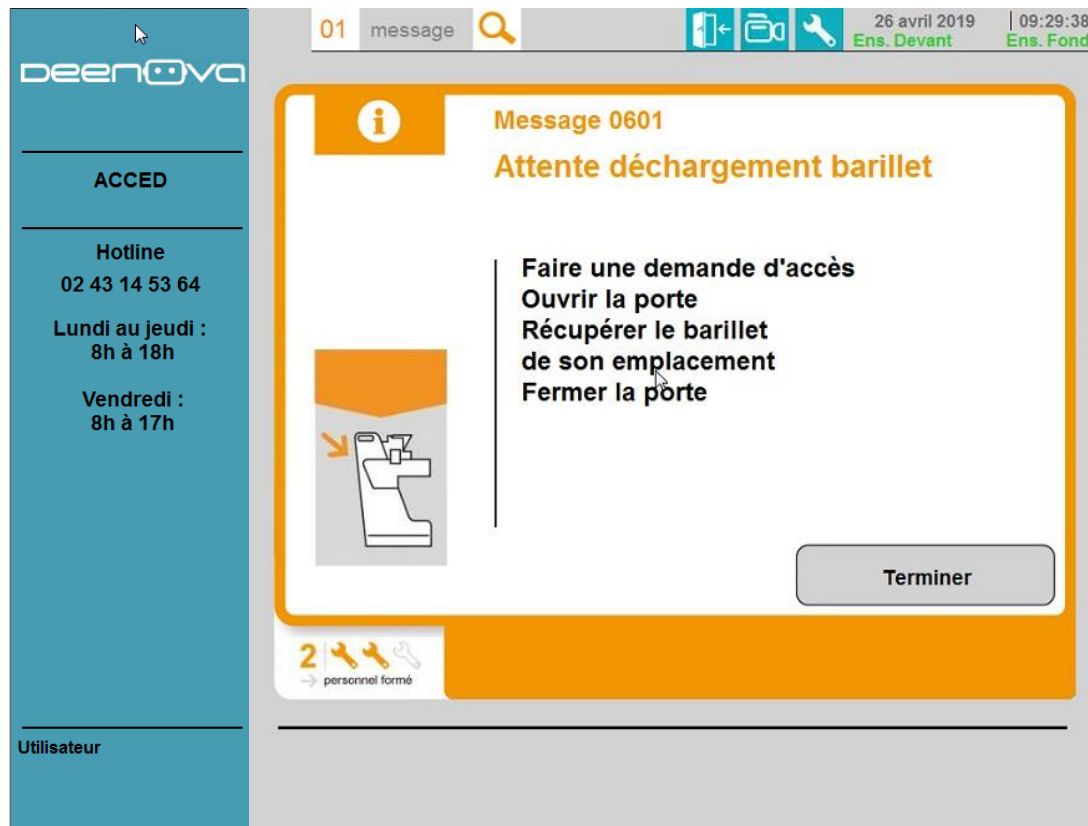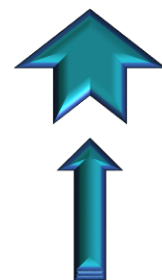


A la fin du cycle :


Faire une demande d'accès et ouvrir la porte.
Récupérer le barillet.
Nettoyer le barillet (poussière de comprimés).
Fermer la porte.

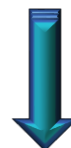



Fonctionnement

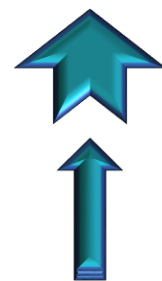


04.E - Lancement du cycle sachet poudre

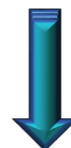


Lancement du cycle sachet poudre

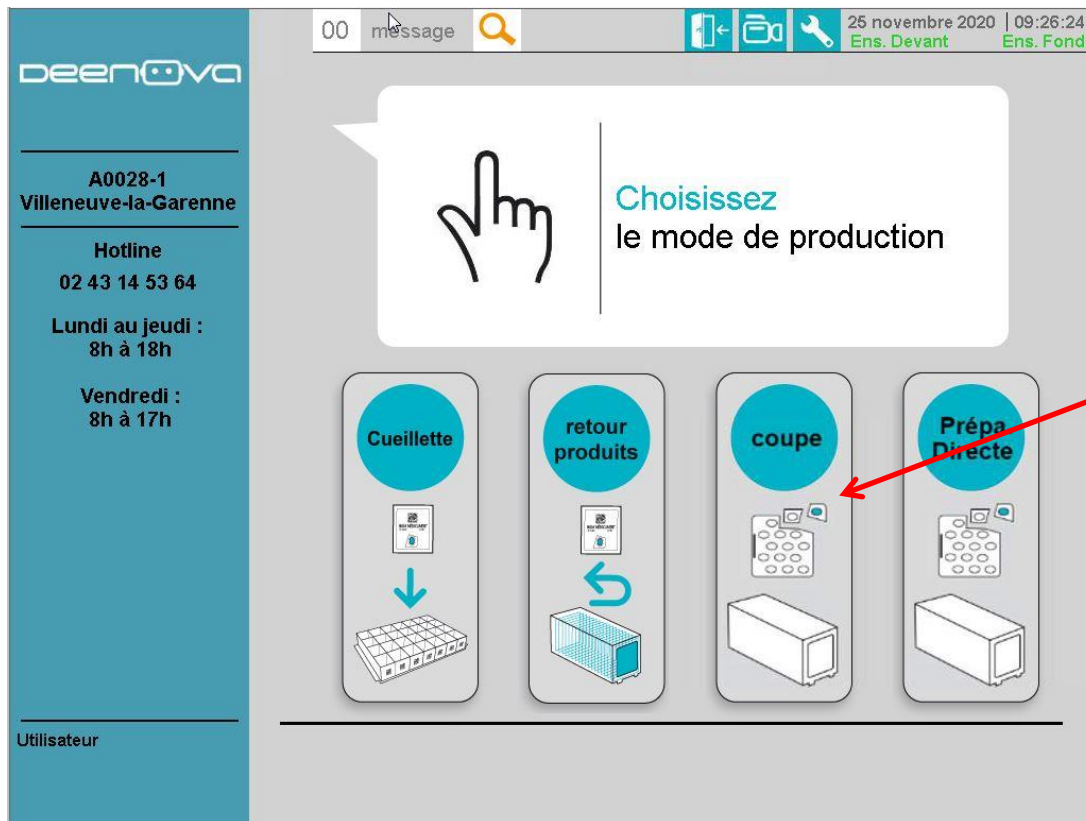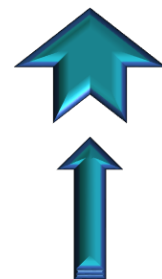

Appuyer sur «coupe».

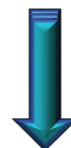


Lancement du cycle sachet poudre

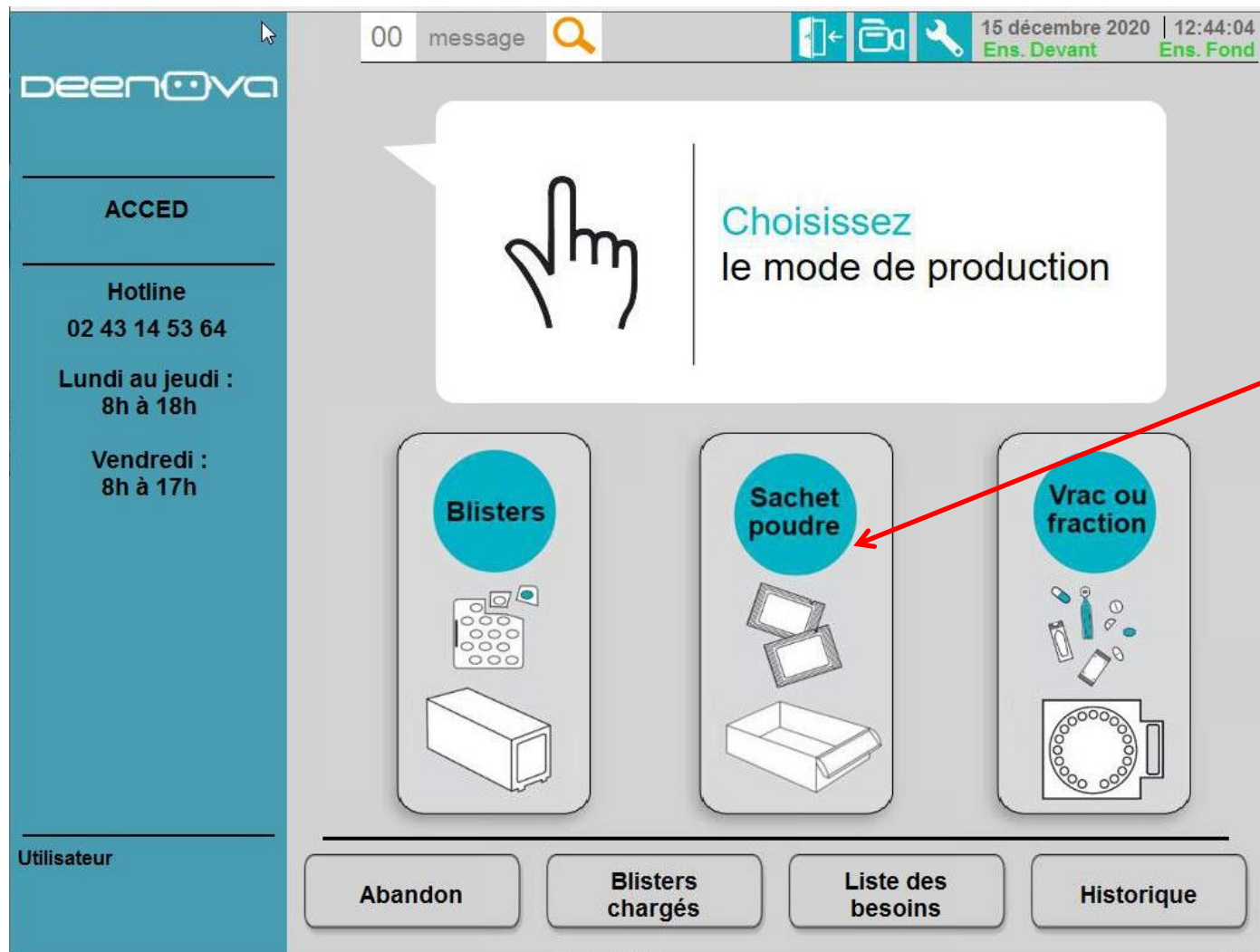

Appuyer sur «sachet poudre».

Lancement du cycle sachet poudre

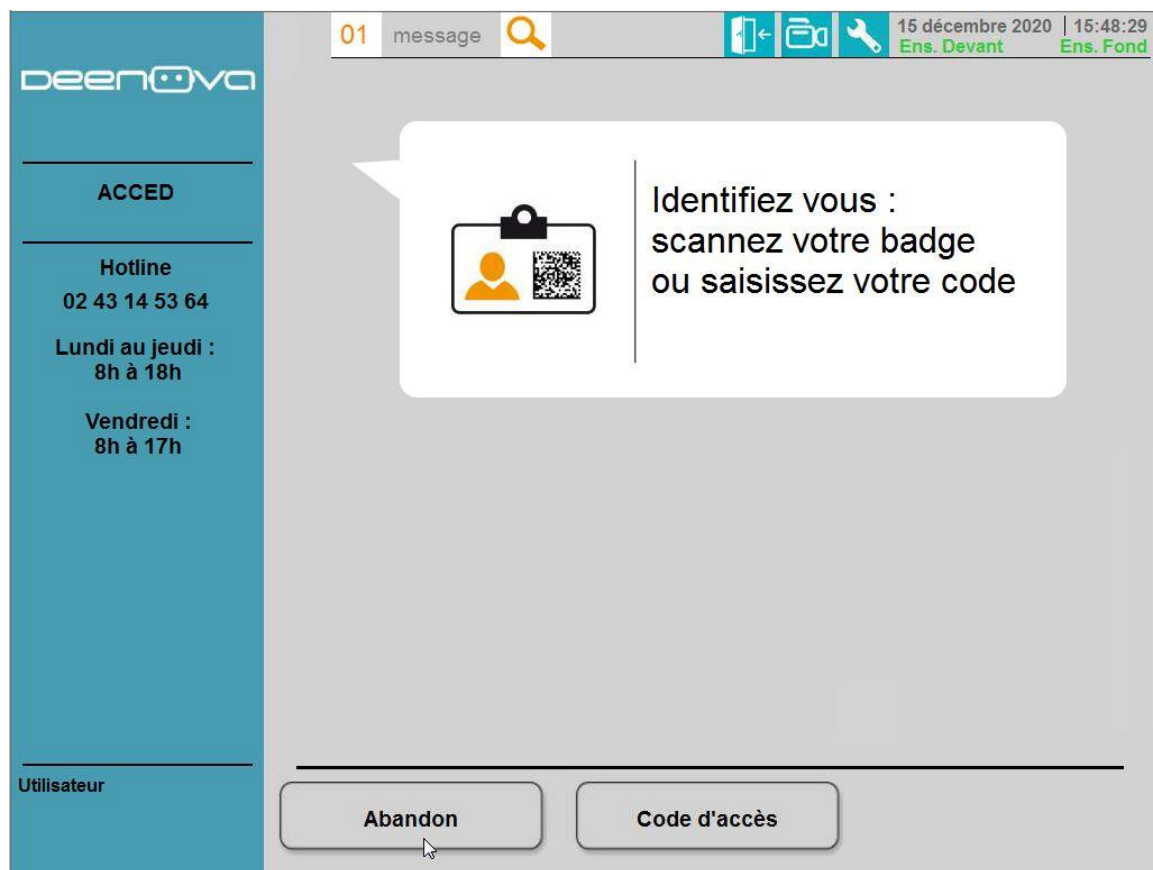

Scanner le badge en le passant devant le lecteur optique.



Lancement du cycle sachet poudre

01 message

15 décembre 2020 | 15:49:46
Ens. Devant Ens. Fond

deenova

ACCED

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Saisie du badge

Identifiez vous :
Saisissez votre badge
Saisissez votre code

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 Supp
OK

Abandon Code d'accès

OU Appuyer sur


Code d'accès

Puis
Saisir le numéro de
badge


Valider sur

OK

Lancement du cycle sachet poudre

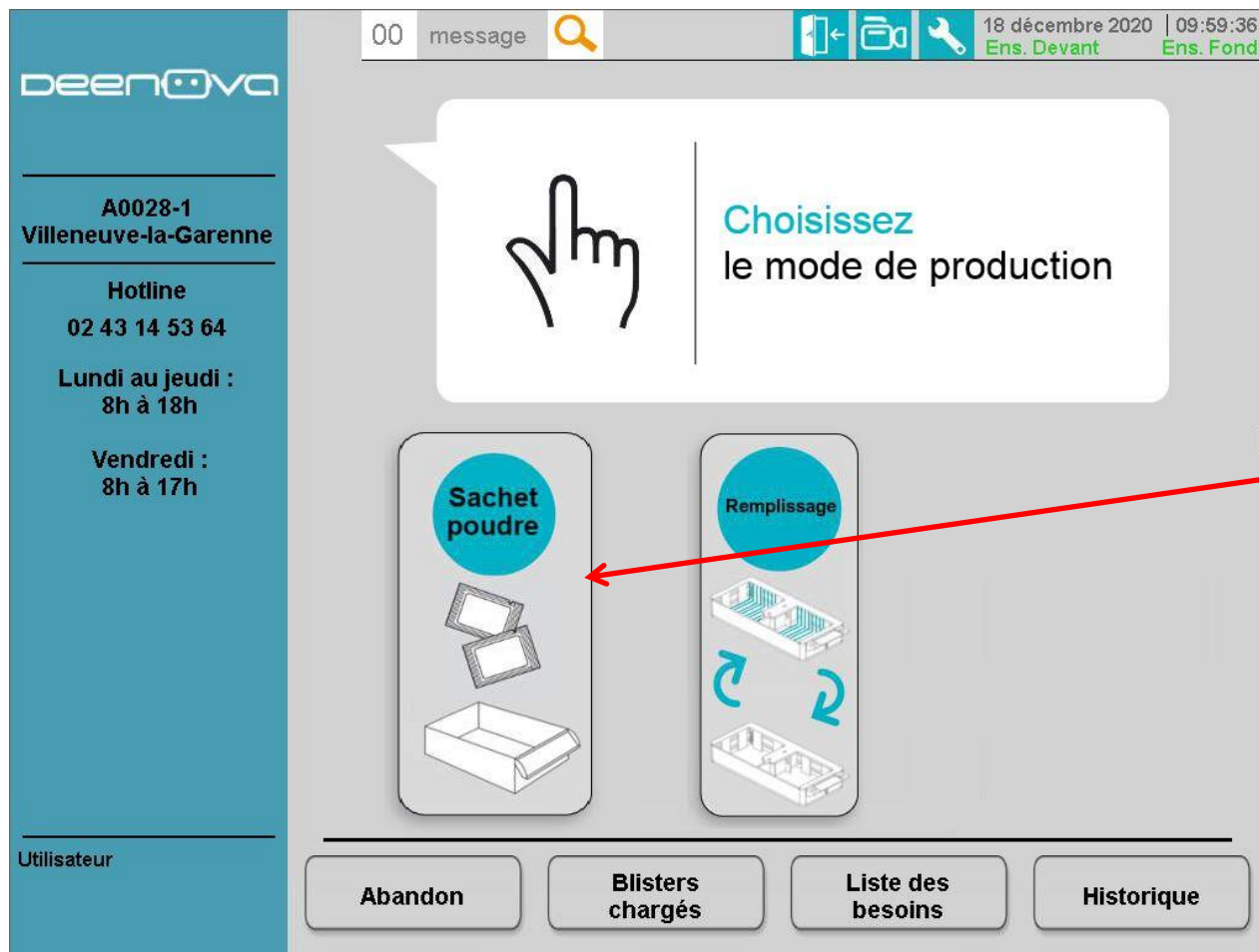

Lancement du cycle sachet poudre

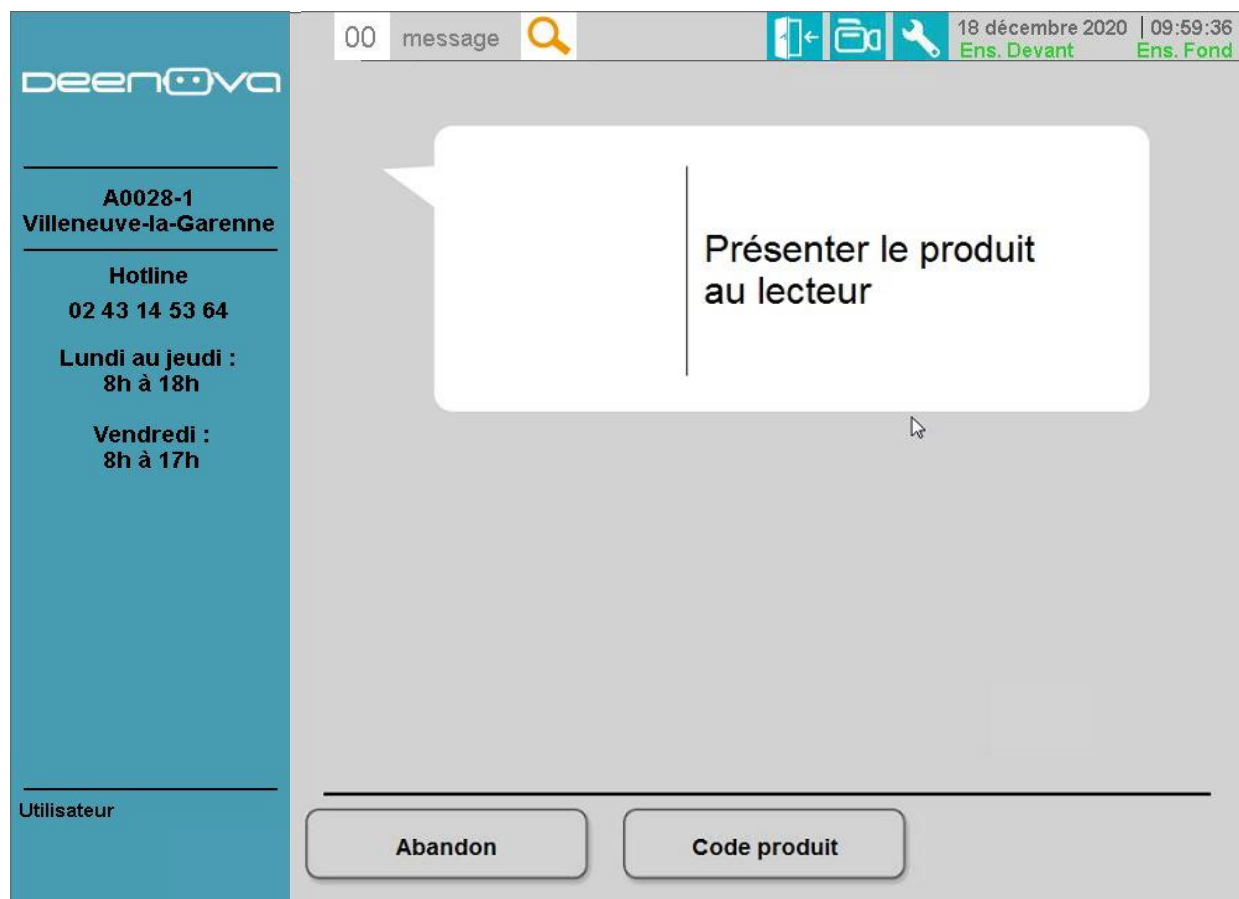

Passer le Datamatrix de l'étui devant le lecteur optique.



Lancement du cycle sachet poudre

The screenshot shows the deenova interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-1 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline and operating hours. The main area displays a modal titled 'Saisissez les données du produit' (Enter product data) with fields for 'CIP13 ou CIP7', 'DATE D'EXPIRATION', and 'NUMERO DE LOT'. An 'OK' button is at the bottom of the modal. Below the modal are two buttons: 'Abandon' and 'Code produit'. The top status bar shows the date 18 décembre 2020 and time 09:59:36.

OU Appuyer sur



Puis
Saisir le numéro de
CIP, date de
péremption et n° de
lot

Valider sur



Lancement du cycle sachet poudre

00 message

18 décembre 2020 | 09:59:36
Ens. Devant Ens. Fond

Identification produit

Confirmer le produit

Fiche produit ▶ EXP : 22/04/2021 / LOT : CM0402

ACETYL SALICYLATE DE LYSINE 75MG (KARDEGIC)
CIP13: 3400934744198


Abandon Confirmer

Vérifier que le produit soit bien conforme à celui présenté.

Pour valider appuyer sur

Confirmer


Lancement du cycle sachet poudre

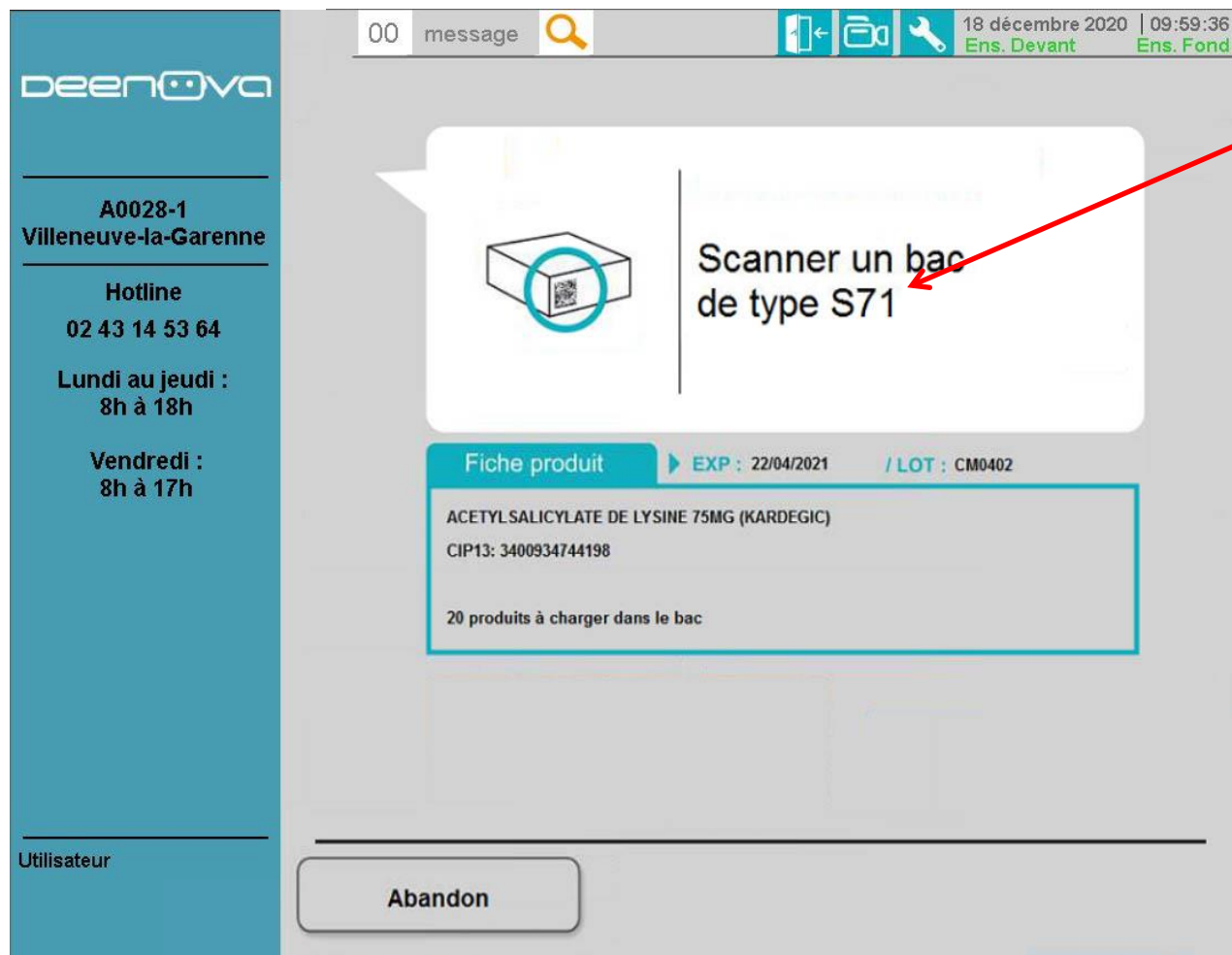

Passer le Datamatrix de d'un bac du type correspondant devant le lecteur optique.




Lancement du cycle sachet poudre

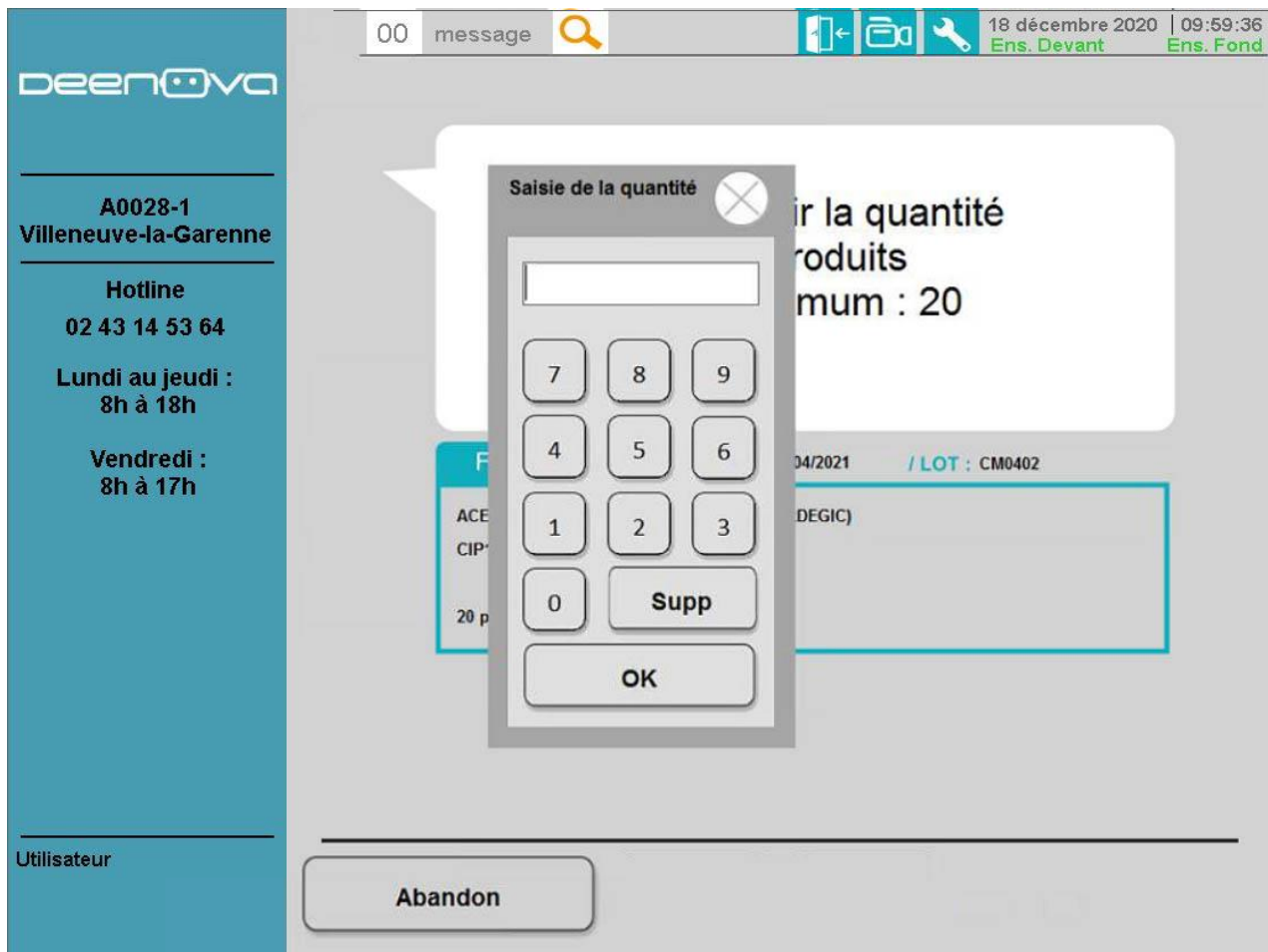

Saisir la quantité déposée dans le bac scanné à l'étape précédente



Lancement du cycle sachet poudre

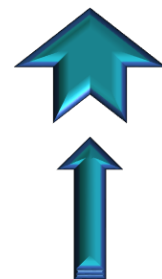

Une fois le(s) Bac(s) scanné(s), le stock Médian s'incrémente

SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Gestion - Références

Gestion
 ● Références
 ● Magasins
 ● Emplacements
 ● Formats
 ● Destinataires
 Réassort
 ● Zone
 ● Préco
 Consultation
 ● Emplacements
 ● Historique
 ● Stock
 ● Requêtes
 Entrées
 ● Unitaire
 ● Listes
 Sorties
 ● Unitaire
 ● Listes
 Paramétrage
 ● Application
 ● Utilisateurs
 Identification
 ● A propos

Référence: 210218 Désignation: ACETYLSALICYLATE DE LYSINE 75MG (KARDEGIC)
 DCI: PI: 1 UCD: 3400892065366
 Commentaires sachet: ACETYLSALICYLAT
 Stock: 240 Dispo: 240 Commandé: 30

Nouveau Enregistrer Supprimer

Stock Logistique Historique Statistiques Listes UCD/CIP Lot retiré


Bloqu	Quantité	Emplacement	ucd	contenant	Fraction	Info	Der. Entrée	Der. Si
	30	ST1.140. 1		S710130010	100		27/09/2019 14:04:51	/ /
	30	ST1. 95. 1		S710130009	100		27/09/2019 14:06:23	/ /
	30	ST1.125. 1		S710130002	100		27/09/2019 14:06:34	/ /
	30	ST1. 65. 1		S710130022	100		04/10/2019 15:22:39	/ /
	30	ST1.185. 1		S710130011	100		04/10/2019 15:22:53	/ /
	30	ST1. 35. 1		S710130005	100		04/10/2019 15:23:14	/ /

Nouveau Supprimer Modifier


Bloquage / Débloquage

Quitter

Ici, il y a 6 bacs de 30 sachets déjà présents soit 180 sachets, or le stock affiché est de 240 sachets

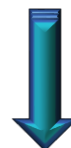


Lancement du cycle sachet poudre

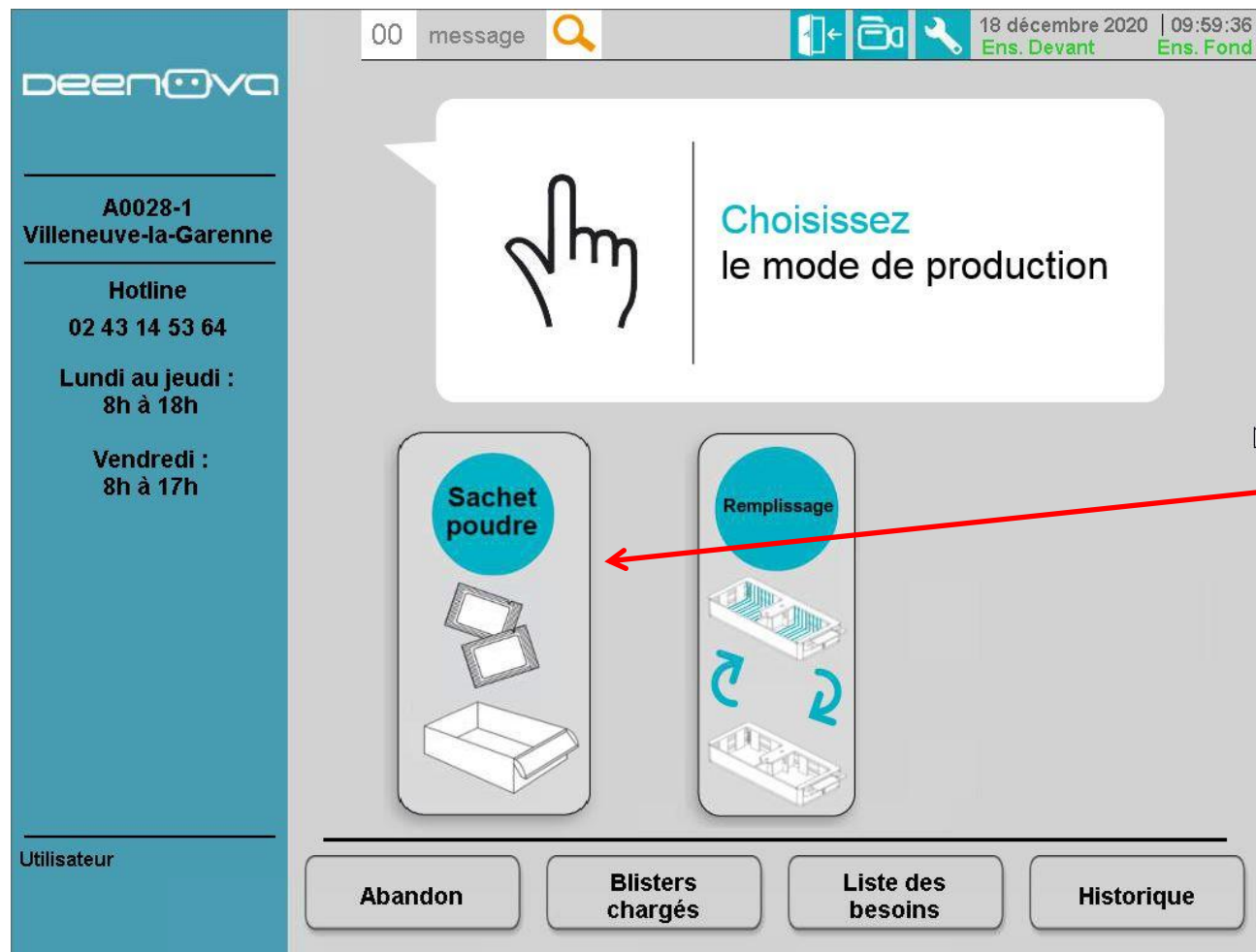

Soit appuyer sur
«Sachet poudre» pour
continuer le
chargement .

Lancement du cycle sachet poudre

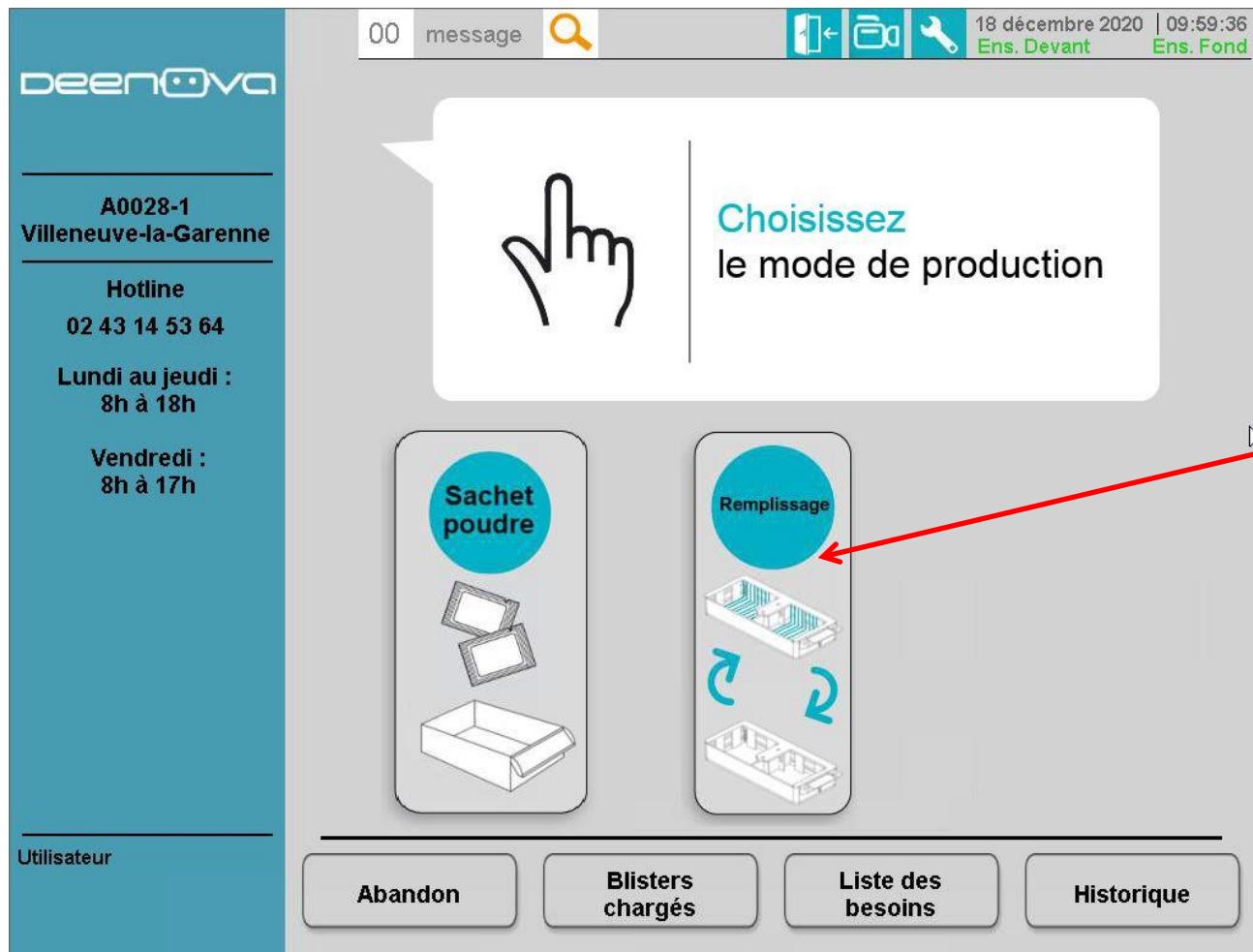

Soit appuyer sur «Remplissage» pour introduire le(s) bac(s) dans l'automate.

Lancement du cycle sachet poudre

The screenshot displays the DEENOVA user interface. On the left, a sidebar contains the company logo, address (A0028-1 Villeneuve-la-Garenne), hotline number (02 43 14 53 64), and service hours (Monday-Thursday 8h-18h, Friday 8h-17h). The main area shows a message titled 'Message 0024' with the subject 'Porte déverrouillée, cycle Bac sachet poudre'. It includes an icon of an open door and the instruction 'Ouvrir la porte pour charger les bacs sachet poudre'. A status bar at the bottom indicates 'intervention facile' with a wrench icon. The top of the interface shows a navigation bar with '02 messages', a search icon, and system information including the date (04 octobre 2019), time (16:32:29), and user status (Ens. Devant, Ens. Fond).

02 messages

04 octobre 2019 | 16:32:29
Ens. Devant Ens. Fond

Message 0024
Porte déverrouillée, cycle Bac sachet poudre

Ouvrir la porte pour charger les bacs sachet poudre



1 intervention facile

Utilisateur


Ouvrir la porte.

Lancement du cycle sachet poudre


Déposer le(s) bac(s)
scanné(s) de façon
aléatoire dans les
emplacements
dédiés

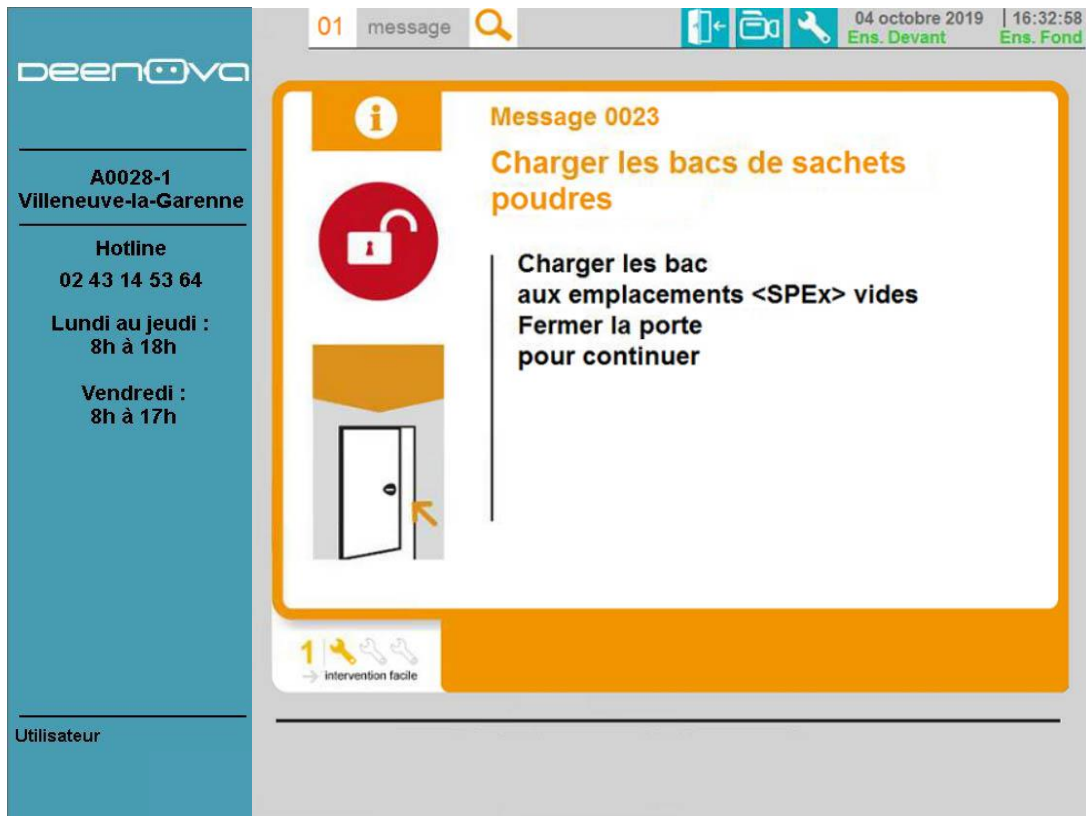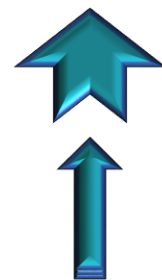


Lancement du cycle sachet poudre

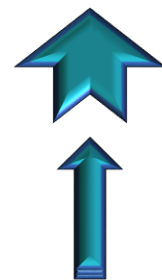

Une fois le(s) bac(s) déposé(s), refermer la porte, le robot cueillette fera l'inventaire et associera une adresse aux bacs dans Médian.

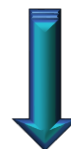

Lancement du cycle sachet poudre

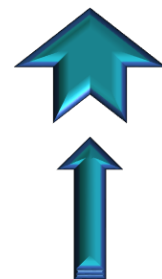

Une fois l'inventaire fait, les bac ont été associés a un emplacement.

SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Gestion - Références

Gestion
 ● Références
 ● Magasins
 ● Emplacements
 ● Formats
 ● Destinataires
 Réassort
 ● Zone
 ● Préco
 Consultation
 ● Emplacements
 ● Historique
 ● Stock
 ● Requêtes
 Entrées
 ● Unitaire
 ● Listes
 Sorties
 ● Unitaire
 ● Listes
 Paramétrage
 ● Application
 ● Utilisateurs
 Identification
 ● A propos

Référence: **210218** Désignation: ACETYSALICYLATE DE LYSINE 75MG (KARDEGIC)

DCI: PI : 1 UCD: 3400892065366

Commentaires sachet: ACETYSALICYLAT


Stock : 240 Dispo : 240 Commandé : 30

Stock Logistique Historique Statistiques Listes UCD/CIP Lot retiré


Bloque	Quantité	Emplacement	ucd	contenant	Fraction	Info	Der. Entrée	Der. Si
	30	ST1.140. 1		S710130010	100		27/09/2019 14:04:51	//
	30	ST1. 95. 1		S710130009	100		27/09/2019 14:06:23	//
	30	ST1.125. 1		S710130002	100		27/09/2019 14:06:34	//
	30	ST1. 65. 1		S710130022	100		04/10/2019 15:22:39	//
	30	ST1.185. 1		S710130011	100		04/10/2019 15:22:53	//
	30	ST1. 35. 1		S710130005	100		04/10/2019 15:23:14	//
	30	ST1.200. 1		S710130006	100		04/10/2019 15:34:50	//
	30	ST1.230. 1		S710130030	100		04/10/2019 15:29:50	//

Bloquage / Débloquage


Ici, il y a 8 bacs de 30 sachets déjà présents soit 240 sachets

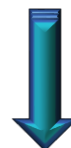


Fonctionnement

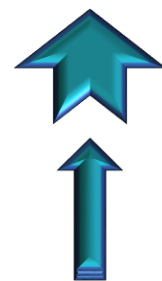

04.H - Lancement du cycle Prépa directe

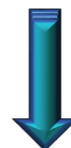


Lancement du cycle Prépa directe

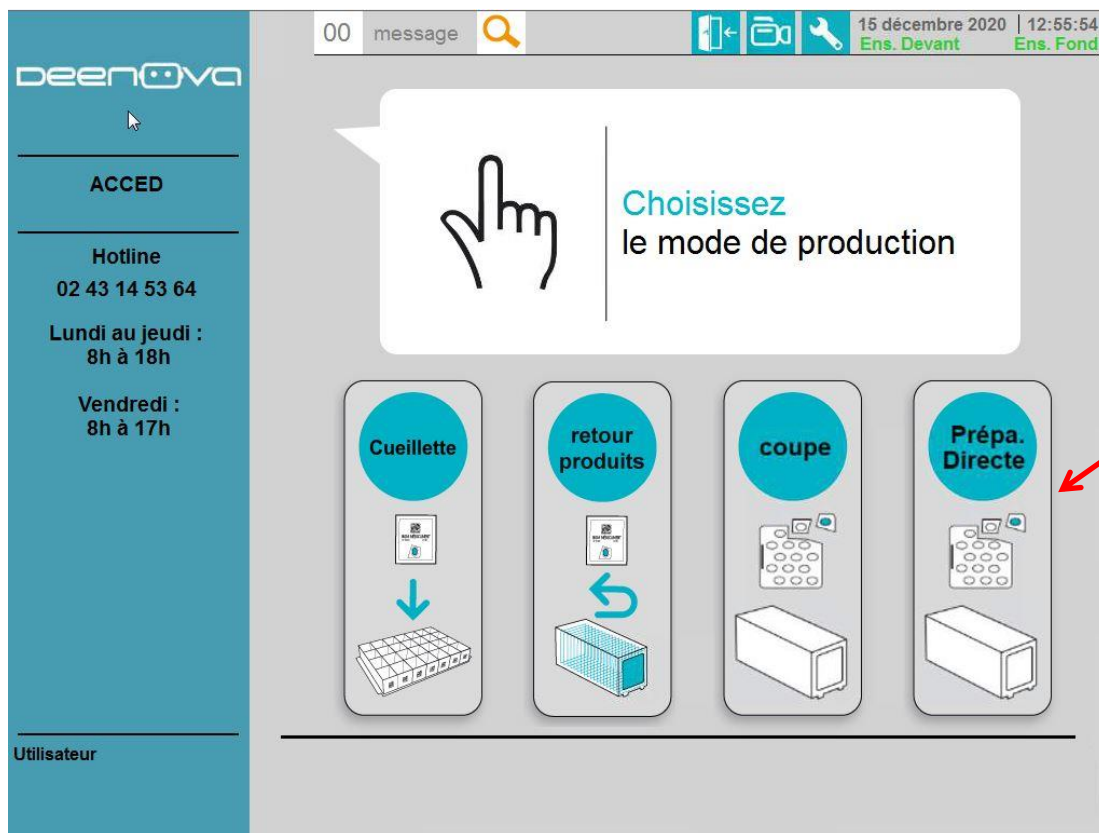


Appuyer sur «Prépa directe».

Lancement du cycle Prépa directe

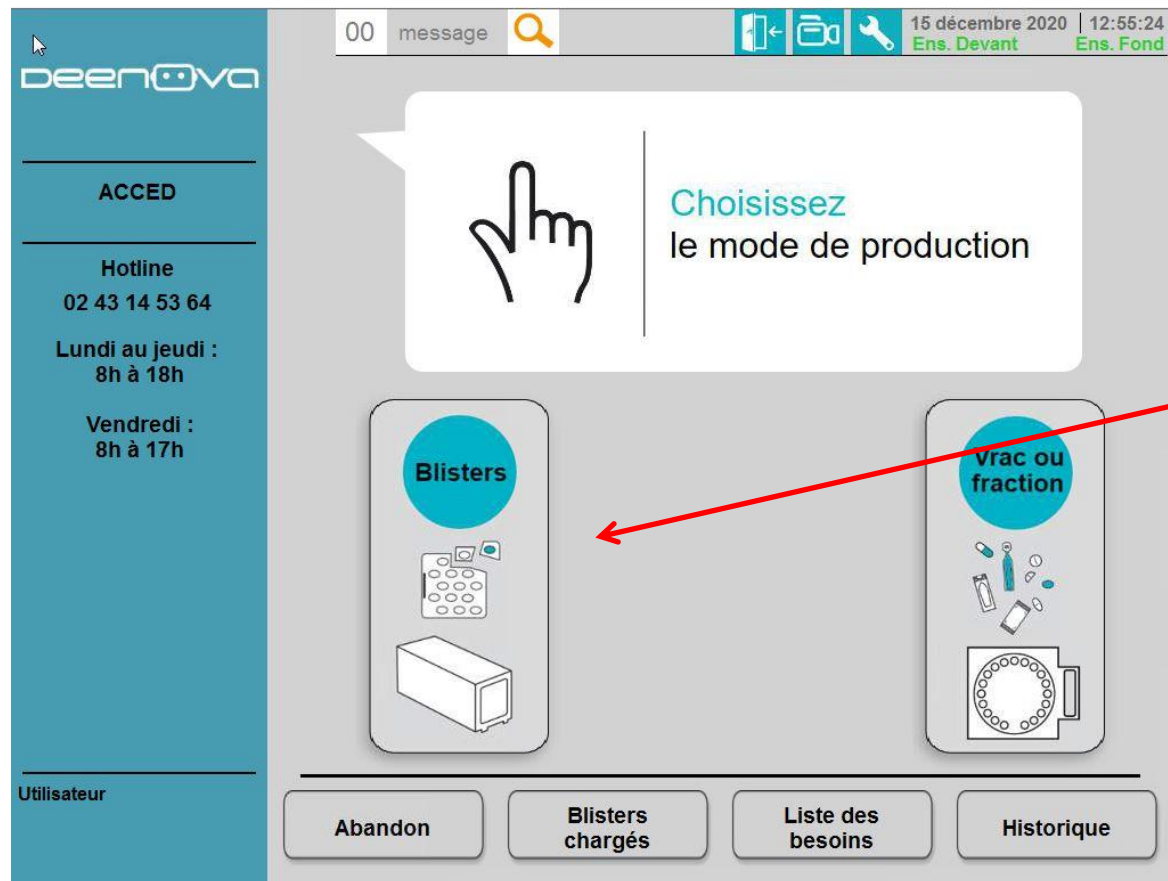

Appuyer sur «Blisters».

Lancement du cycle Prépa directe

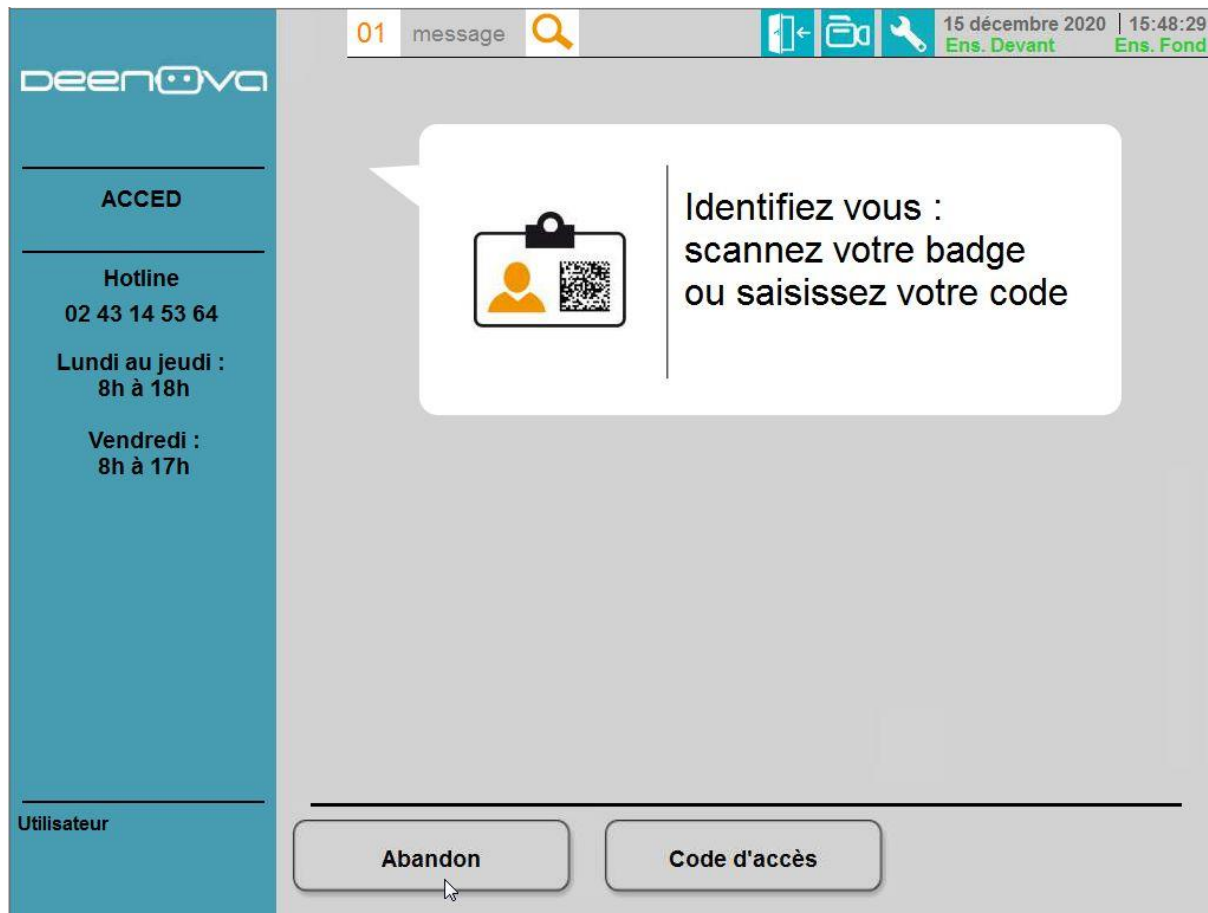

Scanner le badge en le passant devant le lecteur optique.




Lancement du cycle Prépa directe

OU Appuyer sur

Puis
Saisir le numéro de
badge

Valider sur

Lancement du cycle Prépa directe

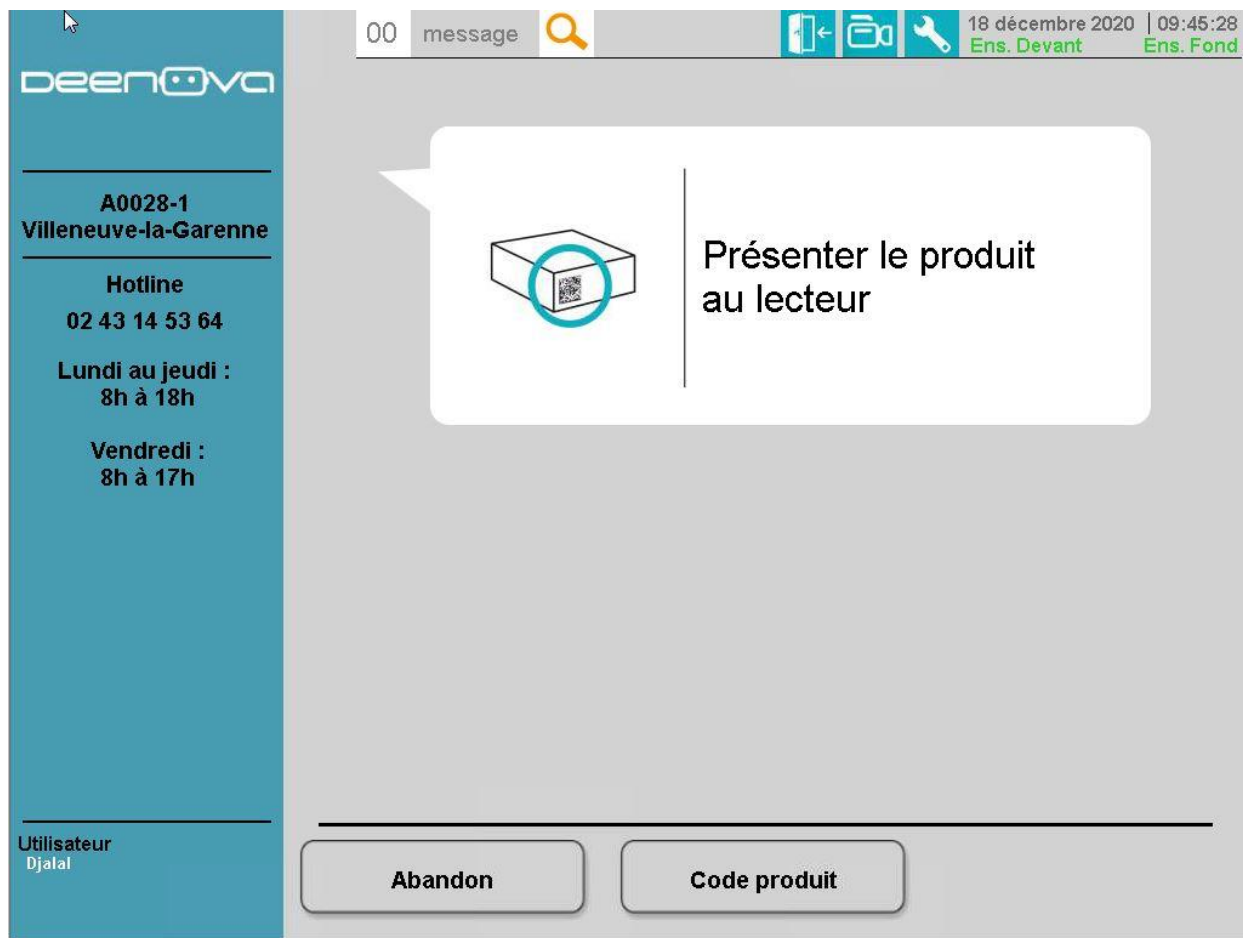

Passer le Datamatrix de l'étui devant le lecteur optique.



Lancement du cycle Prépa directe

The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-1 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and opening hours. The main area displays a status bar at the top with a message icon, date (18 décembre 2020), and time (09:46:17). A central dialog box titled 'Saisissez les données du produit' (Enter product data) is open, containing fields for 'CIP13 ou CIP7', 'DATE D'EXPIRATION', and 'NUMERO DE LOT', with an 'OK' button at the bottom. Below the dialog, there are 'Abandon' and 'Code produit' buttons.

OU Appuyer sur



Puis
Saisir le numéro de
CIP, date de
péremption et n° de
lot

Valider sur



Lancement du cycle Prépa directe



Vérifier que le produit soit bien conforme à celui présenté.

Si les dimensions de celui-ci sont présentes sur la photo de la plaquette, utiliser la **règle du haut** pour les vérifier.

Il est possible d'agrandir les **images** en appuyant dessus.

Pour valider appuyer sur



Confirmer

00 message

18 décembre 2020 | 09:48:00
Ens. Devant Ens. Fond

Identification produit

Confirmer le produit

Fiche produit ▶ EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

LEVOTHYROX 125 MCG CPR
CIP13: 3400930066010
3 blisters de 10 produits
60 produits par boîte PASS - Quantité à produire: 10

Abandon Confirmer

Utilisateur
Djalal

Lancement du cycle Prépa directe

02 messages

18 décembre 2020 | 09:50:42

Ens. Devant Ens. Fond

deenoova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

Trappe n° 1 ouverte
Déposer les blisters
enregistrés
Nombre de blisters:3
Fermer la trappe

Fiche produit EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

Nombre de plaquettes chargées :	3
Nombre de comprimés correspondant :	30
Nombre total de comprimés à charger :	10

Ajouter un produit Modifier le nombre de blisters chargés Abandon

Une fois confirmé,
déposez le(s)
blister(s) en suivant le
sens d'introduction
dans la trappe
ouverte.

ici : trappe n°1



Lancement du cycle Prépa directe



Agrandir la photo en cliquant dessus.

Mettre le blister face à vous à côté de la photo afin de bien respecter le sens d'introduction.

Lancement du cycle Prépa directe

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

02 messages

18 décembre 2020 | 09:54:24
Ens. Devant Ens. Fond

Trappe n° 1 ouverte
Déposer les blisters enregistrés
Nombre de blisters:3
Fermer la trappe

Fiche produit ▶ EXP : 01/08/2022 / LOT : G00CHE

Nombre de plaquettes chargées :	3
Nombre de comprimés correspondant :	30
Nombre total de comprimés à charger :	10

Ajouter un produit Modifier le nombre de blisters chargés Abandon

Pour ajouter un produit de la même référence et du même lot. Appuyer sur "Ajouter un produit".

Lancement du cycle Prépa directe

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

02 messages

18 décembre 2020 | 09:53:28
Ens. Devant Ens. Fond

Trappe n° 1 ouverte

Nombre de blisters
Maximum : 3

08/2022 / LOT : G00CHE

3
30
10


Ajouter un produit

Modifier le nombre de blisters chargés

Abandon

Modifie le
nombre de
blisters charger
par boite
scanné

Lancement du cycle Prépa directe

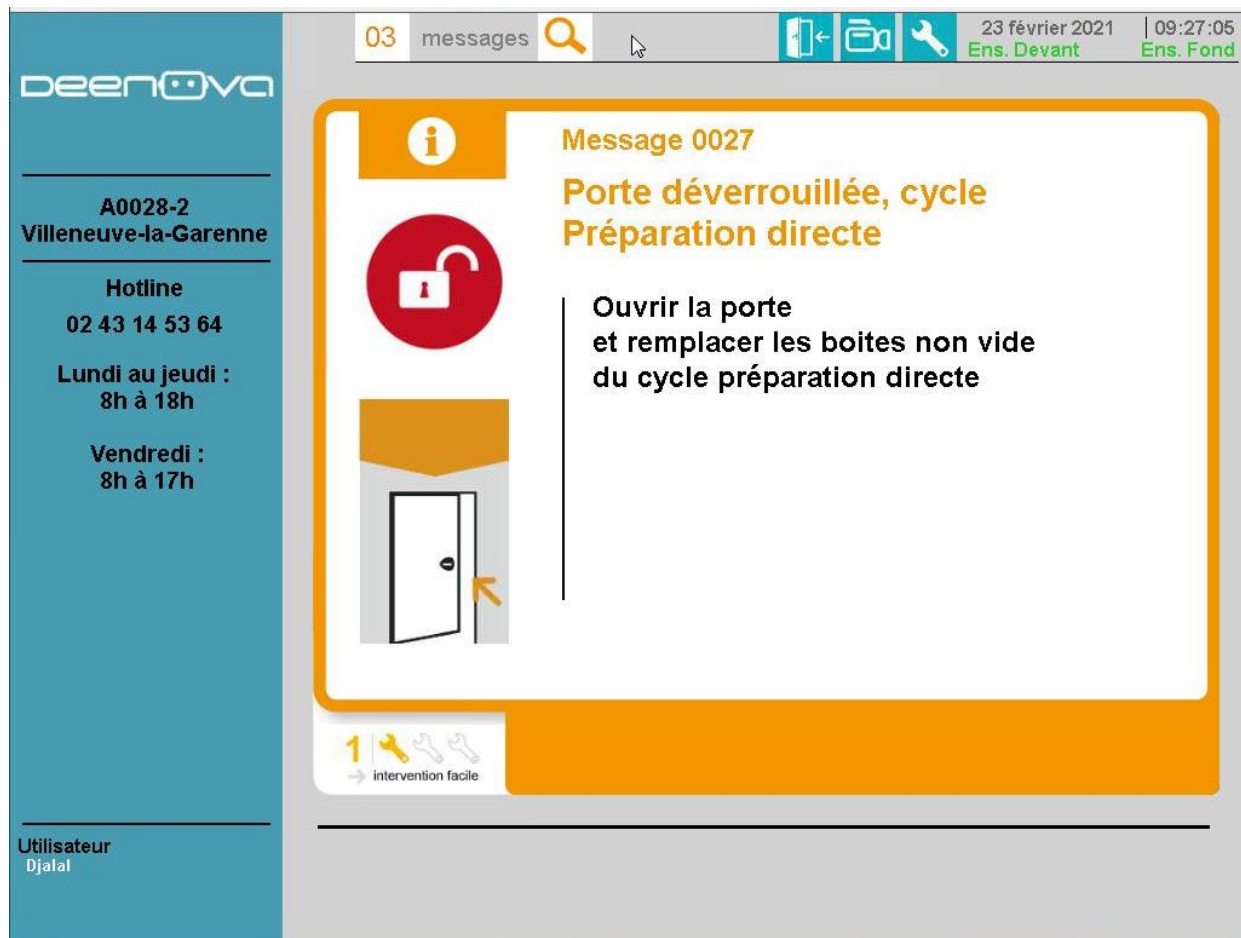


Ouverture de la porte
vérifier les emplacements
retour

Lancement du cycle Prépa directe



Vérifier qu' il y ait des boites et
qu'elles soient vide

Lancement du cycle Prépa directe

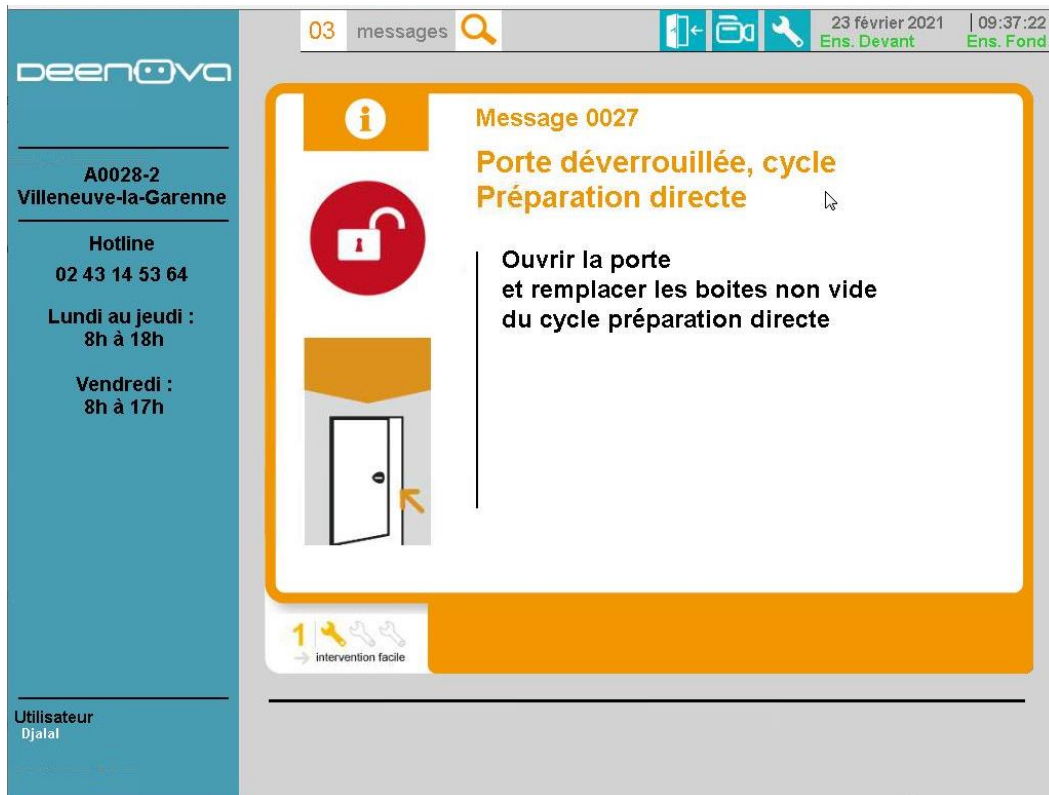

Réouverture de la porte
Fin de la prépa direct


Lancement du cycle Prépa directe




Fin de la prépa direct
Récupérer les boîte pass et mettre des boîte vides

Refermer la porte


Fonctionnement

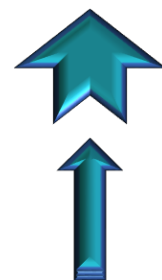


04.1 - Cycle de Cueillette en DN* et validation

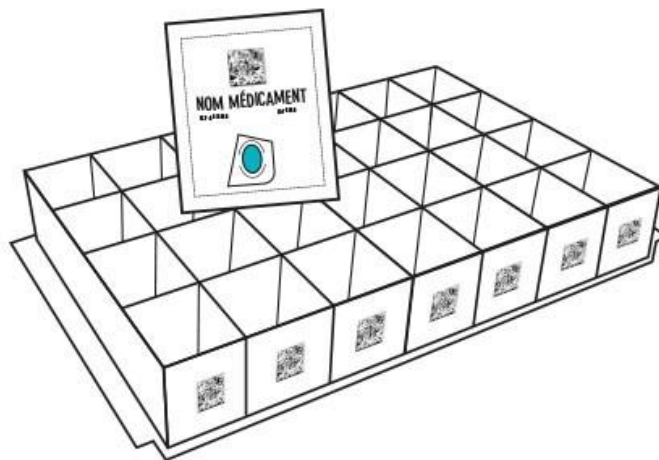

*DN = Dispensation nominative

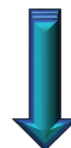


Cycle Cueillette en DN* et validation

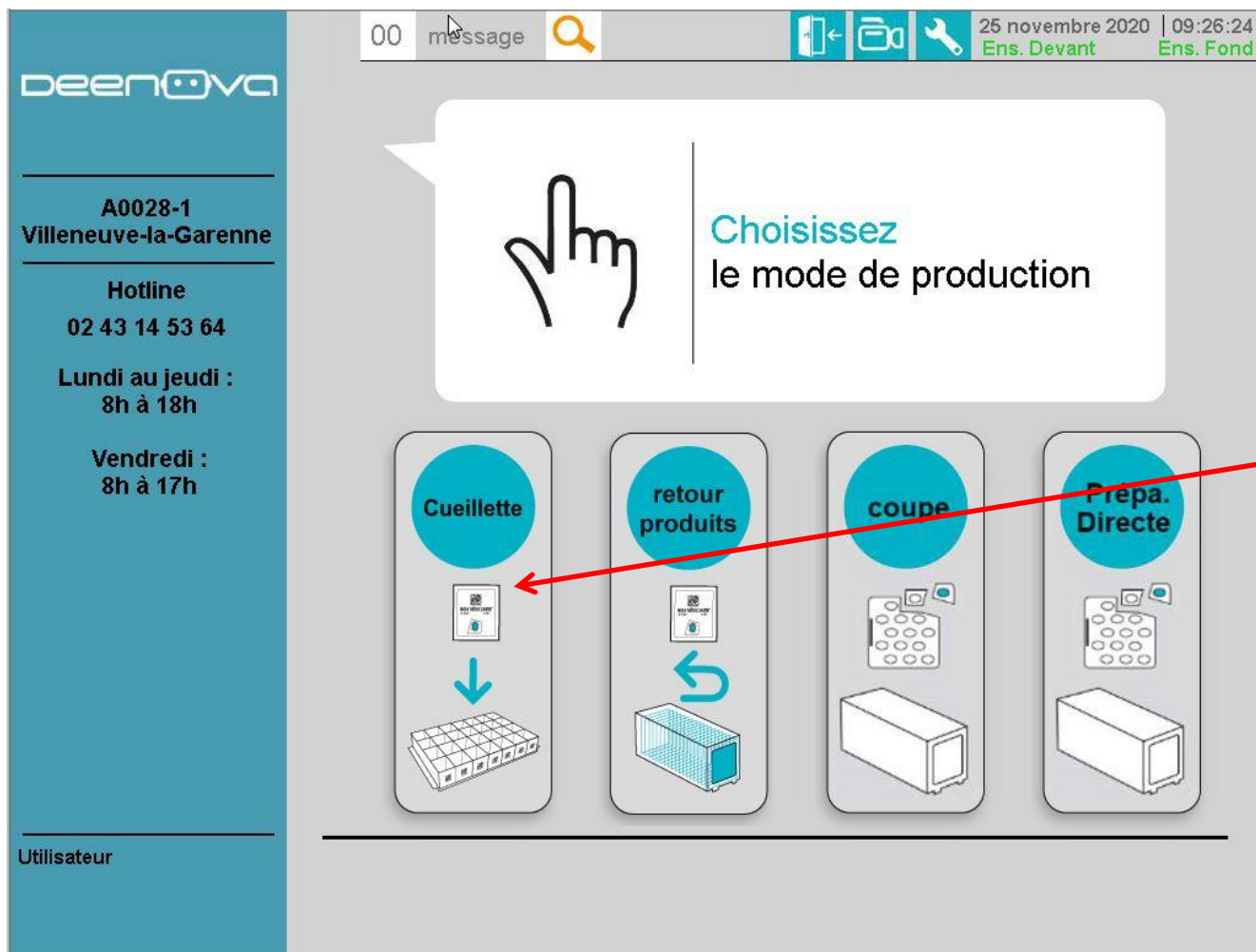

Aller dans le menu "Cueillette".

Cycle Cueillette en DN* et validation

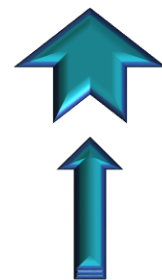


The screenshot shows the Deenova software interface. On the left is a sidebar with the following information:


- Logo: deenova
- Address: A0028-1 Villeneuve-la-Garenne
- Hotline: 02 43 14 53 64
- Hours: Lundi au jeudi : 8h à 18h, Vendredi : 8h à 17h
- User: Utilisateur

The main area displays a message box with a hand icon and the text "Choisissez les services à lancer". Below this, a blue bar shows the selected service: "Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU". To the right of the service name, it lists "88 préparations", "7 piluliers", "1 lit", and "7 jours". At the bottom of the screen are three buttons: "Abandon", "Confirmer", and "Effacer la sélection". A red arrow points from the text "Pour lancer une Dispensation Nominative, il suffit d'appuyer sur le service souhaité." to the service bar.

Pour lancer une
**Dispensation
Nominative**, il suffit
d'appuyer sur le
service souhaité.

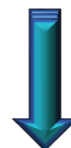

Cycle Cueillette en DN* et validation

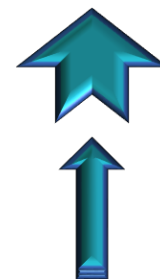

00 message 16 janvier 2018 | 12:02:57

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur


Choisissez les services à lancer

	Unité CHA_2361_VER : C_SSRR_VER	346 préparations	14 piluliers	2 lits	11 jours	4
	Unité CHA_3009_BLE :	1062 préparations	99 piluliers	10 lits	96 jours	2
	Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202 préparations	105 piluliers	13 lits	41 jours	3
	Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153 préparations	98 piluliers	11 lits	41 jours	1

Abandon Confirmer Effacer la sélection

Cette écran montre la notion de sélection de services.

La numérotation fait l'ordre de cueillette.

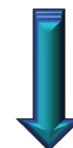

Cycle Cueillette en DN* et validation

00 message 16 janvier 2018 | 12:02:57

deenoova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Choisissez les services à lancer

Unité CHA_2361_VER : C_SSRR_VER	346 préparations	14 piluliers	2 lits	11 jours	4
Unité CHA_3009_BLE :	1062 préparations	99 piluliers	10 lits	96 jours	2
Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	1202 préparations	105 piluliers	13 lits	41 jours	3
Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	4153 préparations	98 piluliers	11 lits	41 jours	1

Abandon Confirmer Effacer la sélection


Confirmer

La confirmation lance la cueillette.


Effacer la sélection

En cas d'erreur sur l'ordre de lancement des services.

Cycle Cueillette en DN* et validation

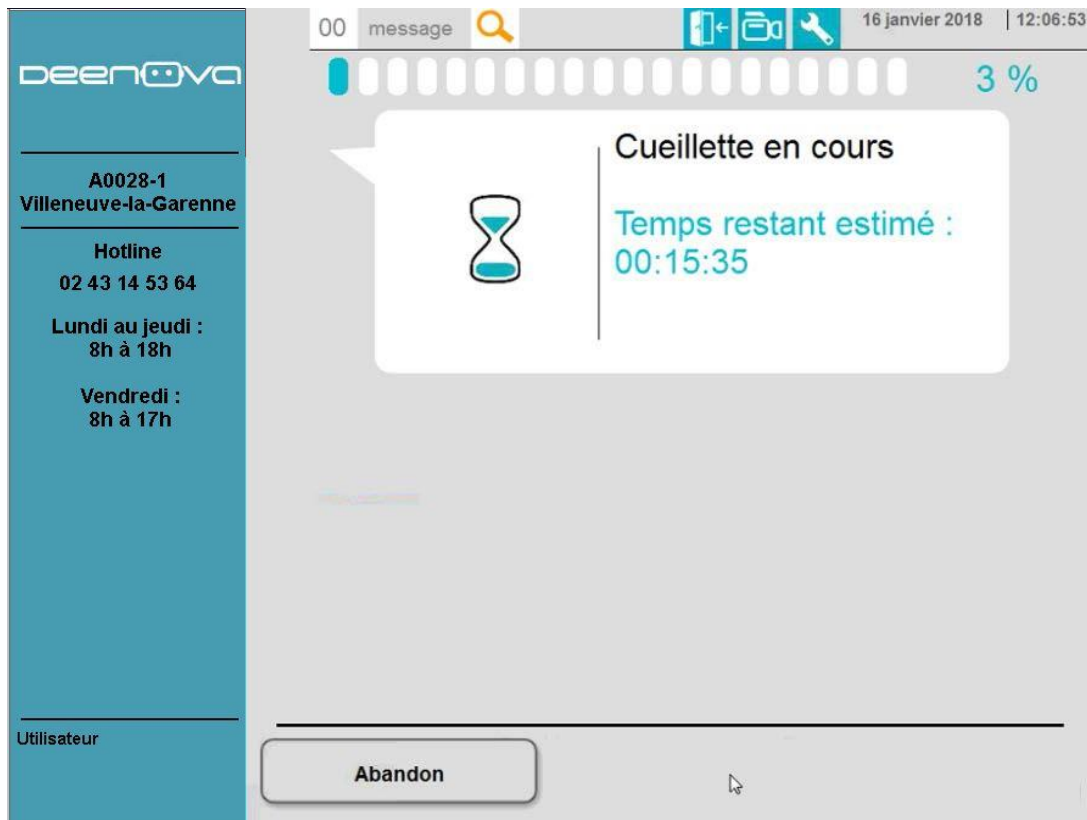

Après confirmation,
la cueillette sera faite
dans l'ordre de
sélection.

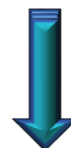

Cycle Cueillette en DN* et validation



00 message

16 janvier 2018 | 12:09:33

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h


Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur


Identifiez vous :
scannez votre badge
ou saisissez votre code

Code d'accès


Une demande d'identification vous est automatiquement proposée en fin de cueillette afin de récupérer les piluliers préparés.

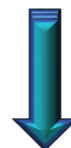



Cycle Cueillette en DN* et validation

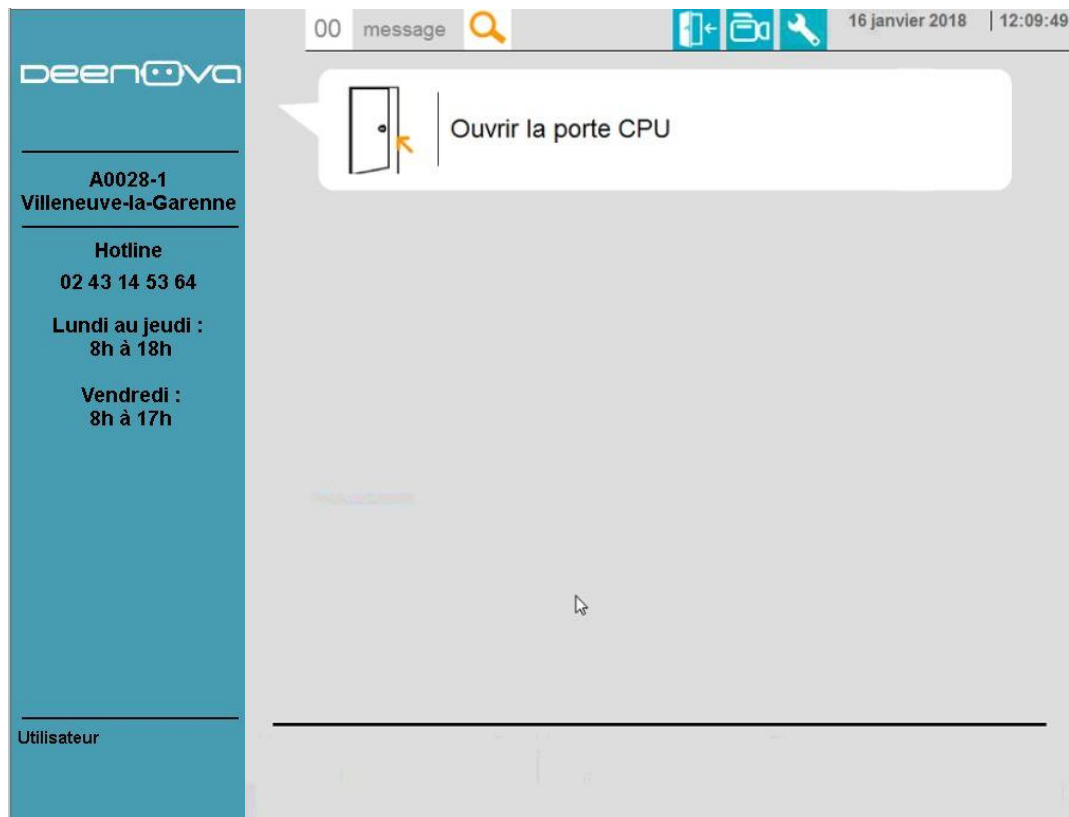

La porte CPU est déverrouillée à ce moment.

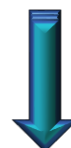


Cycle Cueillette en DN* et validation

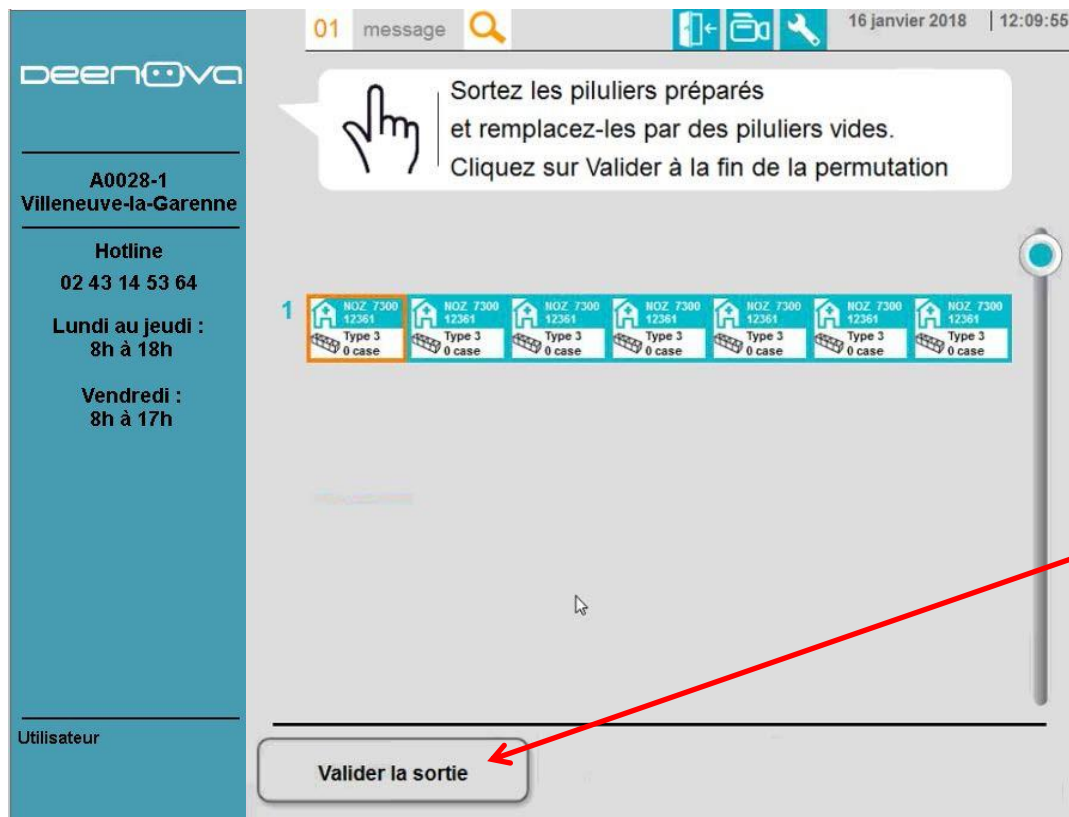
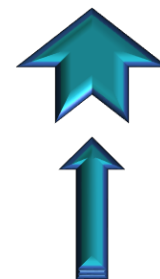


Vous pouvez récupérer
et remplacer les
piluliers préparés par
des piluliers vides.


Pour continuer cliquer
sur « Valider la sortie ».

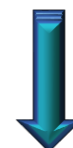


Cycle Cueillette en DN* et validation

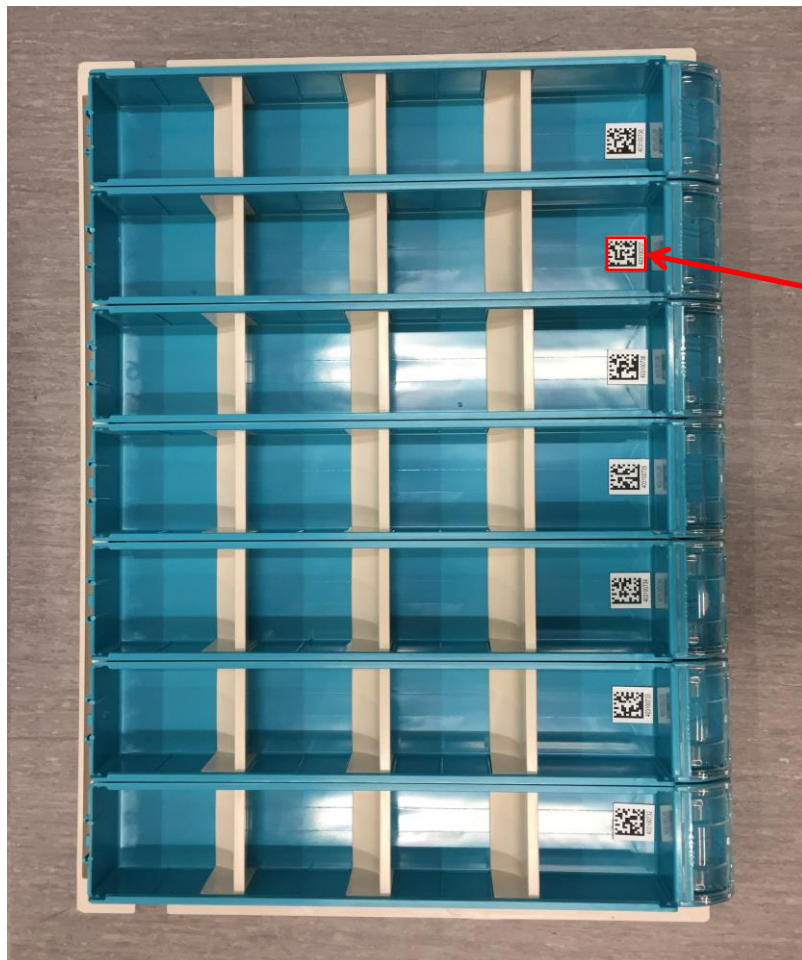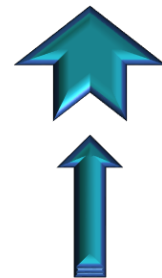


Attention à bien vérifier la présence des data-matrix sur les piluliers et les plateaux.

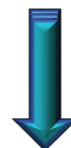



Cycle Cueillette en DN* et validation

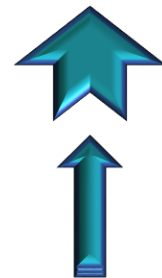


Faire également attention au sens d'introduction des plateaux. il faut que le trou soit face à vous.

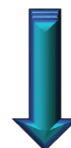


Cycle Cueillette en DN* et validation

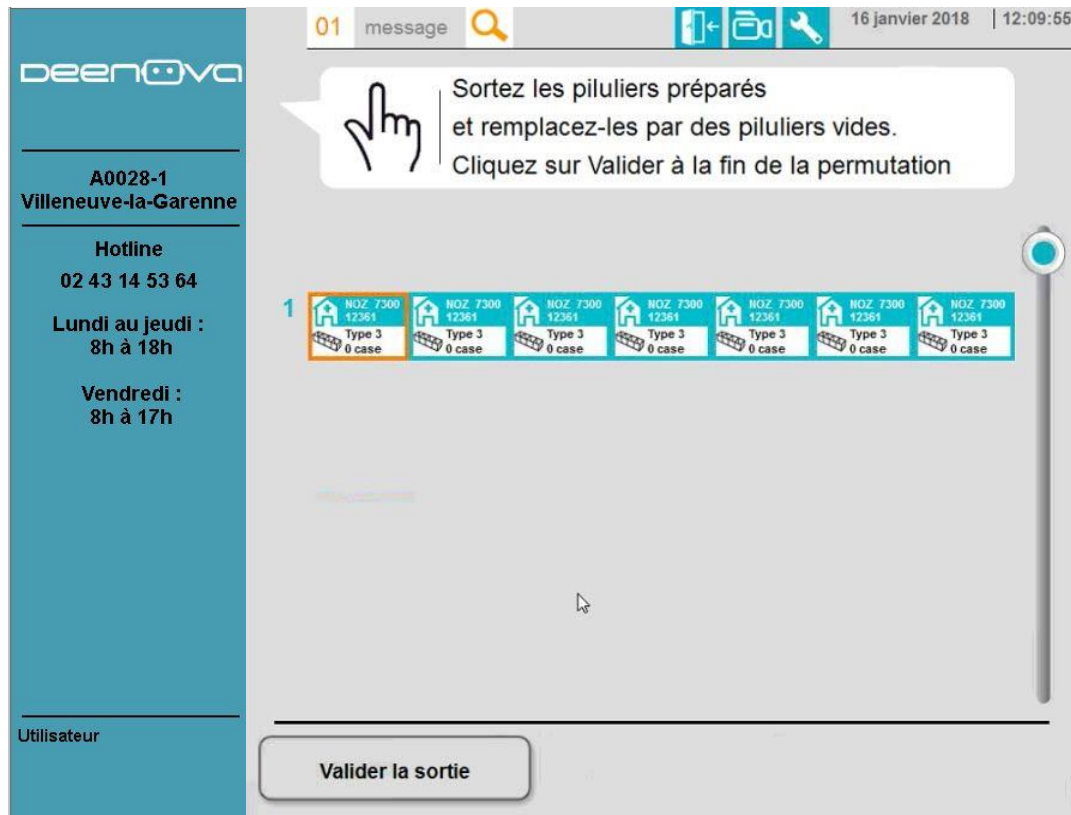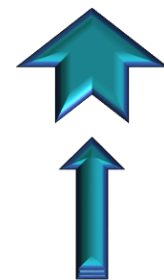

Vous pouvez également contrôler la dispensation d'un pilulier en cliquant dessus.

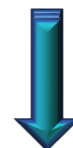

Cycle Cueillette en DN* et validation

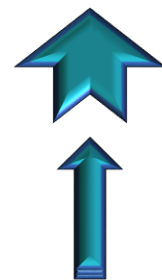

01 message

16 janvier 2018 | 12:10:11

deenoova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur


Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU

! → AL
Dispensation du 12/10/2017



soir du 12/10/2017		
● SULFARLEM S 25MG CP		1/1
● SULFARLEM S 25MG CP		1/1
midi du 12/10/2017		
! LASILIX 40MG CP		0/2
! LASILIX 40MG CP		0/2
● SULFARLEM S 25MG CP		1/1
● SULFARLEM S 25MG CP		1/1
matin du 12/10/2017		
! LASILIX 40MG CP		0/1
! LASILIX 40MG CP		0/1
● SULFARLEM S 25MG CP		1/1

Terminer


Les produits avec un point d'exclamation , représentent des compléments à faire manuellement car non dispensés automatiquement.

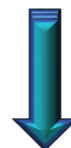

Cycle Cueillette en DN* et validation

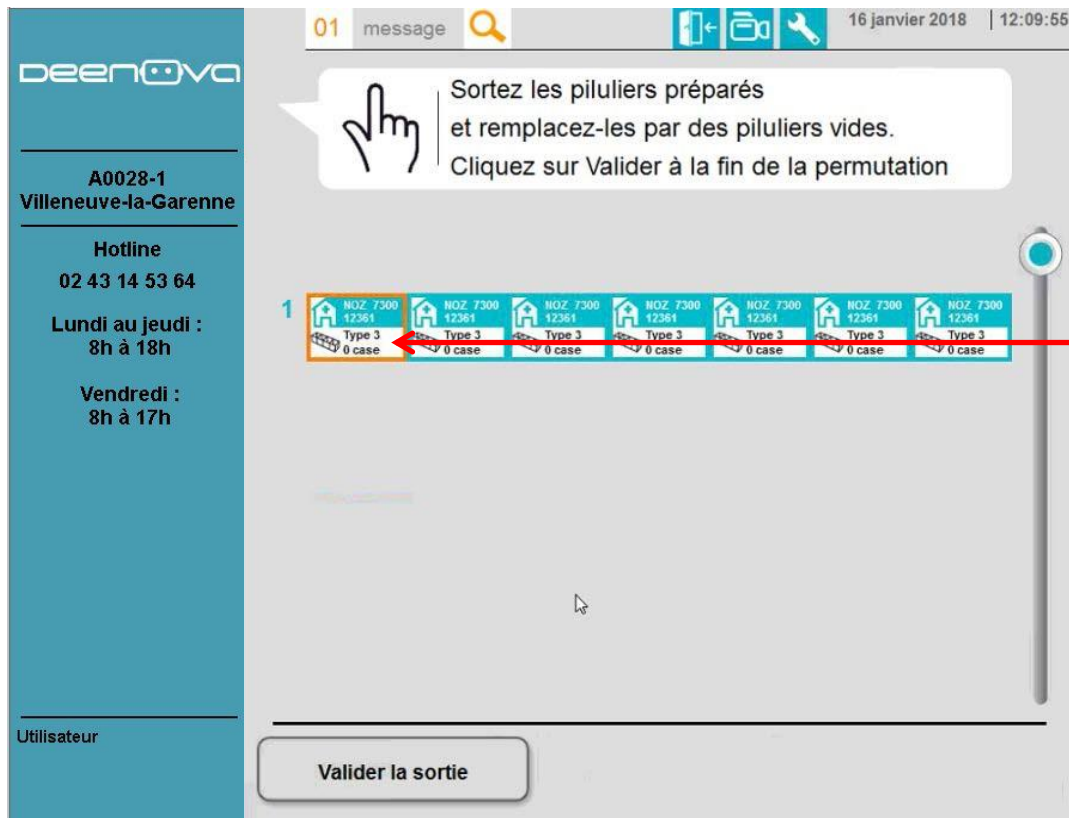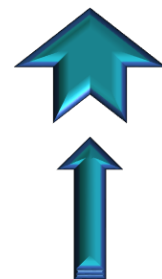

Les piluliers en orange, sont à contrôler.

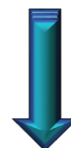

Cycle Cueillette en DN* et validation

01 message

16 février 2021 | 11:53:48
Ens. Devant Ens. Fond

deenoVA

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64
Lundi au jeudi :
8h à 18h
Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Sortez les piluliers préparés.
Cliquez sur Valider à la fin de la permutation

1	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case	NSMAS3 NS18741 Type 403 0 case
2	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15320 Type 403 0 case
3	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case	NSMAS3 NS15321 Type 403 0 case

Valider la sortie

Les piluliers en Rouge ,
indique un doublon
dans le pilulier.

Cycle Cueillette en DN* et validation



01 message 16 janvier 2018 | 12:10:35

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64
Lundi au jeudi :
8h à 18h
Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU

AL
Dispensation du 10/10/2017

midi du 10/10/2017


● DIFFU K 600MG GEL	1/1
● DIFFU K 600MG GEL	1/1
● LASILIX 40MG CP	0/2
● LASILIX 40MG CP	0/2
● SULFARLEM S 25MG CP	1/1
● SULFARLEM S 25MG CP	1/1

matin du 10/10/2017


● LASILIX 40MG CP	0/1
● LASILIX 40MG CP	0/1
● SULFARLEM S 25MG CP	1/1
● SULFARLEM S 25MG CP	1/1

Terminer


Dans cette exemple, ce pilulier présente une suspicion de double dose dans la case du matin.

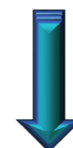

Fonctionnement

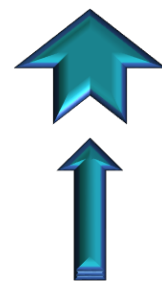

04.J - Cycle de cueillette en sortie globale

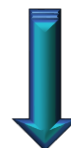

Cycle de cueillette en sortie globale



00 message

16 janvier 2018 | 11:42:57

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Choisissez les services à lancer

Unité CHA_3009_BLE :
40 préparations 19 piluliers 3 lits 7 jours


Unité PUI_RAYON :
300 préparations Cueillette GLOBALE

Abandon Confirmer Effacer la sélection


Les sorties globales se présentent de la même façon que les cueillettes normales.

A ceci prêt :

Cueillette GLOBALE

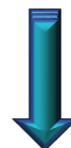

Cycle de cueillette en sortie globale

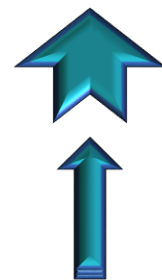


Avant de lancer une cueillette globale, il faut comme pour une cueillette normale :


Vérifier le facing des boites PASS.

Vérifier les emplacements bloqués.

Vérifier les taquins.

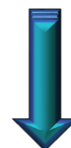


Cycle de cueillette en sortie globale

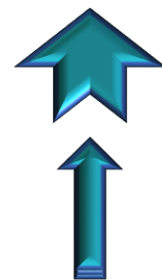

Il est surtout important de mettre des boîtes PASS vides aux emplacements dit de retour produits.

En effet, ces boîtes seront utilisées pour la cueillette globale.

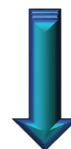

Cycle de cueillette en sortie globale



00 message

16 janvier 2018 | 11:47:12

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Choisissez les services à lancer

Unité CHA_3009_BLE :	586 préparations	88 piluliers	10 lits	63 jours	
Unité PUI_RAYON :	300 préparations	Cueillette GLOBALE			1


Abandon Confirmer Effacer la sélection

Après avoir placé les boîtes PASS vides :


Fermer la porte.

Appuyer sur la ligne de la sortie globale à effectuer.


Puis appuyer sur «Confirmer».

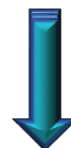



Cycle de cueillette en sortie globale

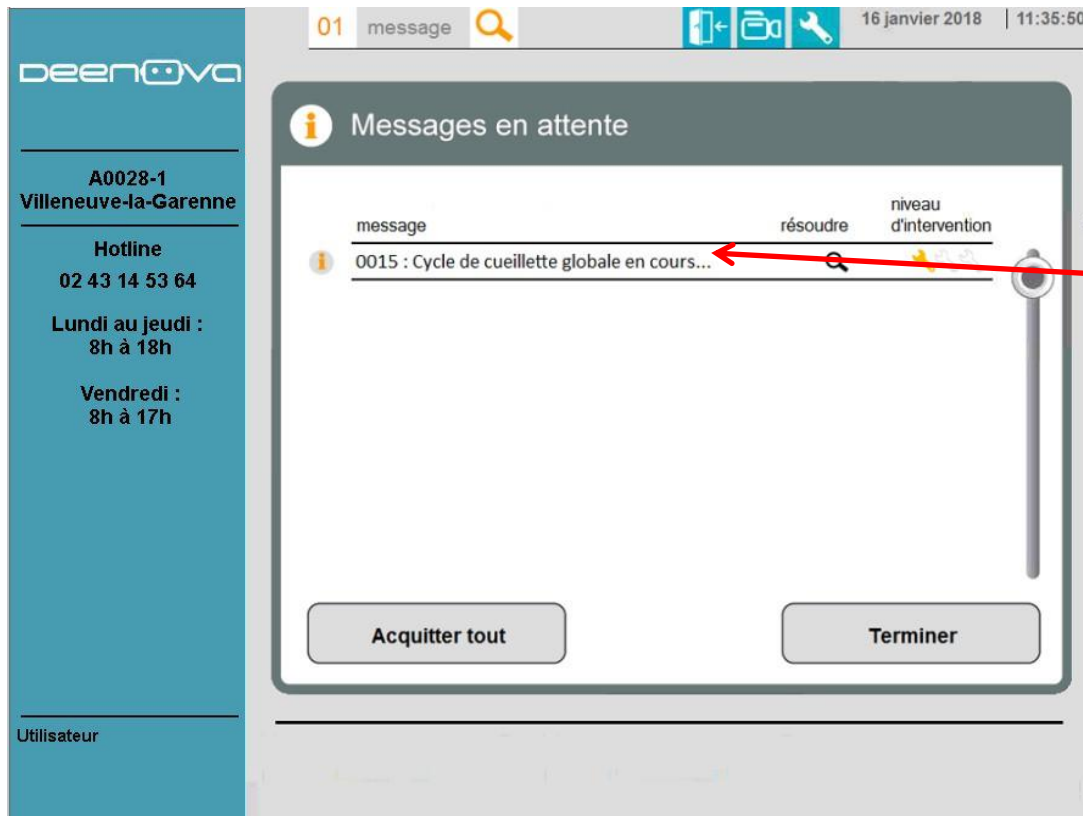


Pendant une sortie globale, le message suivant est inscrit dans la barre des messages.

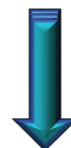


Cycle de cueillette en sortie globale

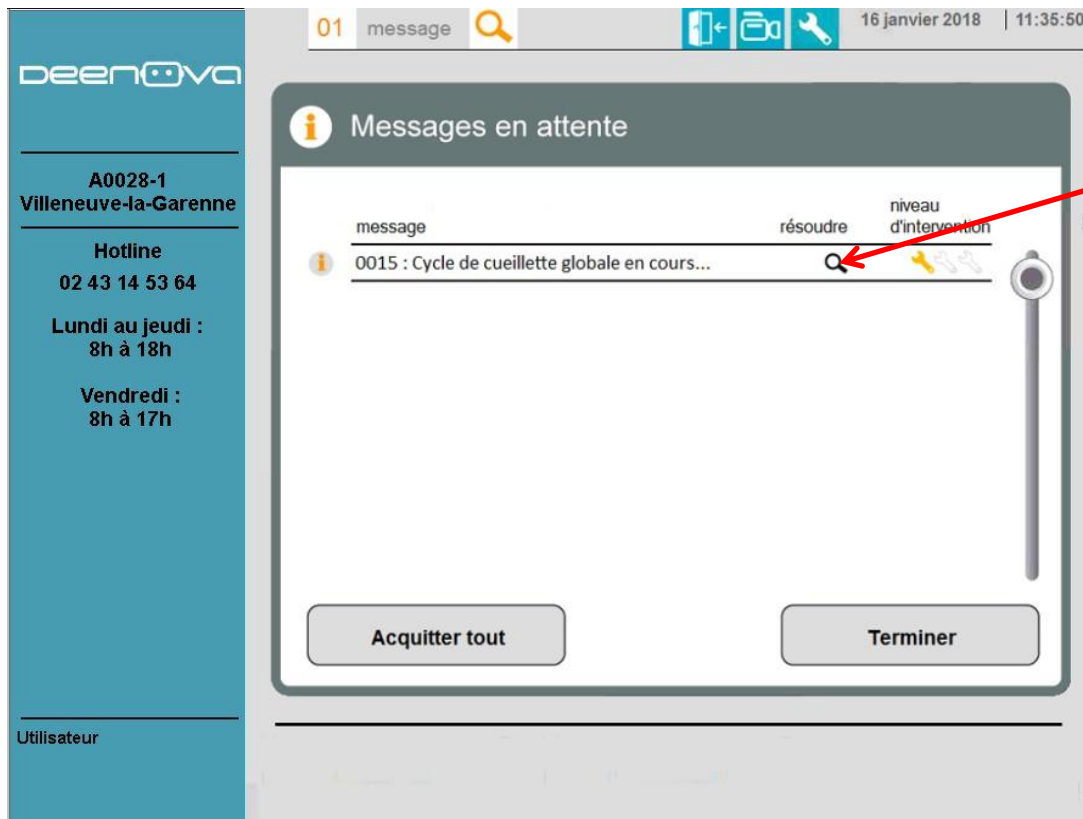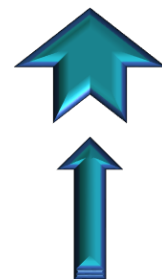

Appuyer sur la loupe, pour afficher le message et sur "Abandon" dans celui-ci pour arrêter la sortie globale.

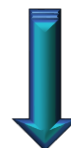


Cycle de cueillette en sortie globale

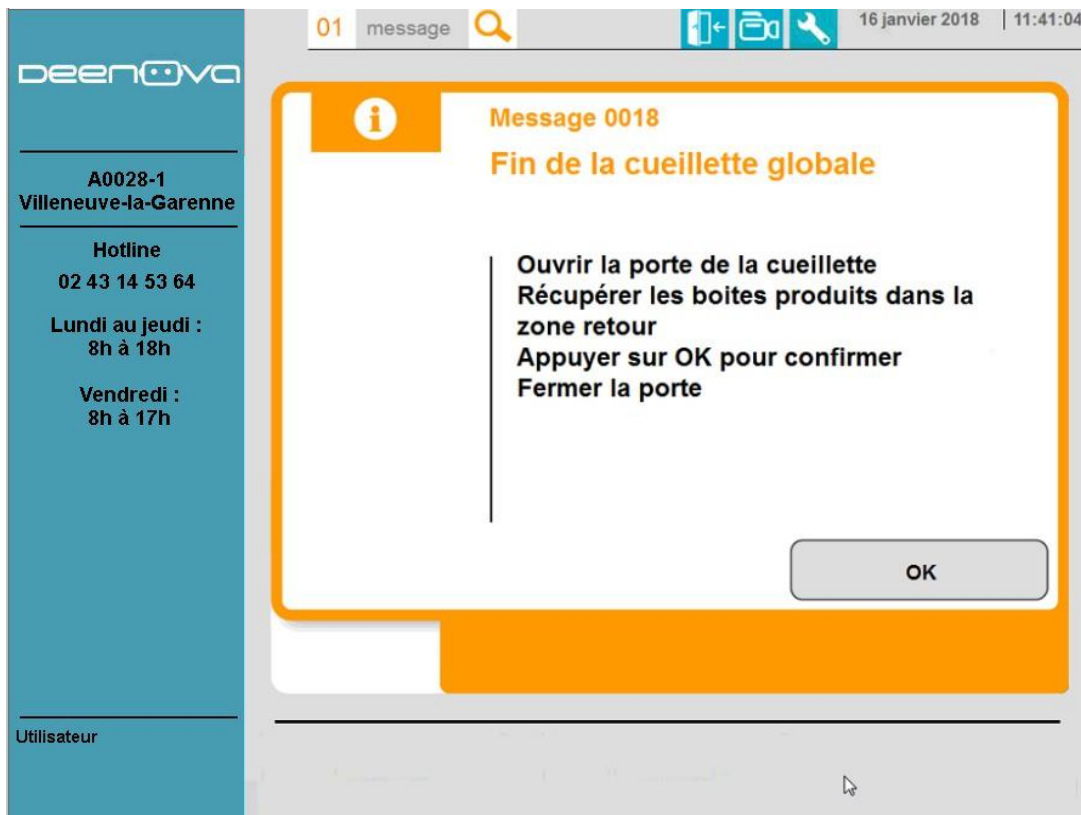


En fin de cueillette globale.
Ce message vous invite à récupérer les boites produits dans la zone retour.

Confirmer la récupération des boites en appuyant sur OK.

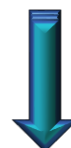

Cycle de cueillette en sortie globale

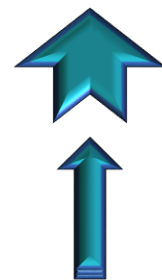

00 message 16 janvier 2018 | 12:03:06

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur




Choisissez les services à lancer

	Unité CHA_3009_COQ : C_BERE_COQ	3
	1202 préparations 105 piluliers 13 lits 41 jours	
	Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON	1
	4153 préparations 98 piluliers 11 lits 41 jours	
	Unité NOZ_7300_JAU : N_CHES_JAU	5
	88 préparations 7 piluliers 1 lit 7 jours	
	Unité PUI_RAYON :	6
	300 préparations Cueillette GLOBALE	


Abandon Confirmer Effacer la sélection

Remarque :


Lors d'une sélection multiple la sortie globale sera toujours faite en dernier.

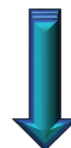


Fonctionnement

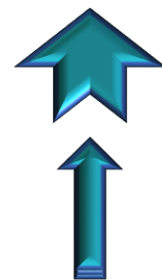

04.K - Cycle de retour produits

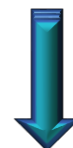

Cycle de retour produits

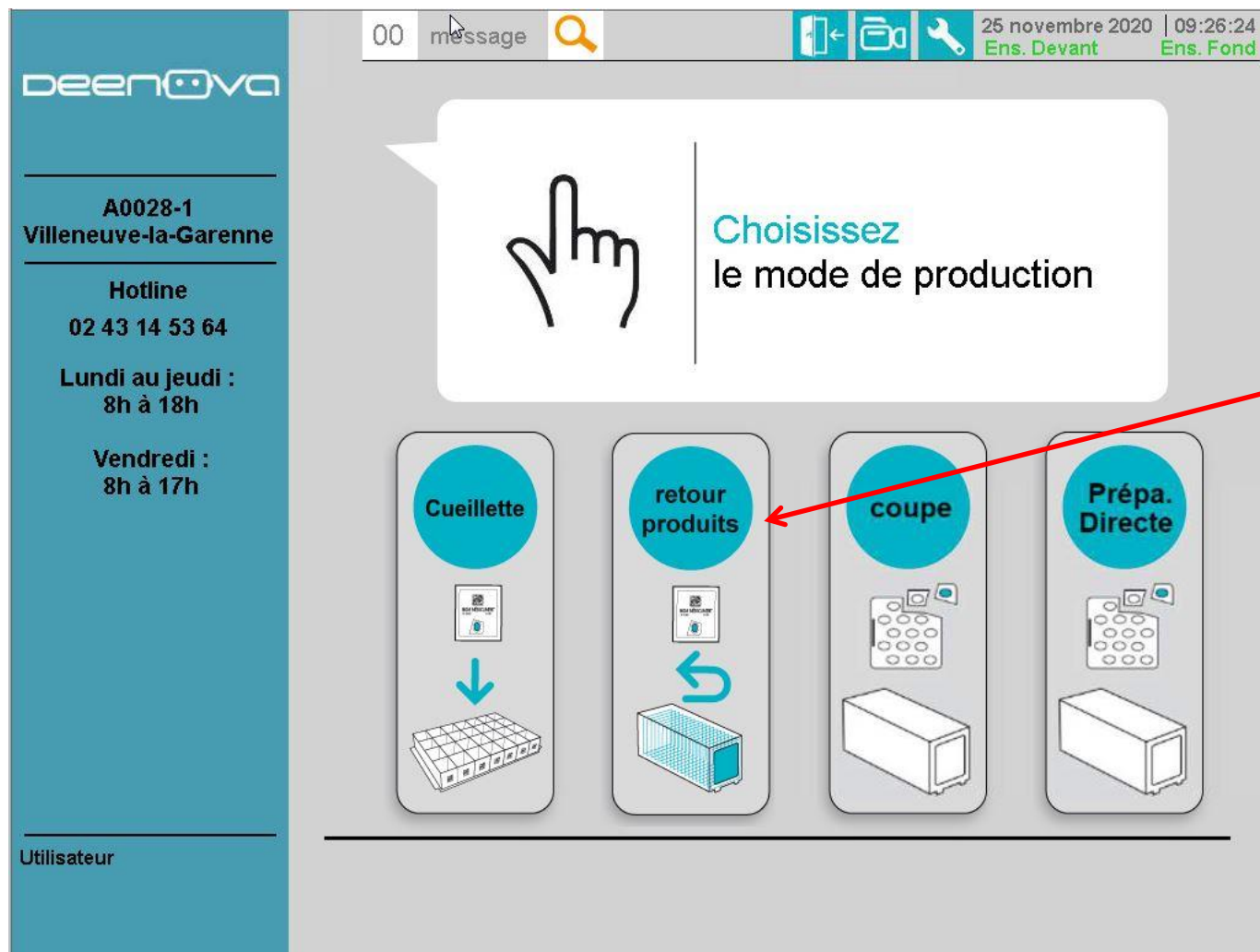

Appuyer sur « retour produits », pour lancer un rangement automatique des produits que l'on souhaite réintroduire dans l'automate.

Cycle de retour produits

00 message

31 janvier 2018 | 16:25:25

deenoova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

Identifiez vous :
scannez votre badge
ou saisissez votre code

Abandon

Code d'accès

S'identifier à l'aide du badge ou avec votre « code d'accès ».

Cycle de retour produits



Cette fenêtre peut ne pas être active suivant vos paramètres Médian.



00 message

31 janvier 2018 | 16:30:08


Choisissez le service pour les retours.

- 2550 AFT AINAY 2
- 2601 UM
- 2610 UA
- 2650 USPP
- 2660 USLD
- 2661 USLD
- 2701 Séjours Thér.
- 2710 AFT BESSAIS SAN
- 2720 AFT VALIGNY-LU.
- 2750 AFT AINAY
- 2760 AFT ST BONNET
- 2770 AFT CHARENTON
- 2850 AFT AINAY 2
- 2950 AFT AINAY 3
- 3000 PHARMACIE
- 3050 AFT AINAY 4
- 4550 AFT AINAY



Abandon Confirmer Sans service

Sélectionner dans la liste le service assigné au retour produits, puis confirmer en appuyant sur le bouton.


Appuyer sur "sans service" pour une affectation automatique au stock.

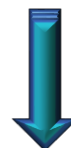


Cycle de retour produits

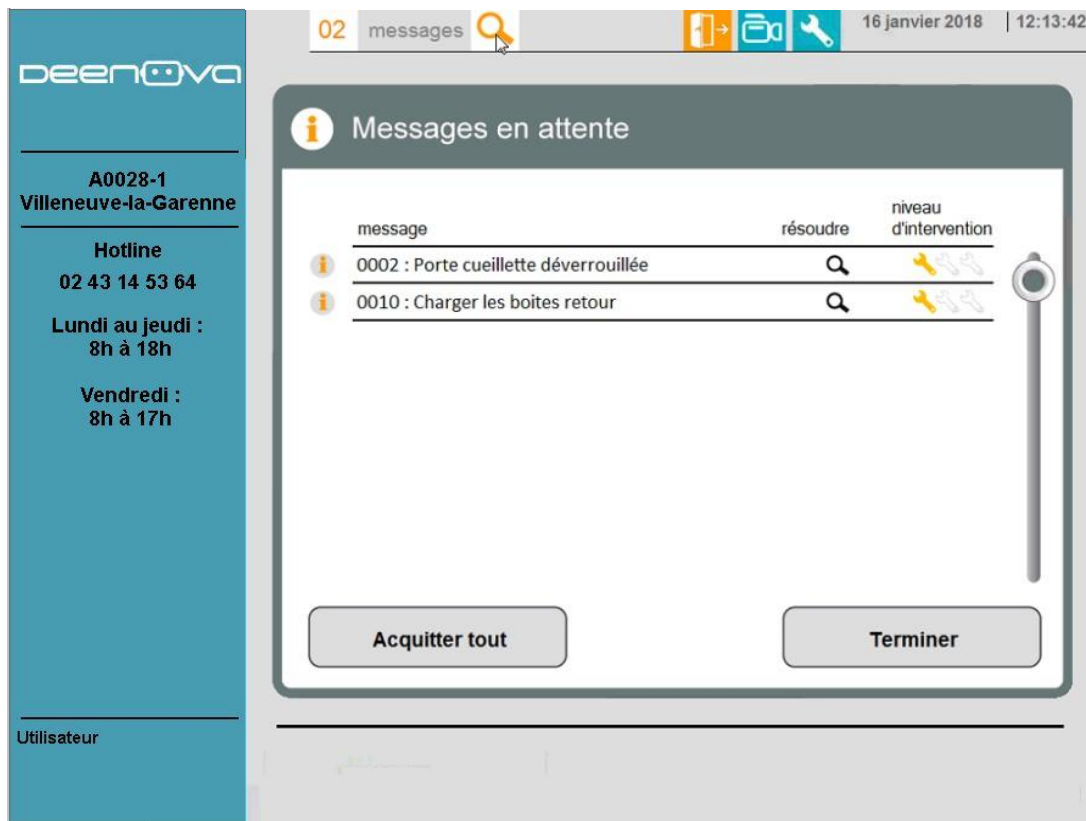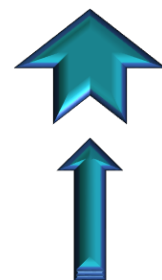


L'automate déverrouille la porte et propose de charger les boîtes PASS.

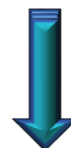


Cycle de retour produits

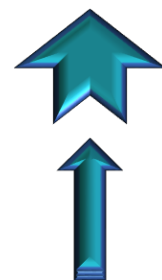


Il faut alors positionner les boîtes PASS de retour produits, préalablement chargées de doses unitaires, dans la zone appropriée.

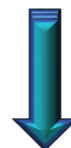



Cycle de retour produits

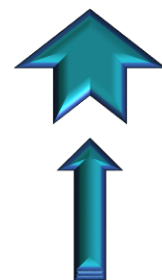


Le message suivant est alors inscrit dans la barre des messages.

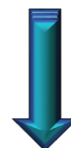


Cycle de retour produits

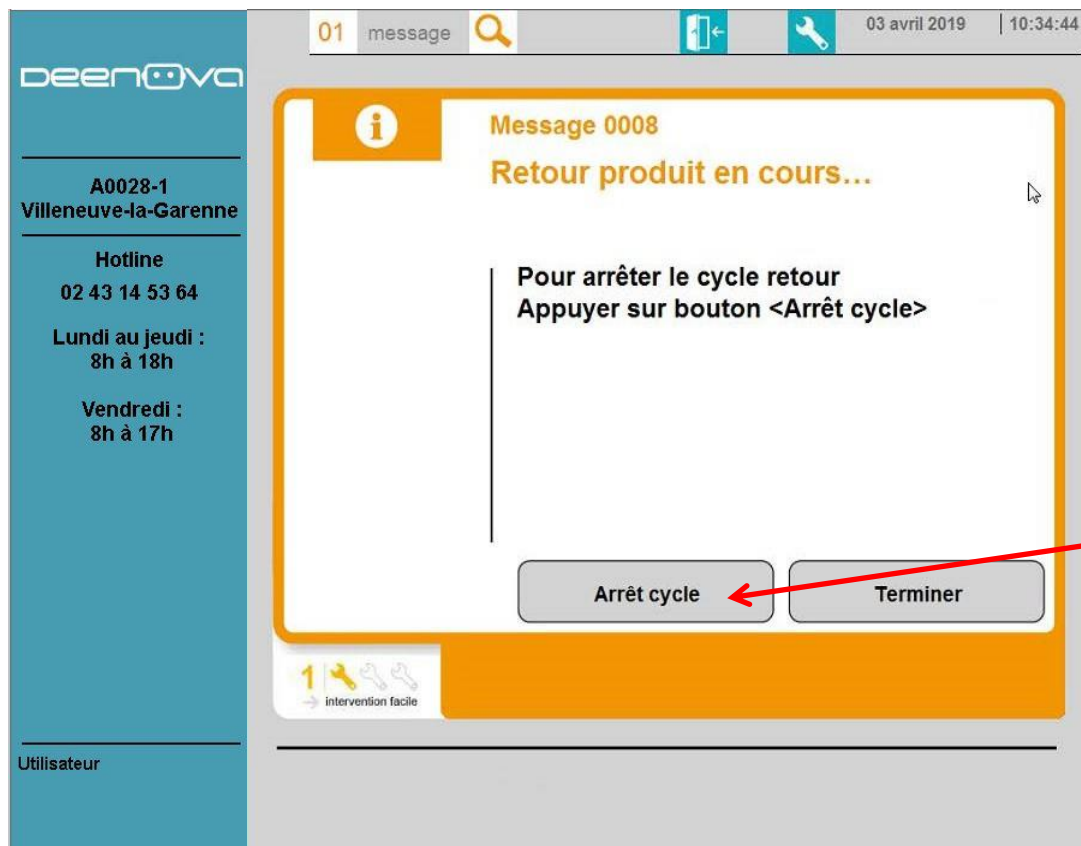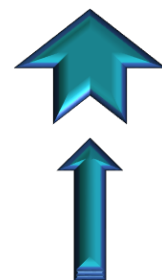


Il est possible à tout moment d'interrompre les retours, en appuyant sur « Arrêt cycle ».

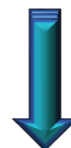

Fonctionnement

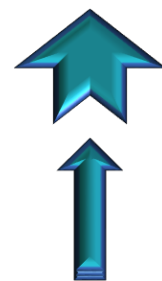

04.L - Gestion des boites rejets

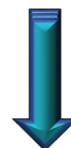

Gestion des boites rejets


Rejet cueillette



RAPPEL : Les rejets sont les sachets ou blisters extraits de la boîte poubelle .



Rejet coupe

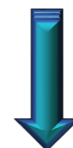

Gestion des boites rejets

Que trouve-t-on dans la boîte poubelle de coupe ?




Des sachets TEST avec ou sans comprimés ou gélules.



Gestion des boites rejets

Que trouve-t-on dans la boite poubelle coupe ?



Des sachets conformes mais rejetés par le pick and place.

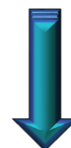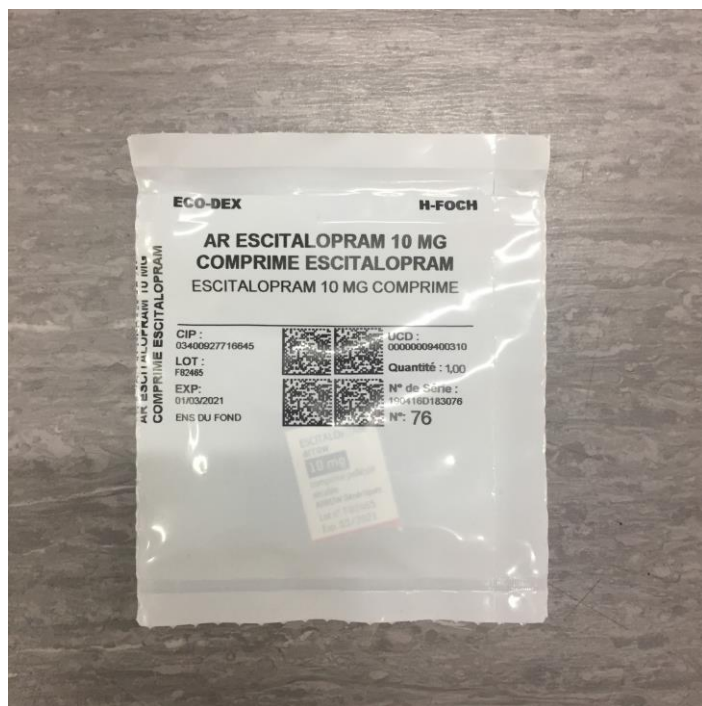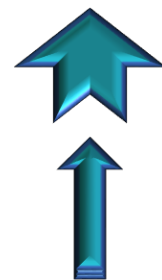

Gestion des boites rejets


Que trouve-t-on dans la boite poubelle coupe ?

Des sachets mal imprimés avec ou sans comprimés ou gélules.

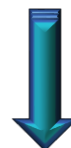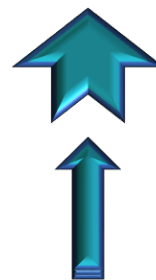


Gestion des boites rejets

Que trouve-t-on dans la boîte poubelle coupe ?

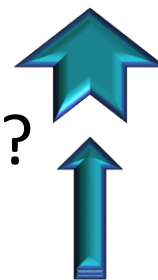



Des sachets correctement imprimés mais vides.

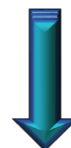

Gestion des boites rejets

Que trouve-t-on dans la boîte poubelle coupe?




Des sachets correctement imprimés avec plusieurs comprimés ou gélules.

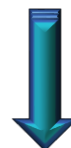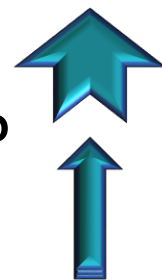


Gestion des boites rejets

Que trouve-t-on dans la boite poubelle cueillette ?

Des sachets conformes mais rejetés par le robot.

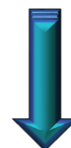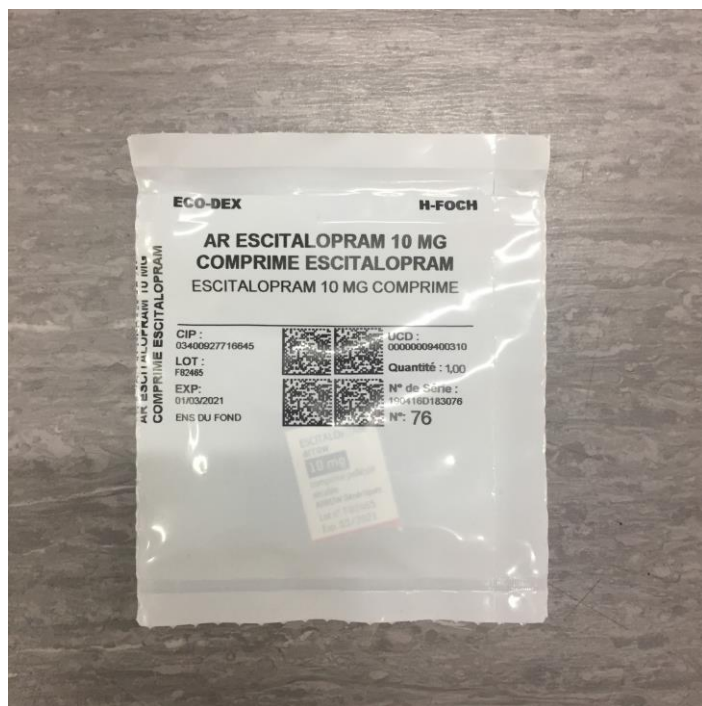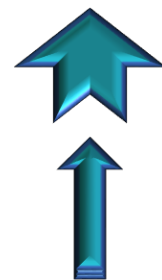

Gestion des boites rejets

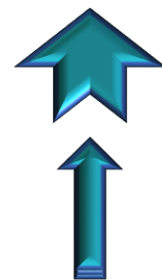

Comment gérer ces sachets ?

Les sachets TEST sans comprimés ou gélules : Poubelle.

Les sachets TEST avec comprimés ou gélules : On récupère les comprimés ou gélules.

Si les produits sont identifiables : on les garde.

Si les produits sont identifiables : **D.A.S.R.I.**

Les sachets partent à la poubelle.

Les sachets correctement imprimés mais rejetés : on les mets en boite PASS puis en retour produits.

Les sachets mal imprimés sans comprimés ou gélules : Poubelle.

Les sachets mal imprimés avec comprimés ou gélules : On récupère les comprimés ou gélules.

Si les produits sont identifiables : on les garde.

Si les produits sont identifiables : **D.A.S.R.I.**

Les sachets partent à la poubelle.

Les sachets correctement imprimés vides : Poubelle.


Des sachets correctement imprimés avec plusieurs comprimés ou gélules : On récupère les comprimés ou gélules.

Si les produits sont identifiables : on les garde.

Si les produits sont identifiables : **D.A.S.R.I.**

Les sachets partent à la poubelle.

Les sachets périmés: **D.A.S.R.I.**

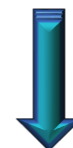

Gestion des boites rejets

Comment gérer ces Blisters ?



Pourquoi les blisters ont été rejetés ?

Les Blisters qui n'ont pas été identifiés lors de la relocalisation, ont pu être chargés dans le mauvais sens lors de l'introduction dans la trappe.



Les Blisters n'étaient pas suffisamment plat lors de l'introduction dans la trappe.

Les Blisters n'ont pas été saisis par le robot de coupe.


Ces blisters peuvent être réintroduit lors d'un nouveau cycle de coupe.

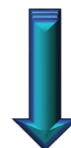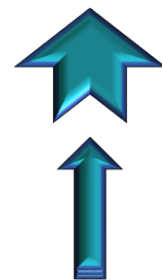


Gestion des boites rejets

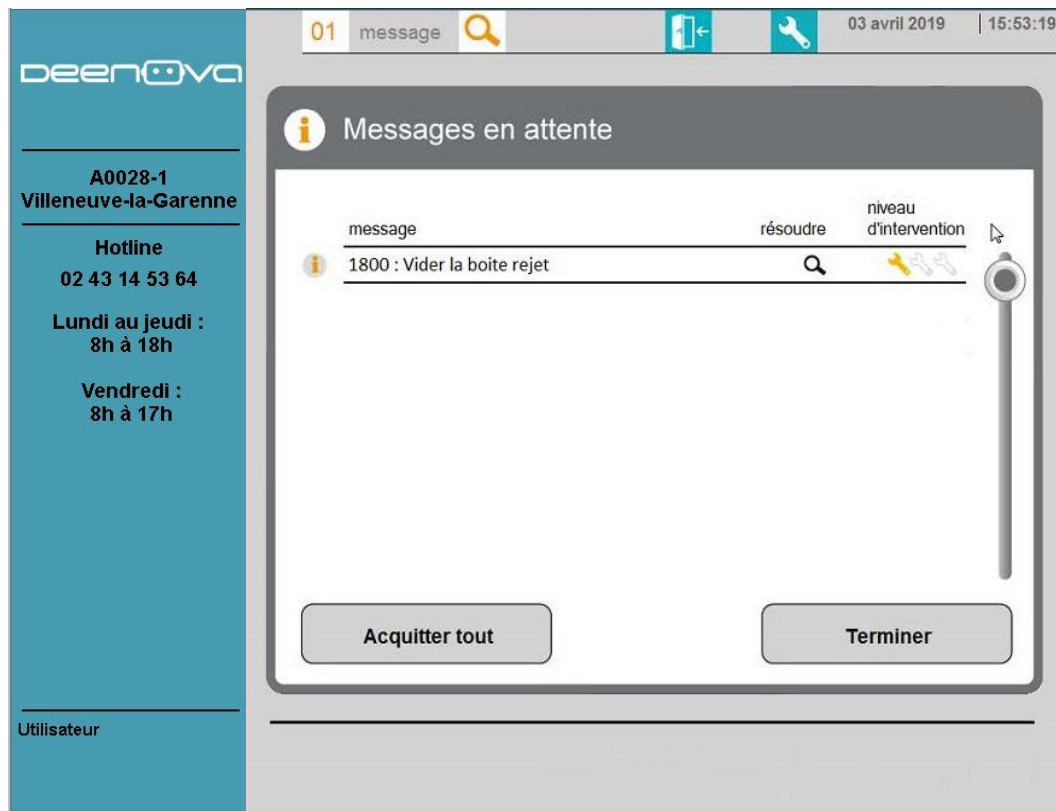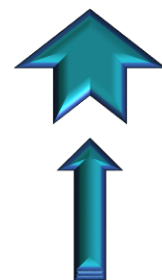


Lors de l'utilisation de l'ACCED le message suivant apparait.

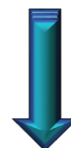


Gestion des boites rejets

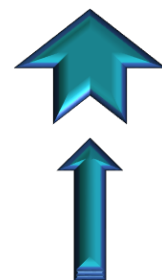


Il suffit alors de vider la boite de rejets manuellement et de confirmer en appuyant sur "Boite vide".

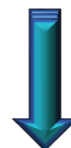

Fonctionnement

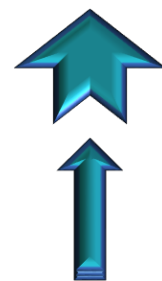


04.M - Gestion des périmés

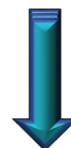


Gestion des périmés

Les produits périmés sont à sortir régulièrement.

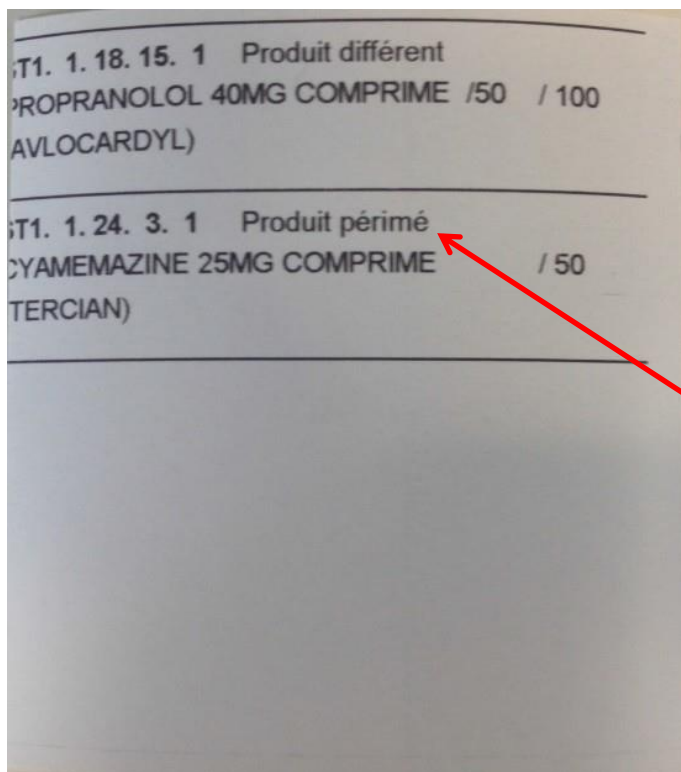



Les boites contenant des produit périmés sont automatiquement bloquées.

Produit périmé

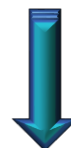

Gestion des périmés


Sortir les produits périmés :

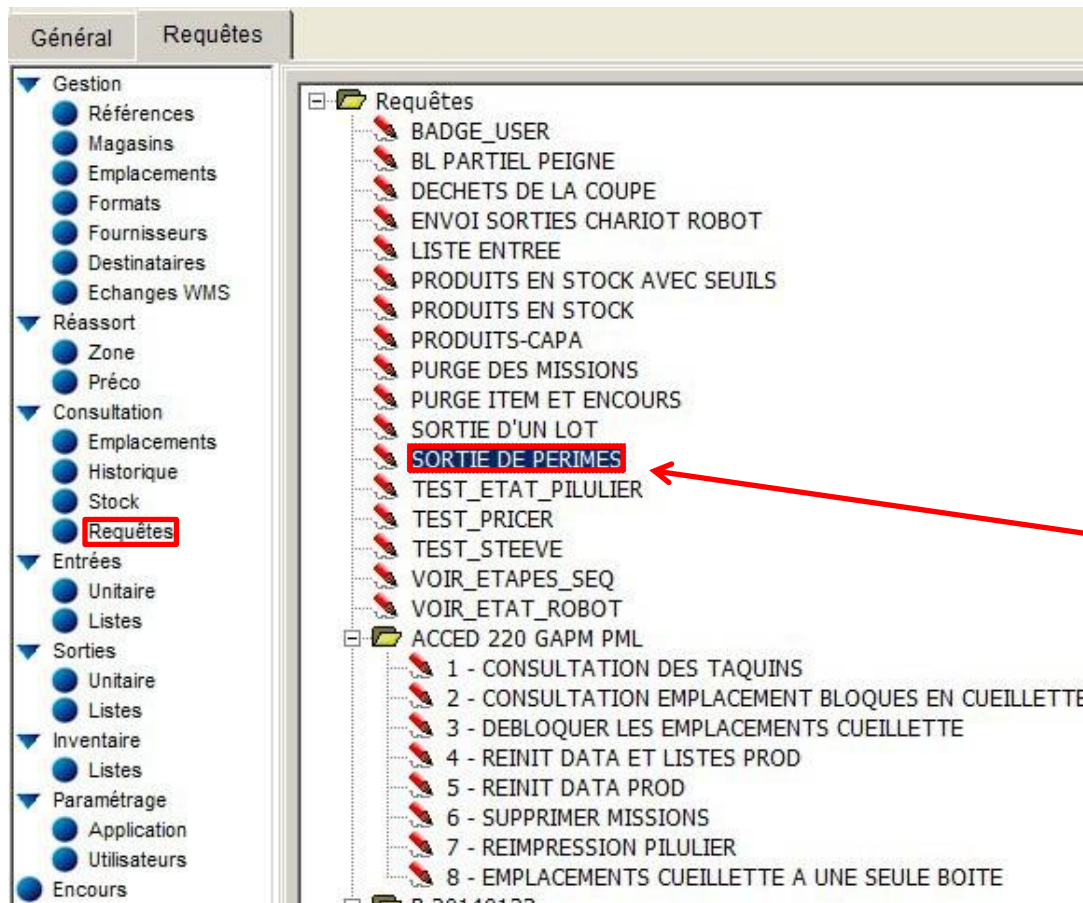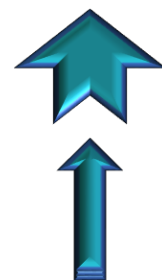

Aller dans médian
et cliquer sur :

"Requêtes"

"Sortie de périmés"

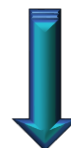

Gestion des périmés

Saisir une date pivot de péremption (M+2)




Cliquer sur "Enregistrer et Quitter".

Cliquer sur "Oui" pour créer la liste de sortie.



Gestion des périmés

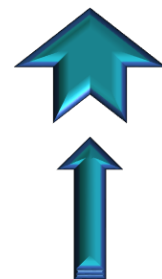

00 message     16 janvier 2018 | 11:48:16

deenova

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

 Choisissez les services à lancer

	Unité PAXED : PAXED (perimés) 75 préparations	
	Unité CHA_3009_JON : C_BERE_JON 553 préparations 75 piluliers 11 lits 7 jours	1
	Unité PUI_RAYON : 300 préparations Cueillette GLOBALE	2




Abandon


Confirmer

Effacer la sélection


Un service est alors créé, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner et de confirmer pour le lancer.

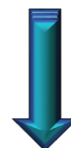

Gestion des consommables

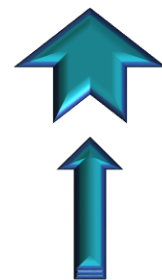

04.N - Changement des consommables

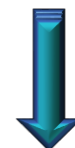

Changement des consommables




Faire une demande d'accès.



Identifiez-vous



Ouvrir la porte et sortir l'ensacheuse.

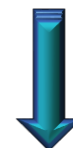


Changement des consommables

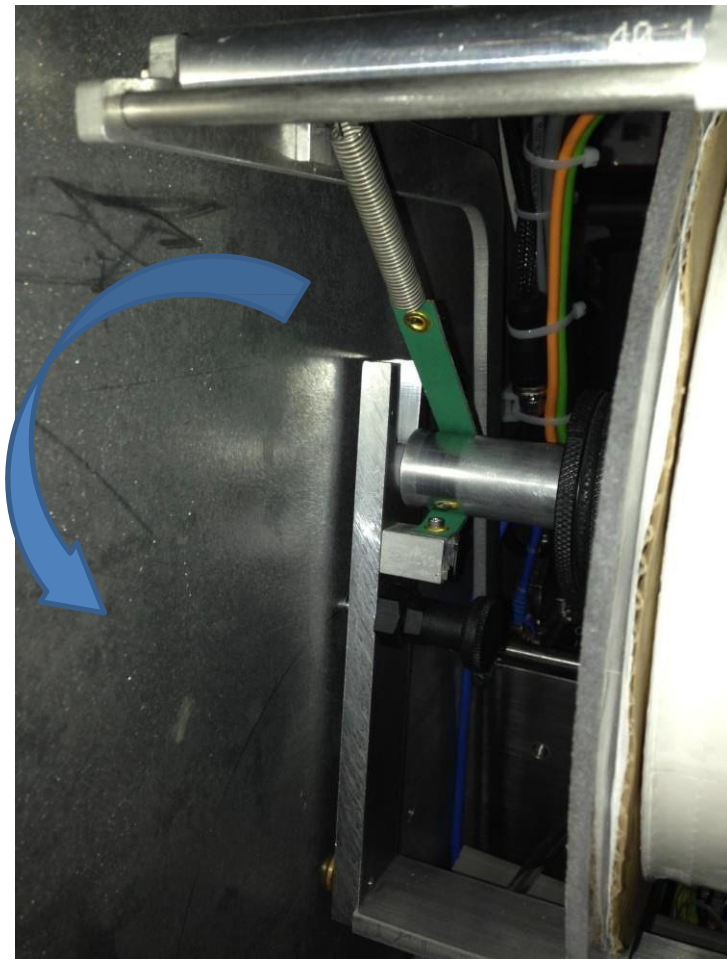
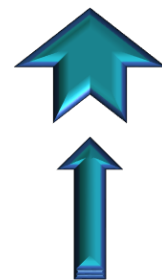


Tirer sur le loquet pour libérer le support bobine.

Faire pivoter vers le bas l'ensemble bobine et support.

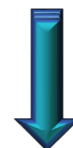


Changement des consommables

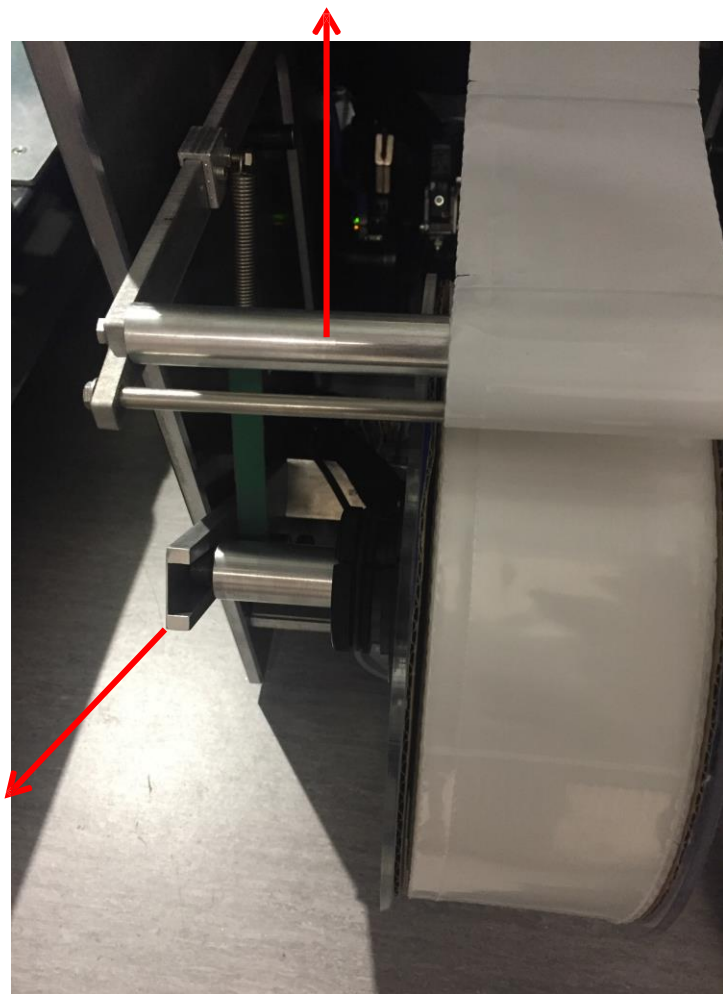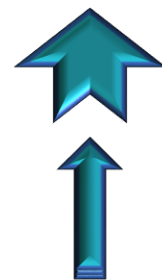


Extraire le support bobine en maintenant vers le haut les deux rouleaux tendeur.

Retirer la bobine.



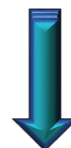


Changement des consommables



Détrompeur côté gauche

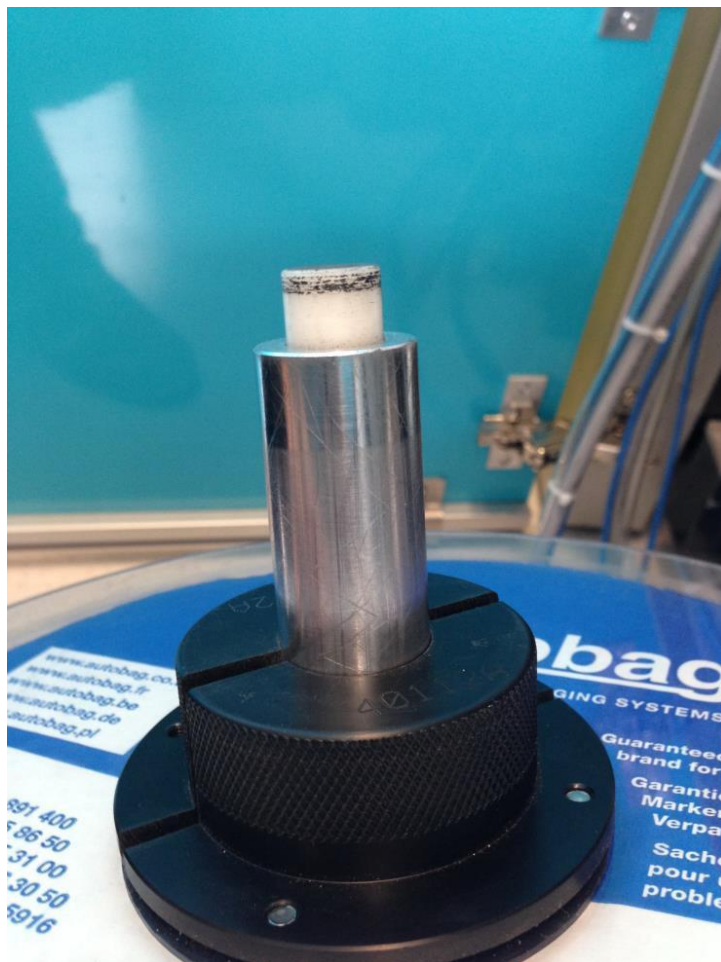

Détrompeur côté droit

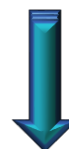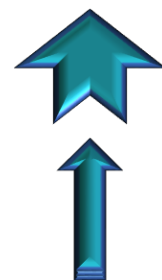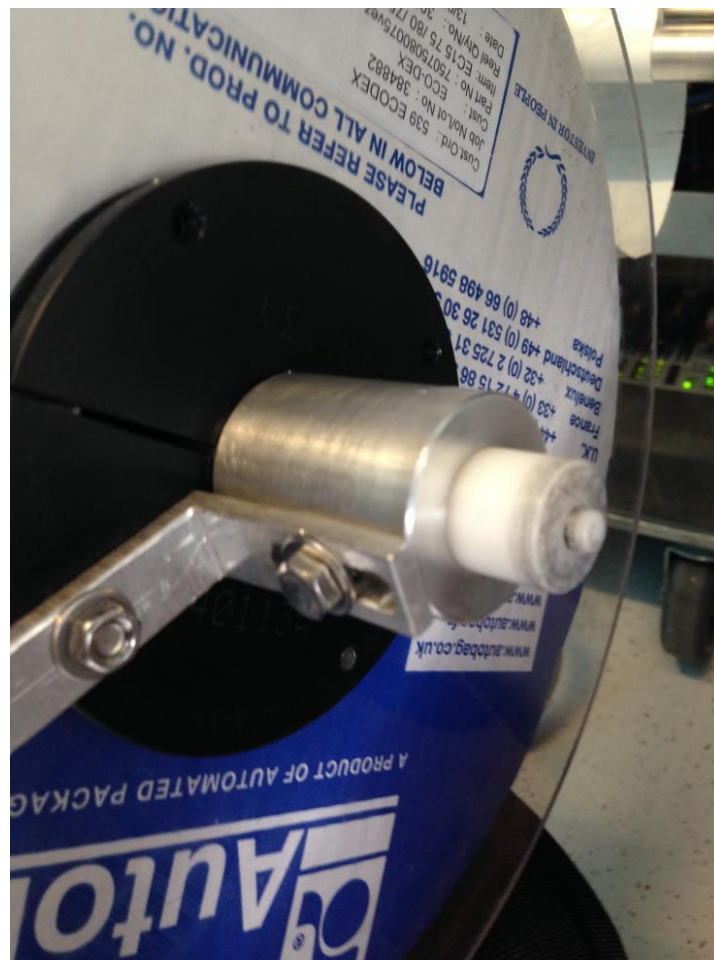


Changement des consommables

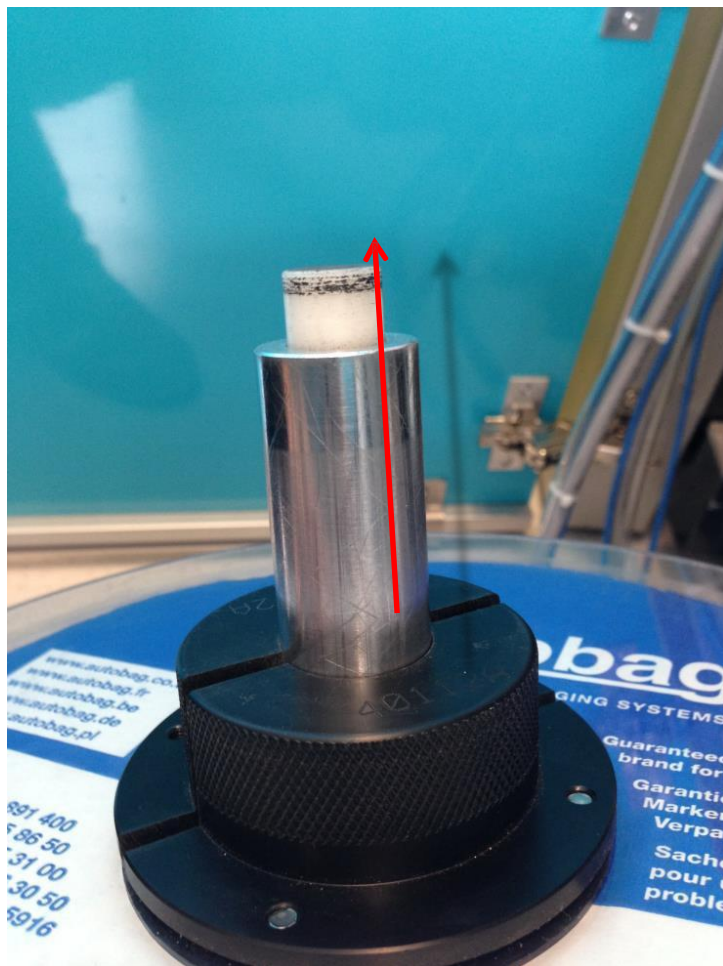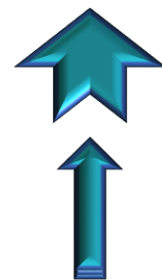



Extraire la flasque en la tirant vers le haut.

Mettre la nouvelle bobine en place.


Remettre la flasque.

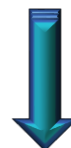



Changement des consommables

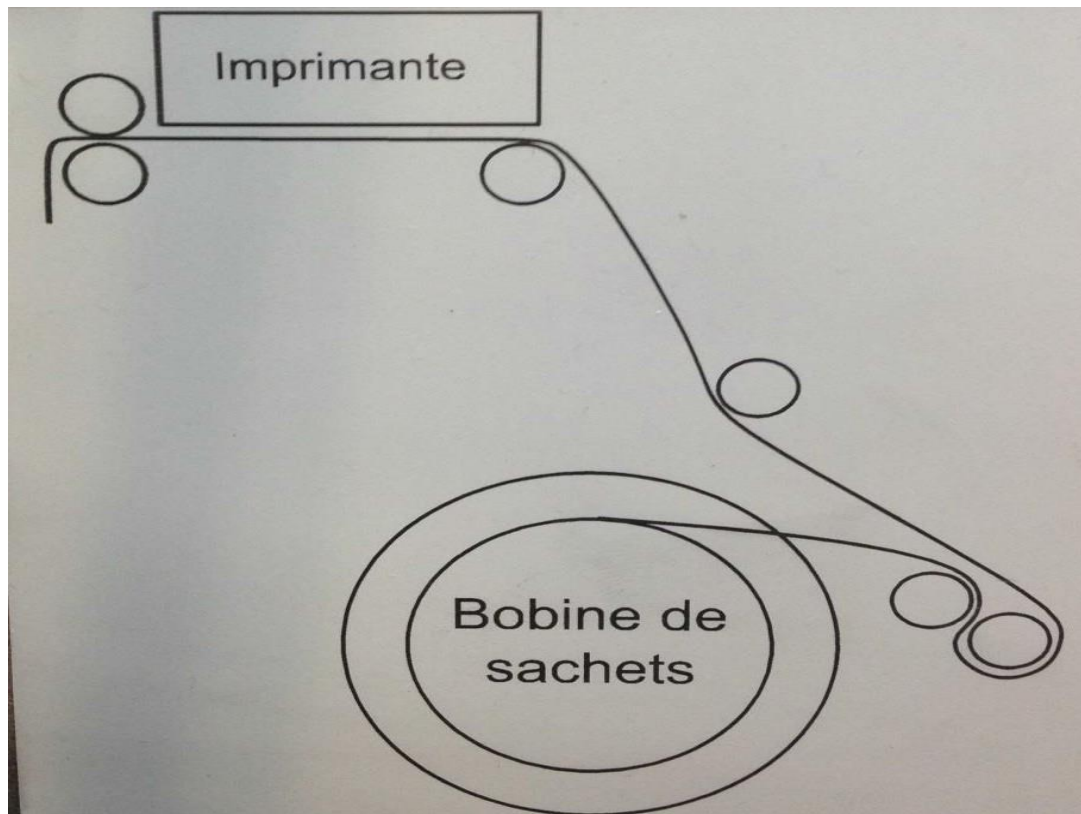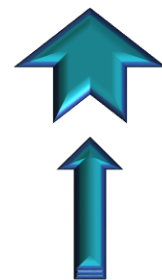

Repositionner la bobine et passer les sachets comme indiqué sur le dessin qui se trouve à droite de l'ensacheuse.

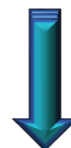

Changement des consommables

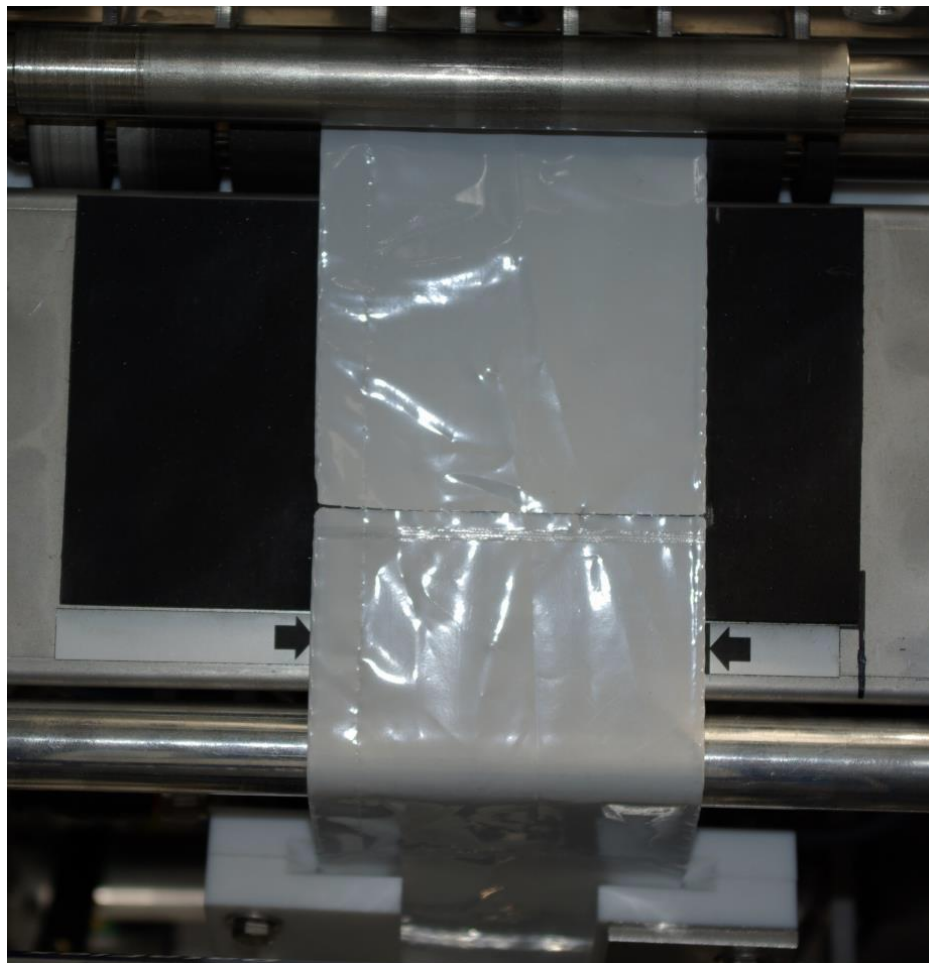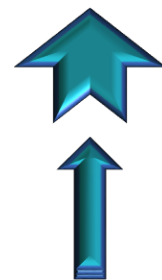


Bien passer sous l'avant dernier rouleau et dans le guide sachet.



Puis au-dessus du dernier rouleau libre.

Et enfin passer le sachet en prise dans les rouleaux d'entraînement.

Remettre l'ensacheuse en place puis refermer la porte.

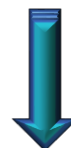


Changement des consommables

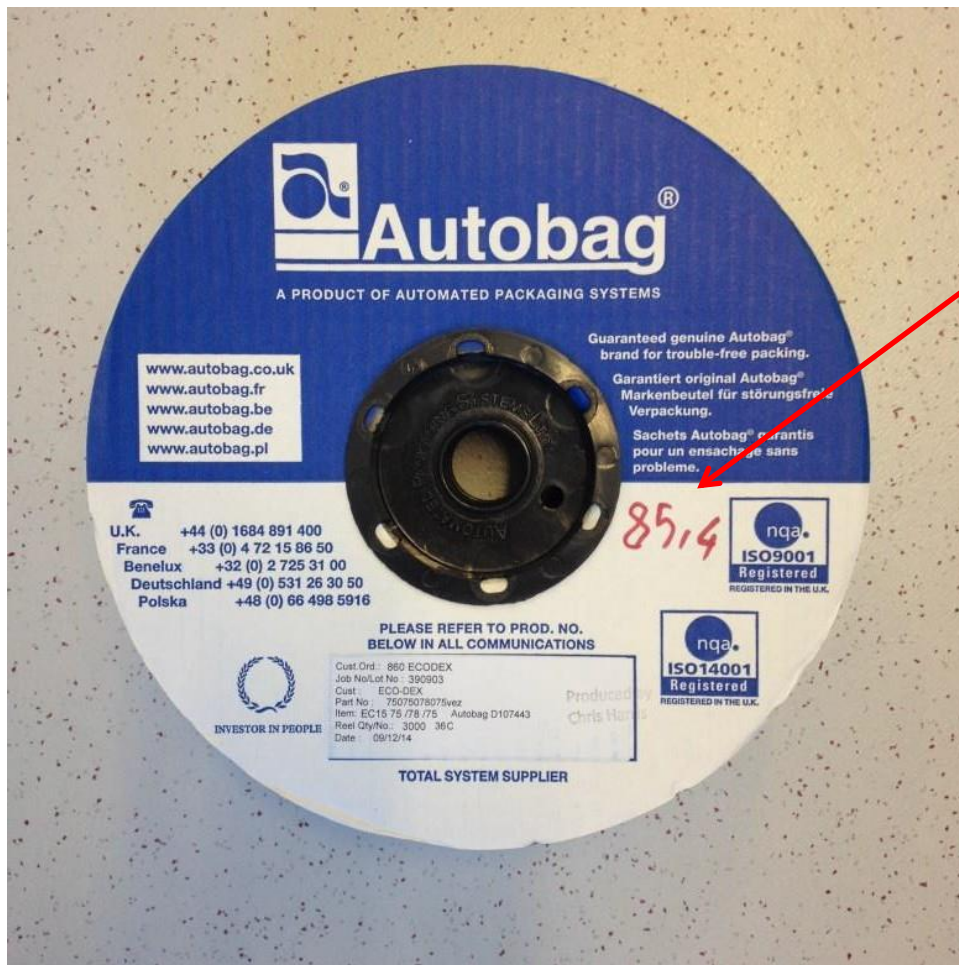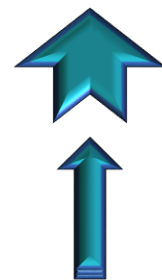


Lors d'un changement de bobine, il faut relever la valeur sur le coté de la bobine.

Si la valeur n'est pas présente il faut mesurer un des sachets

Dans l'exemple 85,4. Pour cette valeur nous retiendrons 85mm.

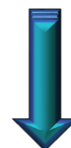

Changement des consommables

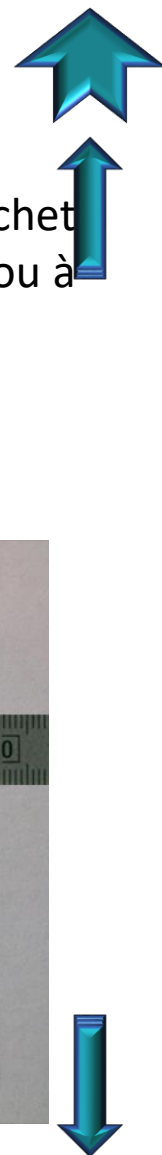

Dans cette exemple le sachet test mesure 84 mm.

Vous pouvez également prendre un sachet du nouveau rouleau mesurer au réglet ou à la règle.



Changement des consommables

deenoVA

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur

MENU SYSTEME

Général | Chargeur | Suivi de prod. | Robot | Pilotage manuel | Ens de devant | Ens du fond | Automatisation

Sélection manuelle

Aspiration plaque	Info Arrêt EV Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche EV Marche
Aspiration ventouse	Info Arrêt EV Arrêt	RECULER	AVANCER	Info Marche EV Marche
Cuillère	Info Fermée EV Fermée	FERMER	OUVRIR	Info Ouverte EV Ouverte
Scellage sachet	Info Recul EV Recul	RECULER	OUVRIR	Info Avance EV Avance
Contre partie	Info Recul EV Recul	ARRET	MARCHE	Info Avance EV Avance
Soufflage	Info Arrêt EV Arrêt	ARRET	MARCHE	Info Marche EV Marche
Chauffe	Info Pas OK Arrêt	ARRET	MARCHE	Info OK Marche

Cycle test

Test ensacheuse ☐ Pas à pas ☐ Cycle test en continu ☐


Longueur sachet

87 Valider Annuler



MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

Cette valeur est à reporter dans le menu système sous l'onglet de l'ensacheuse correspondante.

Sur cette ensacheuse l'ancienne valeur est de 87mm.

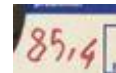Pour :  La valeur 85 est à reporter ici.


Changement des consommables

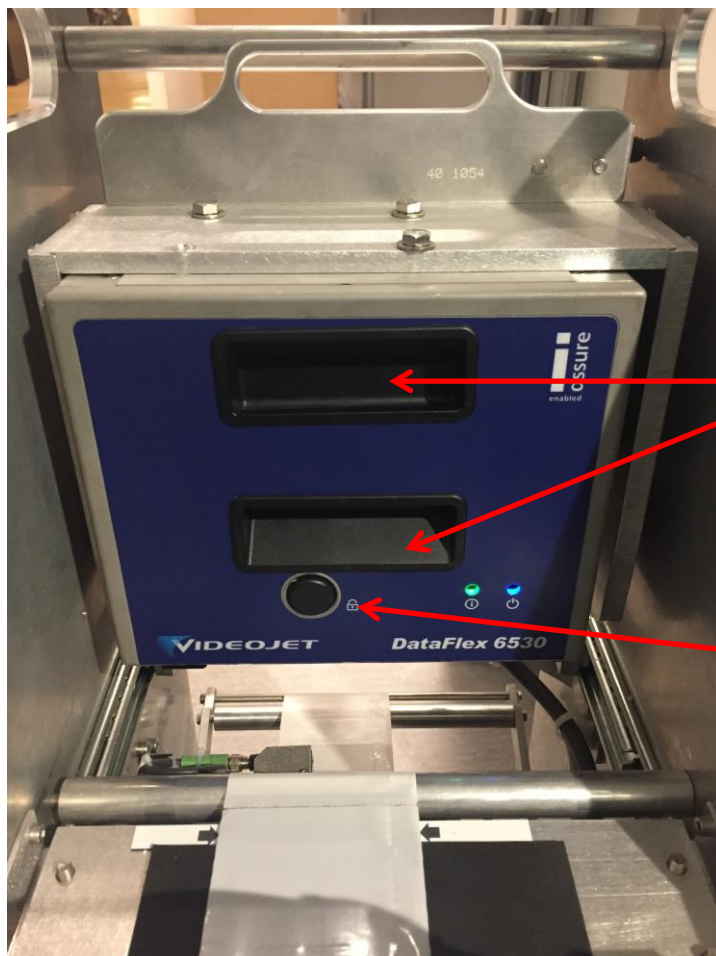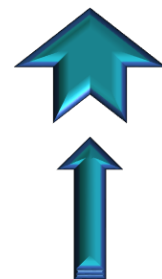



Pour ouvrir et retirer la cassette de l'imprimante VIDEOJET :

Maintenir avec une main par les deux supports.


Appuyer sur le bouton en tirant sur la cassette.

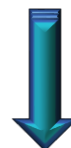

Changement des consommables

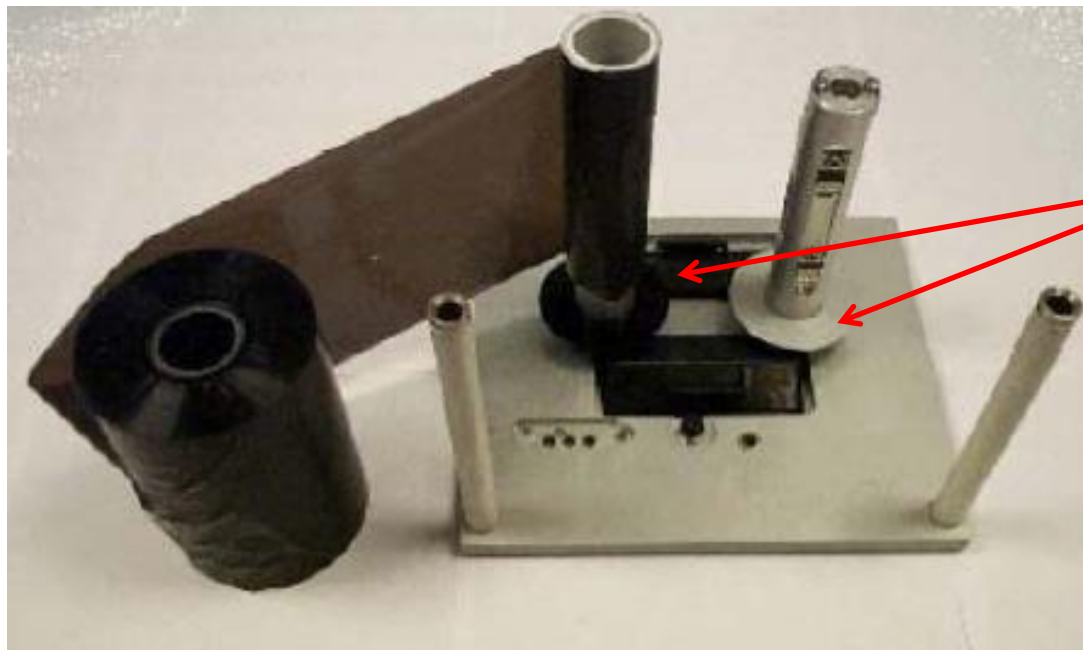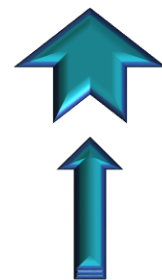


Extraire le ruban usagé
à l'aide des flasques.

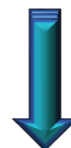

Changement des consommables



Mettre en place le nouveau ruban en respectant le cheminement et en plaçant toujours la partie neuve du ruban sur la rondelle noire.

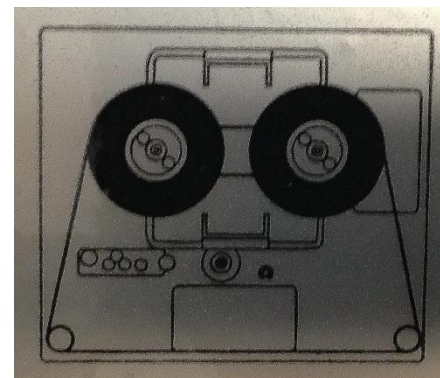


Mnémotechnique :


Ruban noir = rondelle noire.

Papier argenté = rondelle argentée.

Changement des consommables

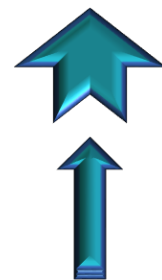


S'assurer que le ruban soit tendu.


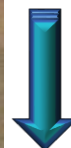


Changement des consommables


S'assurer que le ruban ne soit ni plié ni froissé.

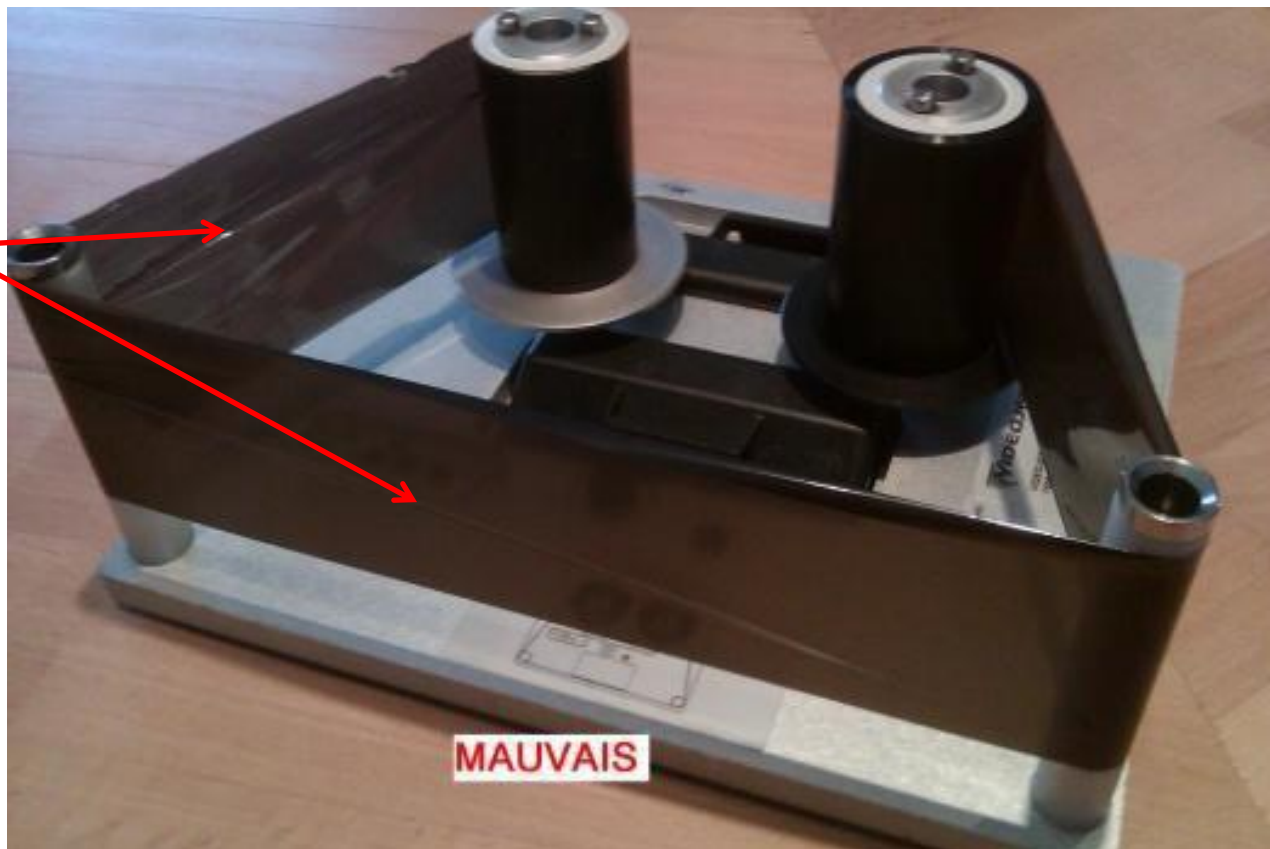

Changement des consommables

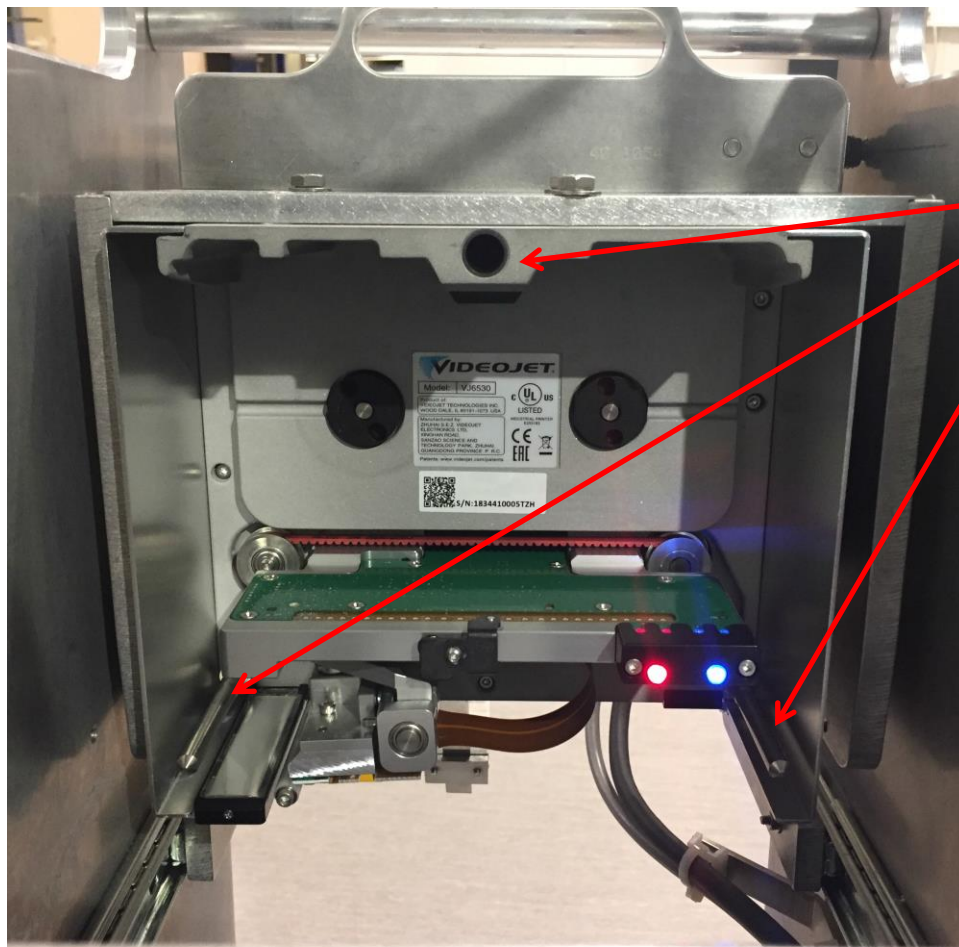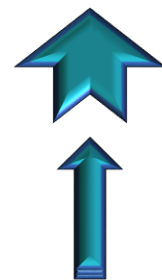

Remettre la cassette en place en se servant des trois guides.

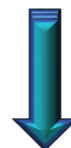


Changement des consommables




Pousser la cassette à fond jusqu'au clic.


Changement des consommables

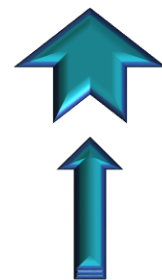


Lors de l'introduction de la cassette dans l'imprimante, celle-ci fait du bruit, c'est le réglage de tension de ruban. Toujours attendre la fin du réglage de tension avant de remettre l'imprimante en position de marquage.

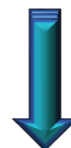



Gestion des consommables

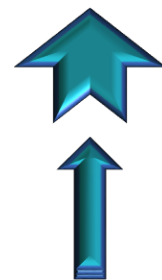

04.0 – Ticket imprimante

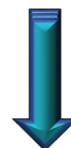


Ticket imprimante

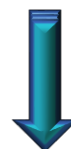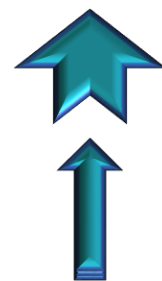

Ticket imprimante

Les imprimantes a gauche du robot de cueillette .

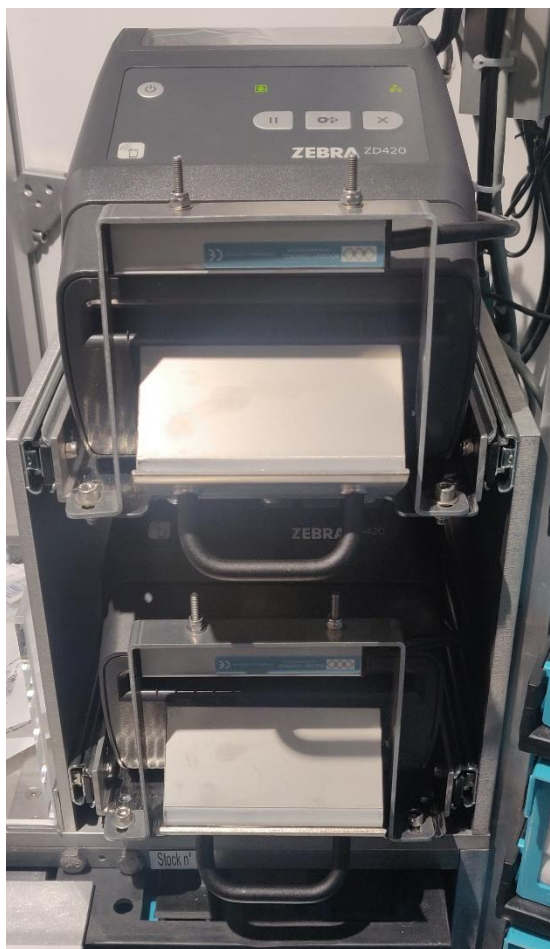

Ticket imprimante

Le ticket imprimante sert après la validation du pilulier à son identification.

On y retrouve :

- Les informations patient : Le Nom.
La date de naissance.
Le numéro IPP.
- Le service.
- Le numéro de chambre.
- Le numéro du pilulier.
- Le contenu du pilulier.
- La(les) date(s) de dispensation(s).
- La date d'impression du ticket.


(Les informations présentes sur le ticket sont en fonction de chaque site).

- Un code barre peut être affiché si besoin.


coucher	Samedi 16/03/2019	
SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX		2/ 2
soir	Samedi 16/03/2019	
SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX		2/ 2
midi	Samedi 16/03/2019	
SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX		2/ 2
matin	Samedi 16/03/2019	
SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX		3/ 3

PATIENT	
SERVICE	
Né(e) le :	
Ordonnance : 22581507	sam 16/03/2019
IPP : 7561	
Pilulier : 40310064	Chambre : 715
Imprimé le : / / 2019	N° 1/1


Ticket imprimante

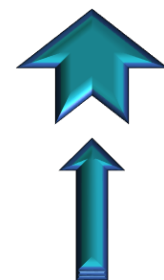

Commandes de l'interface standard

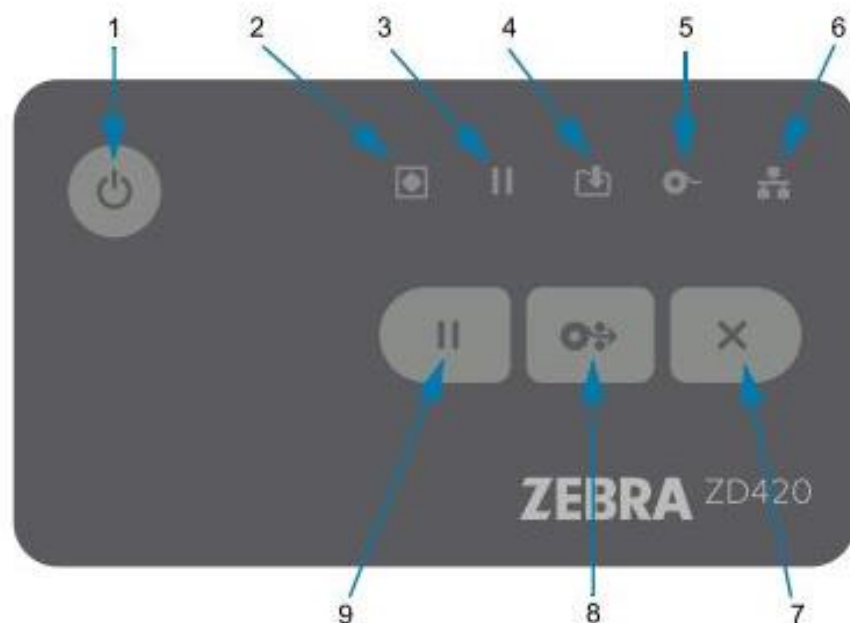

- 1 : bouton marche arrêt
- 2 : indicateur d'état
- 3 : Voyant pause
- 4 : indicateurs des données
- 5 : indicateur des consommables
- 6 : indicateur réseau
- 7 : bouton annuler
- 8 : bouton avance
- 9 : bouton pause

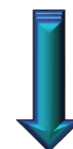

Ticket imprimante

Indicators - Indicateurs - Indicadores					
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	
					Ready Lista Prêt
					Paused En pausa En pause
					Cover Open Cubierta abierta Capot ouvert
					Media Out Sin papel Fin de papier
					Network Error Error de la red Erreur réseau
					Out of Memory Falta de memoria Mémoire saturée
					Printhead Overtemp Error Error cabezal de impresión muy caliente Erreur de tête d'impression en surchauffe



Pause
Pausa
Pause



Feed
Alimentación
Avance



Cancel
Cancelar
Annuler




Configuration Report
Informe de configuración
Rapport de configuration



Smart Calibration
Calibración inteligente
Calibrage intelligent


Ticket imprimante

Votre imprimante


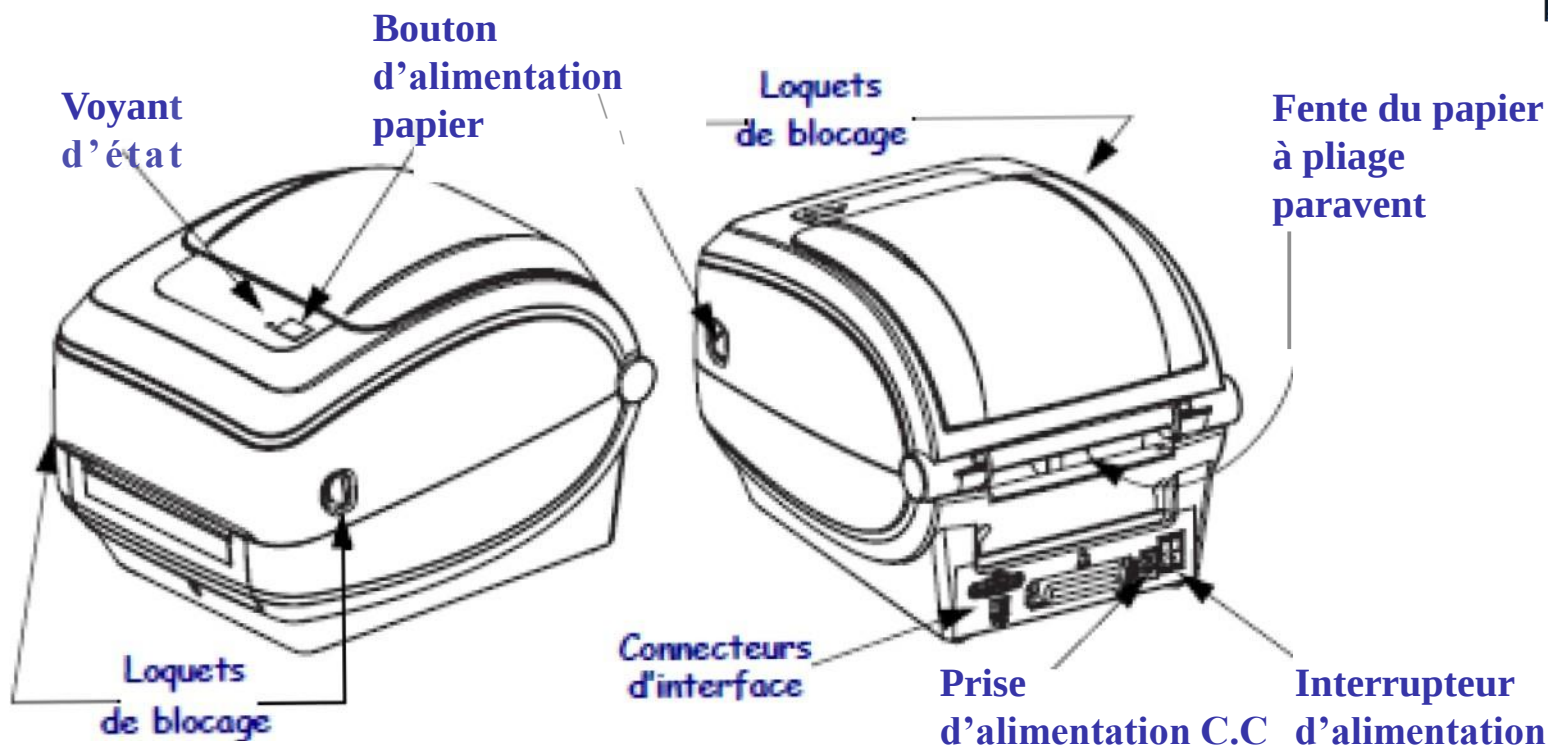


Ticket imprimante

Ouverture de l'imprimante.

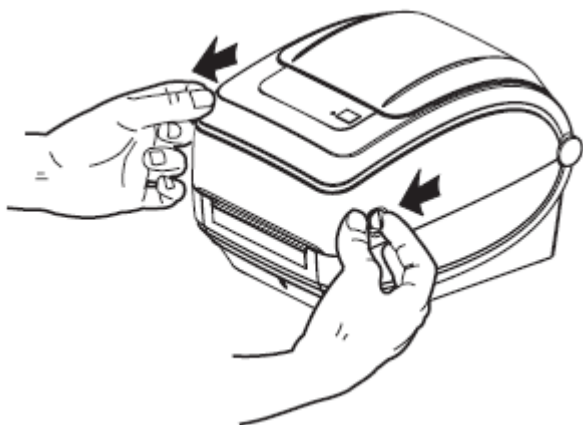

Vous devez ouvrir l'imprimante pour accéder au compartiment de papier. Tirez les loquets de blocage dans votre direction et levez le couvercle. Assurez-vous qu'aucun composant ne s'est détaché ou n'est endommagé dans le compartiment de papier.

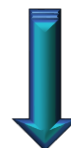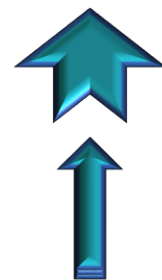



Ticket imprimante

Préparation du papier


Le rouleau de papier doit toujours être chargé dans l'imprimante de la même manière, qu'il soit enroulé vers l'intérieur ou l'extérieur.

Retirez la longueur extérieure de papier. En effet, pendant son transport, sa manipulation ou son stockage, le rouleau peut avoir accumulé de la saleté ou de la poussière.

En retirant la longueur extérieure de papier, vous évitez d'entraîner de la matière adhésive ou du papier sale entre la tête d'impression et le contre-rouleau.

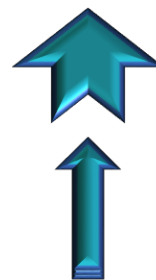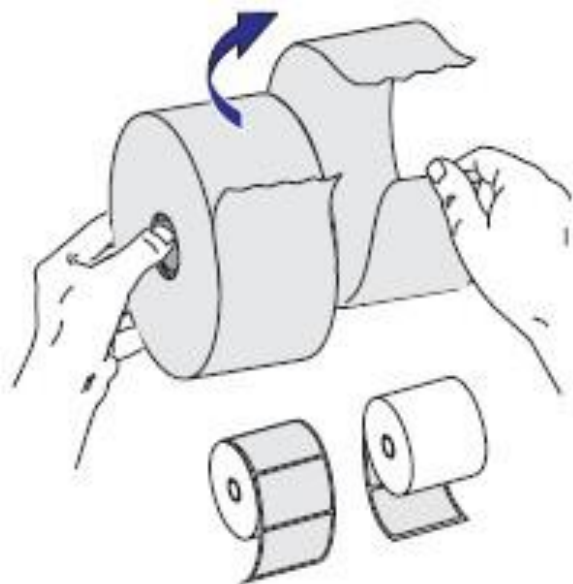

Ticket imprimante

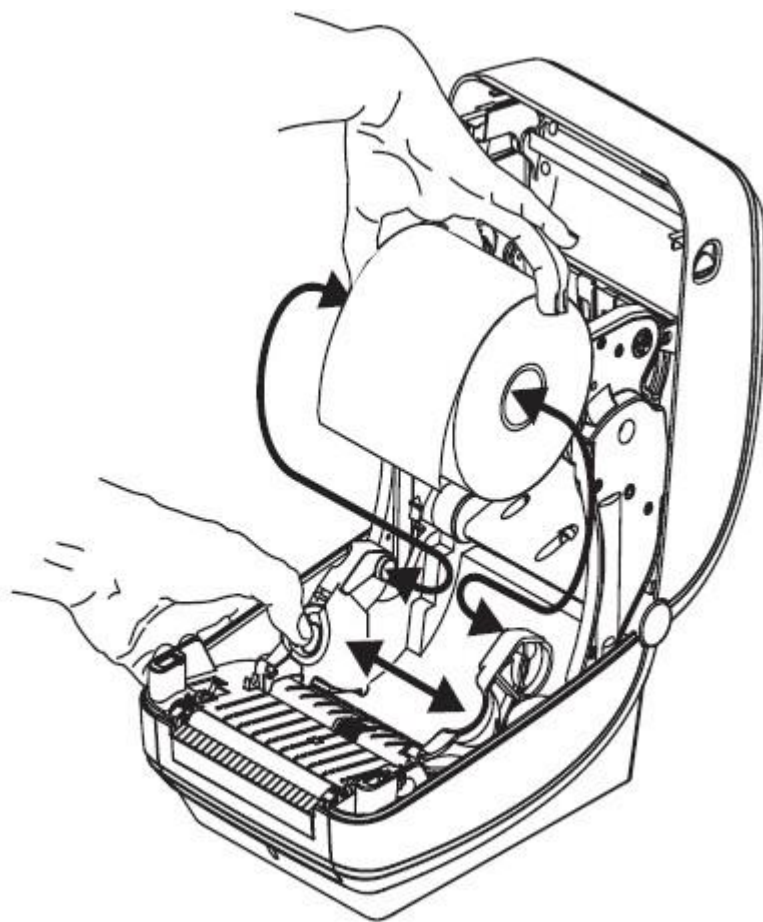

Placement du rouleau dans le compartiment papier




- Ouvrez les supports des rouleaux.
- Tirez sur les guides de papier avec votre main libre pour les ouvrir, puis placez le rouleau de papier sur les supports et relâchez les guides.
- Orientez le rouleau de papier de telle sorte que sa surface imprimable soit dirigée vers le haut lorsqu'elle passe sur le contre-rouleau (d'entraînement).

Ticket imprimante


Tirez sur le papier pour en dérouler une longueur à l'avant de l'imprimante. Assurez-vous que le rouleau tourne librement.

Le rouleau ne doit pas être posé au fond du compartiment papier.

Assurez-vous que la surface imprimable du papier est orientée vers le haut.

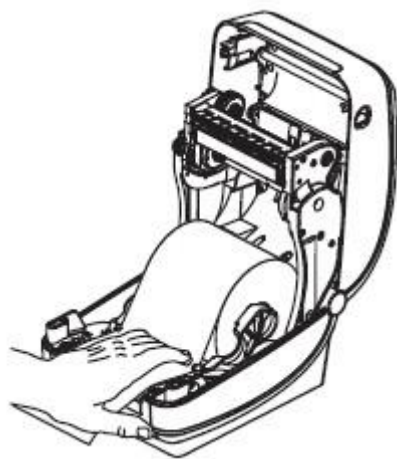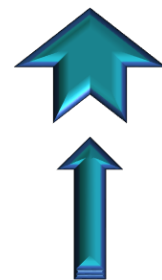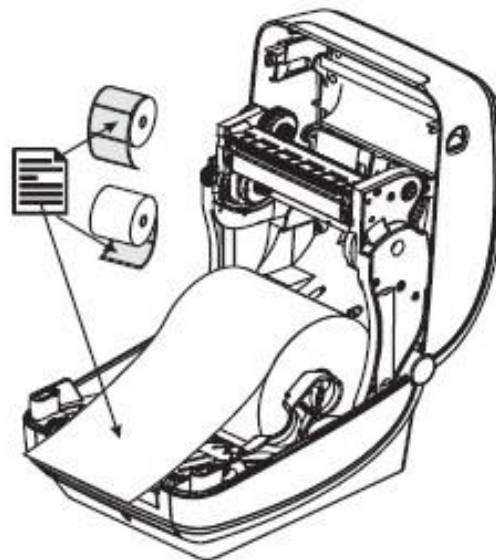

Poussez le papier sous les deux guides de papier.

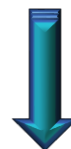

Ticket imprimante




Appuyez pour fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Appuyez sur le bouton d'alimentation papier pour faire sortir un premier ticket.



Déplacement des robots

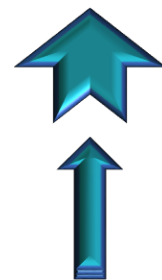

04.P – Placer le robot en position de bouclage : W_looppoos

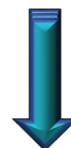

Placer le robot en W_looppoos





Faire une demande d'accès.


Prendre le SMART PAD du robot KUKA.

SMART PAD


Placer le robot en W_looppops

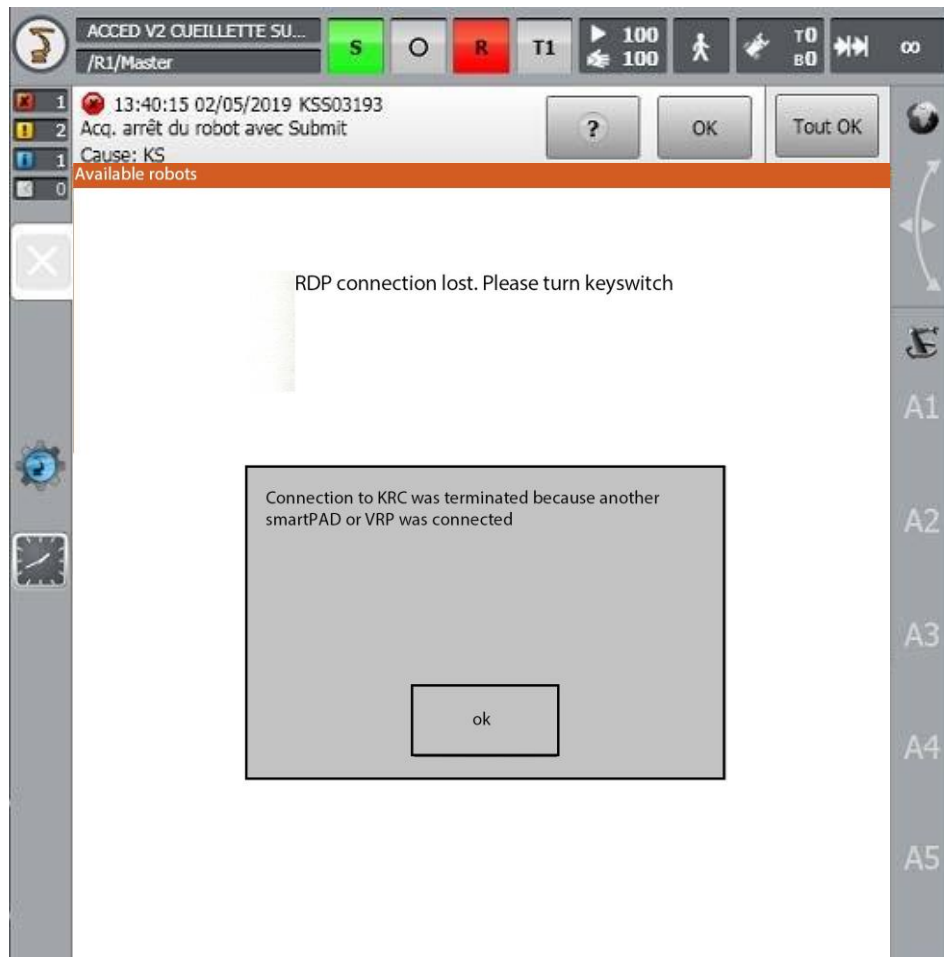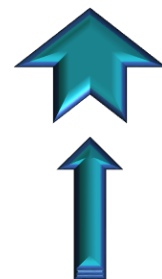

Appuyer sur OK.

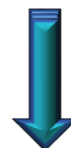


Placer le robot en W_looppops

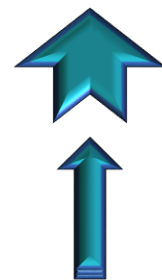


Tourner la clé vers la droite.



Sélectionner **T1** en appuyant directement sur les SMART PAD, la case T1 doit passer en BLEU, puis retourner la clé vers la gauche pour valider.

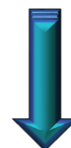


Placer le robot en W_looppops

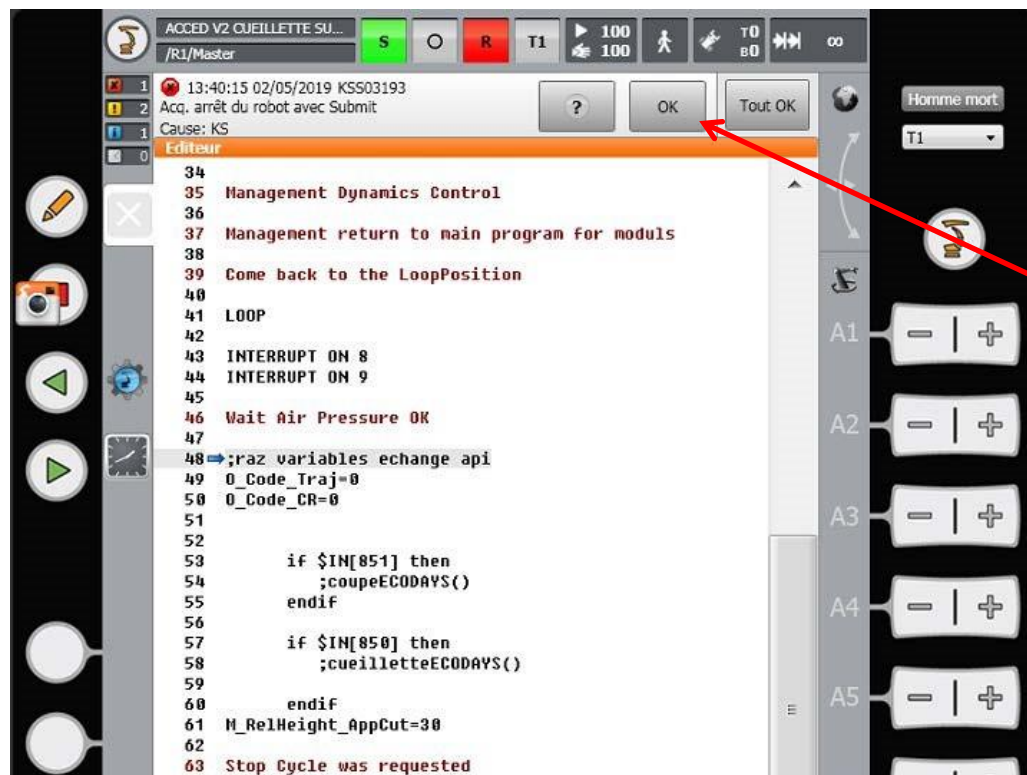


Acquitter le message de défaut qui s'affiche en appuyant sur la touche OK.

Placer le robot en W_looppoos

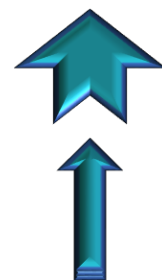


Abandonner le programme en cours :

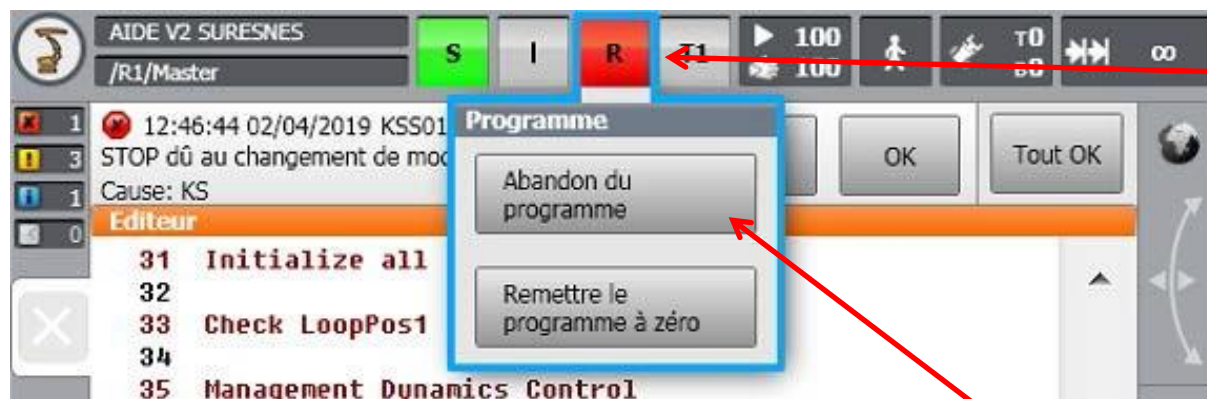


Sélectionner le R.

Et appuyer sur
« Abandon du programme ».

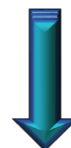



Placer le robot en W_looppops

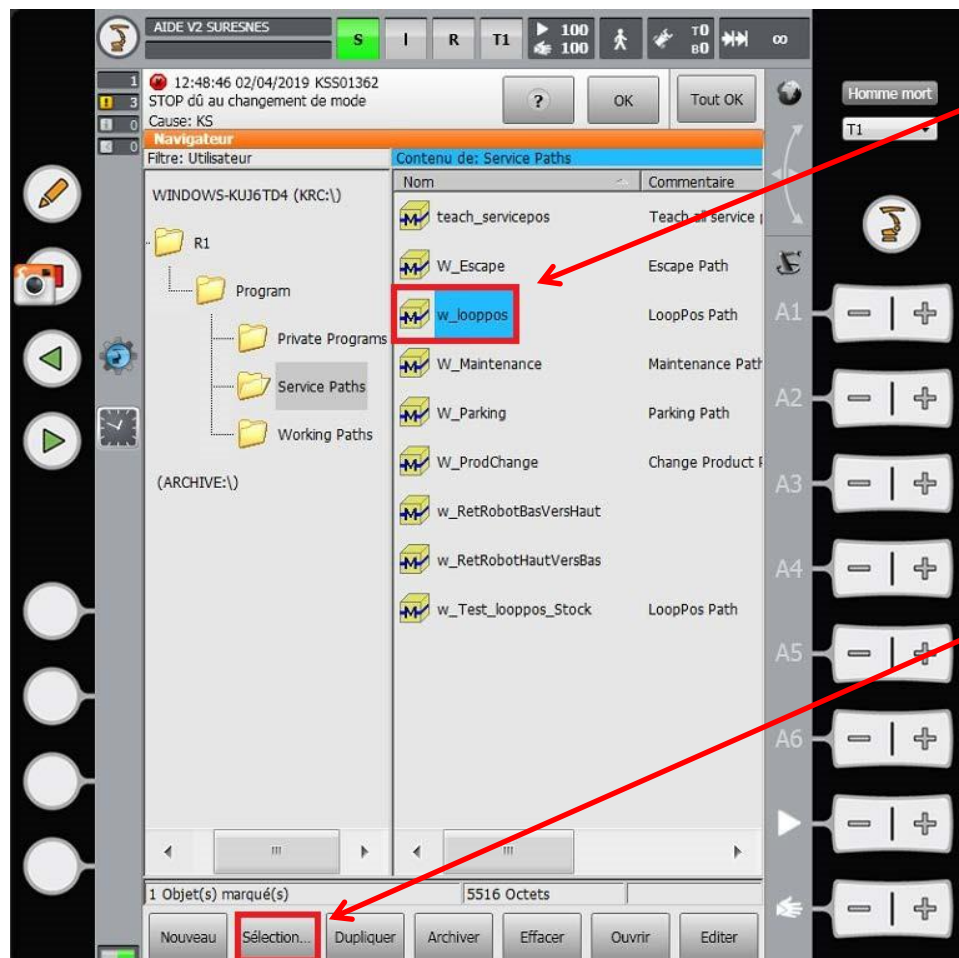

Sélectionner la trajectoire « **W_Looppops** » en appuyant dessus, le nom doit être sur fond bleu.



Appuyer sur le bouton « Sélection » en bas du SMART PAD.

Placer le robot en W_looppops

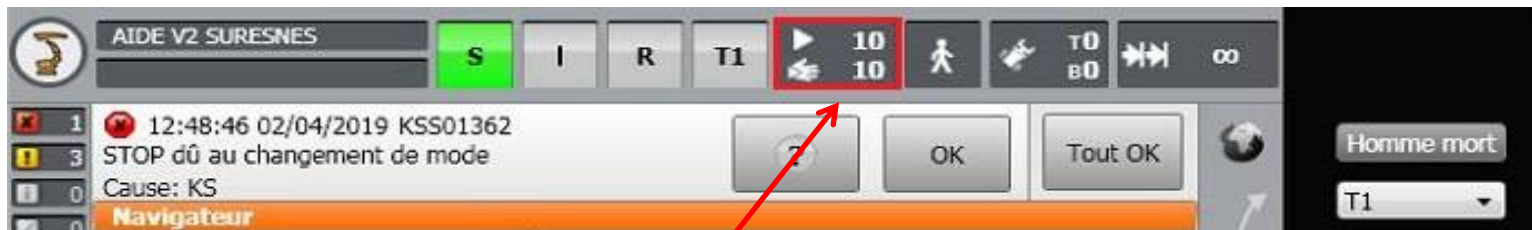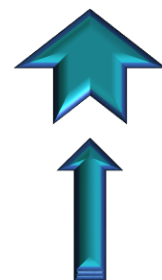


Baisser les vitesses de déplacement à 10.


La modification de vitesse s'effectue avec les touches en bas à droite du SMART PAD.

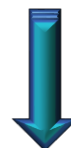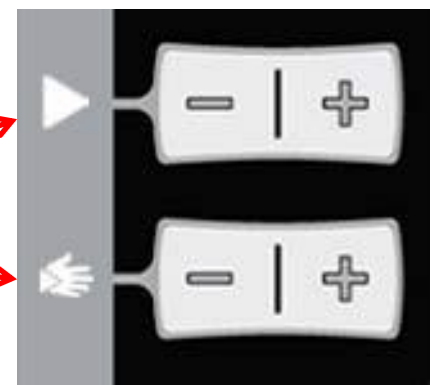


Placer le robot en W_looppo

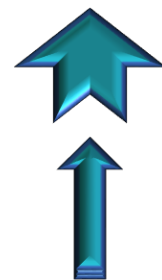



Pour dérouler la trajectoire « **W_Looppos** » :
appuyer et maintenir un des trois boutons « homme mort ».

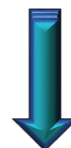


Placer le robot en W_looppops

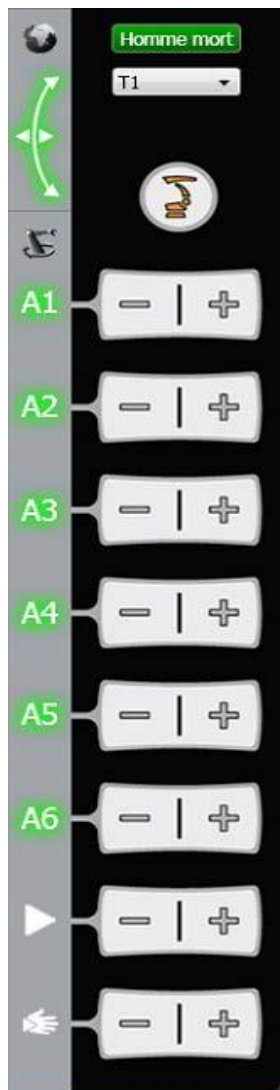

Pendant le déroulement de la trajectoire, afin d'éviter toute collision avec quelque chose, il faut dégager le robot à l'aide des touches de déplacement d'axe se trouvant sur le côté du SMART PAD.

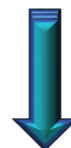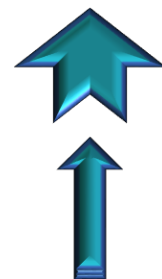

Placer le robot en W_looppops

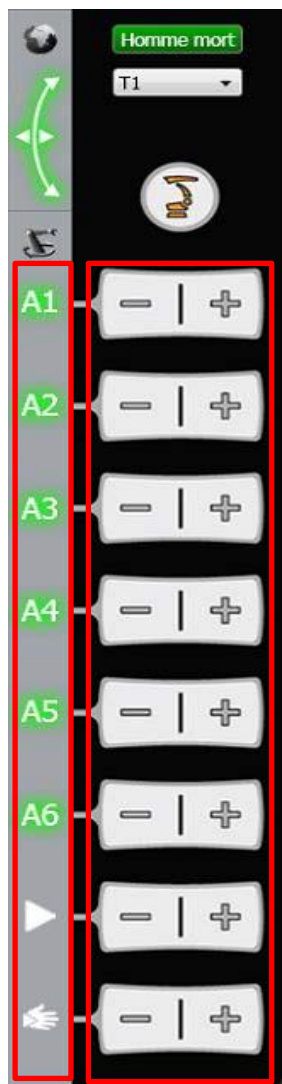


Maintenir une des touches d'homme mort.

Appuyer sur l'une des touches de fonction « + » ou « - » suivant la direction que vous voulez donner au robot pour le dégager.



Si vous n'appuyez pas sur une des touches «homme mort» il n'y a pas la dénomination des axes en vert et donc pas de mouvement possible.

Placer le robot en W_looppops

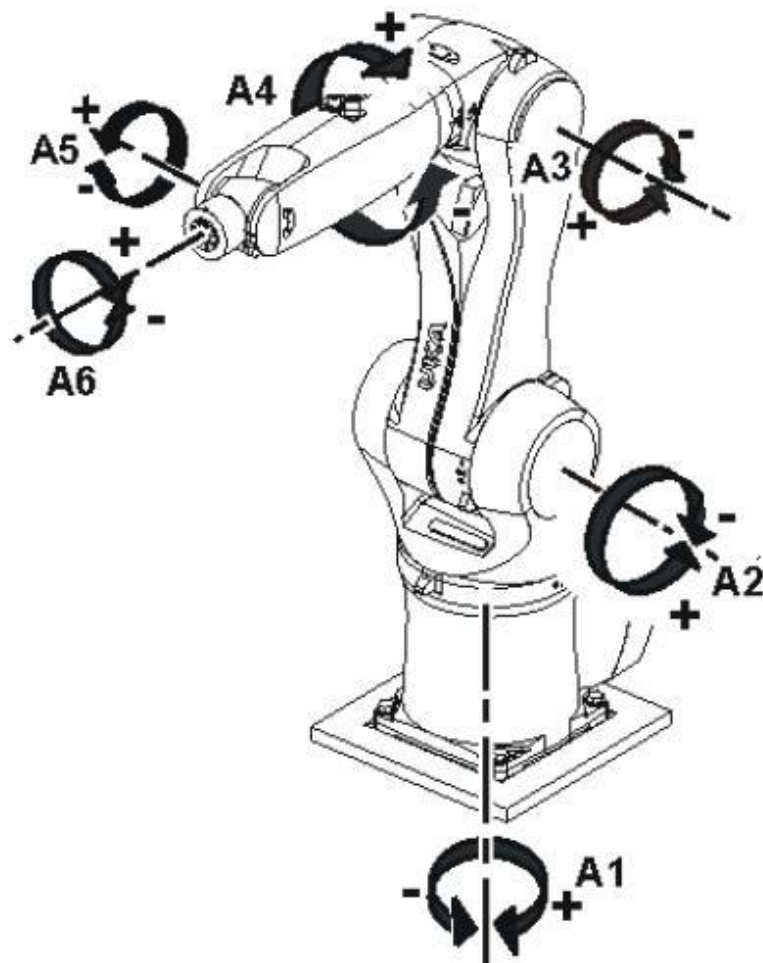


Sens de rotation des axes du robot.


Placer le robot en W_looppops

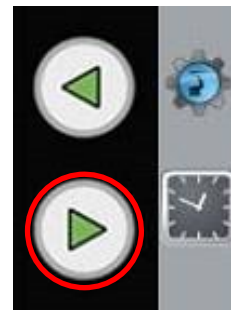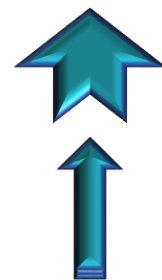

Appuyer sur une des deux touches « Start+ ».

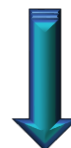

Placer le robot en W_looppoos

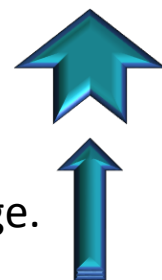


Une fois dégagé de l'obstacle, continuer la trajectoire jusqu'à avoir le **R** en rouge.




Relâcher puis réappuyer jusqu'à avoir le **R** en Noir.



Abandonner le programme en cours en appuyant sur le **R** puis sur «Abandon Programme».

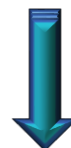


Placer le robot en W_looppo

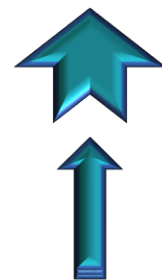


Tourner la clé vers la droite et sélectionner « **EXT** ».


Appuyer directement sur le SMART PAD, la case EXT doit passer en BLEU, puis retourner la clé vers la gauche pour valider.

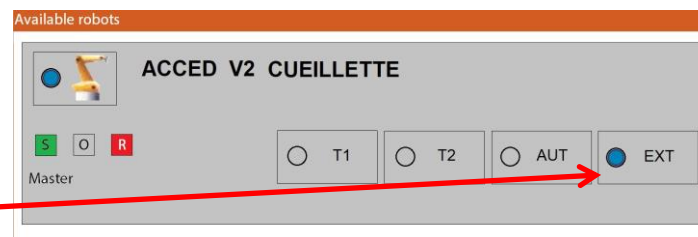


Repositionner le SMART PAD dans son emplacement.

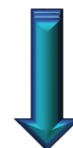


Gestion machine

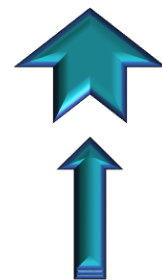

04.Q – Comprendre et gérer les taquins

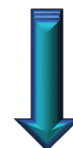


Comprendre et gérer les taquins

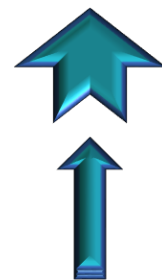

Les taquins (emplacements vides qui permettent les interversions de boîtes PASS), sont indispensables au bon fonctionnement de la cueillette.

Il en faut au minimum 4.

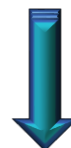


Comprendre et gérer les taquins



Pour consulter les taquins :

Aller dans le menu système puis dans l'onglet "Taquin".


Vous pouvez imprimer un ticket avec la liste des taquins, dans le menu système, onglet "Général".

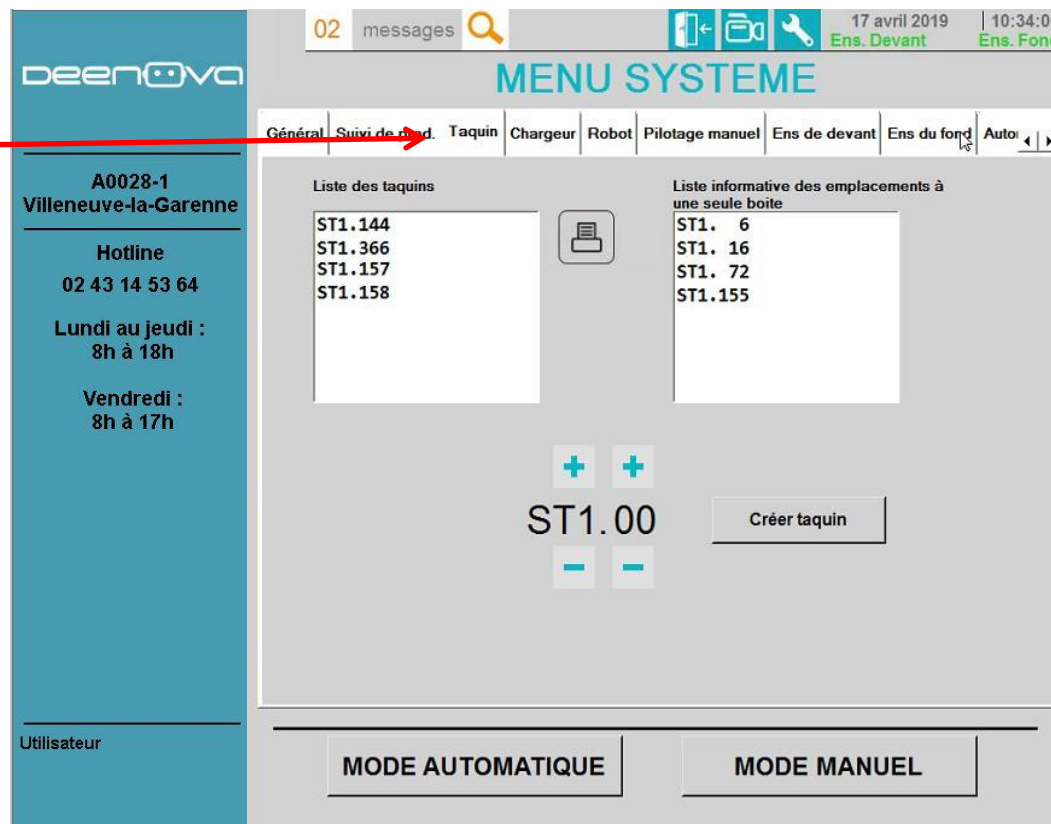



Comprendre et gérer les taquins

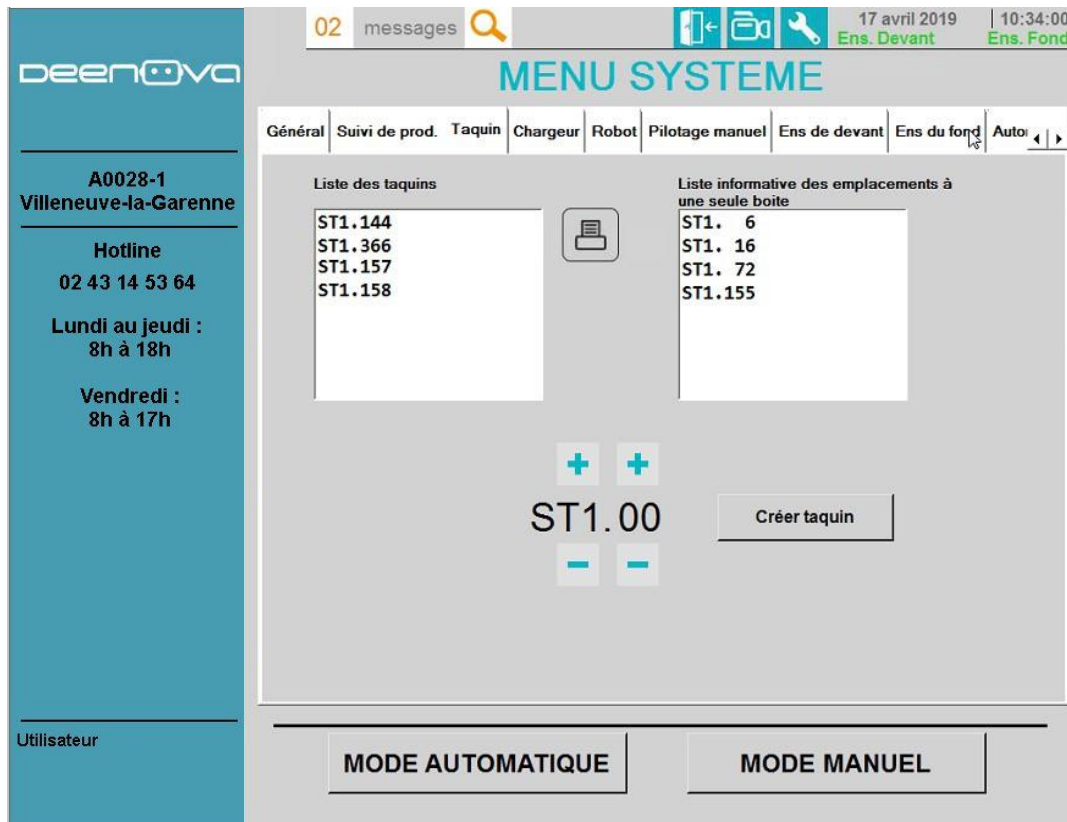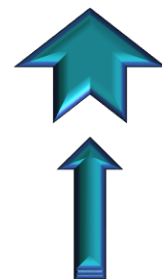

S'il n'y a pas au moins quatre taquins de chaque côté, il faudra alors en créer.

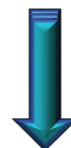

Comprendre et gérer les taquins

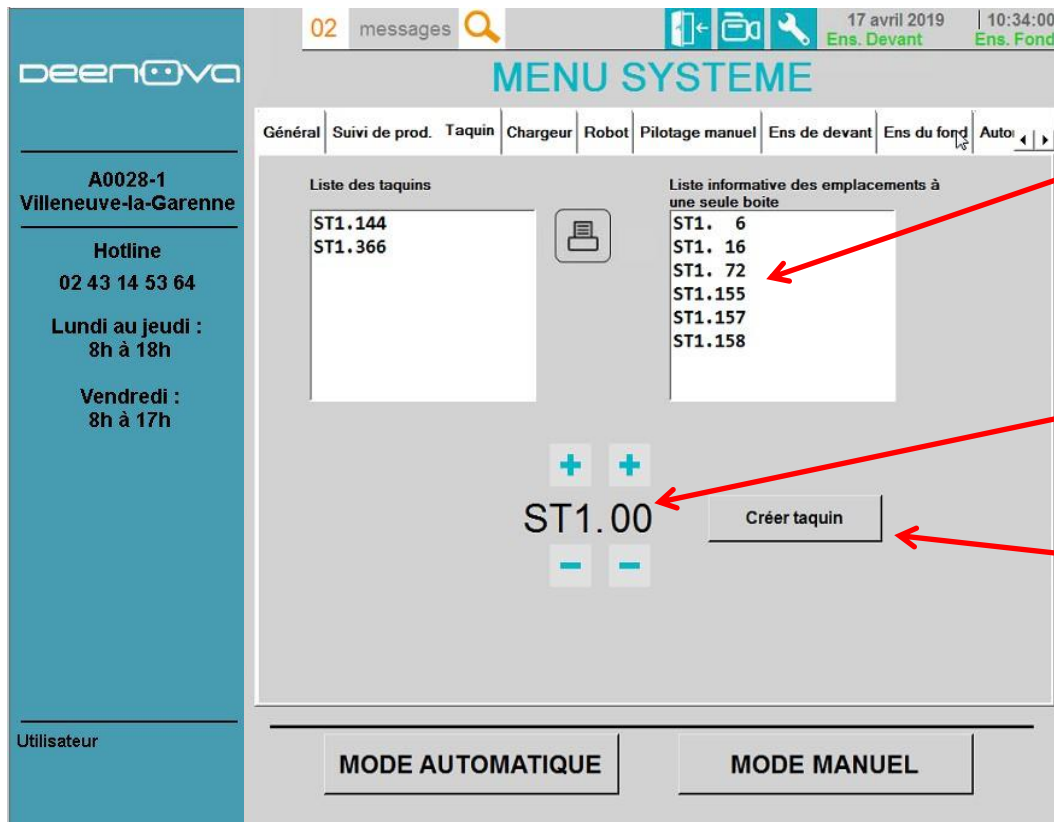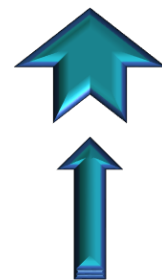


Choisir un emplacement à une seule boîte en cliquant dessus.

Ou saisir l'adresse d'un emplacement.


Vérifier physiquement l'emplacement.
(retirer les boîtes si nécessaire) Puis appuyer sur

Créer taquin

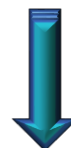

Comprendre et gérer les taquins

Dans Médian, sur la page de consultation des emplacements.

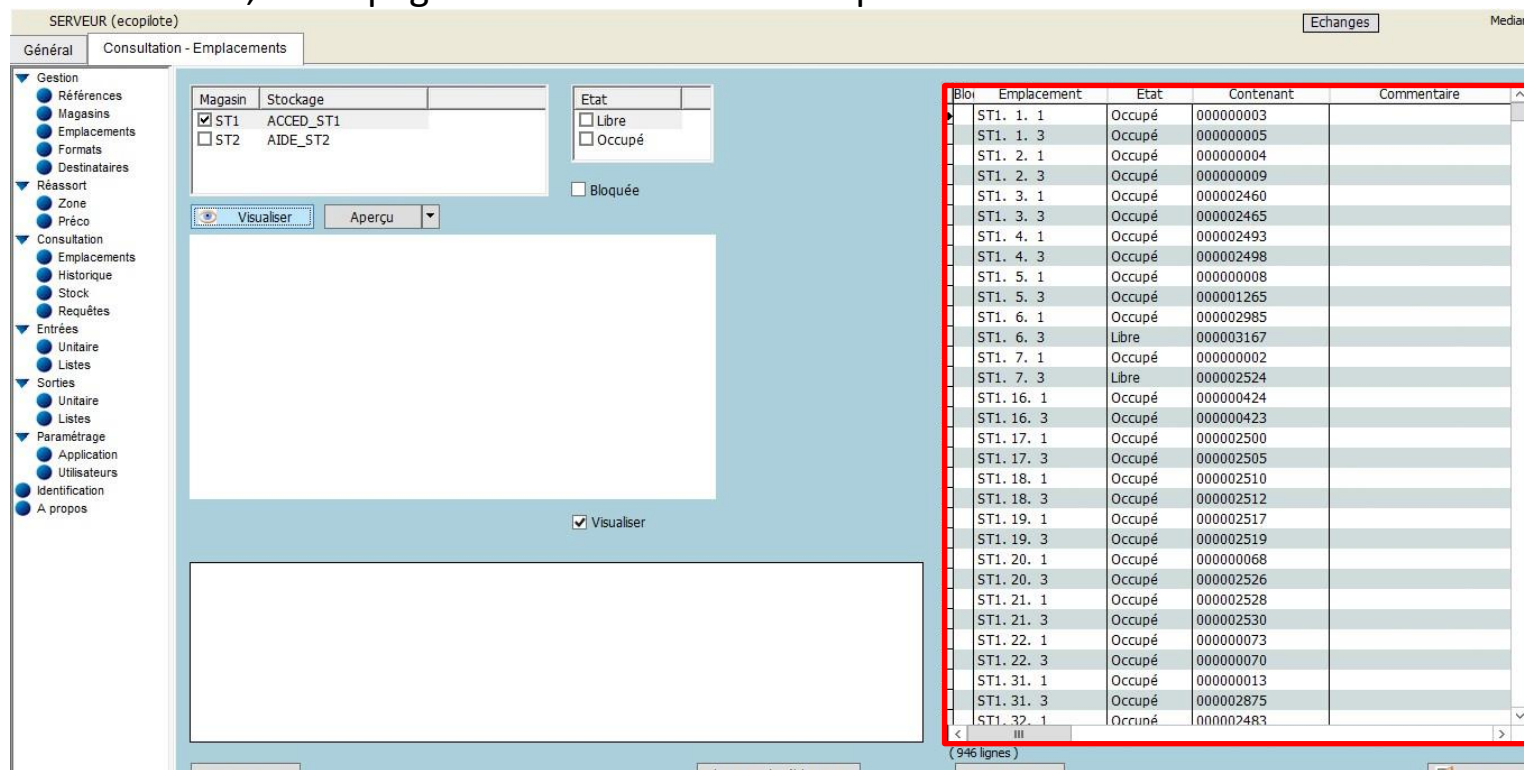

SERVER (ecopilote) Echanges Median

Général Consultation - Emplacements

Magasin Stockage

☒ ST1 ACCED_ST1

☐ ST2 AIDE_ST2

Etat

☐ Libre

☐ Occupé

☐ Bloquée

Visualiser Aperçu

Visualiser


Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
ST1.	1. 1	Occupé	000000003	
ST1.	1. 3	Occupé	000000005	
ST1.	2. 1	Occupé	000000004	
ST1.	2. 3	Occupé	000000009	
ST1.	3. 1	Occupé	000002460	
ST1.	3. 3	Occupé	000002465	
ST1.	4. 1	Occupé	000002493	
ST1.	4. 3	Occupé	000002498	
ST1.	5. 1	Occupé	000000008	
ST1.	5. 3	Occupé	000001265	
ST1.	6. 1	Occupé	000002985	
ST1.	6. 3	Libre	000003167	
ST1.	7. 1	Occupé	000000002	
ST1.	7. 3	Libre	000002524	
ST1.	16. 1	Occupé	000000424	
ST1.	16. 3	Occupé	000000423	
ST1.	17. 1	Occupé	000002500	
ST1.	17. 3	Occupé	000002505	
ST1.	18. 1	Occupé	000002510	
ST1.	18. 3	Occupé	000002512	
ST1.	19. 1	Occupé	000002517	
ST1.	19. 3	Occupé	000002519	
ST1.	20. 1	Occupé	000000068	
ST1.	20. 3	Occupé	000002526	
ST1.	21. 1	Occupé	000002528	
ST1.	21. 3	Occupé	000002530	
ST1.	22. 1	Occupé	000000073	
ST1.	22. 3	Occupé	000000070	
ST1.	31. 1	Occupé	000000013	
ST1.	31. 3	Occupé	000002875	
ST1.	32. 1	Occupé	000002483	

(946 lignes)

Sur la partie droite, figurent tous les emplacements de la zone de stockage numériquement classés ainsi que leurs états.

Important : Un emplacement vide sur ses 2 profondeurs crée, de facto, un «taquin». Il est donc possible à partir de cette page, d'élaborer de nouveaux « taquins ».

Comprendre et gérer les taquins

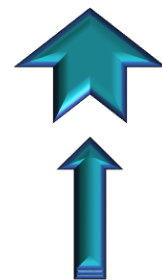

L'onglet « taquins » donne une liste des emplacements considérés informatiquement comme taquin.

Dans **Médian**, la page de consultation des emplacements affiche tous les emplacements de la zone de stockage.

Une ligne de positionnement se décompose comme ceci :

Composante 1 : ST1 = cueillette 1 ; ST2 = AIDE

Composante 2 : Numéro de l'emplacement

Composante 3 : profondeur (1 = en façade ; 3 = en arrière)


ST1. 5. 3

Cueillette 1 emplacement 5 boîte de derrière


Important : s'il n'y a pas 4 taquins, la création du ou des emplacements manquants s'impose.




Gestion machine

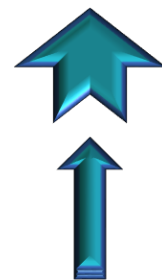

04.R – Comprendre et gérer les boîtes bloquées

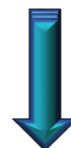


Comprendre et gérer les boîtes bloquées

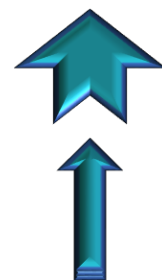


Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
	ST1. 1. 6. 1. 1	Occupé	000005450	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 1	Occupé	000004855	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 3	Occupé	000004854	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 7. 1	Occupé	000006459	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 13. 1	Occupé	000001348	Sachet non lu
	ST1. 2. 1. 11. 1	Occupé	000001845	Sachet non lu
	ST1. 2. 2. 3. 1	Occupé	000002067	Sachet non lu
	ST1. 2. 20. 8. 1	Occupé	000001941	Sachet non lu

Vérifier les emplacements bloqués en cueillette.

Lors de la cueillette certaines boîtes sont bloquées par l'automate.

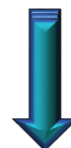

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

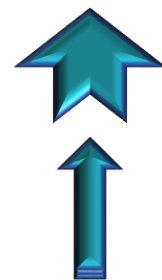


Quelles sont les raisons qui bloquent un emplacement ?

La mauvaise lecture du « Datamatrix » 3 fois consécutivement.


Un défaut de prise sachet 3 fois consécutivement.

La présence d'un produit différent que celui attendu.

La date de péremption du médicament dépassée.

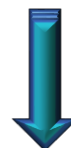


Comprendre et gérer les boîtes bloquées

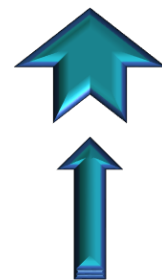

Un emplacement « bloqué » entraîne automatiquement, l'impossibilité de de son utilisation et par conséquent :

Les doses unitaires contenues dans les boîtes PASS de cet emplacement ne seront pas prélevées.

Les boîtes PASS de cet emplacement, lors d'une « sortie globale », ne seront pas extraites.

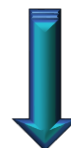

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

Pour consulter les emplacements bloqués

Dans Médian, il faut :

Allez dans "Consultation", sélectionner "Emplacements"




Dans la nouvelle page obtenue :

Sélectionner le module concernée.

Cocher « Bloquée ».

Cliquer sur « Visualiser ».

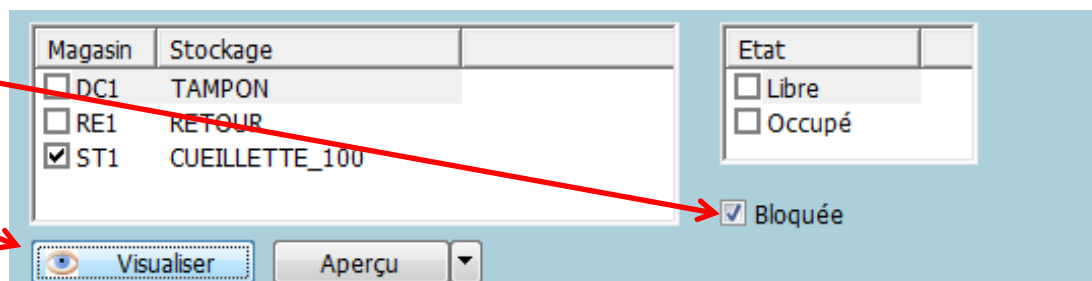

Magasin	Stockage
☐ DC1	TAMPON
☐ RE1	RETOUR
☒ ST1	CUEILLETTE_100

Etat

☐ Libre


☐ Occupé

☒ Bloquée

 Visualiser

Aperçu

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

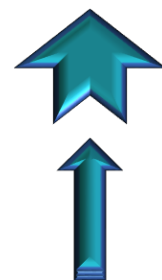

Analyse du blocage :

Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
	ST1. 1. 6. 1. 1	Occupé	000005450	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 1	Occupé	000004855	Sachet non lu
	ST1. 1. 19. 4. 3	Occupé	000004854	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 7. 1	Occupé	000006459	Sachet non lu
	ST1. 1. 21. 13. 1	Occupé	000001348	Sachet non lu
	ST1. 2. 1. 11. 1	Occupé	000001845	Sachet non lu
	ST1. 2. 2. 3. 1	Occupé	000002067	Sachet non lu
	ST1. 2. 20. 8. 1	Occupé	000001941	Sachet non lu


Cliquer sur l'emplacement que vous voulez débloquent.

Lire le commentaire (raison du blocage de l'emplacement, ici « sachet non lu »).


Remédier physiquement au problème à l'emplacement concerné.

Cliquer sur :

Bloquage / Débloquage

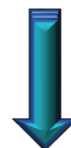

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

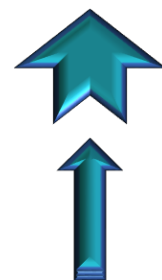

Analyse du blocage :

Il existe différentes raisons de blocage. Afin de pouvoir débloquent un emplacement, il faut procéder de la manière suivante :

Pour **sachet non lu**, aller voir l'emplacement indiqué :


→ Il peut s'agir d'un sachet mal positionné dans la boîte (**repositionner le produit dans la boîte en vérifiant que les produits qui le suivent sont également bien positionnés**),

→ Il peut s'agir d'un défaut d'impression sur le sachet (**regarder si le sachet est lisible. Si oui le remettre. Si non retirer le ou les produits non lisibles de la boîte PASS**).


Une fois ces manœuvres faites, cliquer sur l'icône blocage/déblocage pour débloquent l'emplacement.



Bloquage / Débloquage

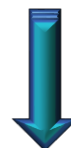

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

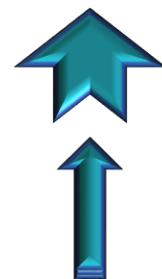

Analyse du blocage :

Pour **Produit différent** :


Noter l'emplacement bloqué.

Si **tous** les produit dans la boîte PASS sont différents (référence ou fraction) de ceux indiqués dans Médian alors **Retirer la boîte PASS pleine de produit différents et mettre une boîte PASS vide à la place.**


!!!! ne surtout pas supprimer dans Médian la quantité dans la boîte PASS pour éviter des erreurs de stock, y mettre simplement une boîte passe vide et lors de la prochaine cueillette les stocks Médian et pharmacie (logiciel GEF) se mettront à jour automatiquement quand une prise sachet sera demandée à cet emplacement.

S'il n'y a qu'un ou plusieurs produits différents de ceux indiqués dans Médian alors **Retirer ce ou ces produits de la boîte PASS.**

!!!! Ne pas modifier la quantité de produits dans Médian, celle-ci se fera toute seule lors des cueillettes.

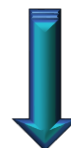

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

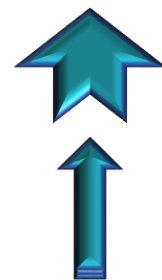

Analyse du blocage :


Pour **Erreur prise sachet** :

Il peut s'agir d'un sachet mal positionné dans la boîte, dans ce cas : **aller voir l'emplacement indiqué** → **(repositionner le produit dans la boîte en vérifiant que les produits qui le suivent sont également bien positionnés)**.


Si le sachet est bien positionné lors de la vérification alors noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre **technicien ECODEX** qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils nécessitent de nouveaux réglages ou non.

Procéder à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Déblocage

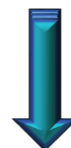

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

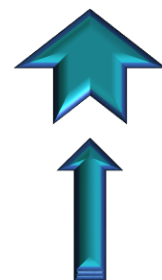

Analyse du blocage :


Pour **Boîte absente** :

Aller dans Médian → Consultation → Emplacement → Sélectionner la cueillette (ST1) puis cliquer sur **Visualiser**. Regarder dans Médian ce qui est indiqué pour cet emplacement (0,1 ou 2 boîtes PASS ???)

Aller voir l'emplacement indiqué : Vérifier physiquement à l'emplacement dans la cueillette si entre ce qu'il doit y avoir dans Médian et ce qu'il y a vraiment est correcte.

S'il y a une différence entre les deux alors mettre l'emplacement au même état indiqué que dans Médian.


Exemple : dans Médian il y a une boîte à l'emplacement st1.1.7.12.1 et à l'emplacement st1.1.7.12.3 (soit un double emplacement) **MAIS** que physiquement il n'y a aucune boîte. **ALORS** mettre 2 boîtes à cet emplacement.

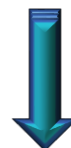

Procéder à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

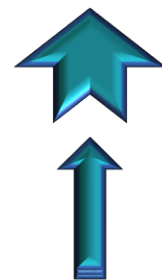

Analyse du blocage :

Pour **Produit périmé** :

Aller dans la cueillette et **prendre** la boîte PASS située à l'emplacement bloqué. La **remplacer** par une boîte passe vide.

!!!! Ne pas modifier la quantité de produits dans Médian, celle-ci se fera toute seule lors des cueillettes.


Retirer les sachets de la boîte PASS et vérifier les dates de péremption de ceux-ci.

Vous pourrez remettre les produits conformes en retours.


Jeter ou retirer du circuit les sachets **non conforme** (date de péremption passée).

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

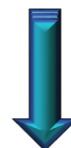

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

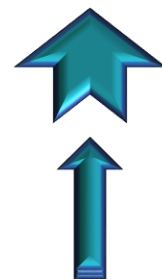

Analyse du blocage :


Pour **Erreur prise boîte**, (erreur pouvant arrivé que lors du transfert ou cycle de nuit)

Noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre **technicien ECODEX** qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils nécessitent de nouveaux réglages ou non.


Vérifier si le ou les boîtes ne dépassent pas de leurs emplacements ou si elles ne sont pas abimées (dans ce cas, changé la boîte en remettant les sachets dans la nouvelle boîte PASS)

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Déblocage

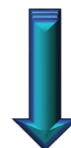

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

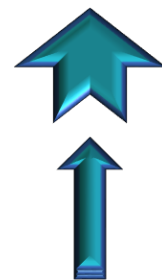

Analyse du blocage :

Pour **Erreur pose boîte**


Regarder si à l'emplacement bloqué il n'y a pas une erreur de stock, pour cela :
 Aller dans Médian → Consultation → Emplacement → Sélectionner la cueillette (ST1)
 puis cliquer sur **Visualiser**. Regarder dans Médian ce qui est indiqué pour cet
 emplacement (0,1 ou 2 boîtes PASS ???)
 S'il y a une différence entre les deux alors mettre l'emplacement au même état
 indiqué que dans Médian.

Si le stock est correct alors c'est la pose de la boîte qui est mauvaise et dans ce cas :

Noter le ou les emplacements bloqués suite à cette erreur. Les signaler à notre
technicien ECODEX qui procédera à des tests sur ces emplacements pour voir s'ils
 nécessitent de nouveaux réglages ou non.

Finir par à un déblocage du ou des emplacements.

Bloquage / Débloquage

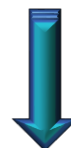

Comprendre et gérer les boîtes bloquées

00 message

25 novembre 2020 09:30:09
Ens. Devant Ens. Fond

MENU SYSTEME

Général Suivi de prod. Taquin Chargeur Robots Pilotage manuel Carnet Ens de devant Ens du fc

Sélection manuelle

Porte	OUVERTE	DEVERROUILLAGE	VERROUILLAGE	FERMEE
	DEVERROUILLE			VERROUILLE
Porte CPU	OUVERTE	DEVERROUILLAGE	VERROUILLAGE	FERMEE
	DEVERROUILLE			VERROUILLE
Indexeur CPU	Info Indexé	INDEXER	DESINDEXER	Info
	Ev Indexé			Ev Désindexé
CPU	Position face 1	FACE 1	FACE 2	Position face
	Pilotage face 1			Pilotage face

Imprimer les boîtes PASS bloquées Débloquer les boîtes PASS Vider les rejets Réimprimer pilulier

MODE AUTOMATIQUE MODE MANUEL

A0028-1
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal


Il est également possible de consulter la liste des emplacements bloqués en appuyant sur :

Imprimer les boîtes
PASS bloquées


Et de les débloquent en appuyant sur :

Débloquent les
boîtes PASS

Gestion machine

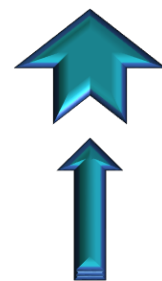


04.S – Comment réagir aux messages

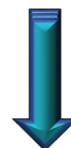


Comment réagir aux messages


Sommaire

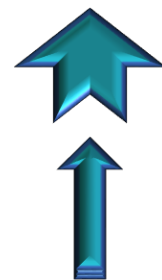


Général
Chargeur blister
Robot de coupe
Table d'aspiration
Zone de coupe
Ensacheuse
Barillet
Emplacement de retournement
Emplacement boîte de chargement
Emplacement SAS
Emplacement boîte rejet
Chargeur plateau CPU
Convoyeur
Dépileur
Robot de cueillette
Imprimante ticket

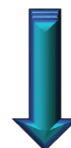



Comment réagir aux messages

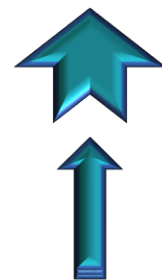


Général

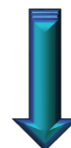


Comment réagir aux messages

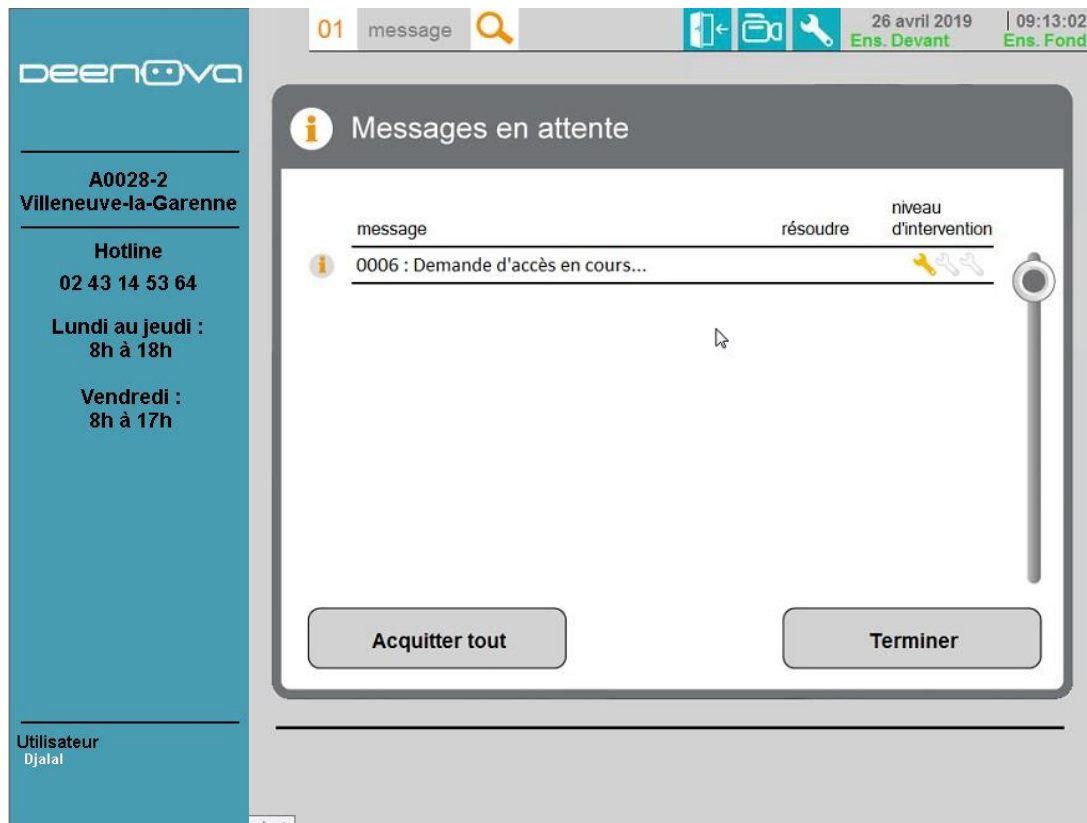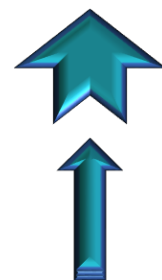


Le message 0006 vous informe qu'une demande d'accès est en cours.

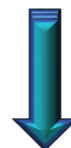


Comment réagir aux messages

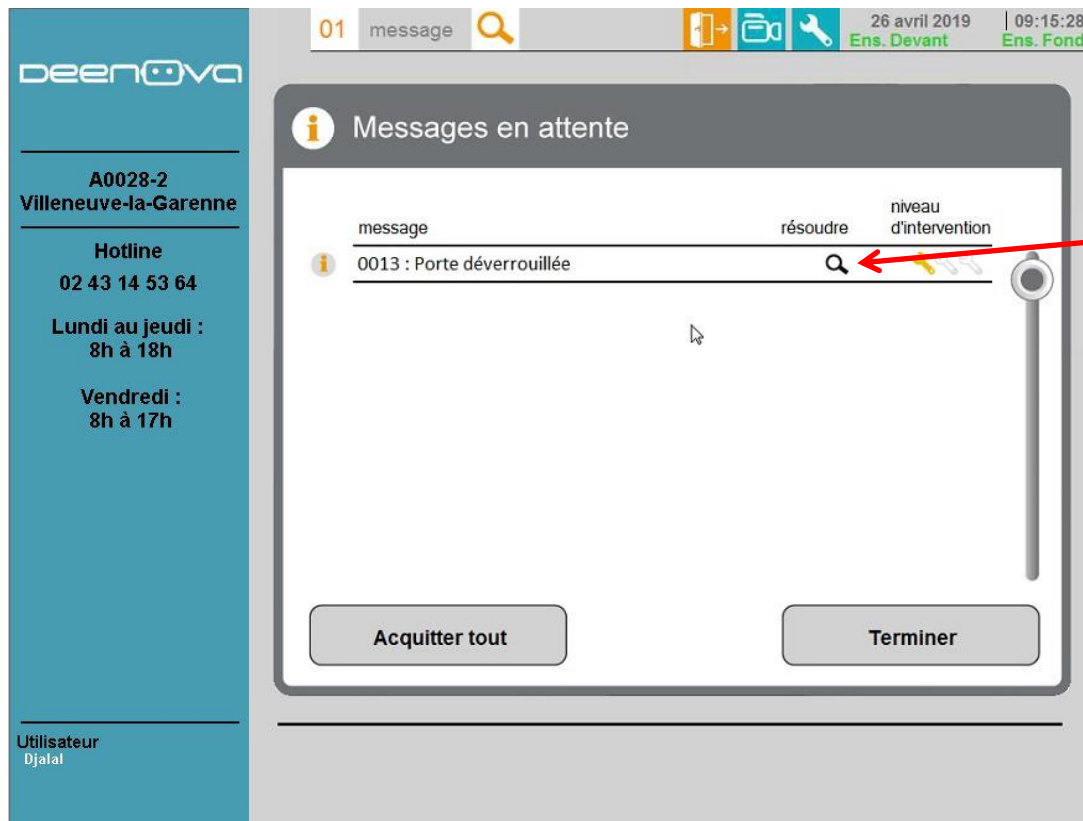


Le message 0013 vous informe que la porte est déverrouillée mais fermée. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

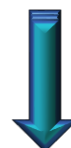



Comment réagir aux messages

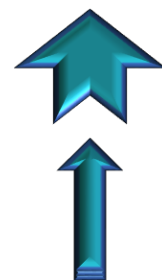


Le message 0013 vous informe que la porte est déverrouillée mais fermée. Suivez les instructions.

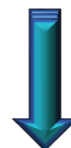

Comment réagir aux messages

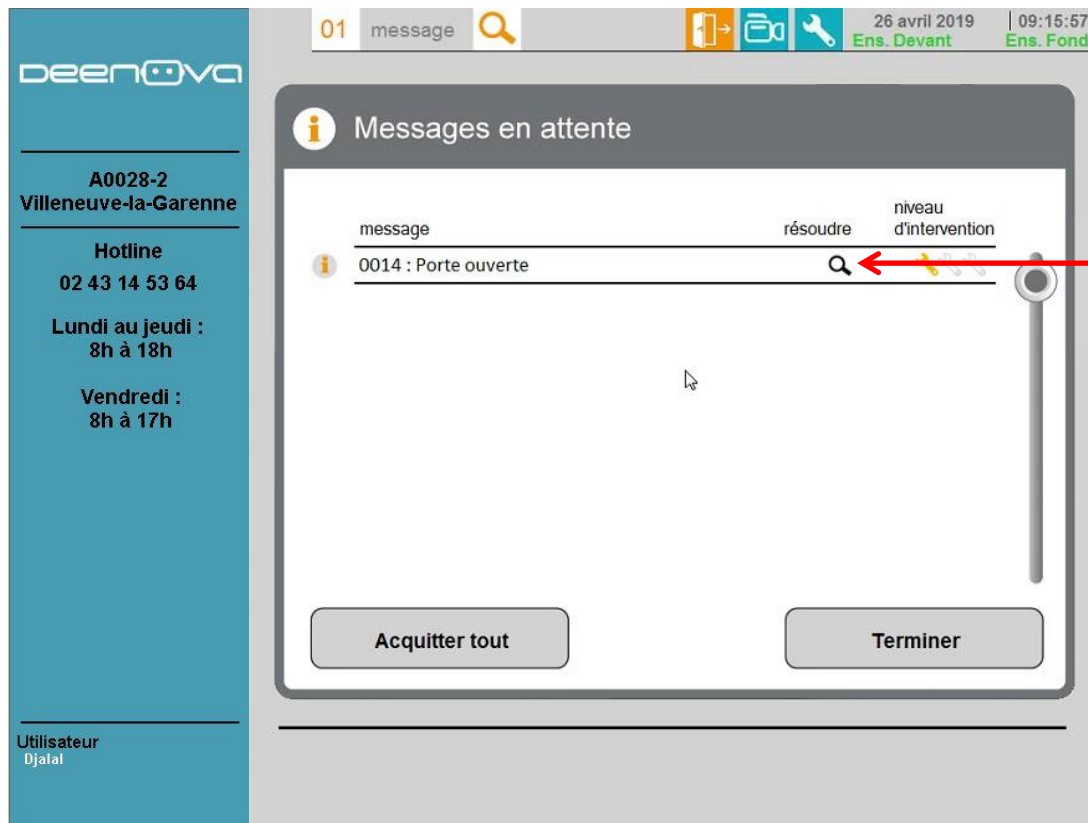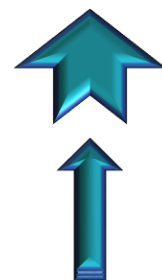


Le message 0014 vous informe que la porte est ouverte. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

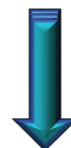



Comment réagir aux messages




Le message 0014 vous informe que la porte est ouverte. Suivez les instructions.

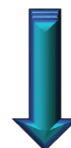


Comment réagir aux messages

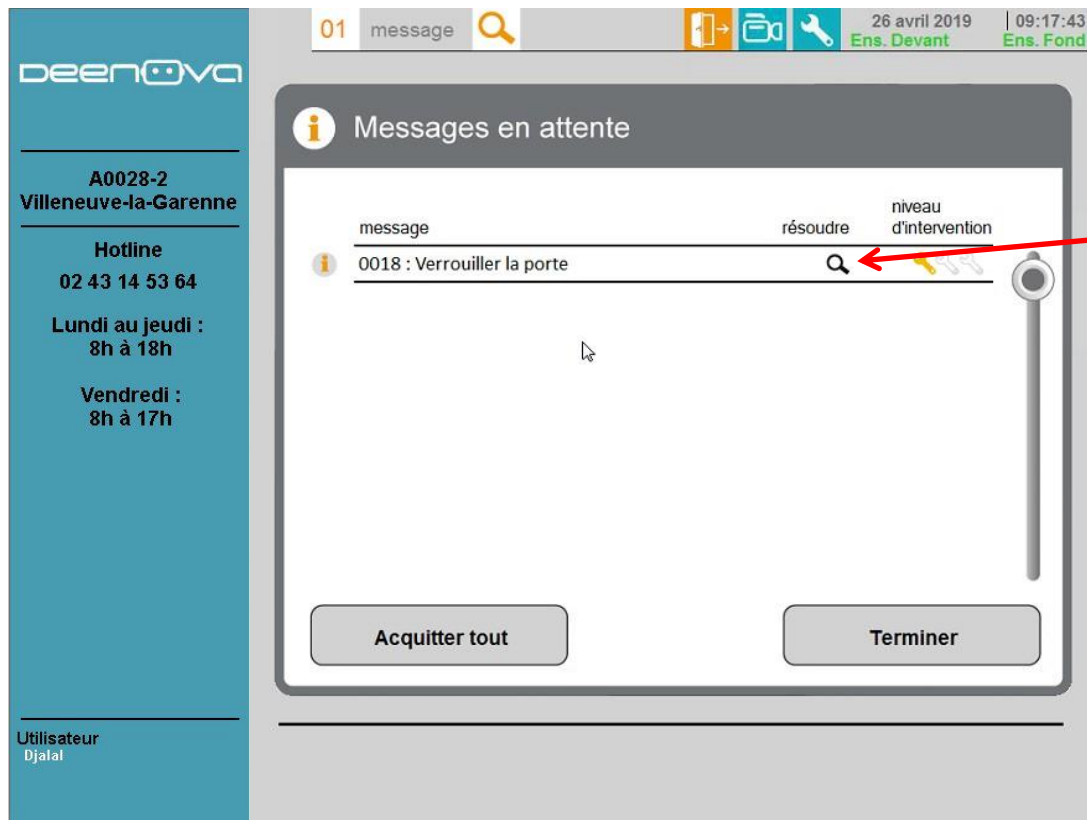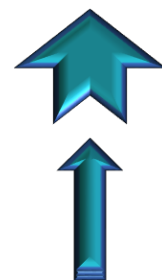

Le message 0018 vous informe que la porte est en attente de verrouillage. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

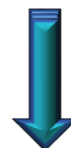


Comment réagir aux messages


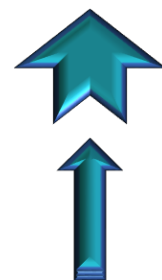


The screenshot shows the Deenova user interface. On the left, there is a sidebar with the company logo 'deenova' and contact information for 'A0028-2 Villeneuve-la-Garenne', including a hotline number '02 43 14 53 64' and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 0018 Verrouiller la porte'. The message content states 'Porte en attente de verrouillage Appuyer sur bouton <Verrouiller>'. Below the message, there are two buttons: 'Verrouiller' and 'Terminer'. At the bottom of the message area, there is a '1' icon and the text 'intervention facile'.


Le message 0018 vous informe que la porte est en attente de verrouillage. Suivez les instructions.

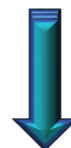



Comment réagir aux messages

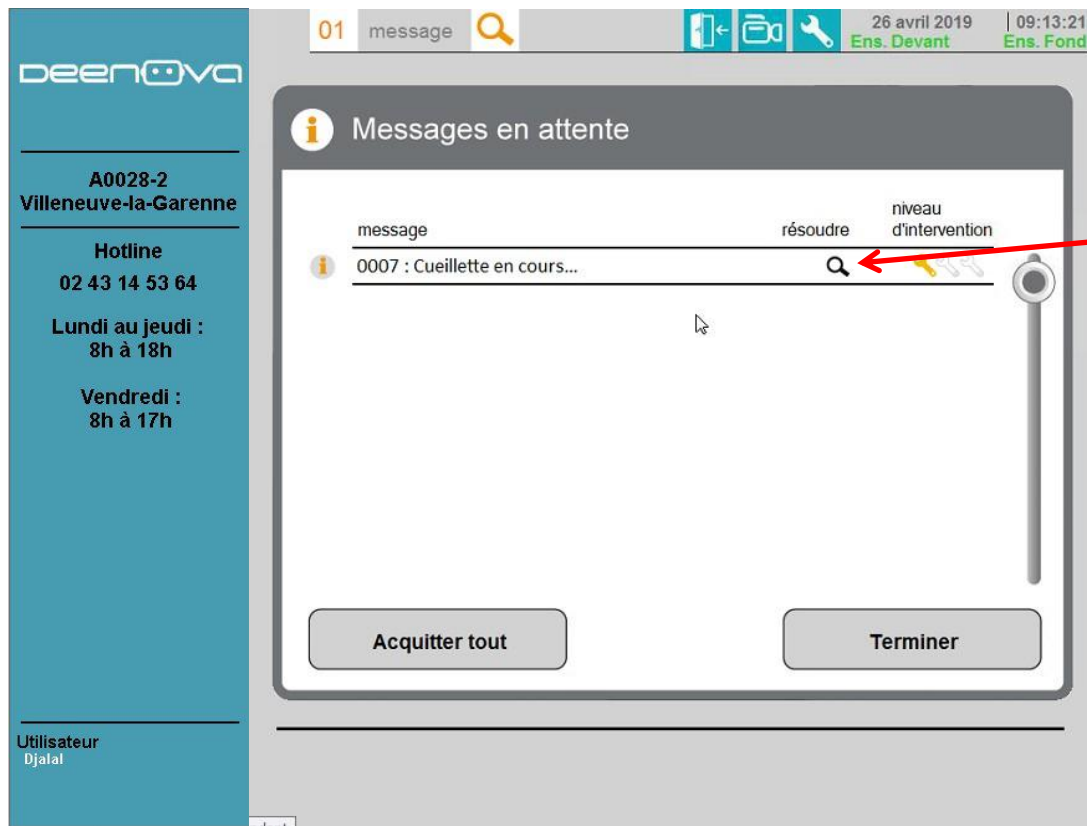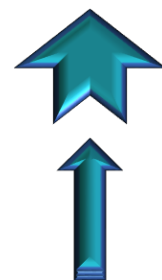


Le message 0007 vous informe qu'un cycle de cueillette est en cours. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

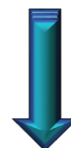



Comment réagir aux messages

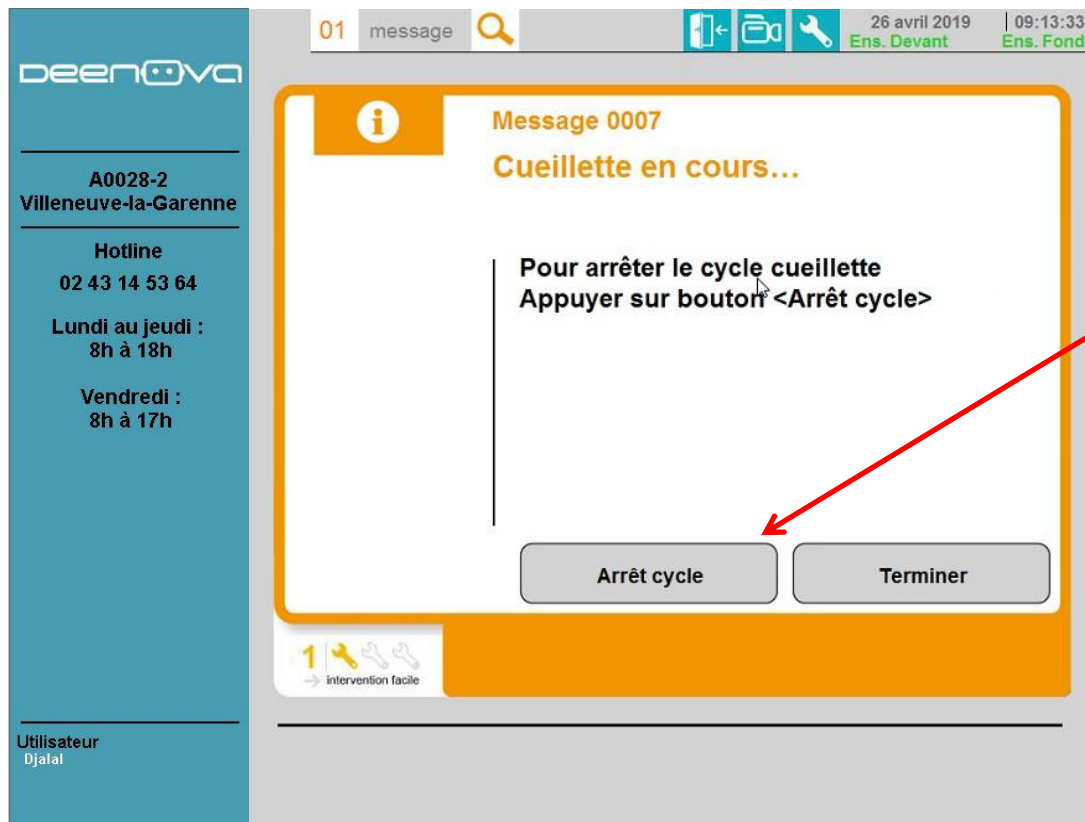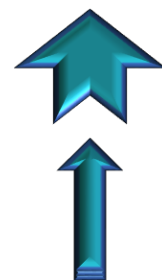


Le message 0007 vous informe qu'un cycle de cueillette est en cours. Pour l'arrêter, appuyer sur "Arrêt cycle".

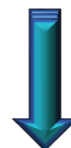



Comment réagir aux messages

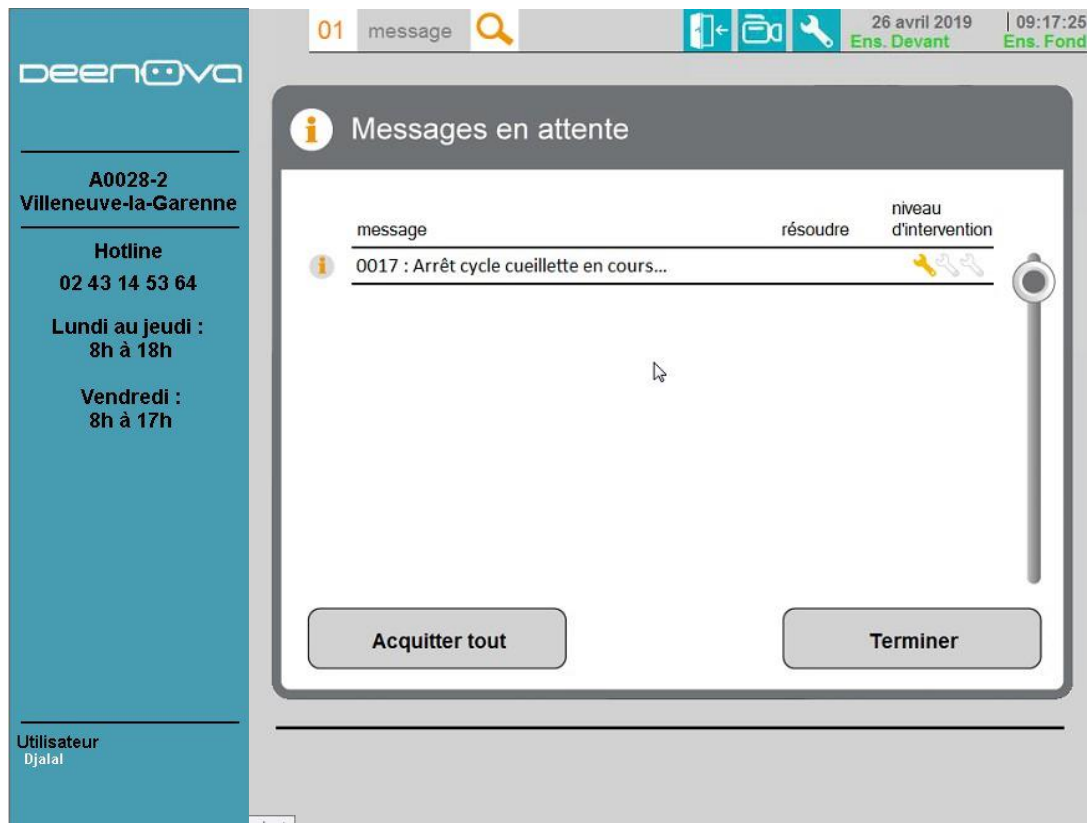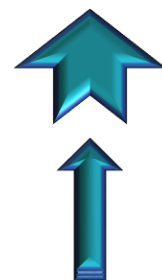


Le message 0017 vous informe qu'une demande d'arrêt du cycle de cueillette est en cours.

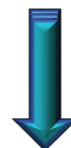



Comment réagir aux messages

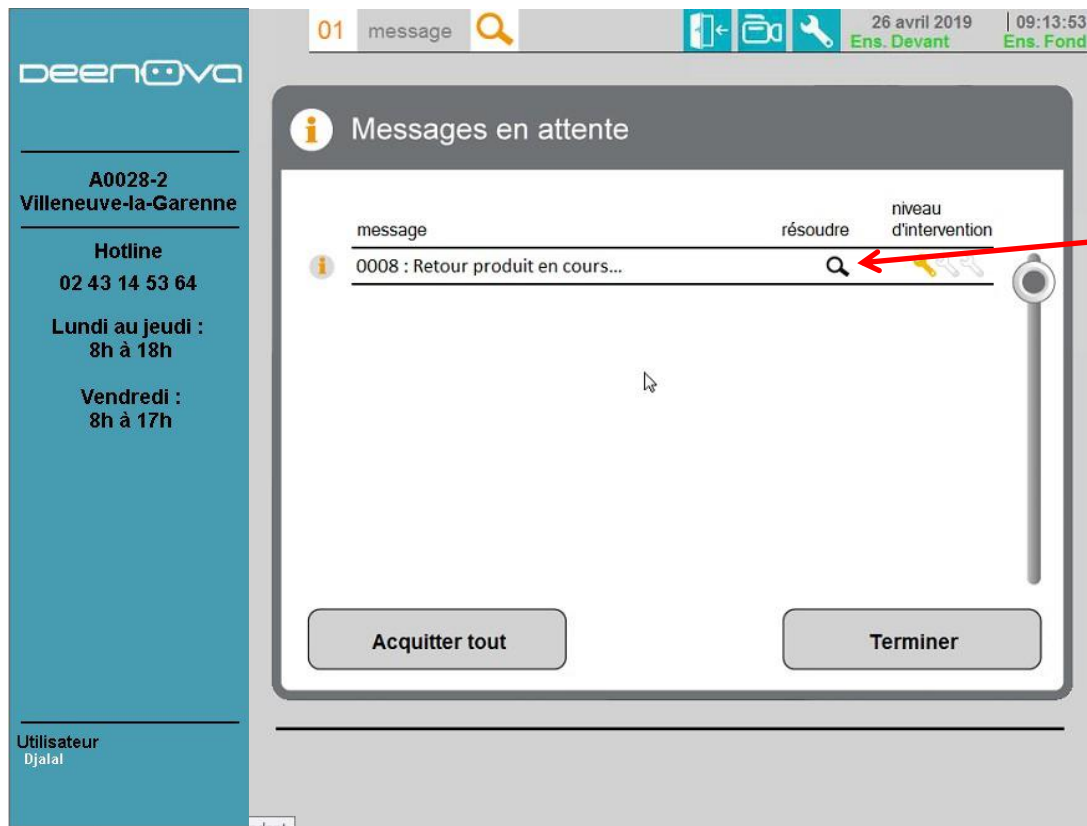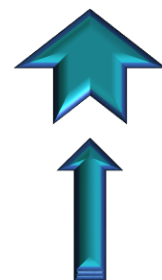


Le message 0008 vous informe qu'un cycle de retour produits est en cours. En cliquant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

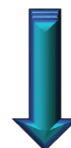


Comment réagir aux messages

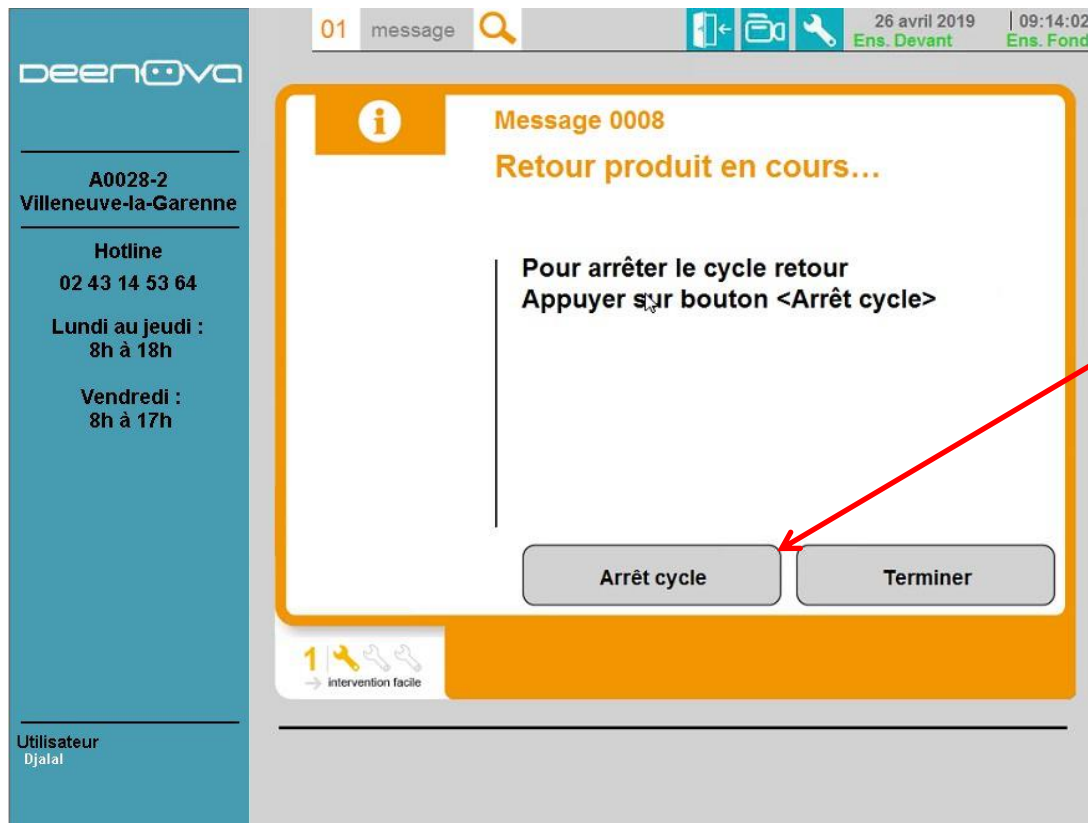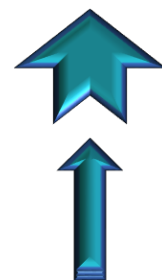

Le message 0008 vous informe qu'un cycle de cueillette est en cours. Pour l'arrêter, appuyer sur "Arrêt cycle".

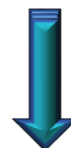

Comment réagir aux messages

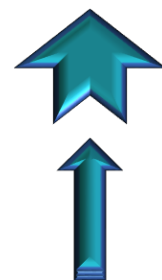

The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a list of messages under the heading 'Messages en attente'. A specific message, '0016 : Arrêt cycle retour produit en cours...', is highlighted. To the right of the message text are icons for 'résoudre' (a wrench) and 'niveau d'intervention' (a key). At the bottom of the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:17:06
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente



message	résoudre	niveau d'intervention
0016 : Arrêt cycle retour produit en cours...		

Acquitter tout Terminer


Le message 0016 vous informe qu'une demande d'arrêt du cycle de retour produit est en cours.

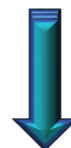



Comment réagir aux messages

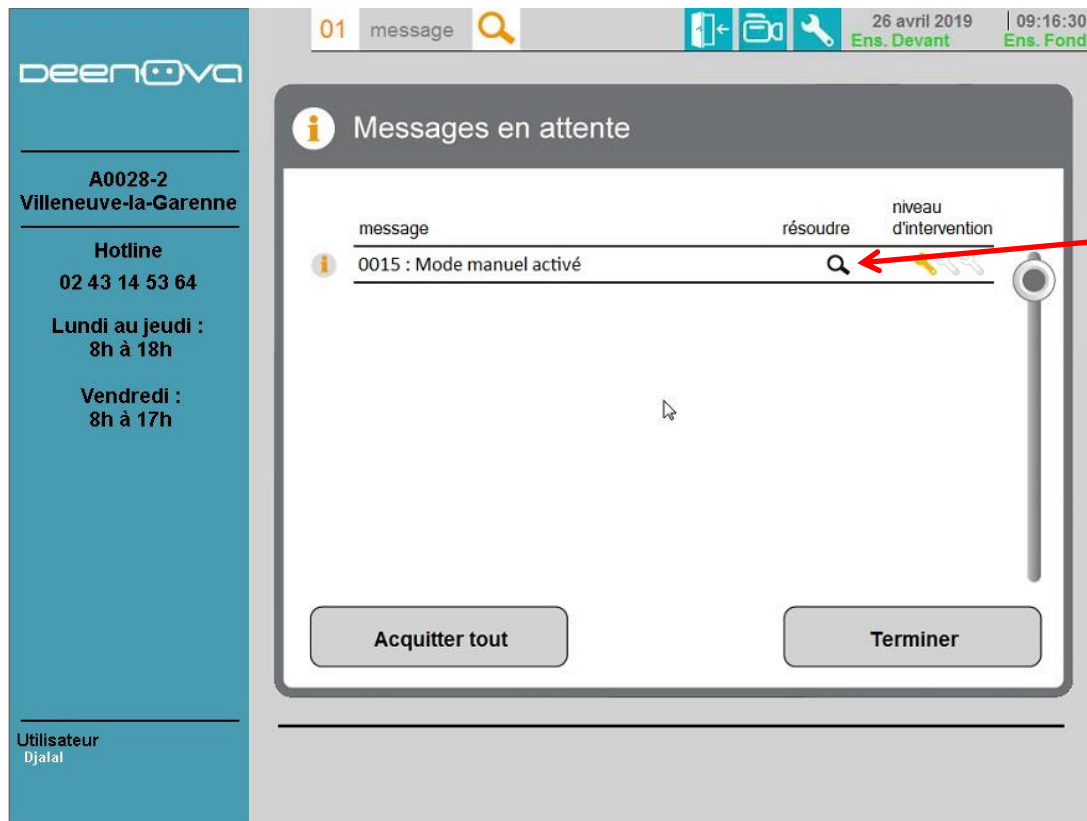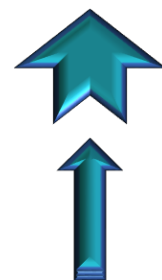


Le message 0015 vous informe que l'automate est en mode manuel. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

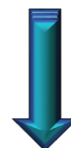



Comment réagir aux messages

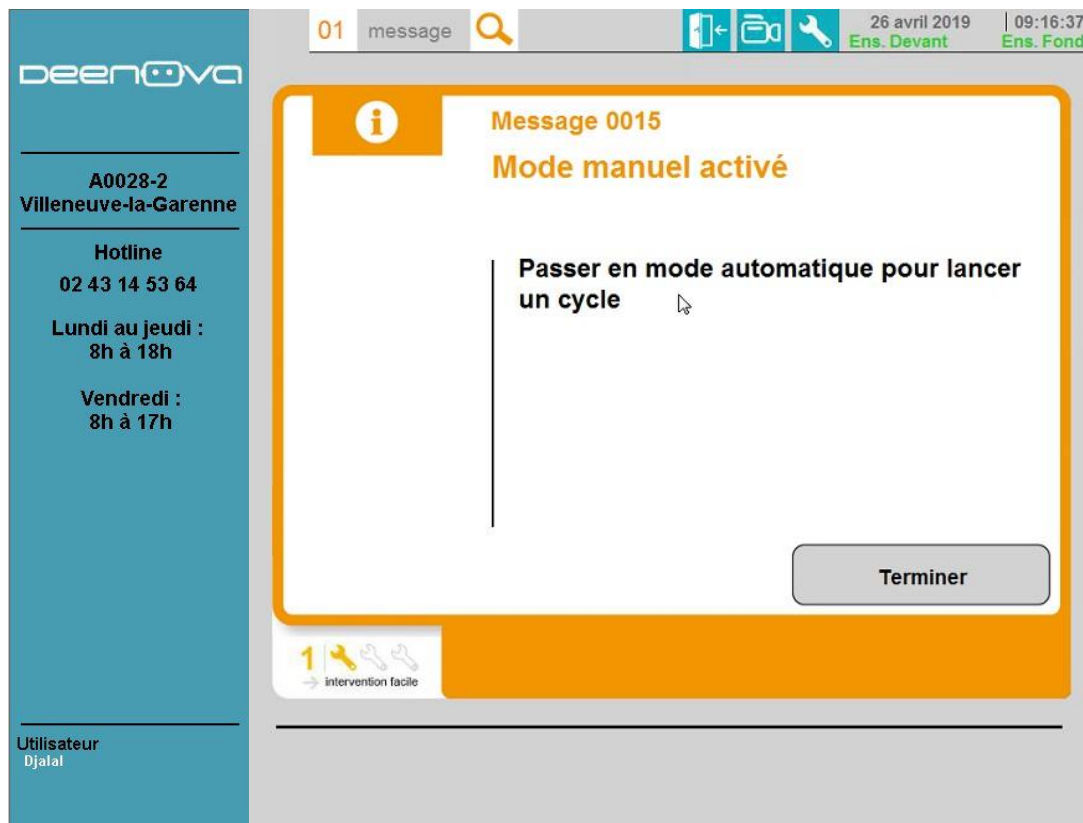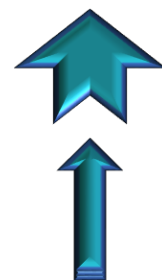


Le message 0015 vous informe que l'automate est en mode manuel. Pour passer en mode automatique, il vous faut aller dans le menu système.

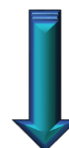


Comment réagir aux messages

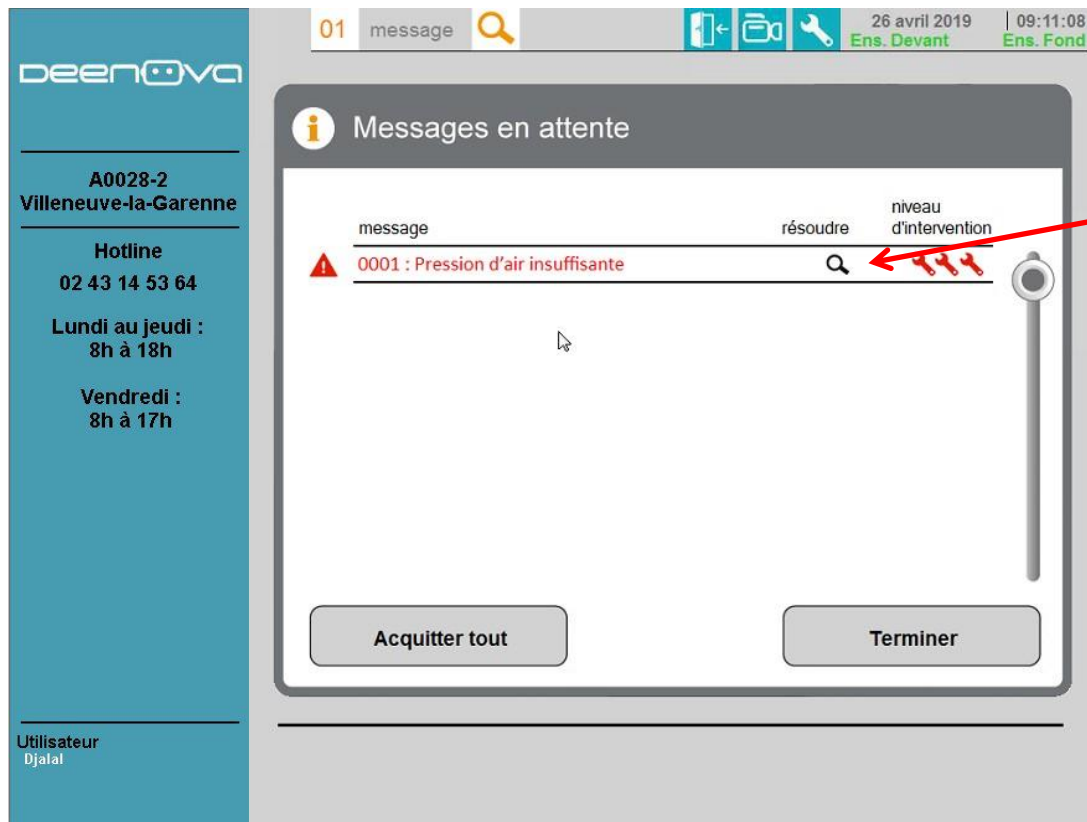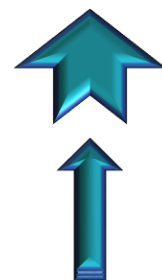

Le message 0001 vous informe que la pression d'air de l'automate est insuffisante. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

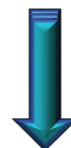



Comment réagir aux messages

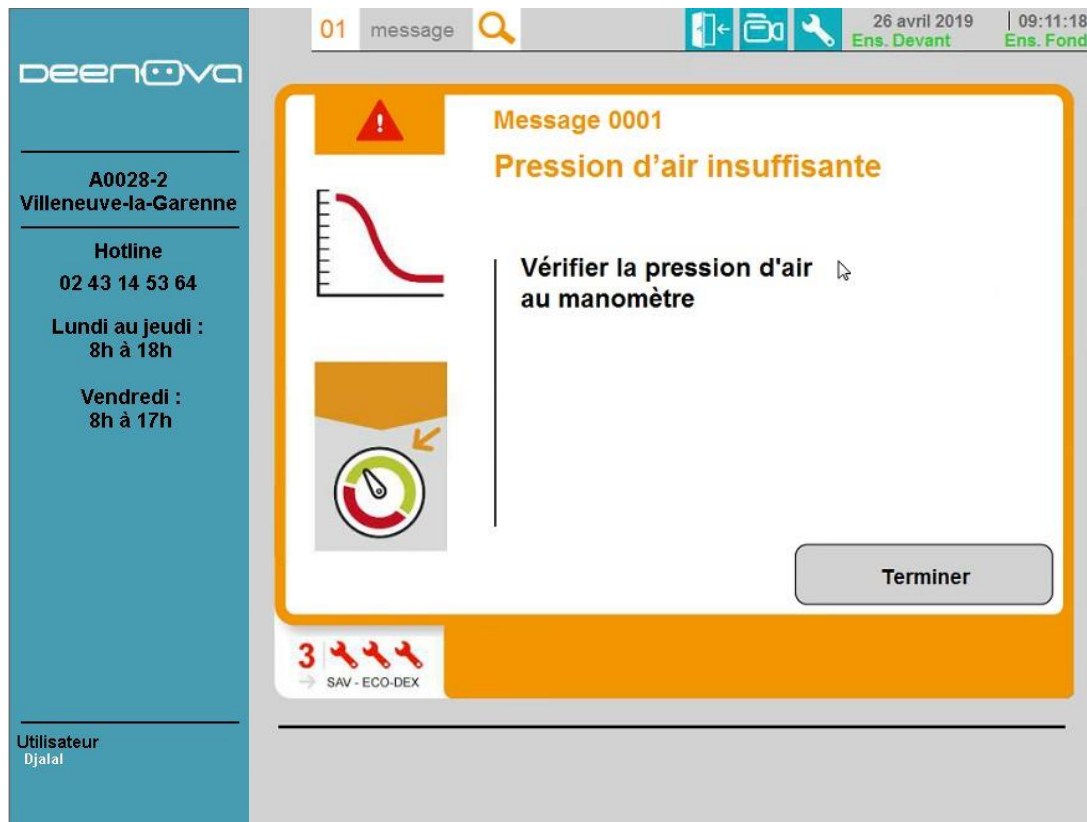


Le message 0001 vous informe que la pression d'air de l'automate est insuffisante. Vérifier la pression d'air sur le manomètre situé au dessus du chargeur blister. La pression doit être supérieure à 0.5Mpa.




Comment réagir aux messages

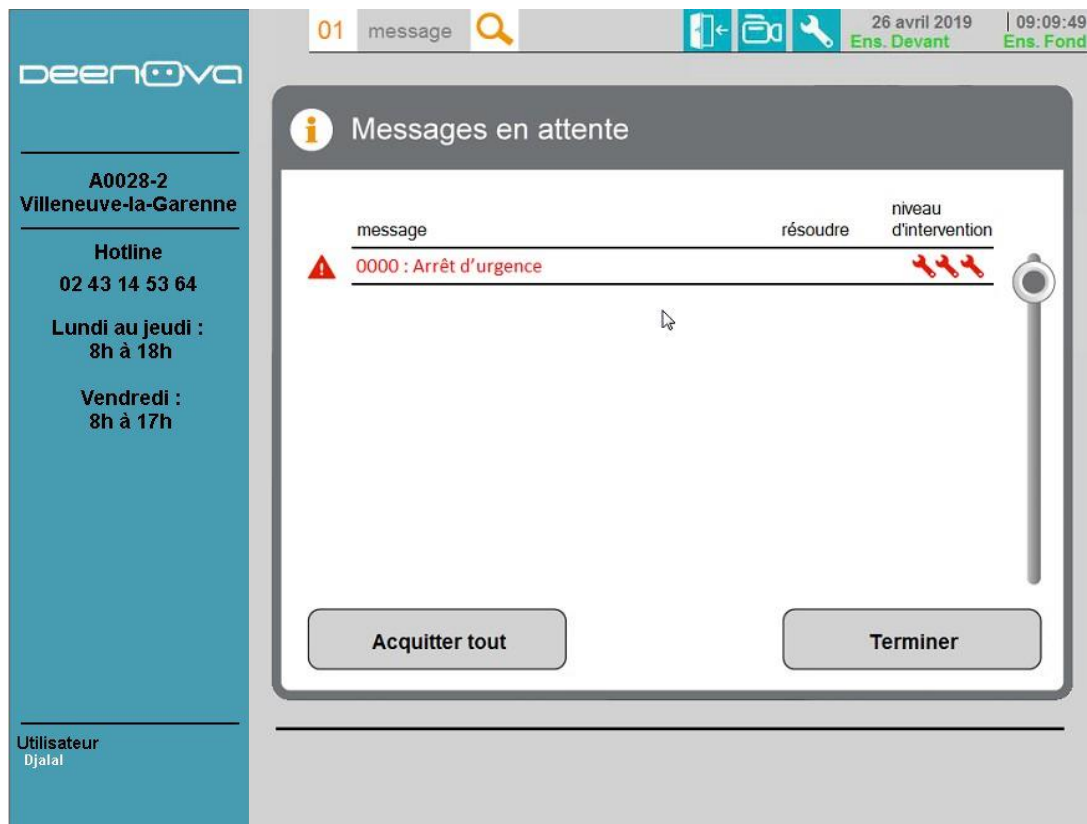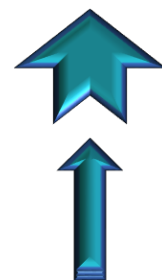

Le message 0000 vous informe que l'automate est en arrêt d'urgence. Contrôler le bouton poussoir d'arrêt d'urgence du module et des robots.

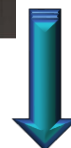


Comment réagir aux messages

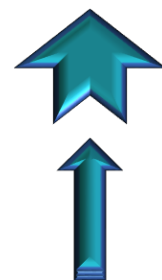


The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main window displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) section. At the top of this section, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. A message is listed with a red warning icon: '0005 : Defaut Bloc Fonctionnel du groupe de'. To the right of the message text are three red wrench icons. Below the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'. The top status bar shows the date '26 avril 2019' and time '09:12:47', along with 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond'.

Le message 0005 vous informe que le bloc fonctionnel du groupe de communication est en défaut. Contacter la hotline.

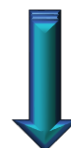

Comment réagir aux messages

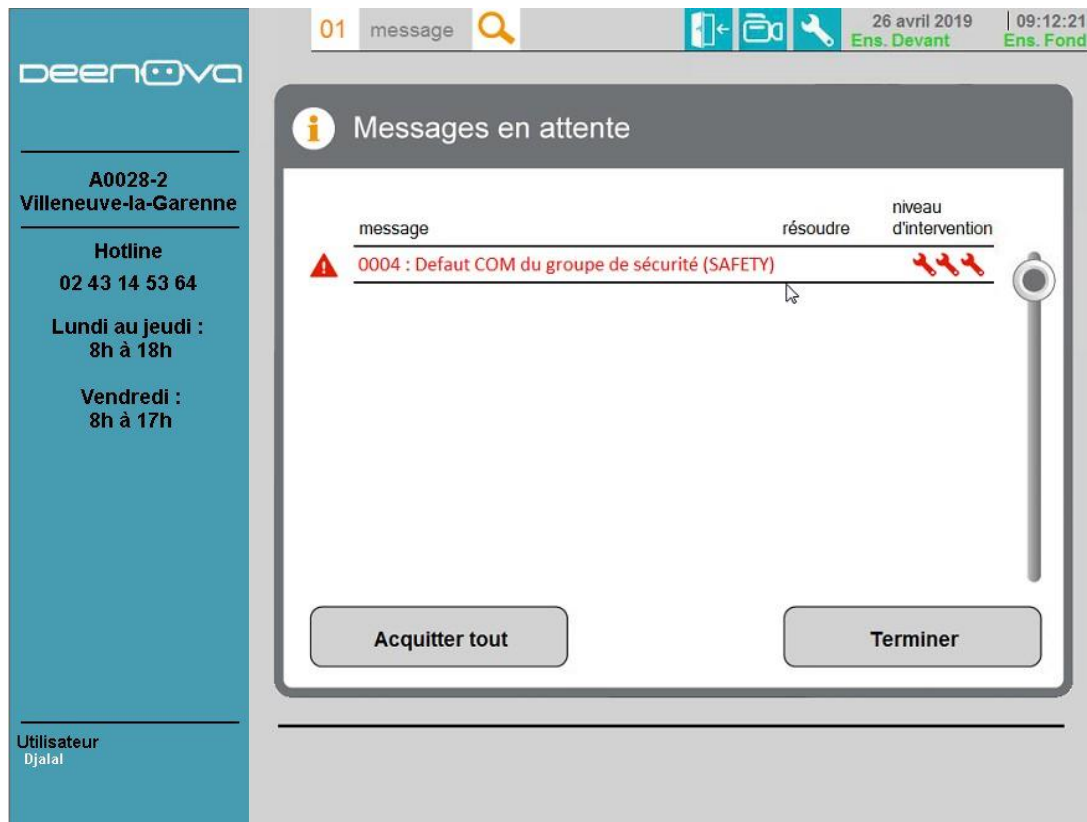



The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number (02 43 14 53 64) and operating hours (Monday-Thursday 8h-18h, Friday 8h-17h). The user is identified as 'Utilisateur Djalal'. The main window has a top bar with '01 message', a search icon, and icons for navigation and tools. The date and time are '26 avril 2019 | 09:12:21', with status indicators 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond'. The central panel is titled 'Messages en attente' and contains a table with one message:



message	résoudre	niveau d'intervention
 0004 : Defaut COM du groupe de sécurité (SAFETY)		

At the bottom of the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.


Le message 0004 vous informe que le groupe de sécurité est en défaut de communication. Contacter la hotline.

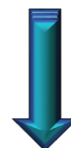



Comment réagir aux messages

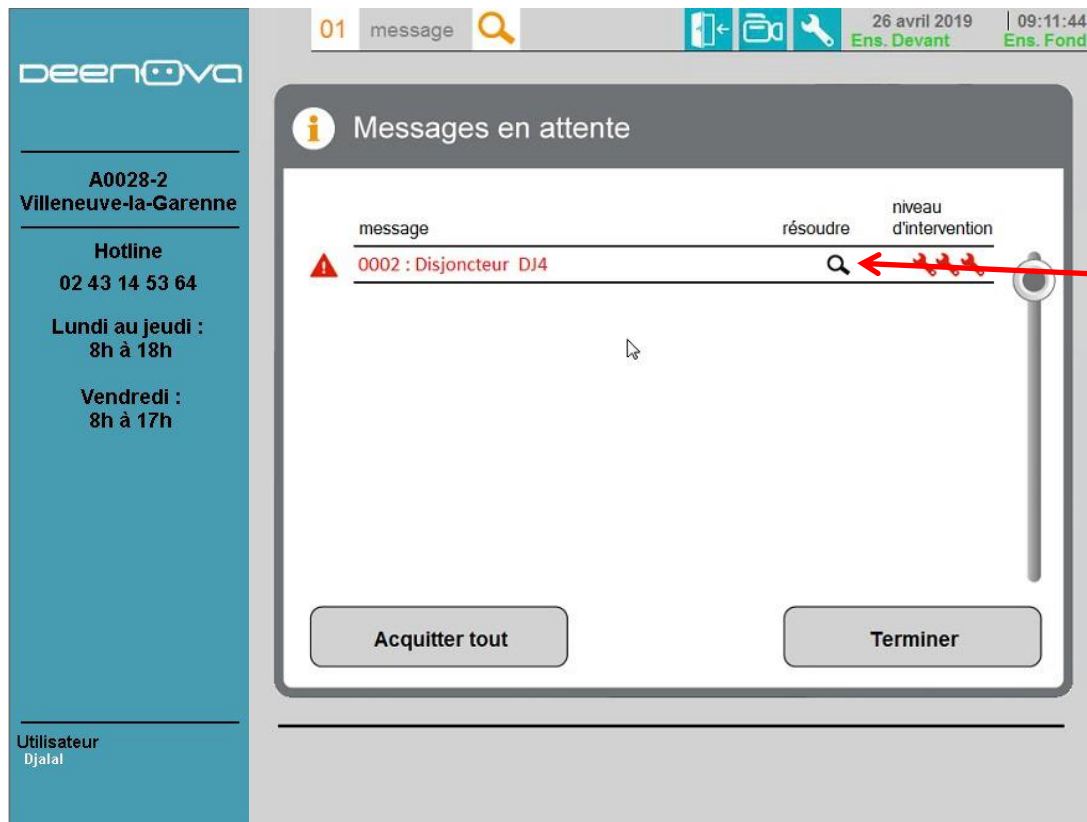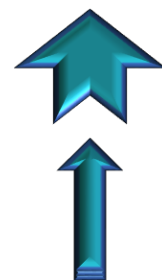

Le message 0002 vous informe qu'un disjoncteur est à réarmer. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

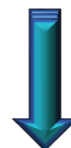


Comment réagir aux messages

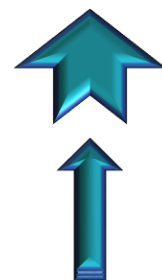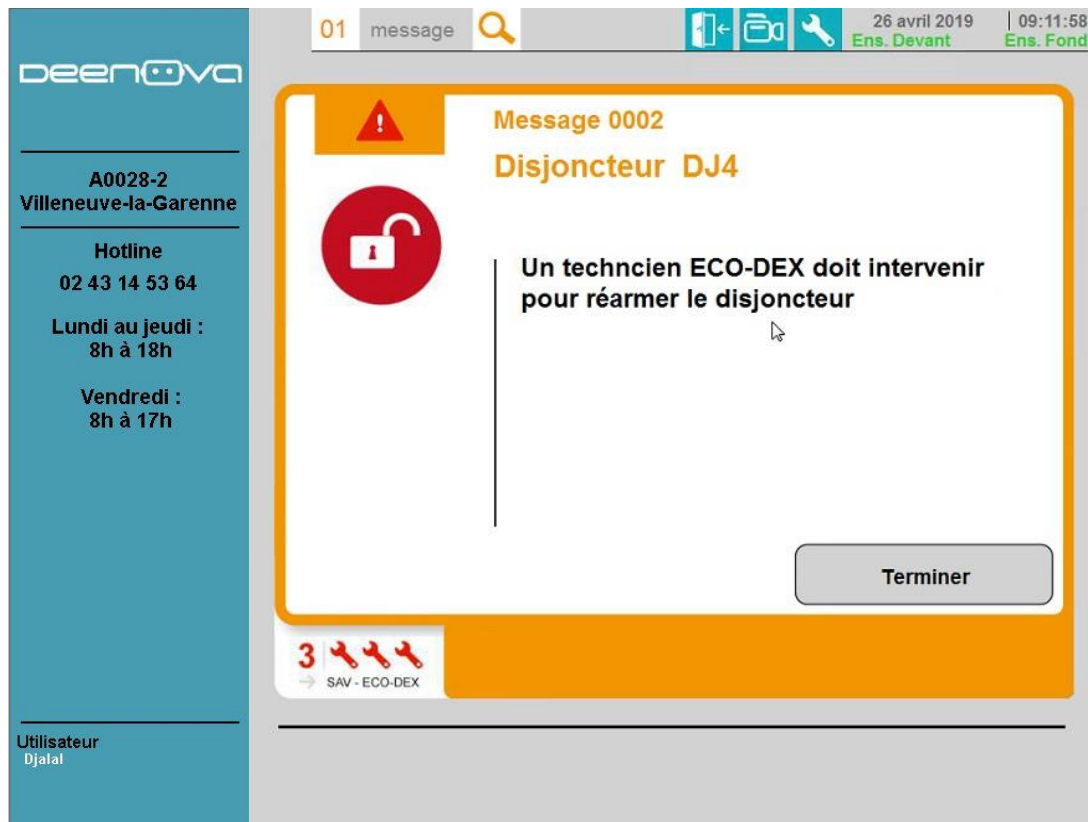



The screenshot shows the ECO-DEX interface. On the left, there is a sidebar with the company logo 'deenova' and contact information for 'A0028-2 Villeneuve-la-Garenne'. The main area displays a message titled 'Message 0002 Disjoncteur DJ4'. The message content states: 'Un technicien ECO-DEX doit intervenir pour réarmer le disjoncteur'. Below the message, there is a 'Terminer' button. At the bottom left of the message area, there is a status bar showing '3' and 'SAV - ECO-DEX'.

Le message 0002 vous informe qu'un disjoncteur est à réarmer.
Contacter la hotline.

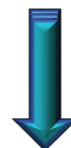

Comment réagir aux messages

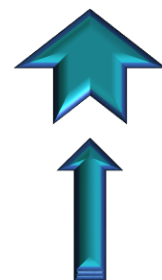

The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0011 : Erreur chaine de sécurité Chargeur de'. Above the message, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. Below the message, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:14:46
Ens. Devant Ens. Fond


Messages en attente

message résoudre niveau d'intervention

0011 : Erreur chaine de sécurité Chargeur de

Acquitter tout Terminer

Le message 0011 vous informe que la chaîne de sécurité du chargeur blister est en défaut. Contacter la hotline.

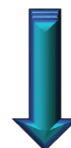

Comment réagir aux messages



The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0012 : Erreur chaine de sécurité CPU Pilulier'. Above the message, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. Below the message, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:15:09
Ens. Devant Ens. Fond


Messages en attente

message résoudre niveau d'intervention



0012 : Erreur chaine de sécurité CPU Pilulier

Acquitter tout Terminer

Le message 0012 vous informe que la chaîne de sécurité du CPU Pilulier est en défaut.
Contacter la hotline.

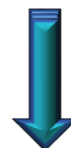

Comment réagir aux messages

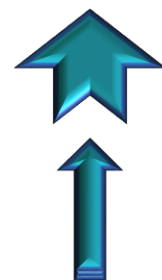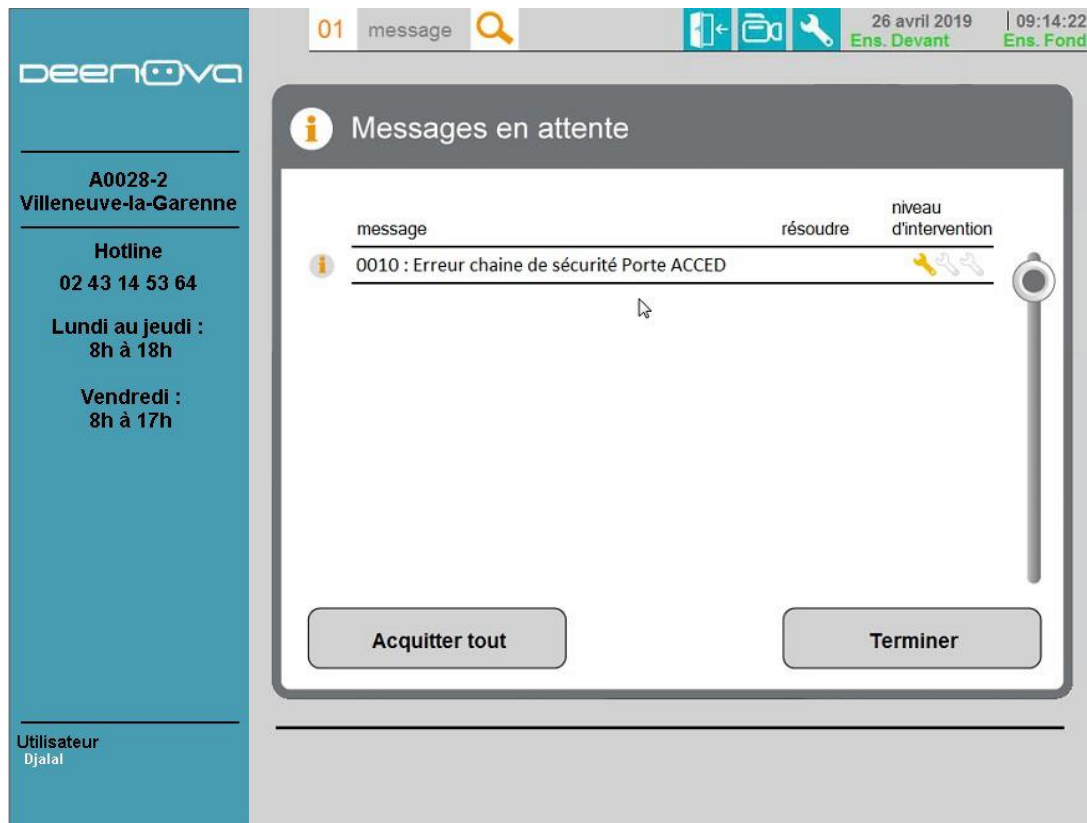The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0010 : Erreur chaine de sécurité Porte ACCED'. Below the message are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:14:22
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
0010 : Erreur chaine de sécurité Porte ACCED		

Acquitter tout **Terminer**


Le message 0010 vous informe que la chaîne de sécurité de la porte de l'ACCED est en défaut. Contacter la hotline.

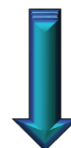



Comment réagir aux messages

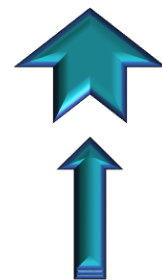


Chargeur blister

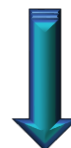


Comment réagir aux messages

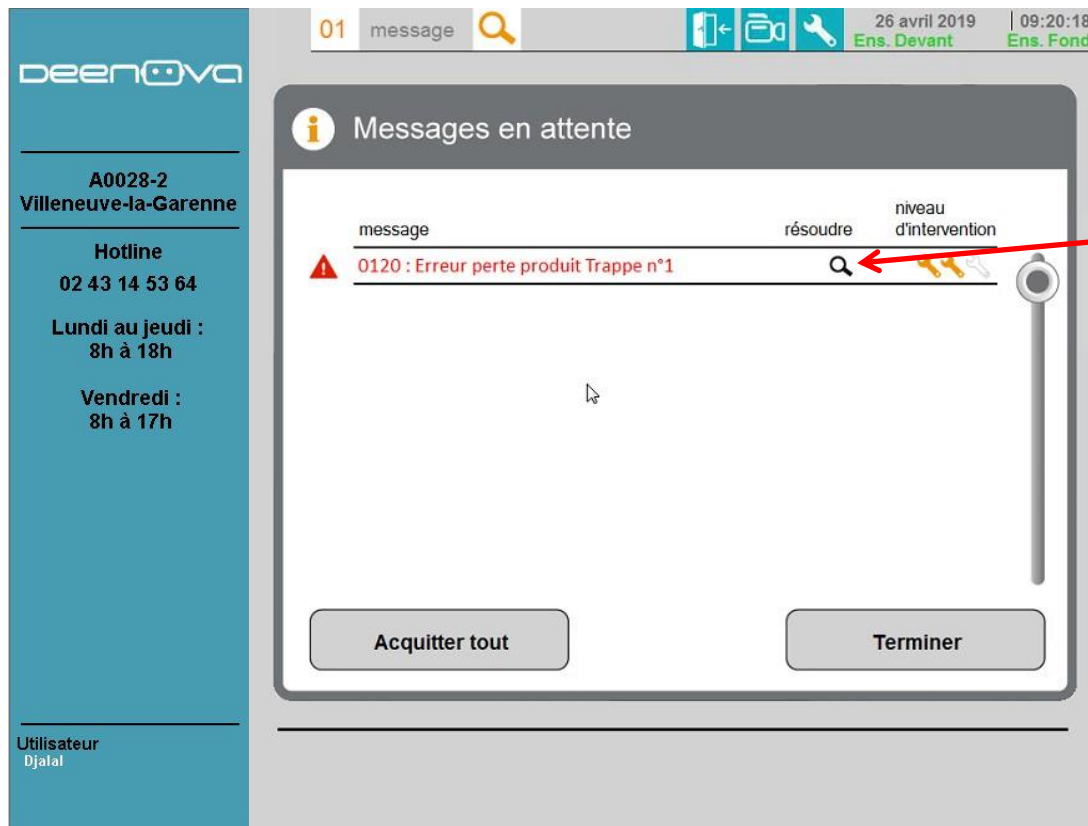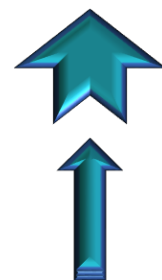

Le message 0120 vous informe d'une erreur perte produit dans la Trappe n°1. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

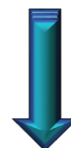

Comment réagir aux messages

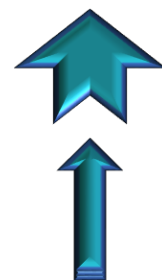


The screenshot shows the Deenova machine interface. On the left, there is a sidebar with the following information:

- deenova**
- A0028-2**
- Villeneuve-la-Garenne**
- Hotline**
- 02 43 14 53 64**
- Lundi au jeudi : 8h à 18h**
- Vendredi : 8h à 17h**
- Utilisateur**
- Djalal**



The main display area shows a message box with the following content:

- 01 message** (with a search icon)
- 26 avril 2019 | 09:20:28**
- Ens. Devant** and **Ens. Fond**
- Message 0120**
- Erreur perte produit Trappe n°1**
- Ouvrir la trappe**
- Repositionner les blisters**
- ou vider la trappe**
- Fermer la trappe**
- Terminer** (button)
- 2** (with a wrench icon) and **personnel formé**

Le message 0120 vous informe d'une erreur perte produit dans la Trappe n°1. Suivez les instructions.

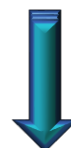

Comment réagir aux messages

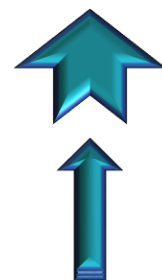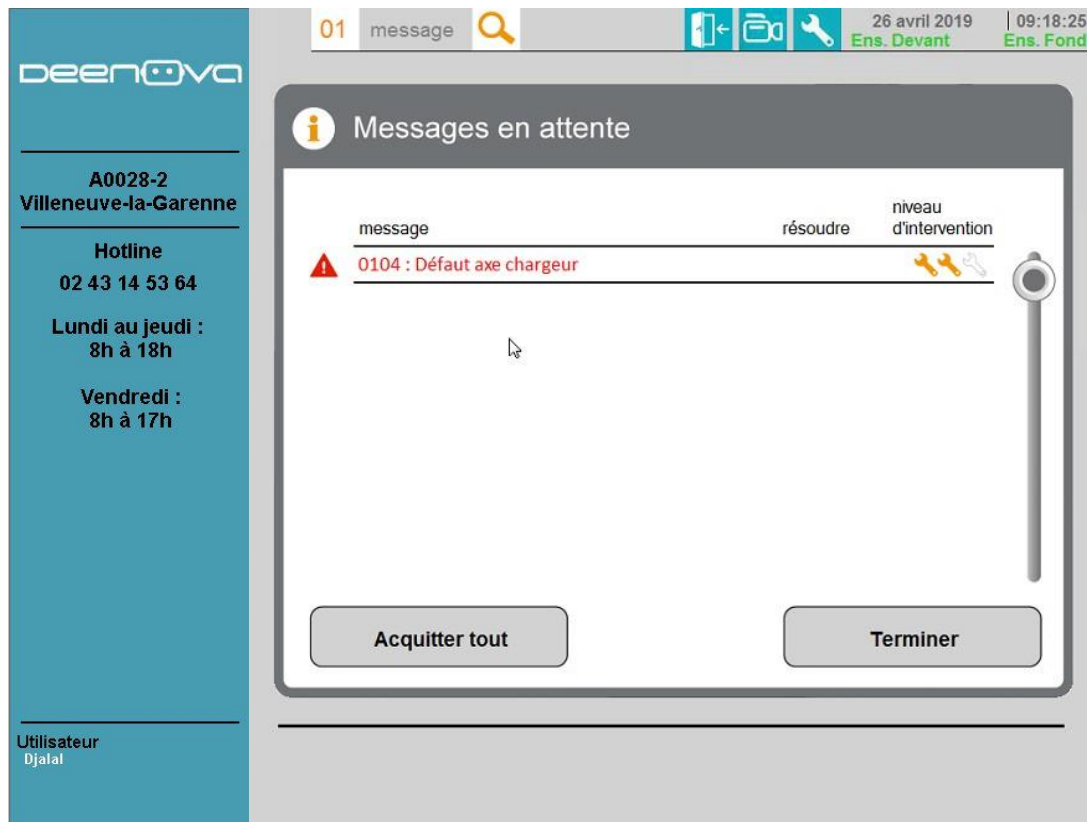The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0104 : Défaut axe chargeur' with a red warning icon. Above the message, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. Below the message, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:18:25
Ens. Devant Ens. Fond


Messages en attente

message résoudre niveau d'intervention



0104 : Défaut axe chargeur

Acquitter tout **Terminer**


Le message 0104 vous informe que l'axe du chargeur est en défaut.
Contacter la hotline.

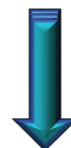


Comment réagir aux messages

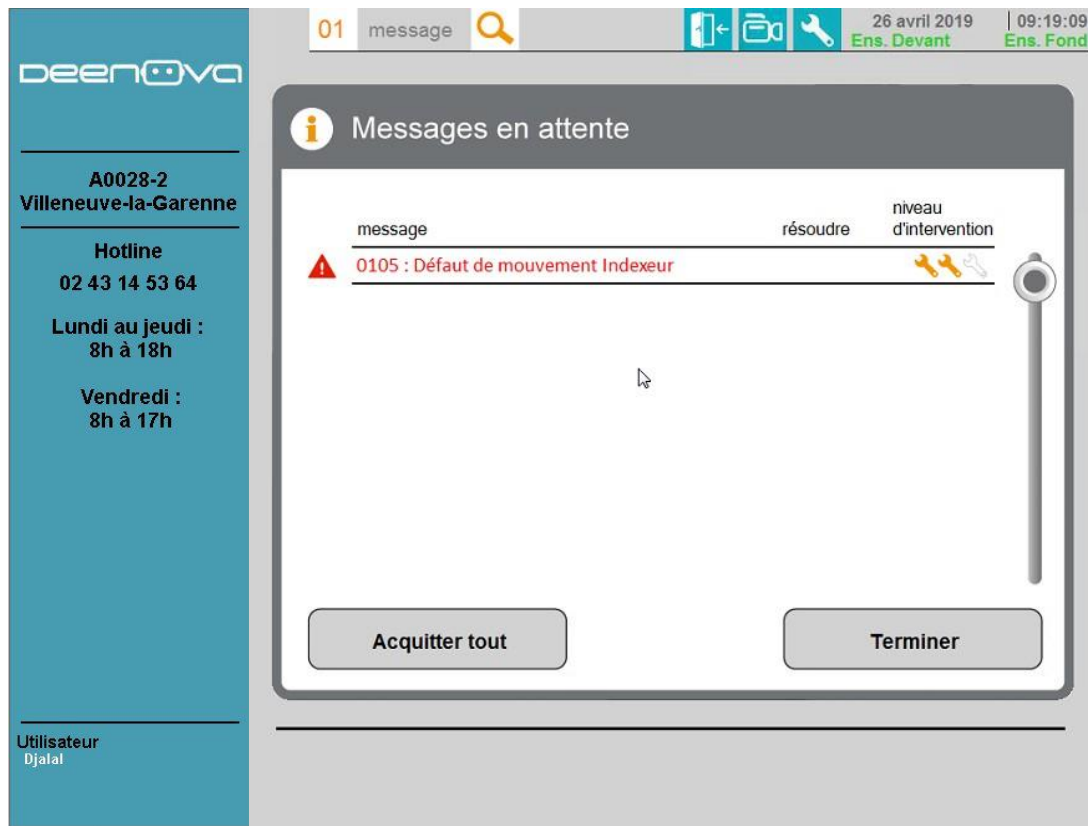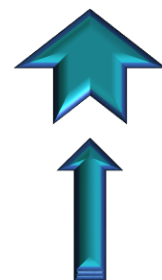

Le message 0105 vous informe que l'indexeur ne parvient pas à effectuer son mouvement. Contacter la hotline.

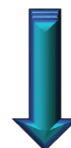

Comment réagir aux messages

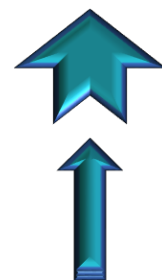

The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0106 : Verrouillage de la trappe n°1', which is highlighted in red. Above the message, there are columns for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. Below the message, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:19:29
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
0106 : Verrouillage de la trappe n°1		3

Acquitter tout **Terminer**


Le message 0106 vous informe que la trappe n°1 est en attente de verrouillage.

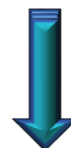

Comment réagir aux messages

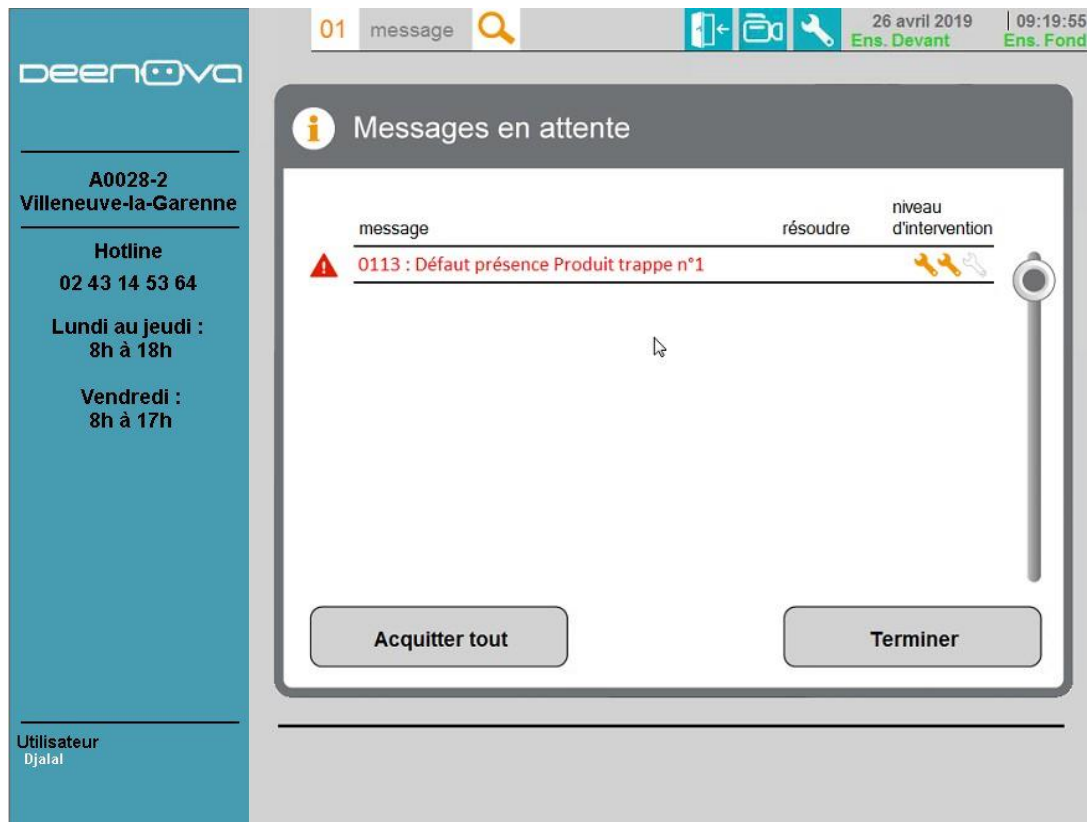

Le message 0113 vous informe qu'un produit non attendu est détecté dans la trappe n°1. Retirer le(s) blister(s). Si le problème persiste, contacter la hotline.

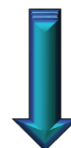

Comment réagir aux messages

Robot de coupe



Comment réagir aux messages



DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:23:16
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
0204 : Robot coupe pas en EXT	🔍	🔧

Acquitter tout Terminer

Le message 0204 vous informe que le robot de coupe n'est pas en EXT. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

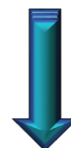


Comment réagir aux messages

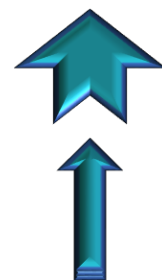



The screenshot shows the Deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 0204 Robot coupe pas en EXT'. The message content instructs the user to make an access request, open the door, set the robot to EXT mode, and close the door. An icon of a robot arm is shown next to the instructions. At the bottom of the message box is a 'Terminer' button. The interface also shows a date and time stamp (26 avril 2019, 09:23:25) and a status bar with 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond'.


Le message 0204 vous informe que le robot de coupe n'est pas en EXT. Suivez les instructions.

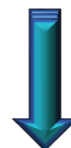


Comment réagir aux messages

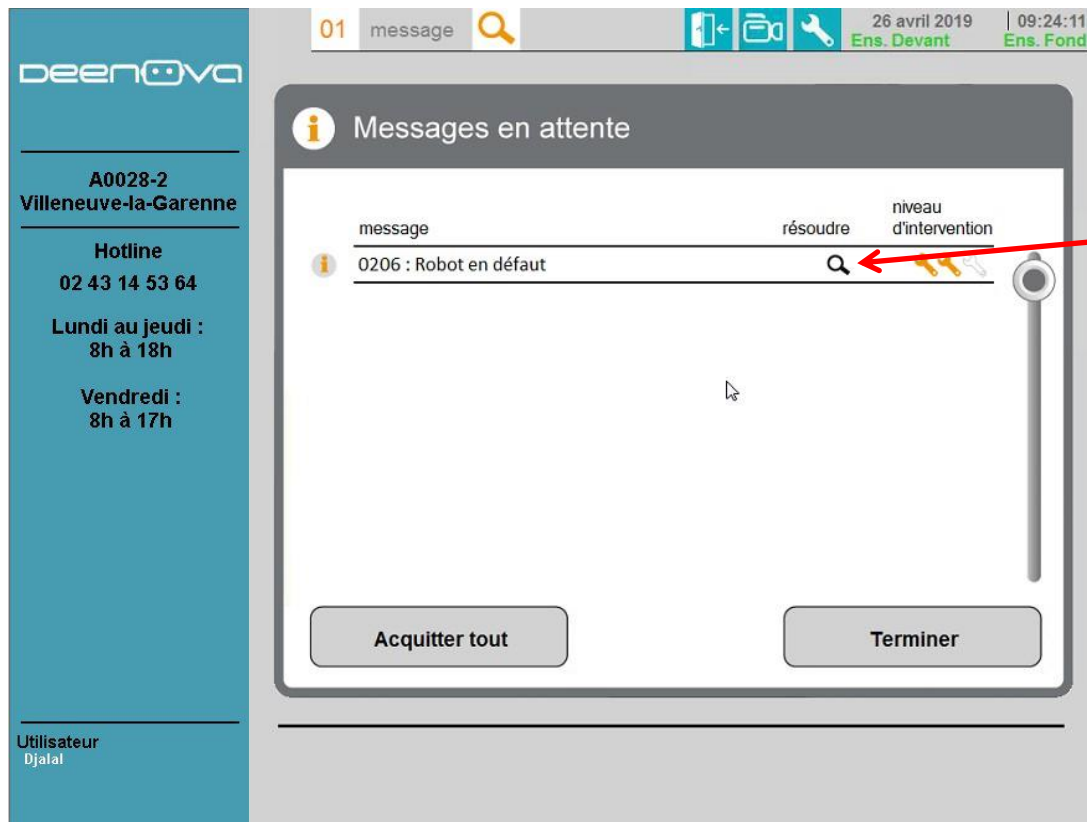

Le message 0206 vous informe que le robot de coupe est en défaut.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

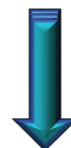


Comment réagir aux messages

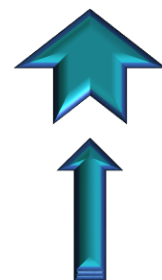


The screenshot shows the DEENOVA user interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 0206 Robot en défaut'. The message content lists three actions: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', and 'Visualiser les messages', followed by 'Fermer la porte'. An icon of a robot arm is shown on the left of the message content. At the bottom right of the message box is a 'Terminer' button. Below the message box, there is a status bar indicating '2 personnes formées' with a small icon of two people. The top of the interface shows a navigation bar with a search icon, a date/time stamp (26 avril 2019, 09:24:19), and status indicators (Ens. Devant, Ens. Fond).


Le message 0206 vous informe que le robot de coupe est en défaut.
Suivez les instructions.

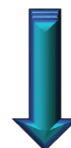


Comment réagir aux messages

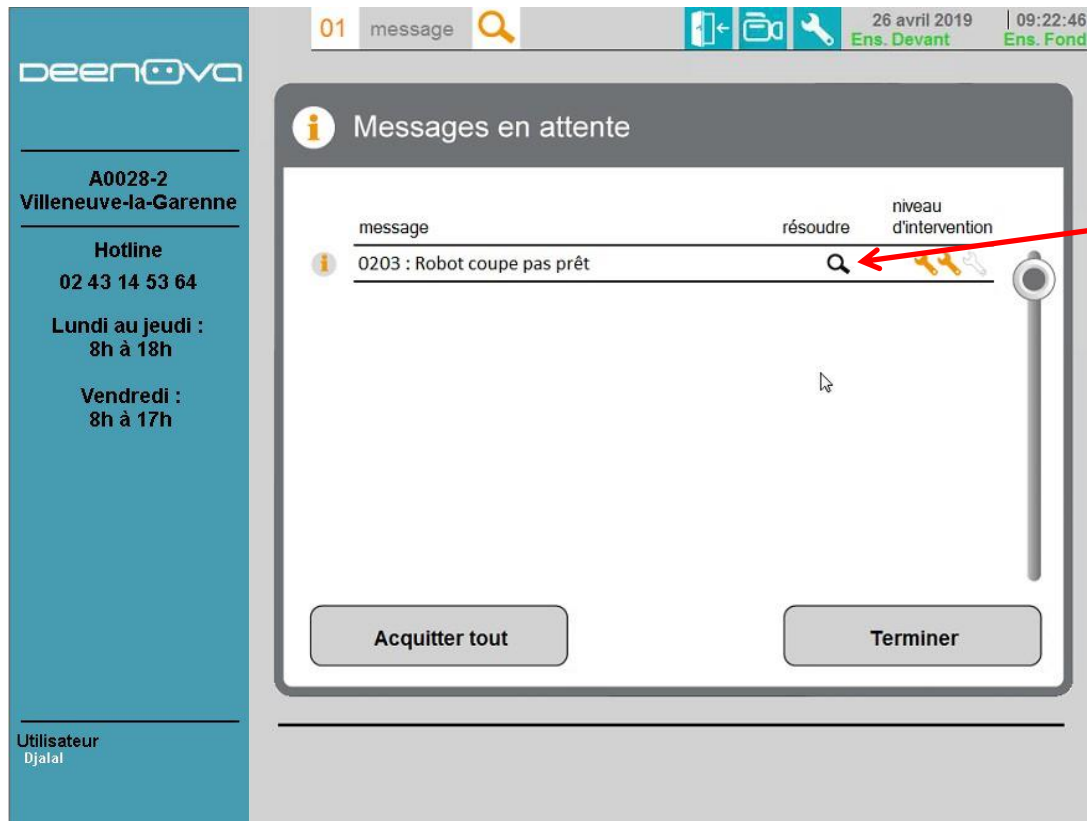

Le message 0203 vous informe que le robot de coupe n'est pas prêt. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

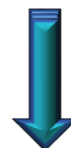


Comment réagir aux messages

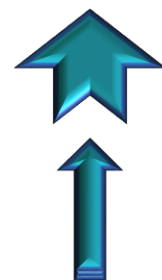


The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 0203 Robot coupe pas prêt'. The message text instructs the user to make an access request, open the door, execute the W_LoopPos trajectory of the KUKA robot, and set it to external mode before closing the door. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '2' with a wrench icon and the text 'personnel formé'. The top of the interface shows a status bar with icons for message, search, and navigation, along with the date '26 avril 2019' and time '09:22:56'.

Le message 0203 vous informe que le robot de coupe n'est pas prêt.
Suivez les instructions.

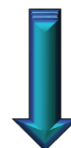

Comment réagir aux messages

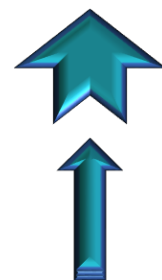

The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a list of messages under the heading 'Messages en attente'. A specific message is highlighted: '0209 : Robot Coupe en Timeout'. To the right of the message text are columns for 'résoudre' and 'niveau d'intervention', with three red wrench icons indicating a high priority or level. At the bottom of the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:24:42
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente



message	résoudre	niveau d'intervention
0209 : Robot Coupe en Timeout		⚙️⚙️⚙️

Acquitter tout **Terminer**



Le message 0209 vous informe que le robot de coupe a dépassé le temps d'attente.

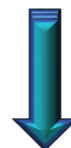



Comment réagir aux messages

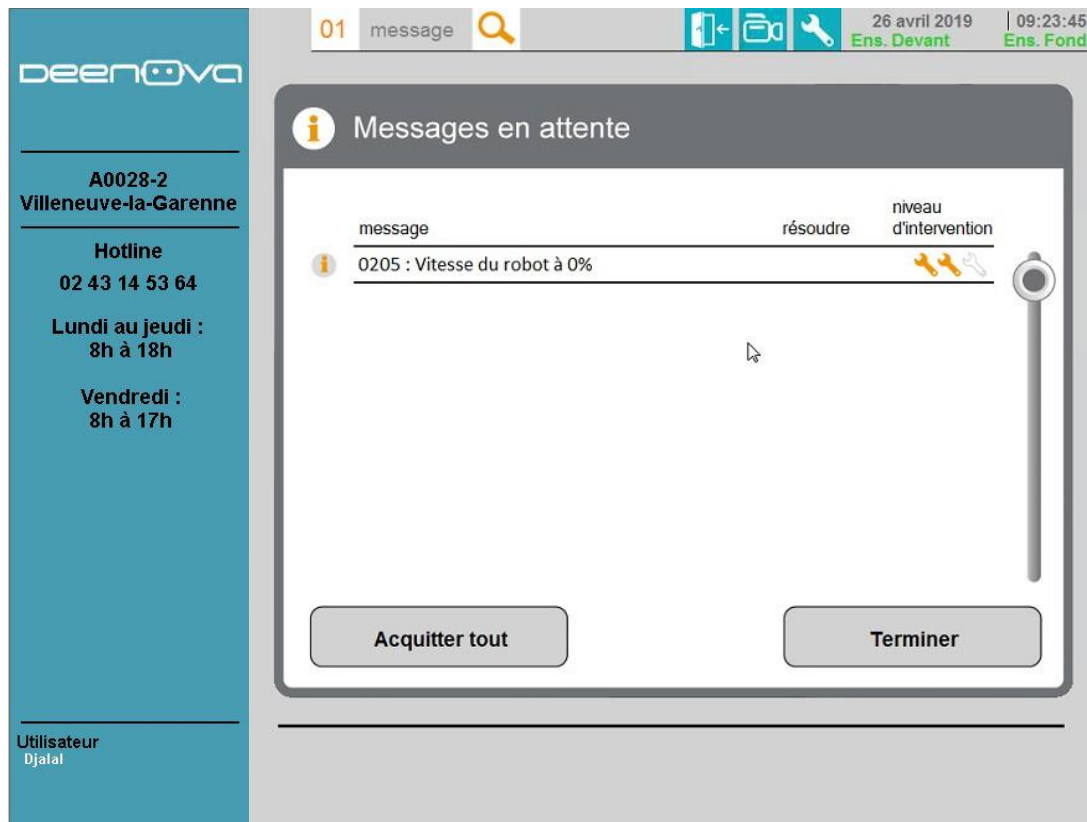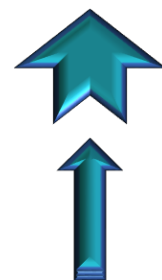


Le message 0205 vous informe que le robot de coupe est à 0% de sa vitesse. Ouvrir la porte (demande d'accès) et mettre le robot à 100%.

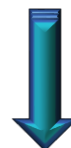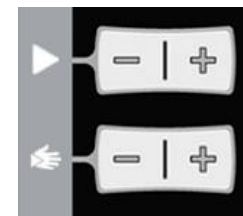



Comment réagir aux messages

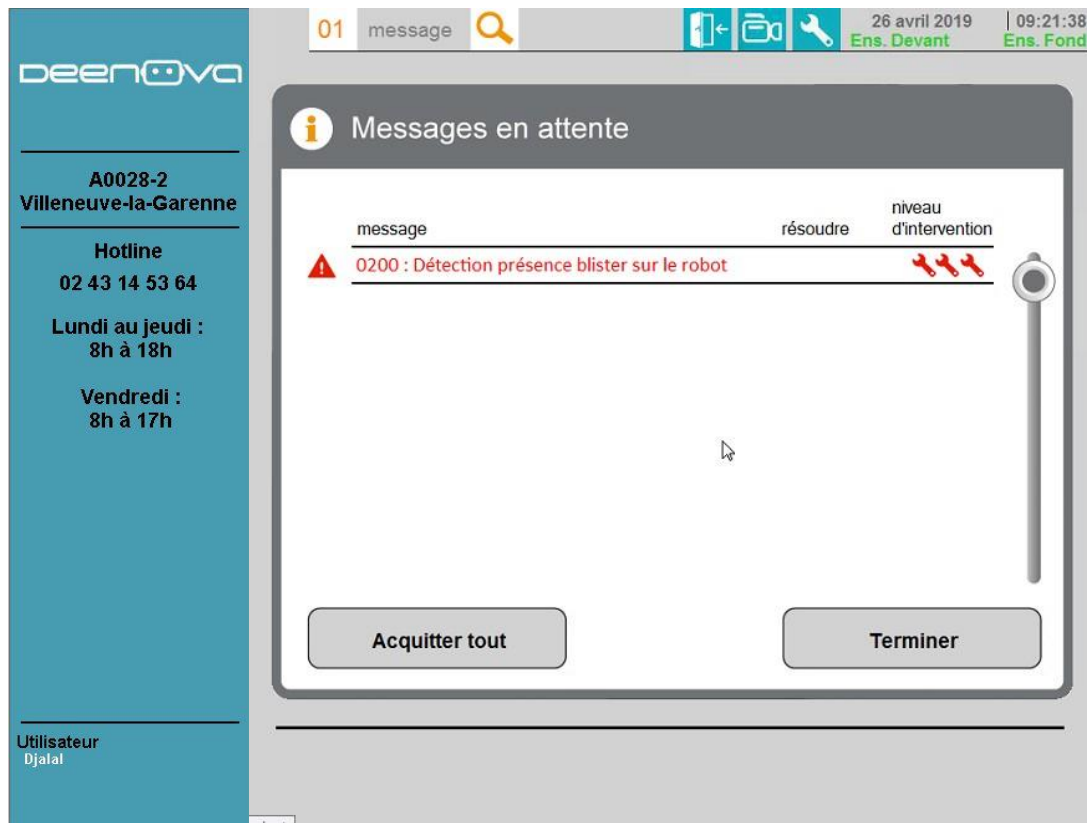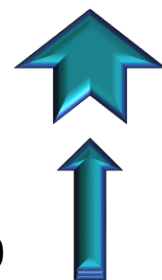


Le message 0200 vous informe qu'un blister non attendu est détecté sur le robot de coupe. Nettoyer le capteur.

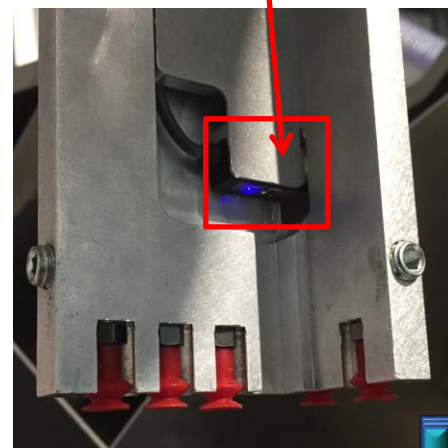



Comment réagir aux messages

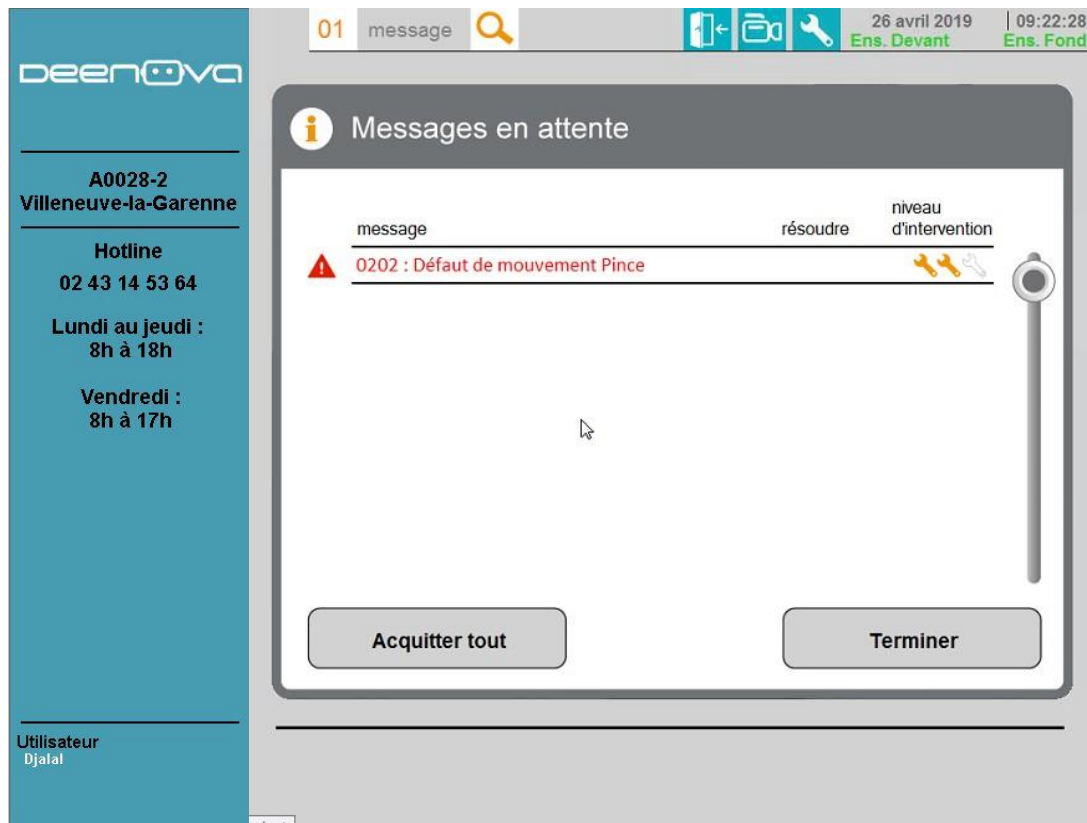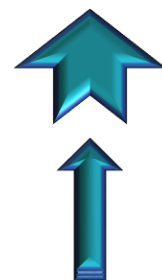


Le message 0202 vous informe que la pince ne parvient pas à effectuer son mouvement. Ouvrir la porte (demande d'accès), fermer manuellement la pince, refermer la porte. Si le problème persiste, contacter la hotline.

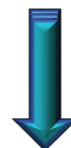

Comment réagir aux messages

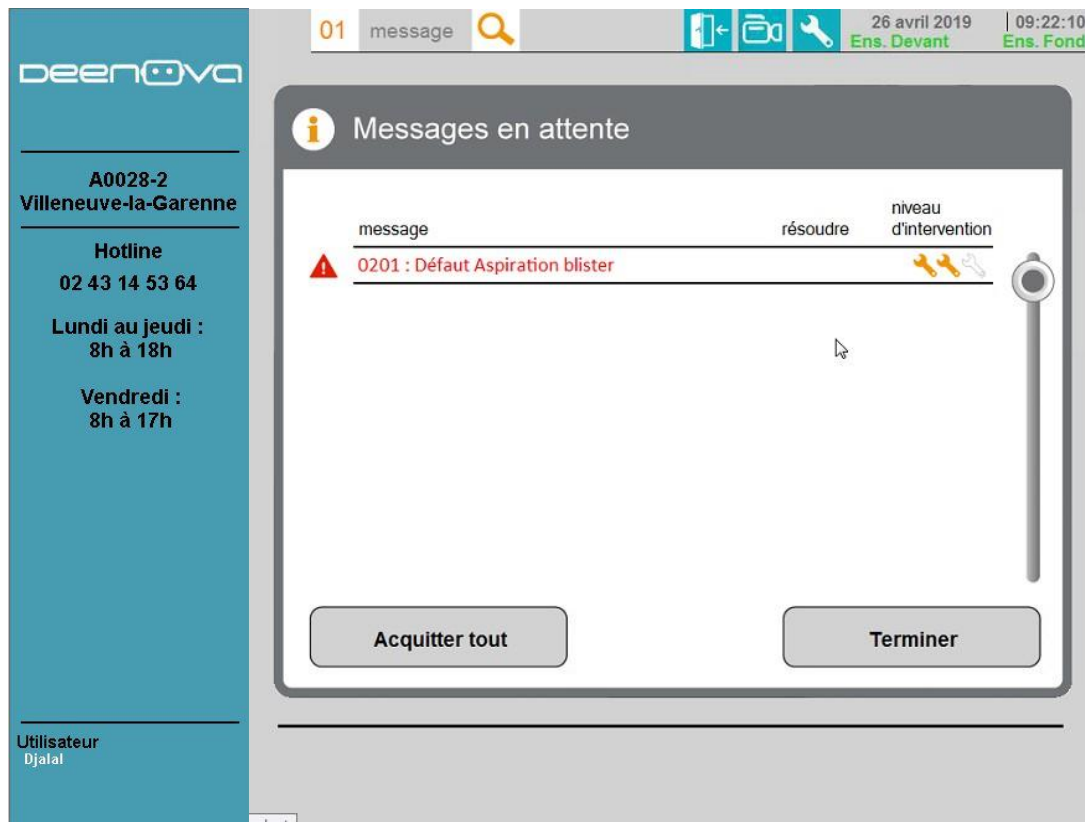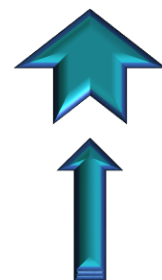

Le message 0201 vous informe que l'aspiration blister est en défaut. Contacter la hotline.

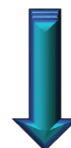

Comment réagir aux messages




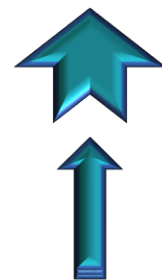



Table d'aspiration

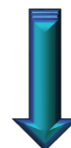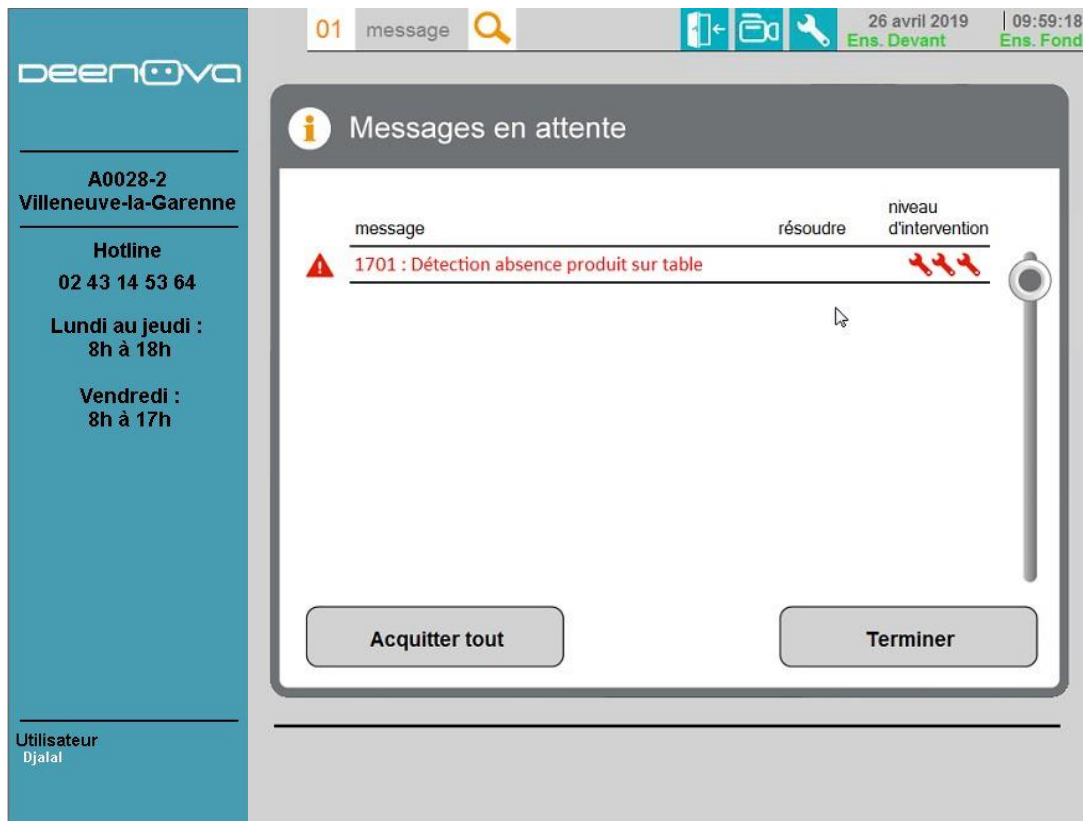



Comment réagir aux messages

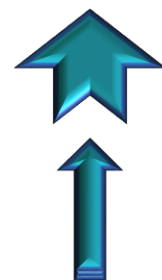


Le message 1700 vous informe que le blister n'est pas détecté sur la table d'aspiration. Vérifier le capteur.

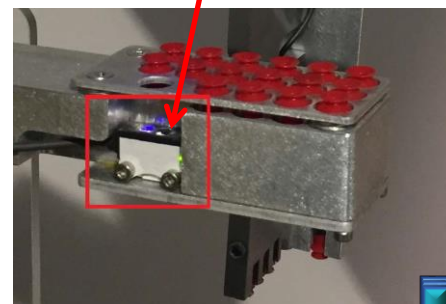


Comment réagir aux messages

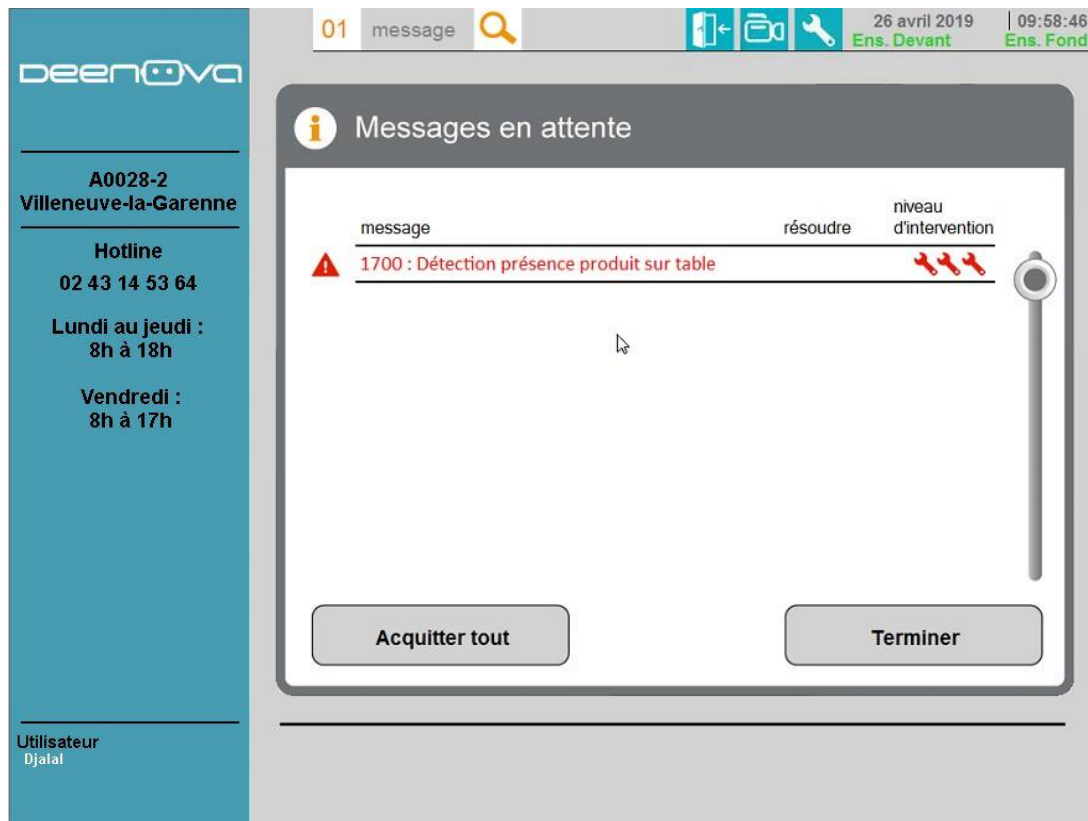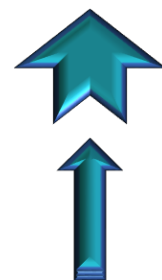


Le message 1700 vous informe qu'un blister non attendu est détecté sur la table d'aspiration. Nettoyer le capteur.

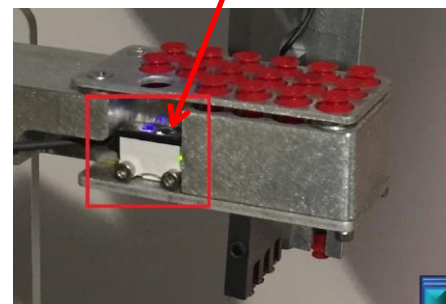



Comment réagir aux messages

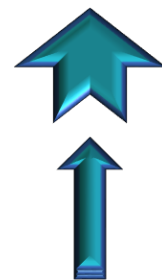


Zone de coupe

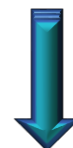

Comment réagir aux messages

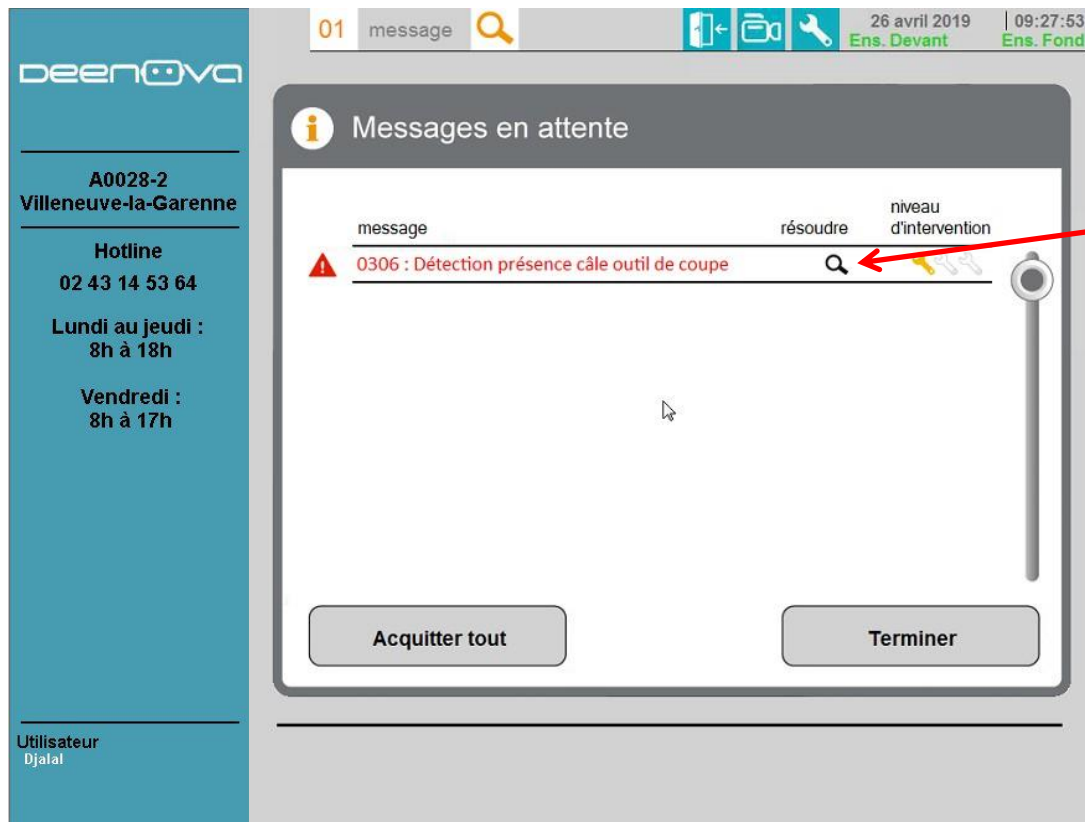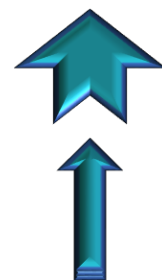

Le message 0306 vous informe que la cale de sécurité n'est pas détectée à son emplacement. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

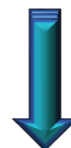


Comment réagir aux messages





The screenshot shows the DEENOVA user interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area displays a message titled 'Message 0306' with a warning icon. The message content is: 'Détection présence câble outil de coupe', 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Positionner la câble dans son emplacement', and 'Fermer la porte'. There is a 'Terminer' button at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '1' icon and the text 'Intervention facile'. The top of the interface shows a status bar with '01 message', a search icon, and system information: '26 avril 2019 | 09:28:17', 'Ens. Devant', and 'Ens. Fond'.


Le message 0306 vous informe que la cale de sécurité n'est pas détectée a son emplacement. Suivez les instructions.

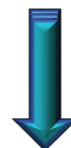



Comment réagir aux messages

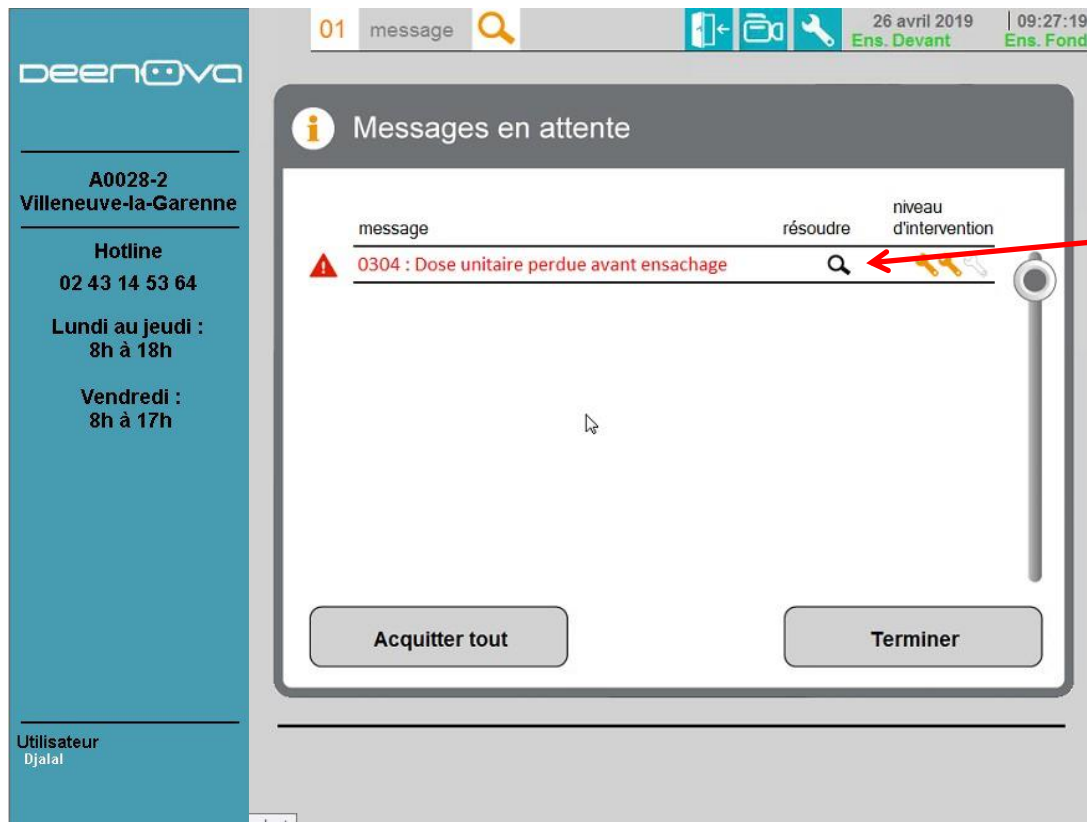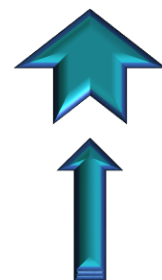

Le message 0304 vous informe qu'une dose unitaire fut perdue avant l'ensachage. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

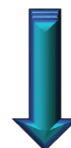


Comment réagir aux messages

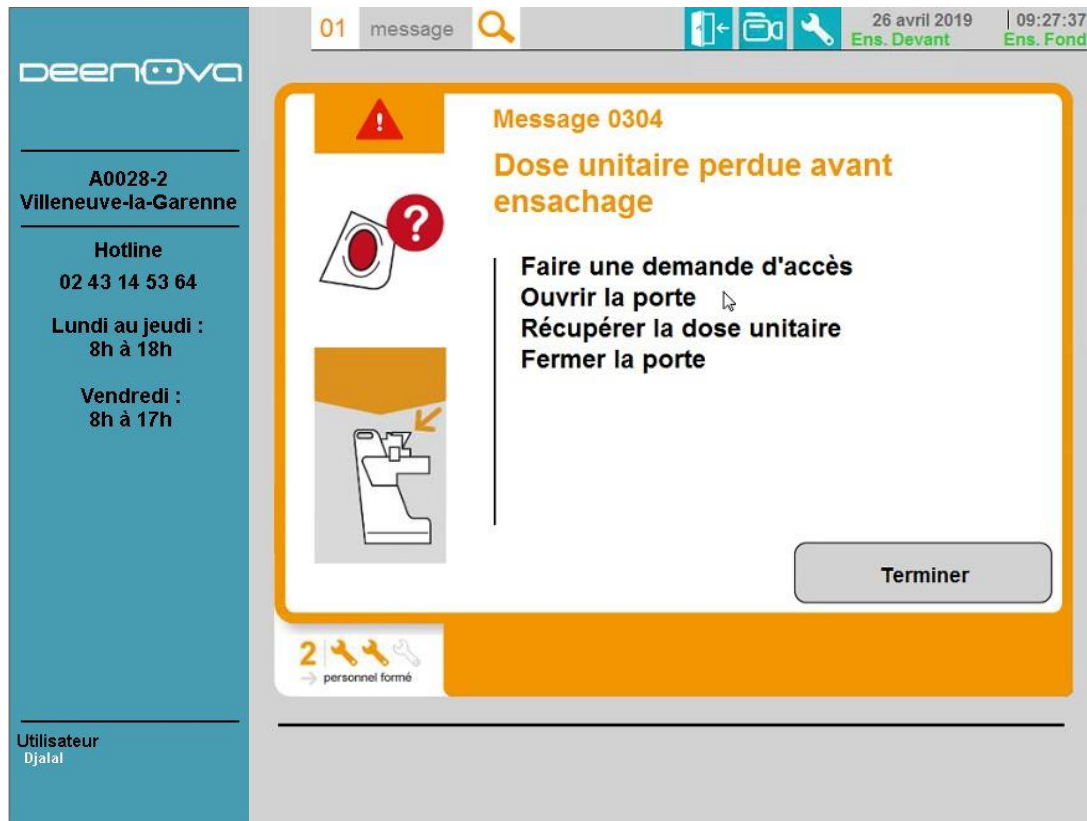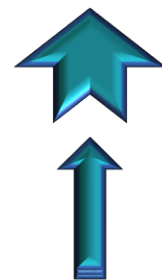

Le message 0304 vous informe qu'une dose unitaire fut perdue avant l'ensachage. Suivre les instructions. **Généralement le blister est plié devant l'outil de coupe ou la dose est coincée dans l'entonnoir.**

Attention de ne pas faire bouger le blister pendant la manipulation.

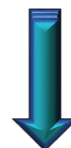

Comment réagir aux messages



The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a message titled 'Messages en attente'. The message content is '0302 : Défaut axe coupe' with a red warning icon. Above the message, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. Below the message, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:26:43
Ens. Devant Ens. Fond


Messages en attente

message résoudre niveau d'intervention



0302 : Défaut axe coupe

Acquitter tout **Terminer**


Le message 0302 vous informe que l'axe de coupe est en défaut. Contacter la hotline.

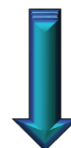


Comment réagir aux messages

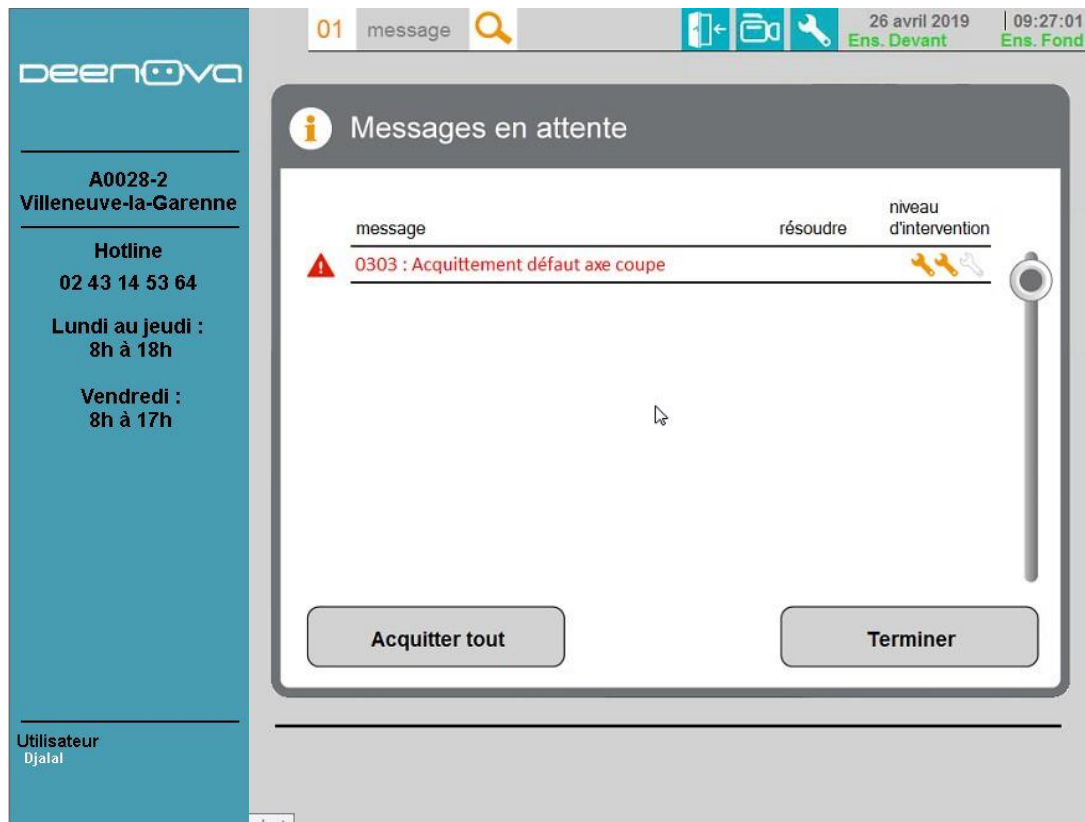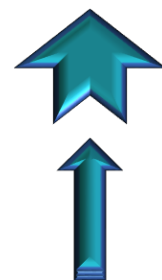


Le message 0302 vous informe que l'axe de coupe est en attente d'acquitement. Appuyer sur le bouton "Acquitter tout" pour relancer le mouvement de l'axe.

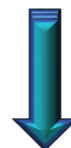



Comment réagir aux messages

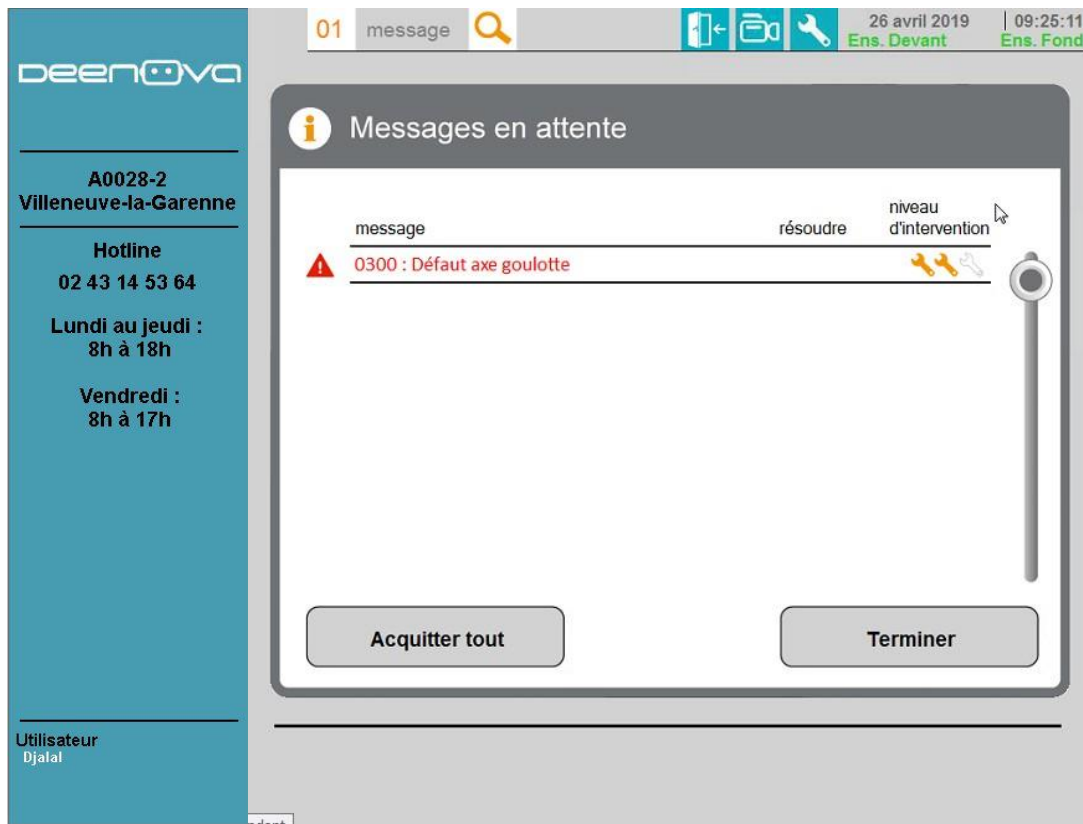


Le message 0300 vous informe que l'axe goulotte est en défaut.
Contacter la hotline.

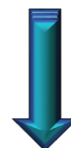


Comment réagir aux messages

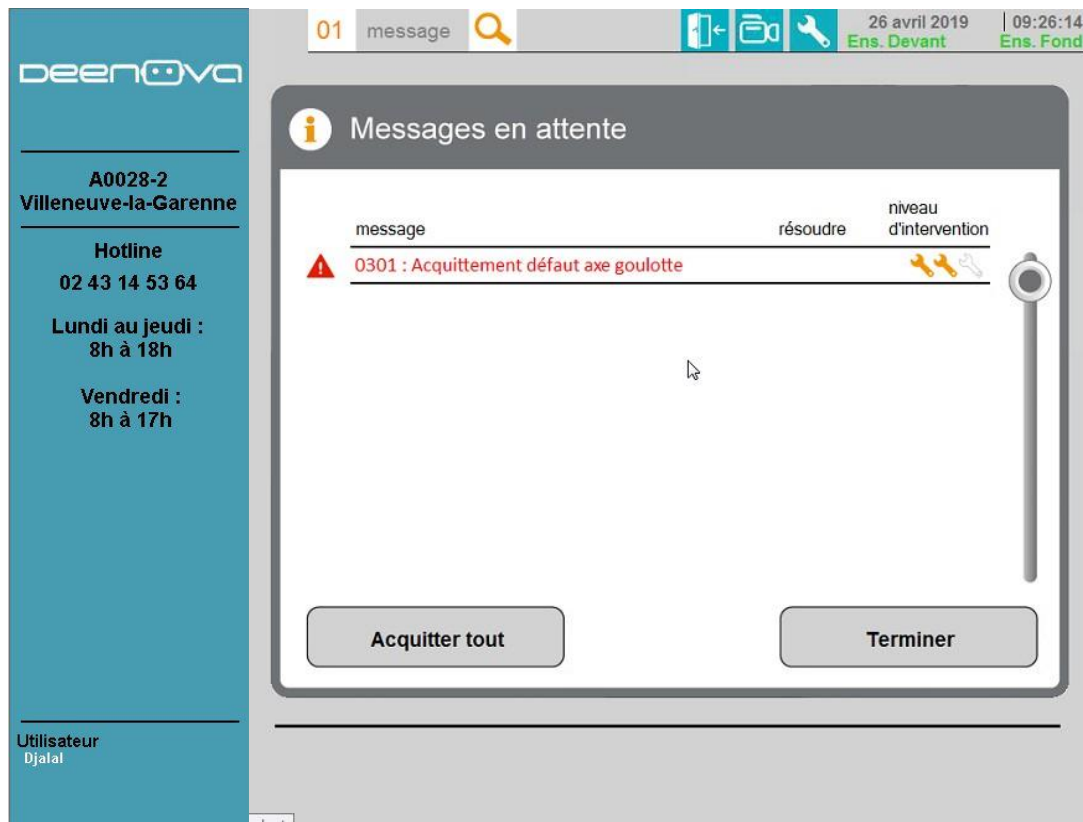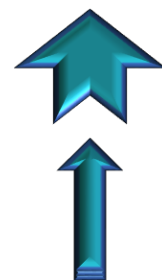


Le message 0300 vous informe que l'axe goulotte est en attente d'acquittement. Appuyer sur le bouton "Acquitter tout" pour relancer le mouvement de l'axe.

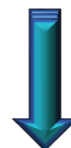



Comment réagir aux messages

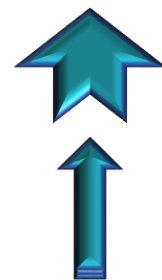

Ensacheuses

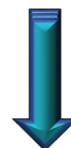


Comment réagir aux messages

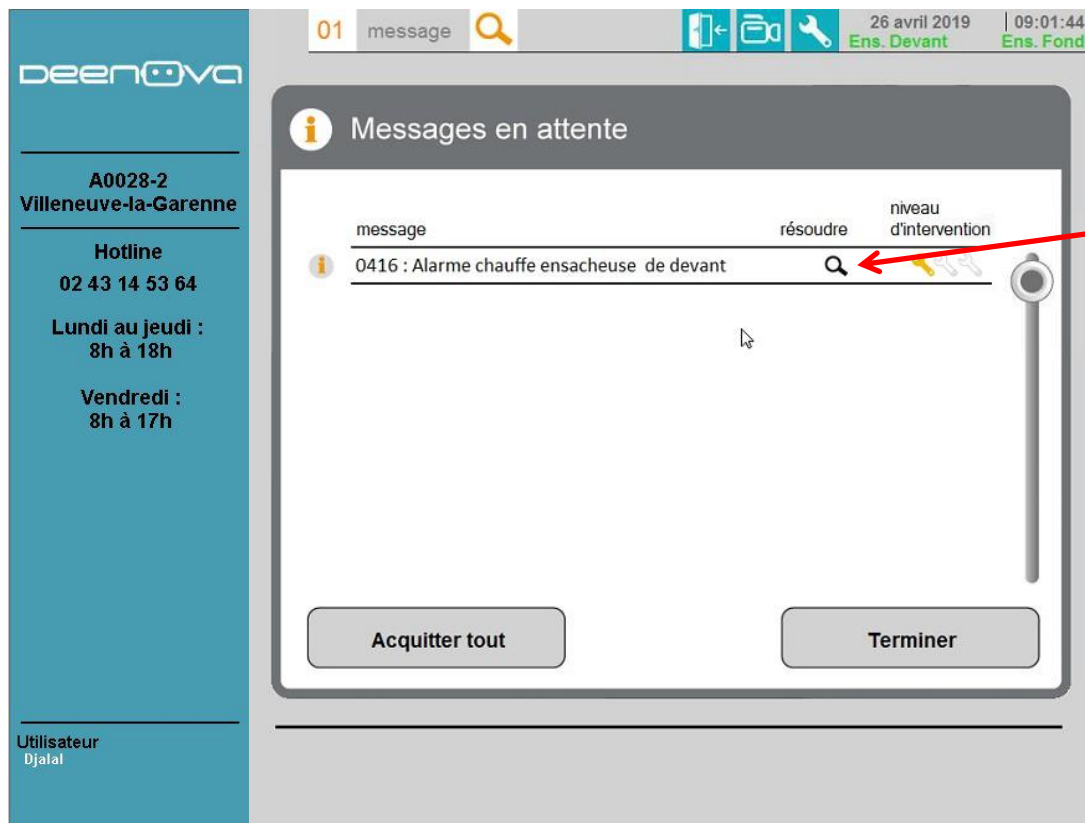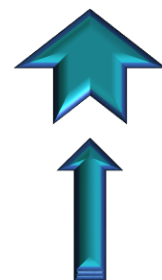

Le message 0416 vous informe que l'ensacheuse de gauche est en cours de chauffe. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez de plus d'informations.

Message 0416 ensacheuse de devant et message 0516 ensacheuse du fond

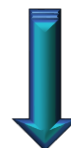

Comment réagir aux messages



deenoVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:01:54
Ens. Devant Ens. Fond

Message 0416
Alarme chauffe ensacheuse de devant


La chauffe de l'ensacheuse est en cours...

Terminer



1 intervention facile

Le message 0416 vous informe que l'ensacheuse de gauche est en cours de chauffe.

Message 0416 ensacheuse de devant et message 0516 ensacheuse du fond

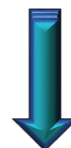


Comment réagir aux messages

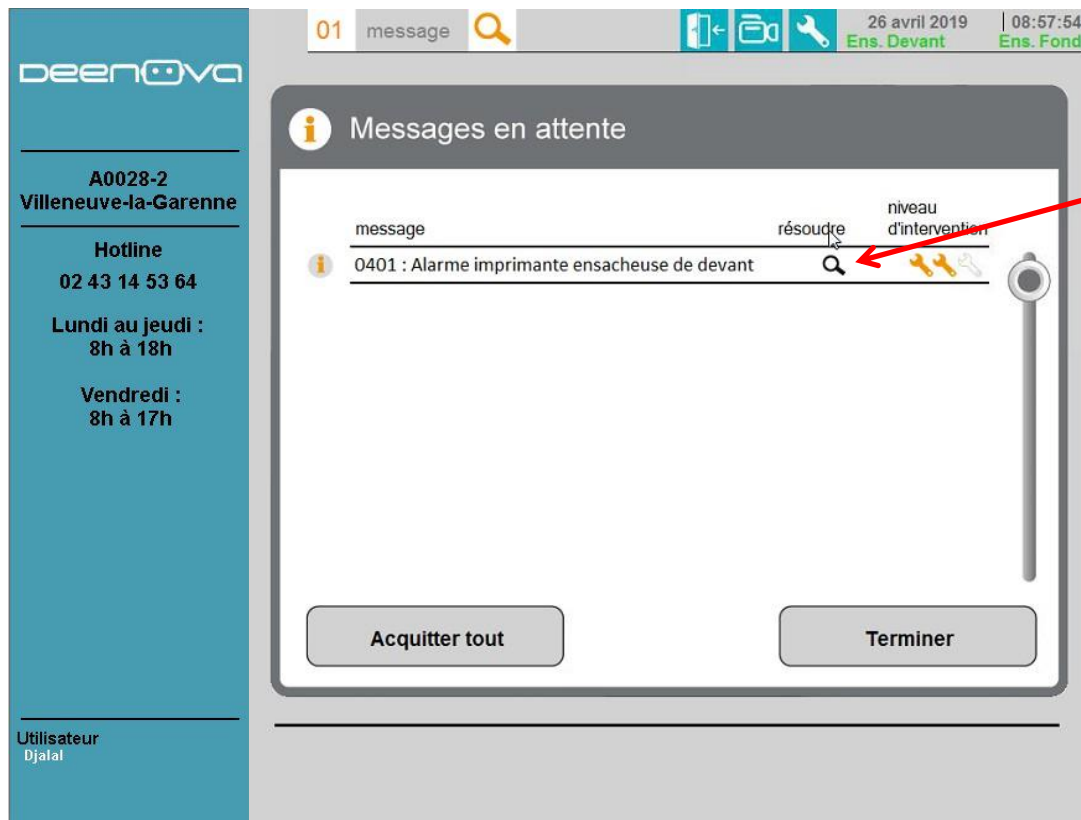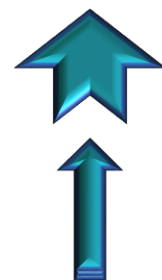


Le message 0401 vous informe que le ruban thermique de l'imprimante de l'ensacheuse est à remplacer. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0401 ensacheuse de devant et message 0501 ensacheuse du fond

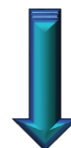

Comment réagir aux messages

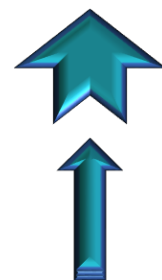

deenoVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 08:58:18
Ens. Devant Ens. Fond

Message 0401
Alarme imprimante ensacheuse de devant


Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Remplacer le ruban thermique
Fermer la porte

Terminer


2 → personnel formé

Le message 0401 vous informe que le ruban thermique de l'imprimante de l'ensacheuse est à remplacer. Suivez les instructions.

Message 0401 ensacheuse de devant et message 0501 ensacheuse du fond

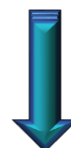


Comment réagir aux messages

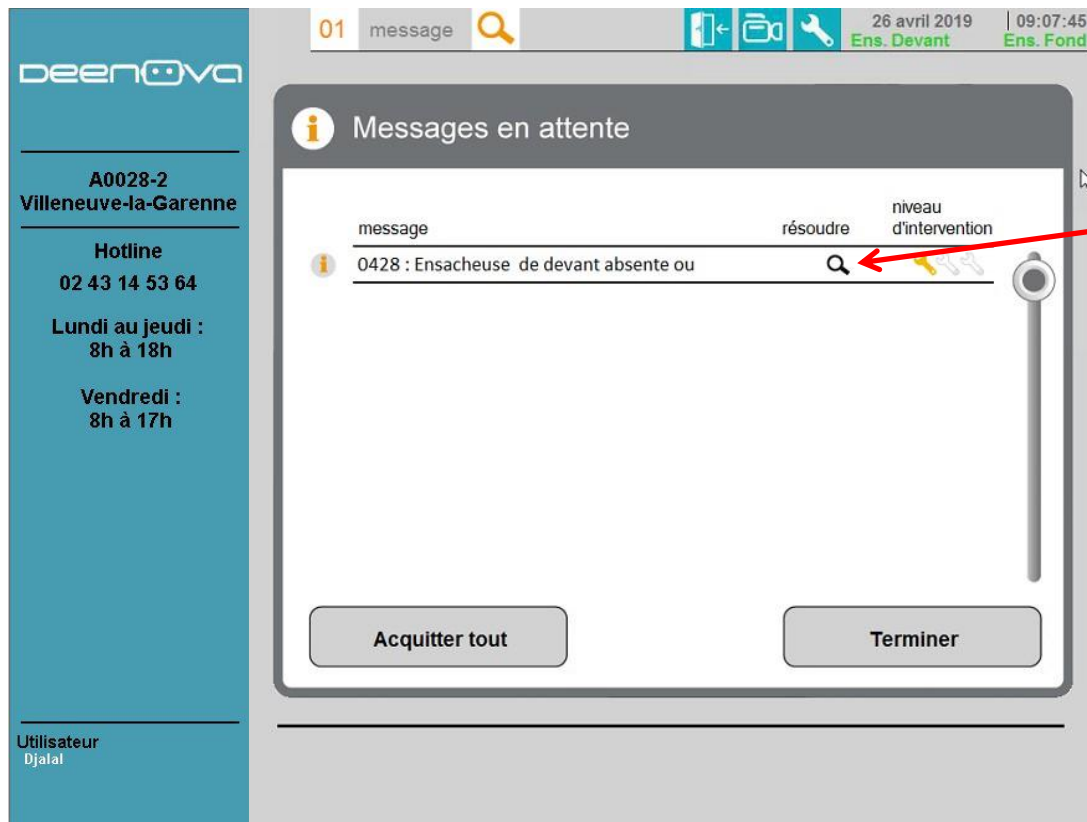

Le message 0428 vous informe que l'ensacheuse est absente ou déconnectée. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0428 ensacheuse de devant et message 0528 ensacheuse du fond

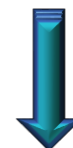

Comment réagir aux messages



01 message 🔍

26 avril 2019 | 09:07:59
Ens. Devant Ens. Fond

Message 0428
Ensacheuse de devant absente ou déconnectée

Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Insérer et connecter l'ensacheuse
Fermer la porte


Terminer

1 intervention facile



Utilisateur
Djalal

Le message 0428 vous informe que l'ensacheuse est absente ou déconnectée. Suivez les instructions.

Message 0428 ensacheuse de devant et message 0528 ensacheuse du fond

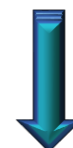


Comment réagir aux messages

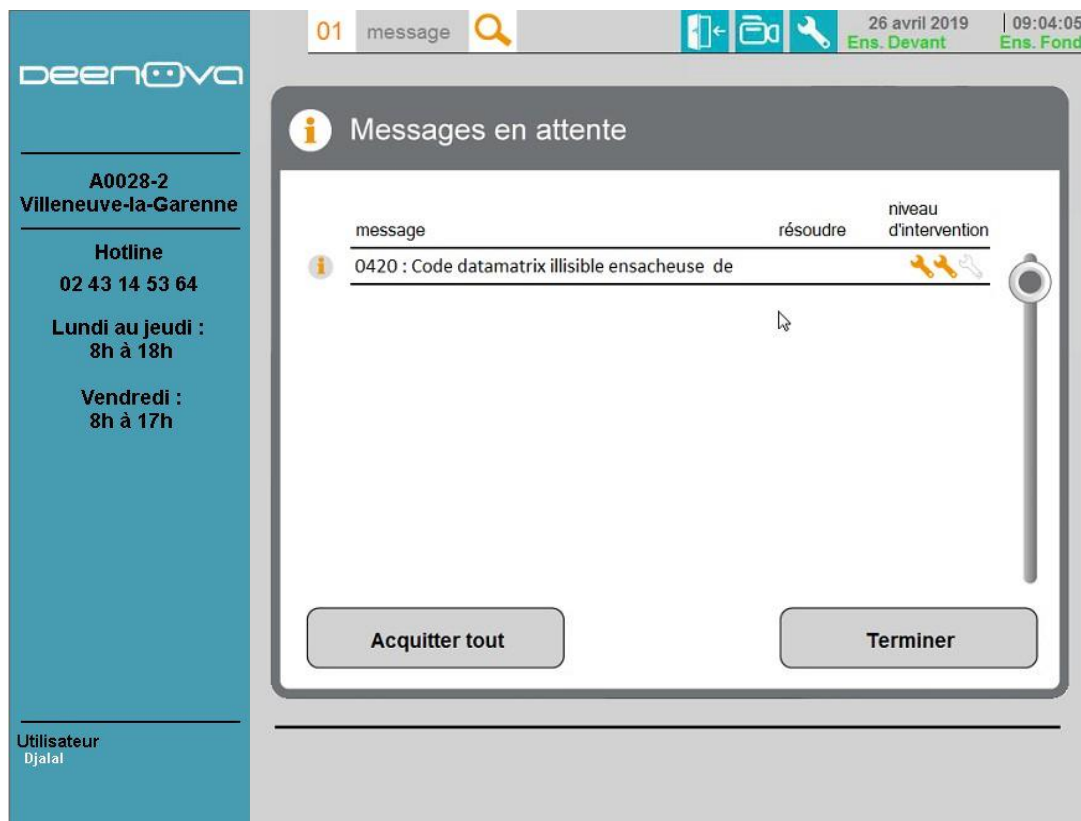
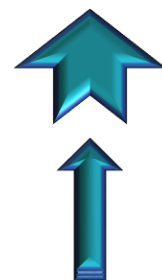


Le message 0420 vous informe que le dernier sachet produit est illisible.

Message 0420 ensacheuse de devant et message 0520 ensacheuse du fond

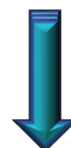


Comment réagir aux messages

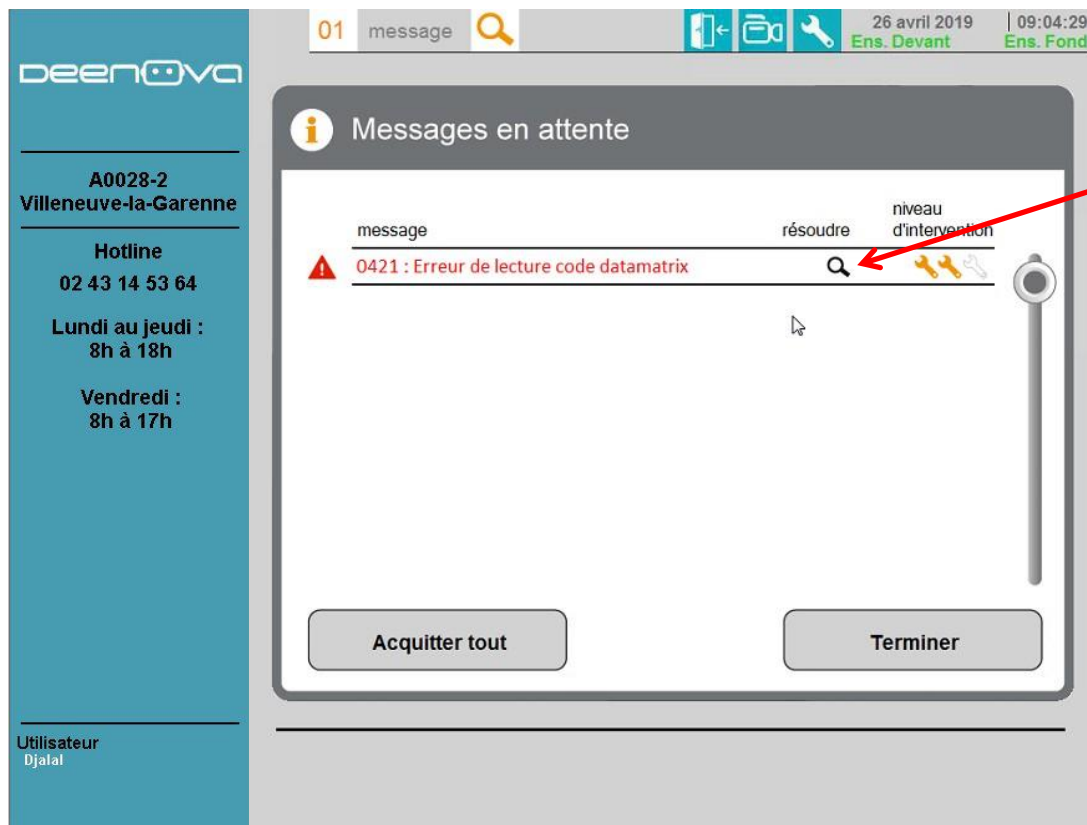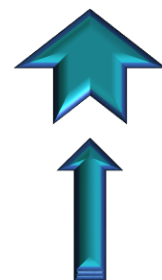


Le message 0421 vous informe qu'après 3 essais consécutifs les sachets ne sont pas lisibles sur l'ensacheuse de devant.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez de plus d'informations.

Message 0421 ensacheuse de devant et message 0521 ensacheuse du fond

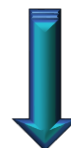

Comment réagir aux messages

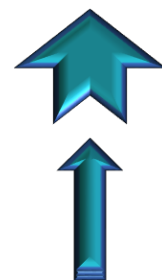

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:04:41
Ens. Devant Ens. Fond

Message 0421
Erreur de lecture code datamatrix ensacheuse de devant



Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Nettoyer la caméra
Vérifier le ruban thermique
Vérifier le placement du sachet
Fermer la porte




Terminer


2 
→ personnel formé

Le message 0421 vous informe qu'après 3 essais consécutifs les sachets ne sont pas lisibles sur l'ensacheuse de devant.
Suivez les instructions.

Message 0421 ensacheuse de devant et message 0521 ensacheuse du fond

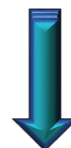


Comment réagir aux messages


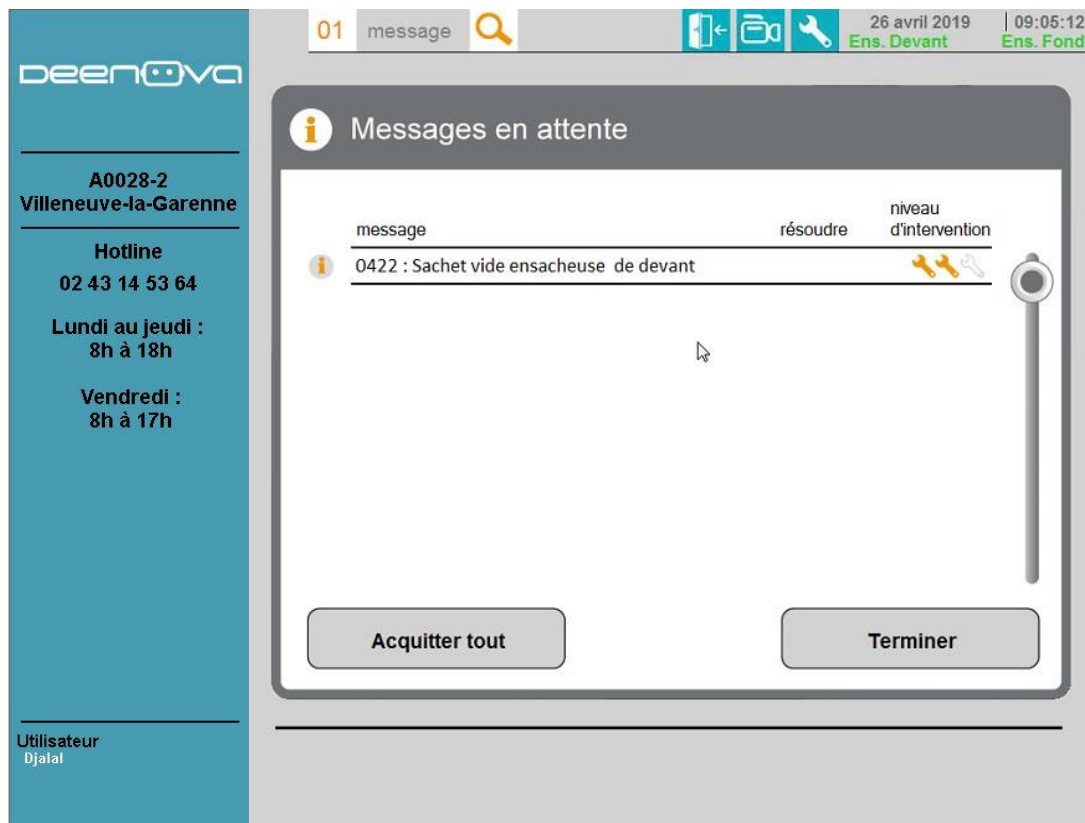


Le message 0422 vous informe que le sachet du dernier produit est vide.

Message 0422 ensacheuse de devant et message 0522 ensacheuse du fond

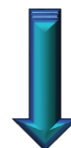


Comment réagir aux messages

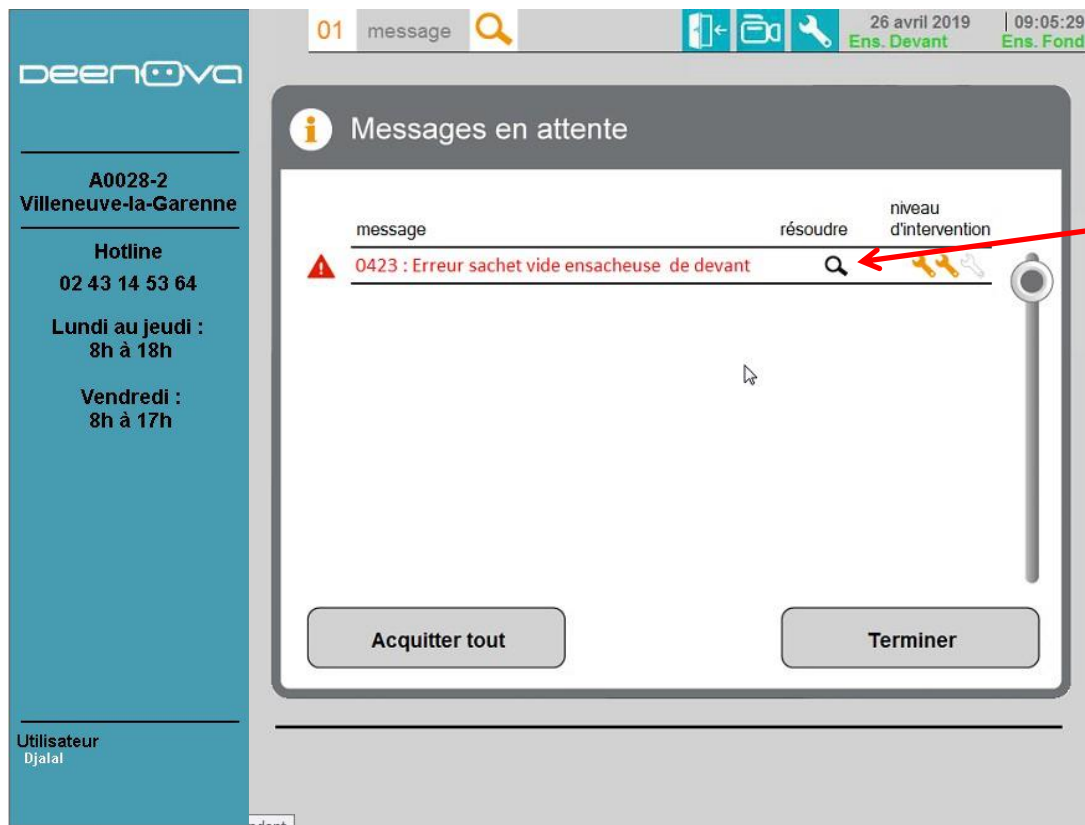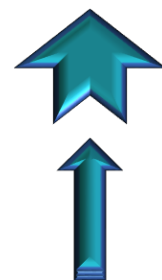


Le message 0423 vous informe qu'après 3 essais consécutifs les sachets produits sont vides.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0423 ensacheuse de devant et message 0523 ensacheuse du fond

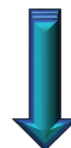


Comment réagir aux messages

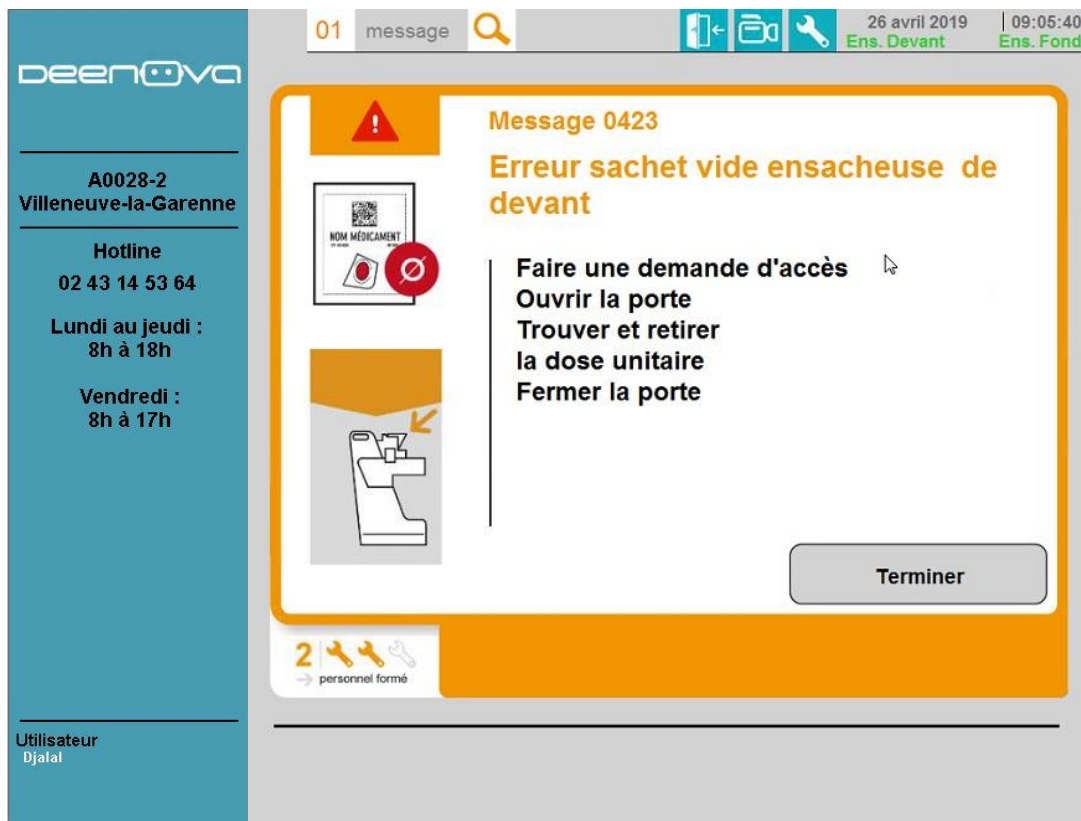


Le message 0423 vous informe qu'après 3 essais consécutifs les sachets produits sont vides. Suivez les instructions.

Message 0423 ensacheuse de devant et message 0523 ensacheuse du fond

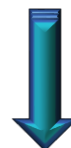


Comment réagir aux messages

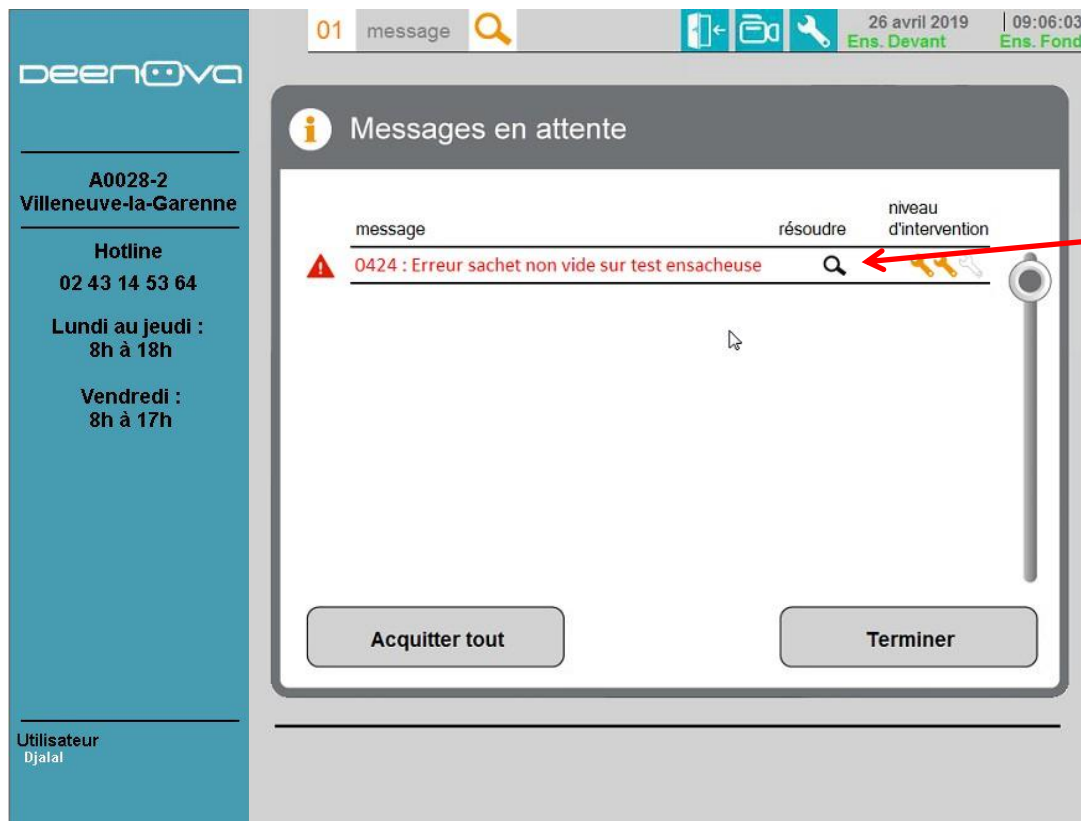

Le message 0424 vous informe que le sachet TEST n'est pas vide. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0424 ensacheuse de devant et message 0524 ensacheuse du fond


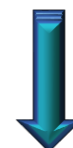


Comment réagir aux messages





Le message 0424 vous informe que le sachet TEST produit n'est pas vide.

Suivez les instructions.
Généralement un comprimé ou un sachet est bloqué sur la plaque de détection.

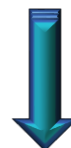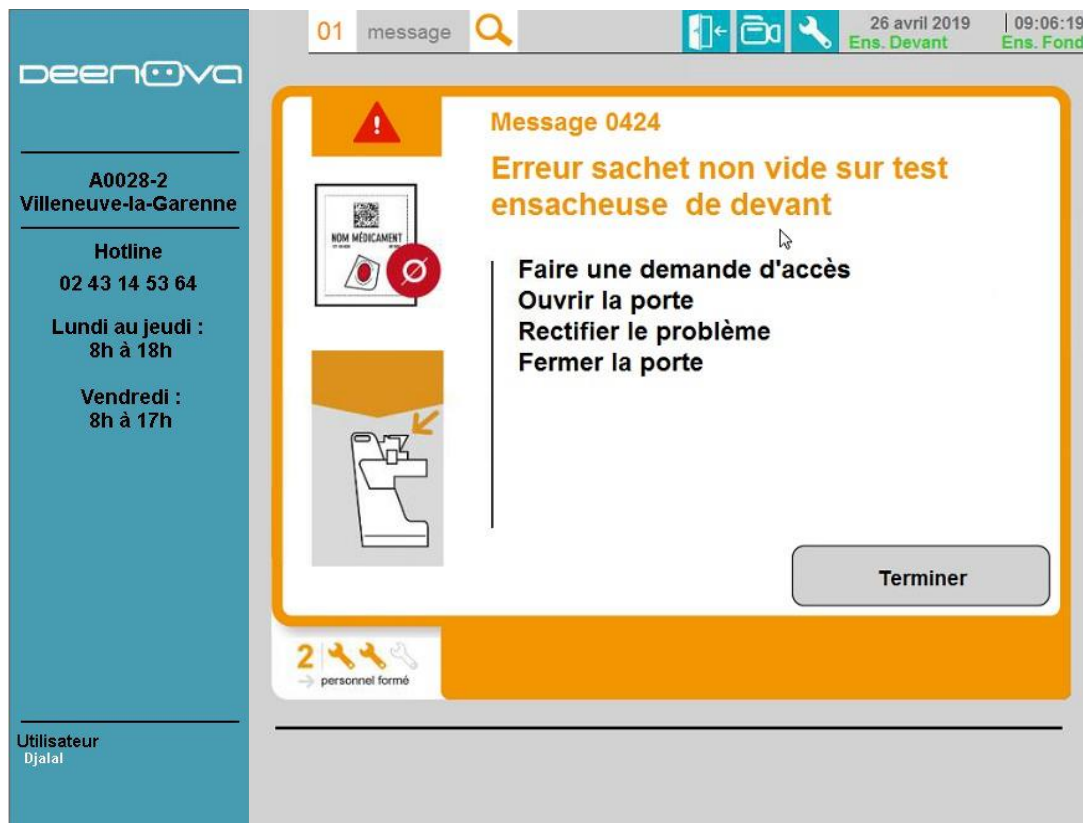


Message 0424 ensacheuse de devant et message 0524 ensacheuse du fond

Comment réagir aux messages

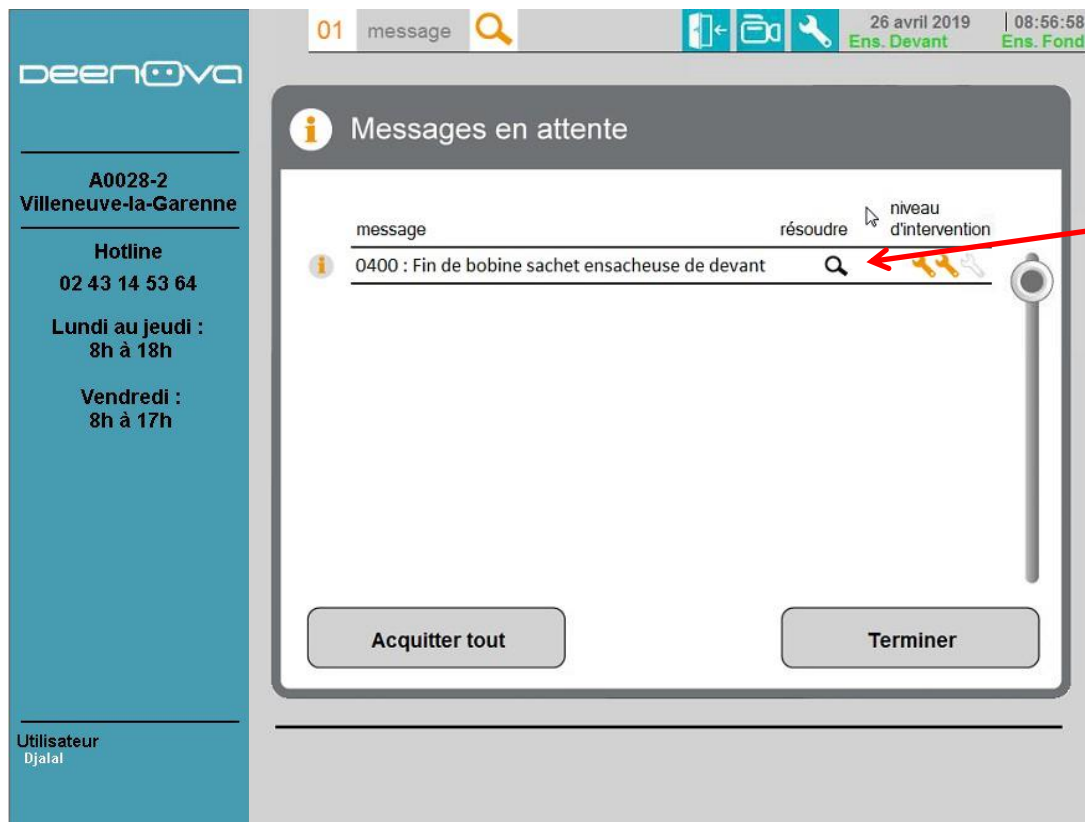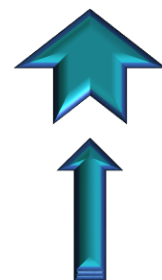

Le message 0400 vous informe qu'il n'y a plus de sachet sur la bobine de l'ensacheuse de devant.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0400 ensacheuse de devant et message 0500 ensacheuse du fond

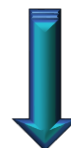

Comment réagir aux messages



The screenshot displays the Deenova maintenance software interface. On the left is a blue sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area shows a message titled 'Message 0400' with the subject 'Fin de bobine sachet ensacheuse de devant'. It includes an icon of a roll of material and a list of instructions: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Remplacer la bobine de sachets', and 'Fermer la porte'. A 'Terminer' button is at the bottom right. A status bar at the top right shows the date and time, and the names of the responsible personnel.

01 message

26 avril 2019 | 08:57:22
Ens. Devant Ens. Fond

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

Message 0400
Fin de bobine sachet ensacheuse de devant


Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Remplacer la bobine de sachets
Fermer la porte

Terminer



2
personnel formé

Le message 0400 vous informe qu'il n'y a plus de sachet sur la bobine de l'ensacheuse de devant.
Suivez les instructions.


Message 0400 ensacheuse de devant et message 0500 ensacheuse du fond

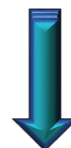

Comment réagir aux messages

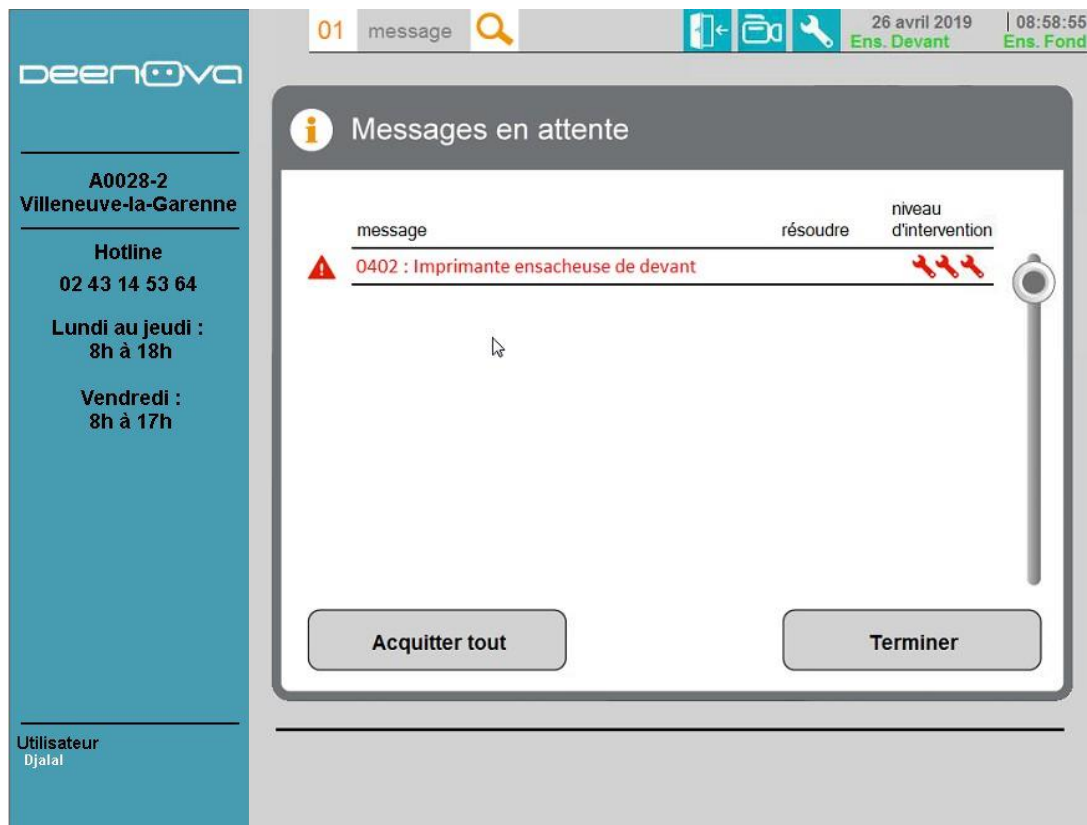
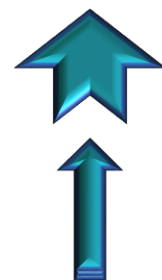


Le message 0402 vous informe que l'imprimante de l'ensacheuse de devant est en défaut ou en attente. Vérifier que la cassette est bien fermée puis appuyer sur "Acquitter tout" pour relancer le cycle de tension du ruban thermique.

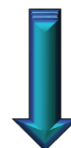


Message 0402 ensacheuse de devant et message 0502 ensacheuse du fond

Comment réagir aux messages

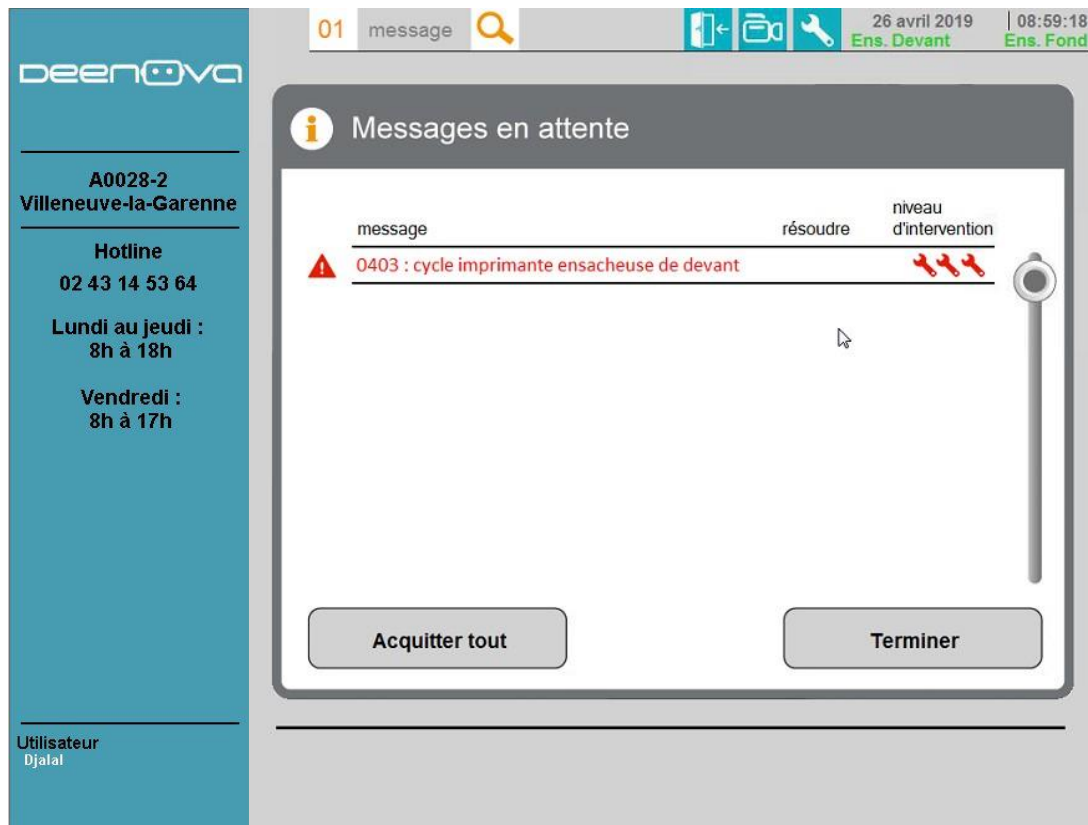
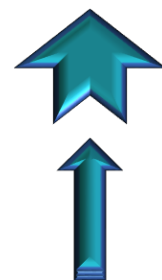


Le message 0403 vous informe que l'imprimante n'a pas réussi à faire son cycle de tension du ruban thermique sur l'ensacheuse de devant. Appuyer sur "Acquitter tout" pour relancer le cycle.

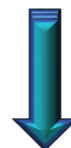


Message 0403 ensacheuse de devant et message 0503 ensacheuse du fond

Comment réagir aux messages

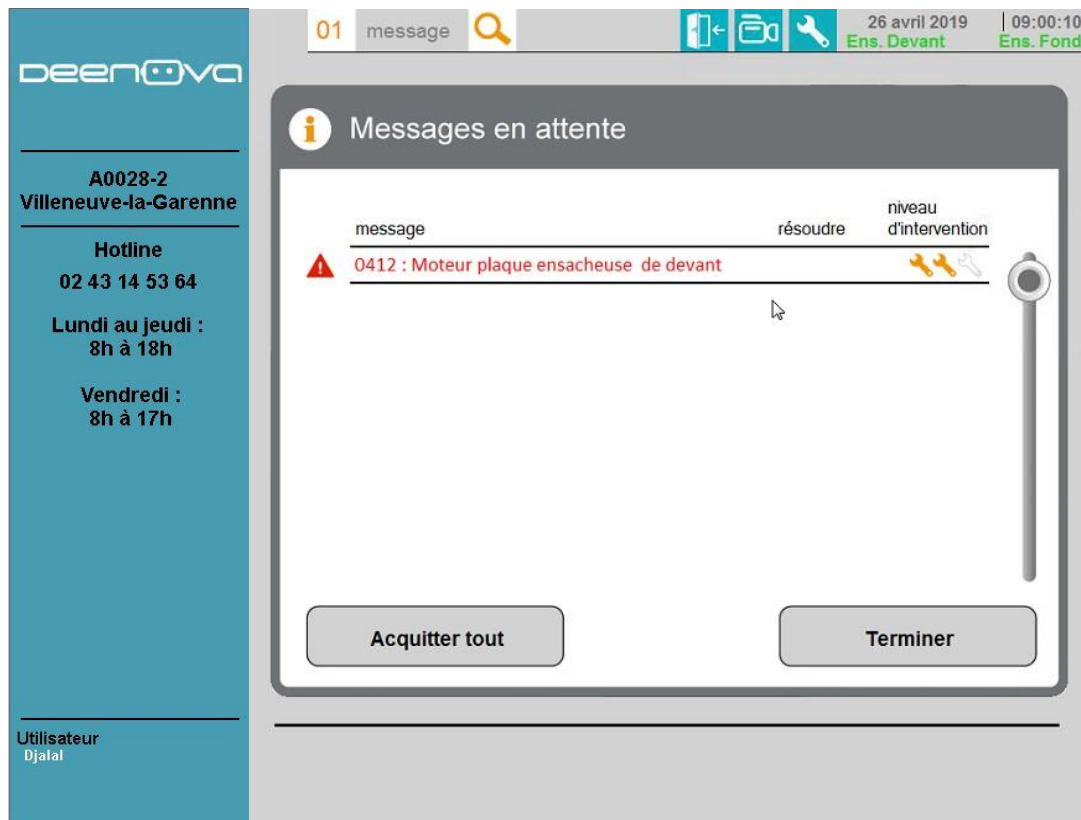
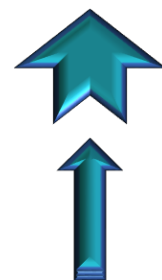


Le message 0412 vous informe que le moteur de la plaque de détection de l'ensacheuse de devant est en défaut. Ouvrir la porte et vérifier que la plaque n'est pas bloquée.


Message 0412 ensacheuse de devant et message 0512 ensacheuse du fond

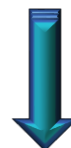

Comment réagir aux messages

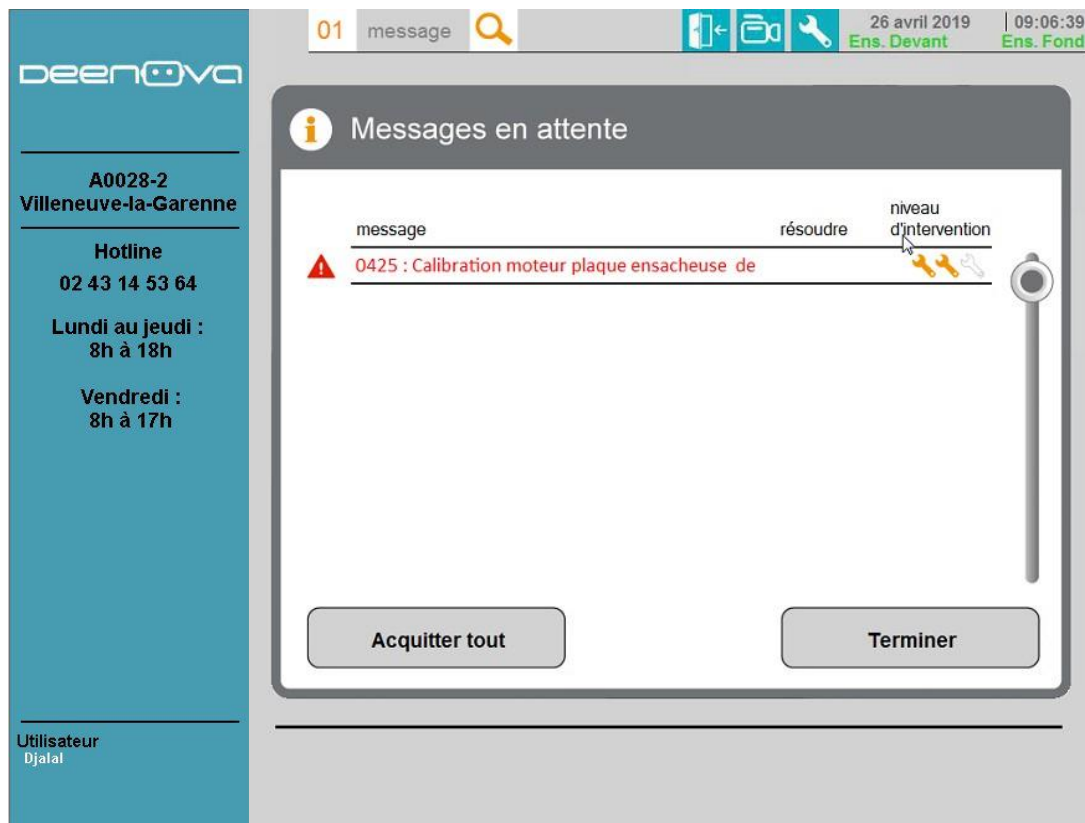
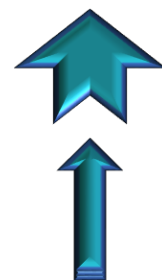


Le message 0425 vous informe que la calibration du moteur de la plaque de détection de l'ensacheuse de devant n'a pas été faite.
Ouvrir la porte et vérifier que la plaque n'est pas bloquée.

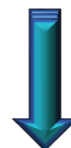


Message 0425 ensacheuse de devant et message 0525 ensacheuse du fond

Comment réagir aux messages

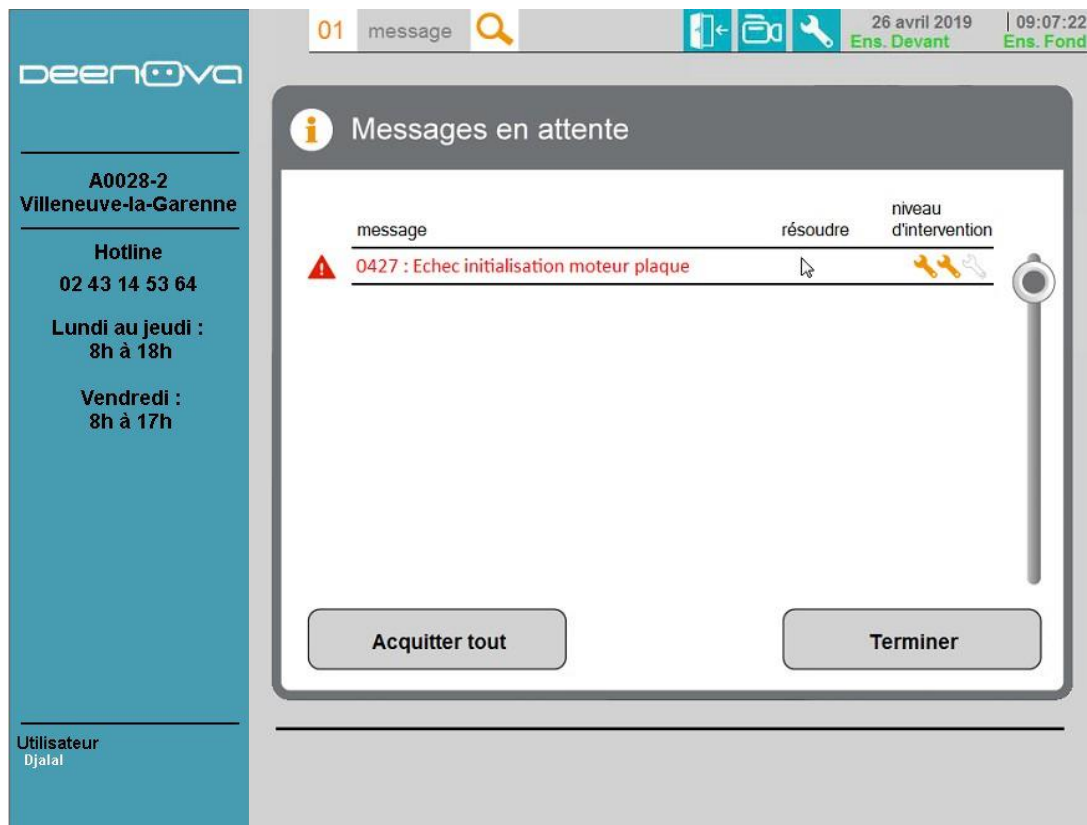
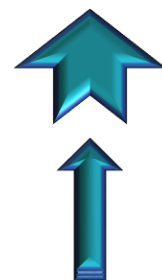


Le message 0427 vous informe que l'initialisation de la plaque de détection est un echec. Ouvrir la porte et vérifier que la plaque n'est pas bloquée.

Message 0427 ensacheuse de devant et message 0527 ensacheuse du fond

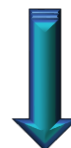


Comment réagir aux messages

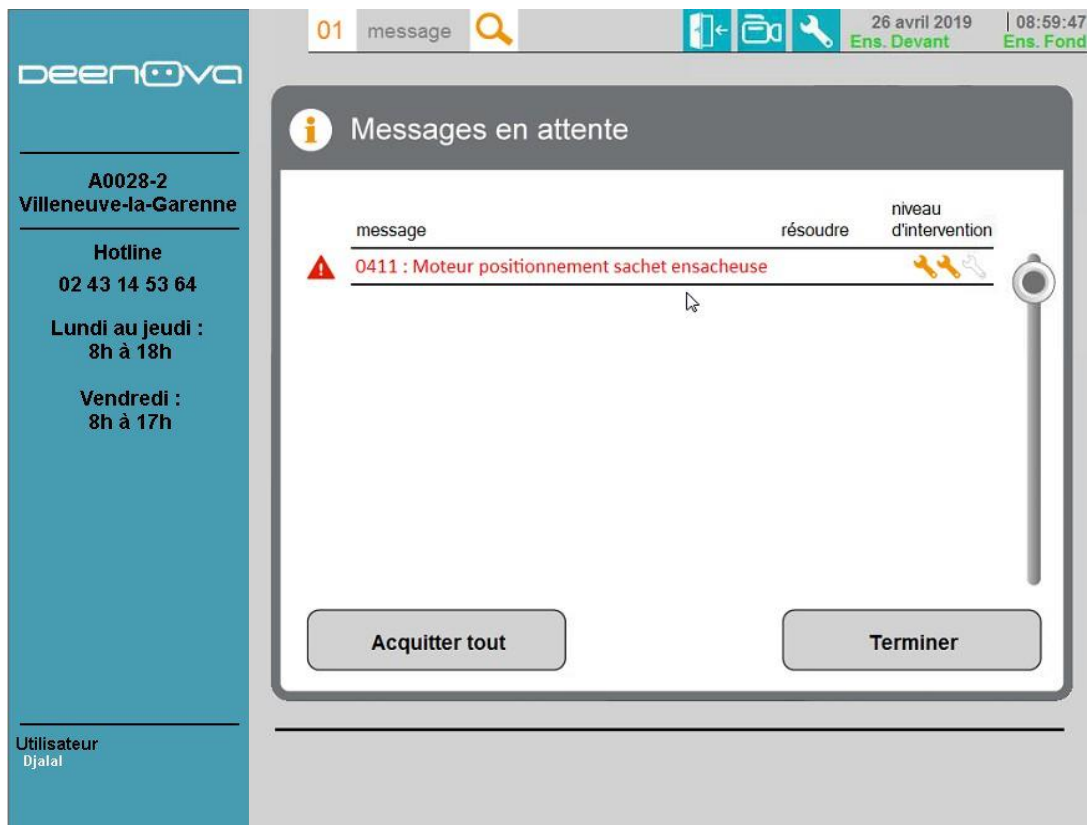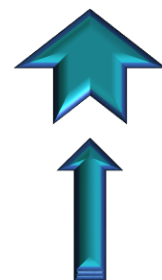



Le message 0411 vous informe que le moteur du rouleau d'entrainement sachet est en défaut. Ouvrir la porte et remplacer le sachet.



Message 0411 ensacheuse de devant et message 0511 ensacheuse du fond

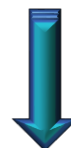

Comment réagir aux messages

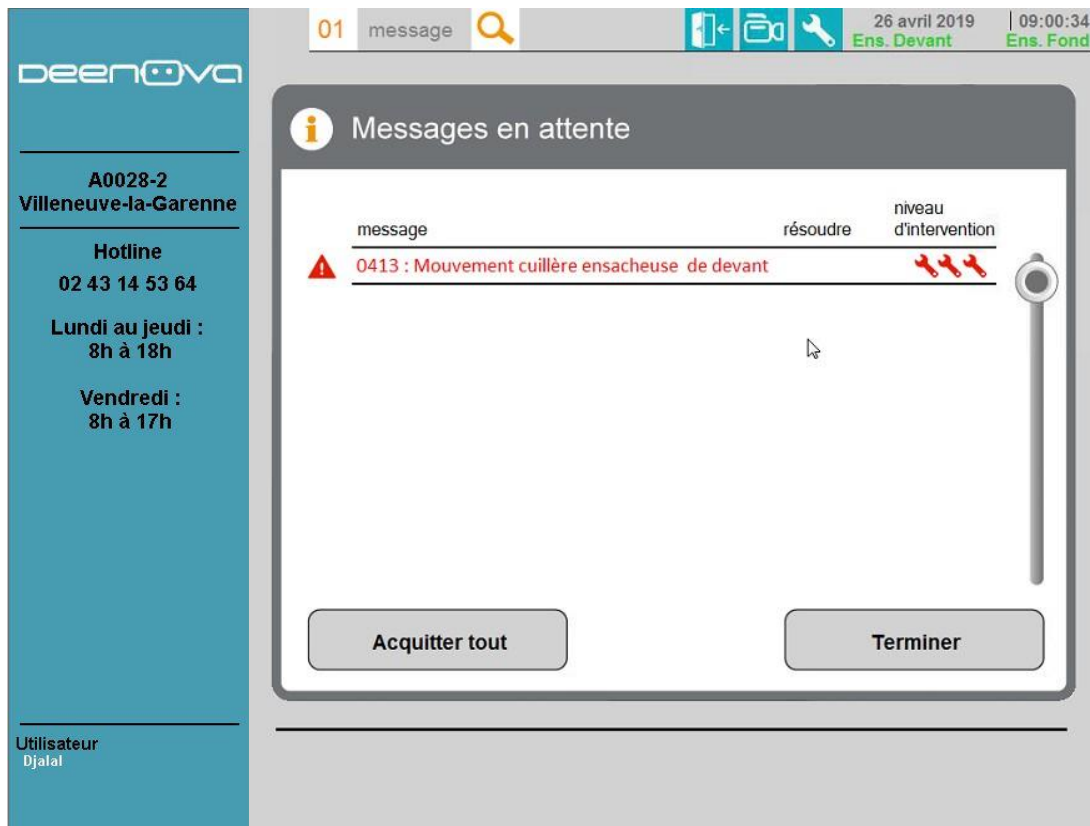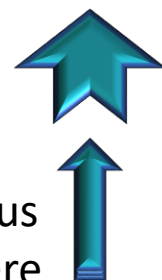

Le message 0413 vous informe que la cuillère n'a pas réussi à faire son mouvement.

Ouvrir la porte et vérifier que la cuillère n'est pas bloquée.

Généralement, il y a un comprimé coincé qui empêche la fermeture de la cuillère du sachet.




Message 0413 ensacheuse de devant et message 0513 ensacheuse du fond

Comment réagir aux messages



Le message 0414 vous informe que le vérin de scellage n'a pas réussi à faire son mouvement. Ouvrir la porte et vérifier que le vérin n'est pas bloqué.

Généralement, il y a des sachets fondus devant la barre de chauffe qui empêche le mouvement du vérin.

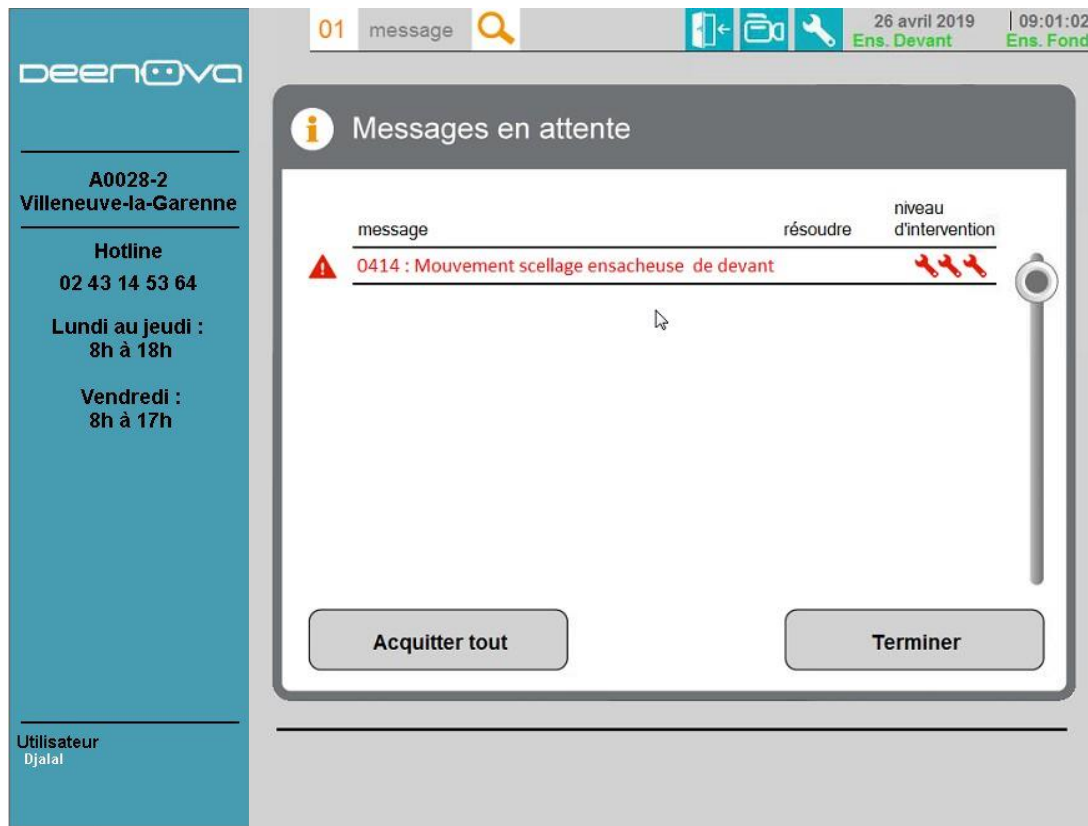

Message 0414 ensacheuse de devant et message 0514 ensacheuse du fond


Comment réagir aux messages




Le message 0415 vous informe que la contrepartie n'a pas réussi à faire son mouvement.

Ouvrir la porte et vérifier que la contrepartie n'est pas bloquée.



Généralement, il y a un comprimé devant qui empêche le scellage du sachet.

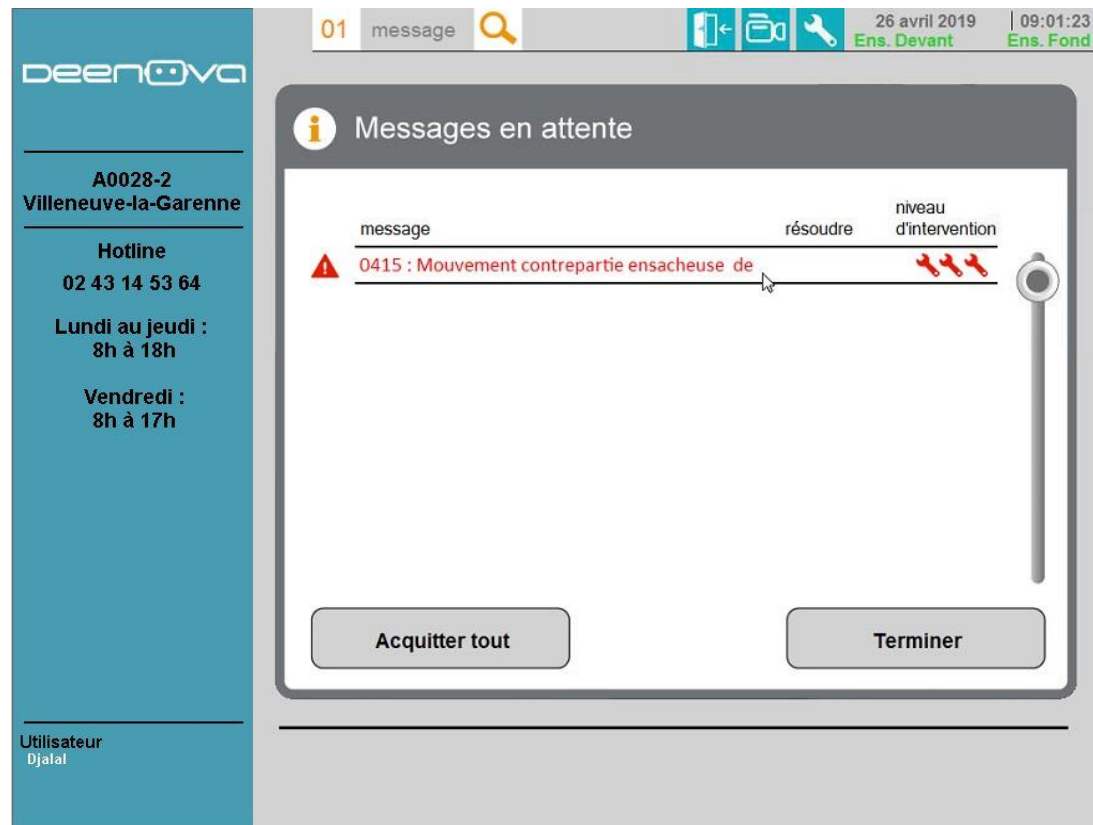

Message 0415 ensacheuse de devant et message 0515 ensacheuse du fond

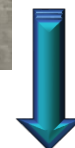


Comment réagir aux messages

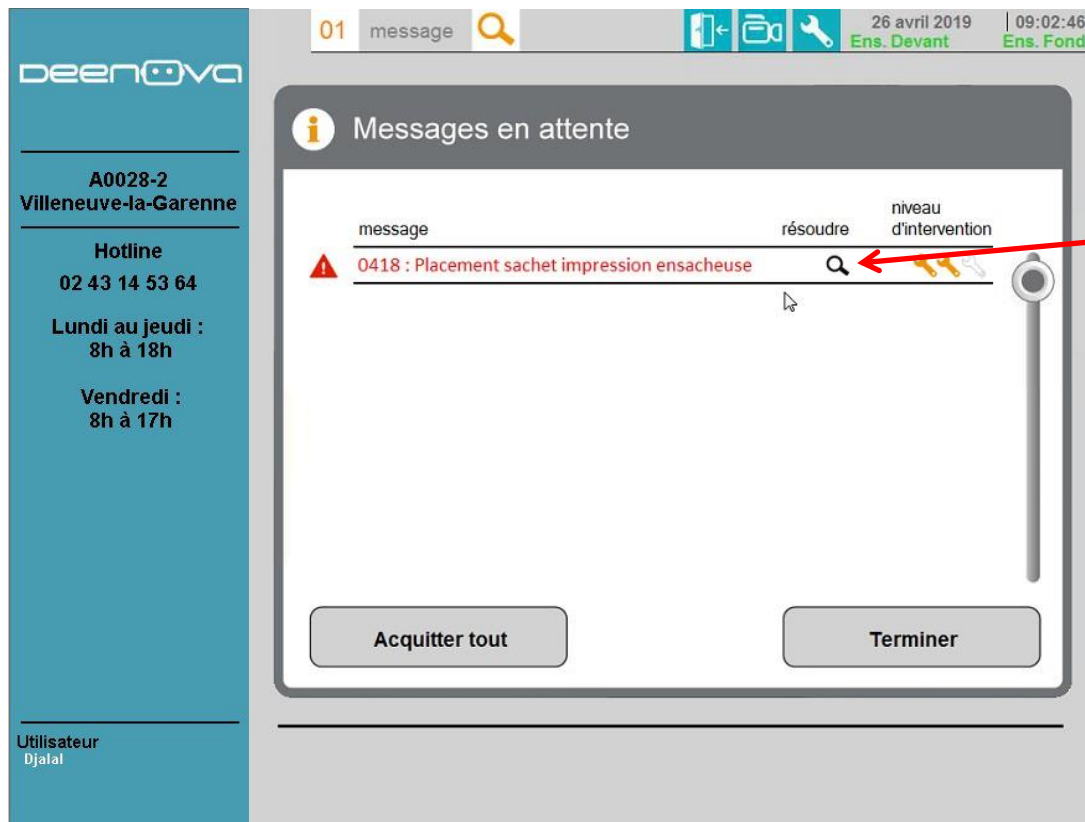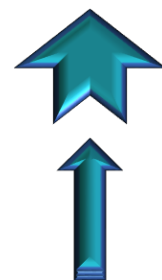


Le message 0418 vous informe que le sachet n'est pas en position d'impression. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0418 ensacheuse de devant et message 0518 ensacheuse du fond

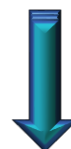


Comment réagir aux messages

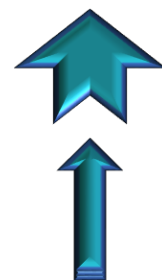


The screenshot shows the DEENOVA machine interface. On the left is a blue sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and hours. The main display area has a top bar with '01 message', a search icon, and icons for a smartphone, a printer, and a wrench. The date and time are 26 avril 2019 at 09:03:01, with 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond' indicators. The central message box, titled 'Message 0418', has an orange border and contains a warning icon, a QR code with a red question mark, and instructions: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Repositionner le sachet en position d'impression', and 'Fermer la porte'. Below the text is a diagram of the machine's front door. At the bottom of the message box is a 'Terminer' button. A status bar at the very bottom shows '2' with a wrench icon and the text 'personnel formé'.

Le message 0418 vous informe que le sachet n'est pas en position d'impression. Suivez les instructions.

Message 0418 ensacheuse de devant et message 0518 ensacheuse du fond

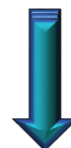


Comment réagir aux messages

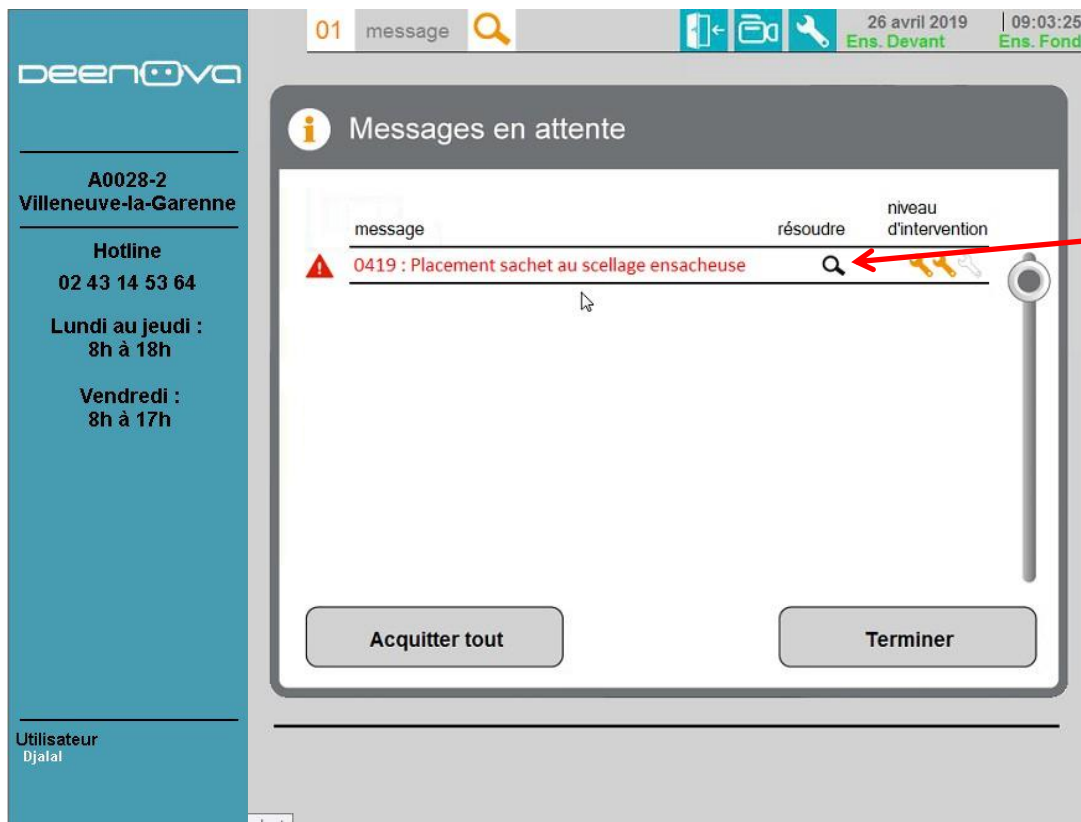

Le message 0419 vous informe que le sachet n'est pas en position de scellage.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez de plus d'informations.

Message 0419 ensacheuse de devant et message 0519 ensacheuse du fond

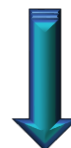


Comment réagir aux messages




The screenshot shows the Deenova machine's user interface. On the left is a blue sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main display area has a grey header with a '01 message' tab, a search icon, and status indicators for '26 avril 2019' and '09:03:44'. Below the header, a large orange-bordered box displays 'Message 0419' with a warning icon. The message title is 'Placement sachet au scellage ensacheuse de devant'. It includes a QR code with a red question mark and a diagram of the machine's front compartment. The instructions are: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Repositionner le sachet en position d'impression', and 'Fermer la porte'. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the interface, there is a '2' icon and the text 'personnel formé'.

Le message 0418 vous informe que le sachet n'est pas en position de scellage.
Suivez les instructions.


Message 0419 ensacheuse de devant et message 0519 ensacheuse du fond

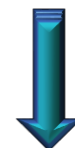



Comment réagir aux messages

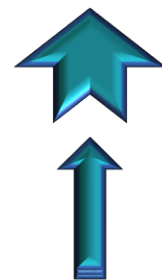


Barillet

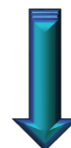

Comment réagir aux messages

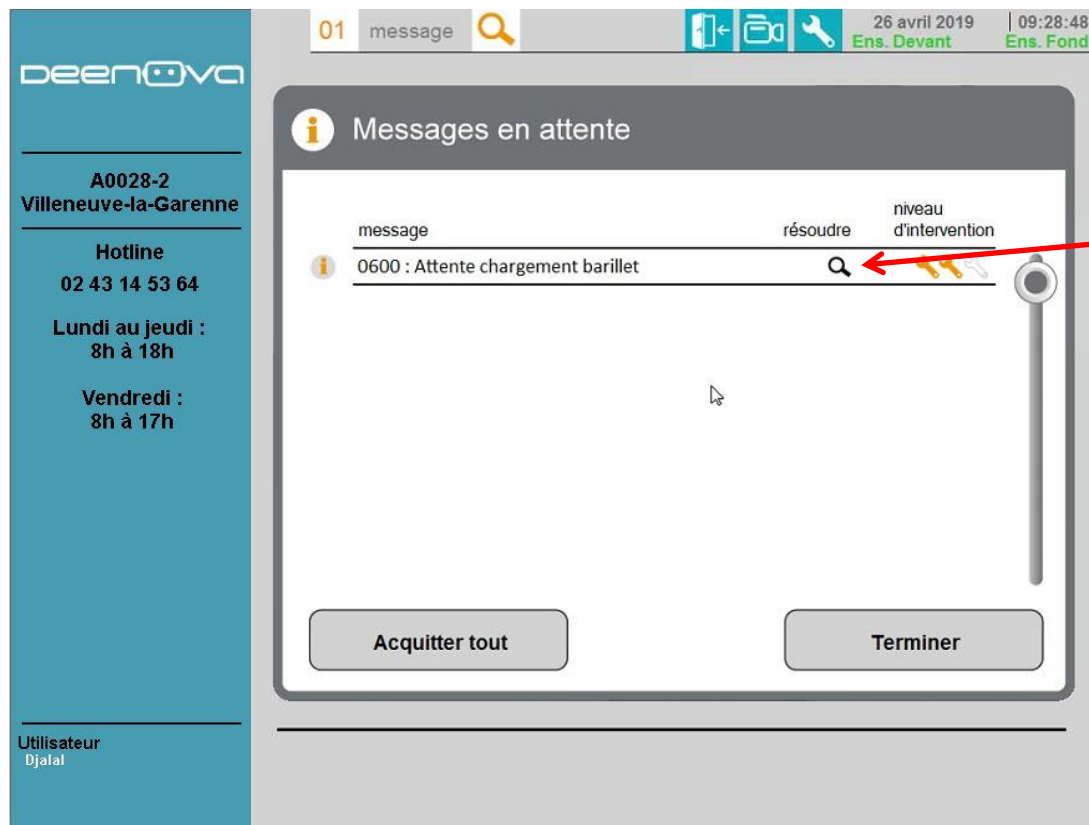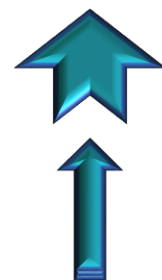

Le message 0600 vous informe que le barillet est en attente de chargement.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

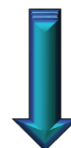


Comment réagir aux messages




The screenshot displays the Deenova software interface. On the left is a blue sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area has a grey header with a '01 message' tab and a search icon. Below the header, a message box titled 'Message 0600' and 'Attente chargement barillet' contains instructions: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Positionner le barillet dans son emplacement', and 'Fermer la porte'. An icon of a barillet with an arrow points to the instructions. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, it says '2 personnes formées' with icons of two people. The top right of the interface shows the date '26 avril 2019' and time '09:29:13'.


Le message 0600 vous informe que le barillet est en attente de chargement. Suivez les instructions.

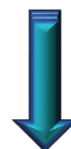

Comment réagir aux messages

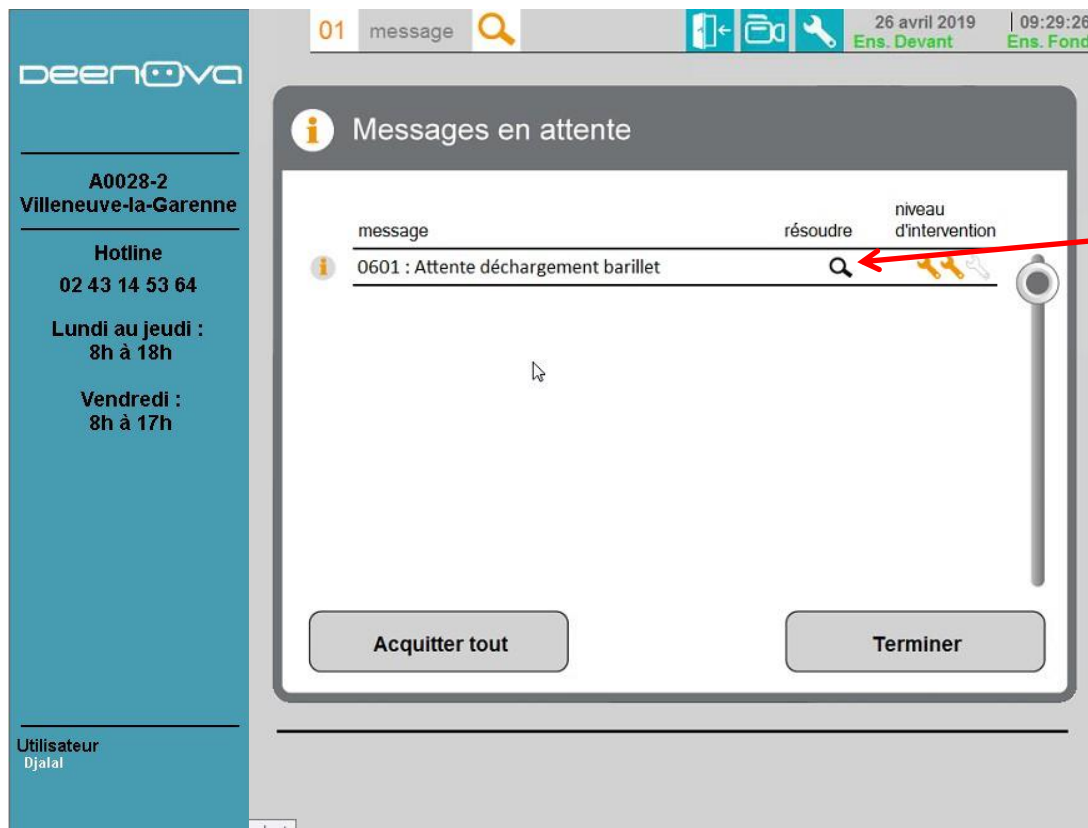

Le message 0601 vous informe que le barillet est en attente de déchargement. En cliquant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

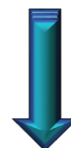


Comment réagir aux messages



The screenshot shows the DEENOVA user interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 0601 Attente déchargement barillet'. The message content instructs the user to 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Récupérer le barillet de son emplacement', and 'Fermer la porte'. An icon of a machine with a cartridge is shown on the left of the instructions. At the bottom right of the message box is a 'Terminer' button. Below the message box, there is a status bar indicating '2' and 'personnel formé'.

Le message 0601 vous informe que le barillet est en attente de déchargement. Suivez les instructions.

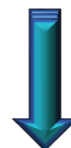

Comment réagir aux messages



The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) window. At the top of this window, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. A message is listed with a red warning icon and the text '0602 : Moteur axe barillet'. To the right of the message, there are icons for a wrench and a screwdriver. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal


Messages en attente

message résoudre niveau d'intervention



0602 : Moteur axe barillet

Acquitter tout **Terminer**


Le message 0602 vous informe que l'axe barillet est en défaut.

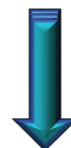


Comment réagir aux messages

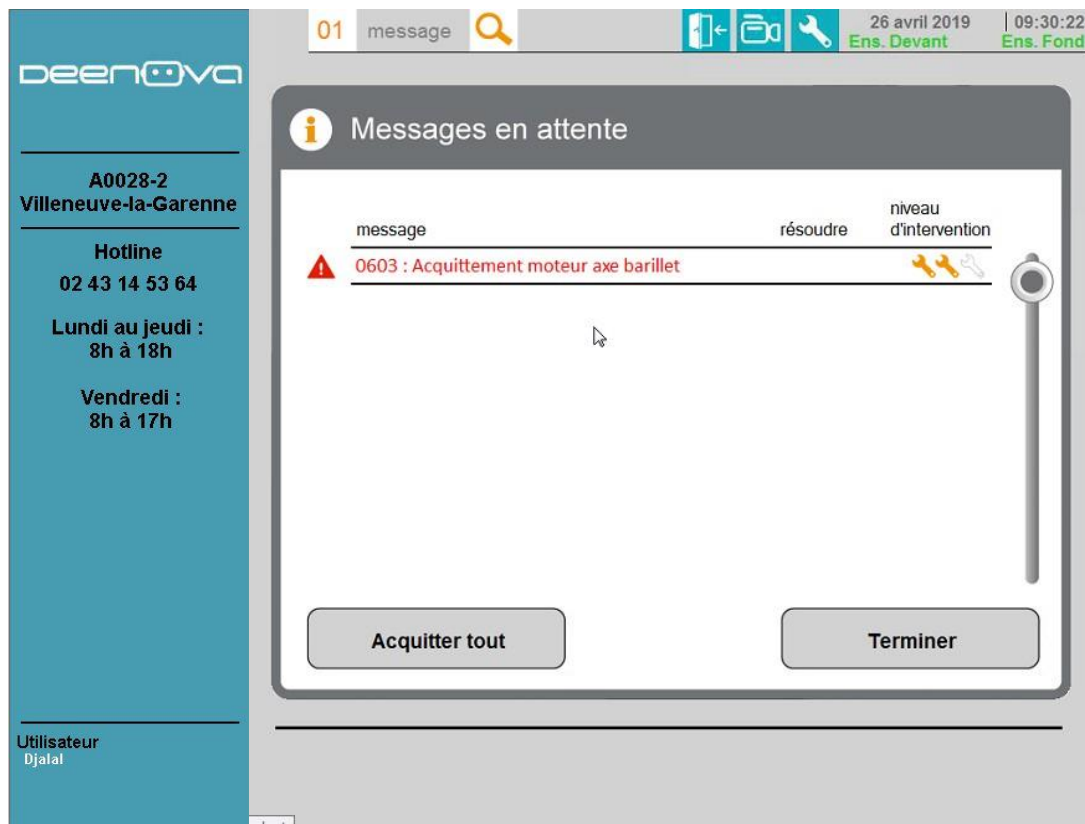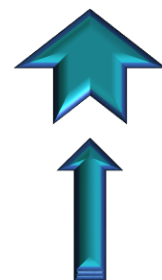


Le message 0602 vous informe que l'axe barillet est en attente d'acquittement. Appuyer sur « Acquitter tout » pour relancer le mouvement de l'axe.

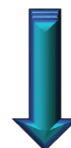



Comment réagir aux messages

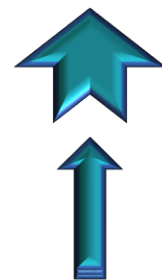


Emplacement de Retournement

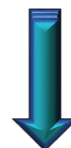


Comment réagir aux messages

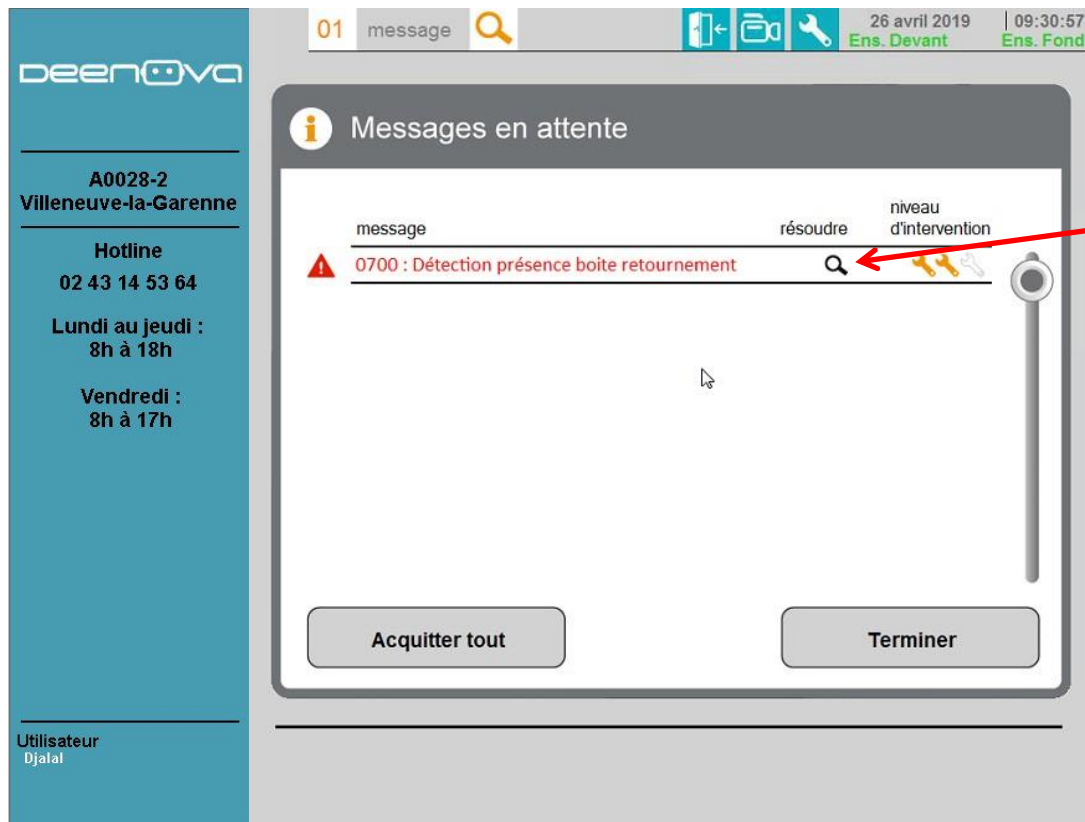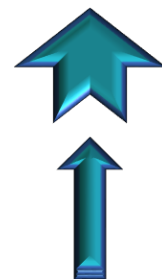

Le message 0700 vous informe qu'aucune boîte n'est détectée à l'emplacement de retournement. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

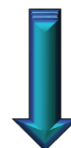


Comment réagir aux messages


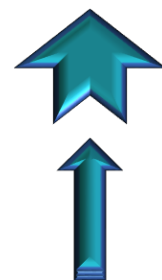


The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area displays a message titled 'Message 0700 Détection présence boîte retournement'. The message content instructs the user to open the door, reposition the box at the return location, and close the door. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a status bar showing '2' and 'personnel formé'.


Le message 0700 vous informe qu'aucune boîte n'est détectée à l'emplacement de retournement. Suivez les instructions.

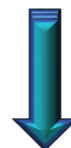



Comment réagir aux messages

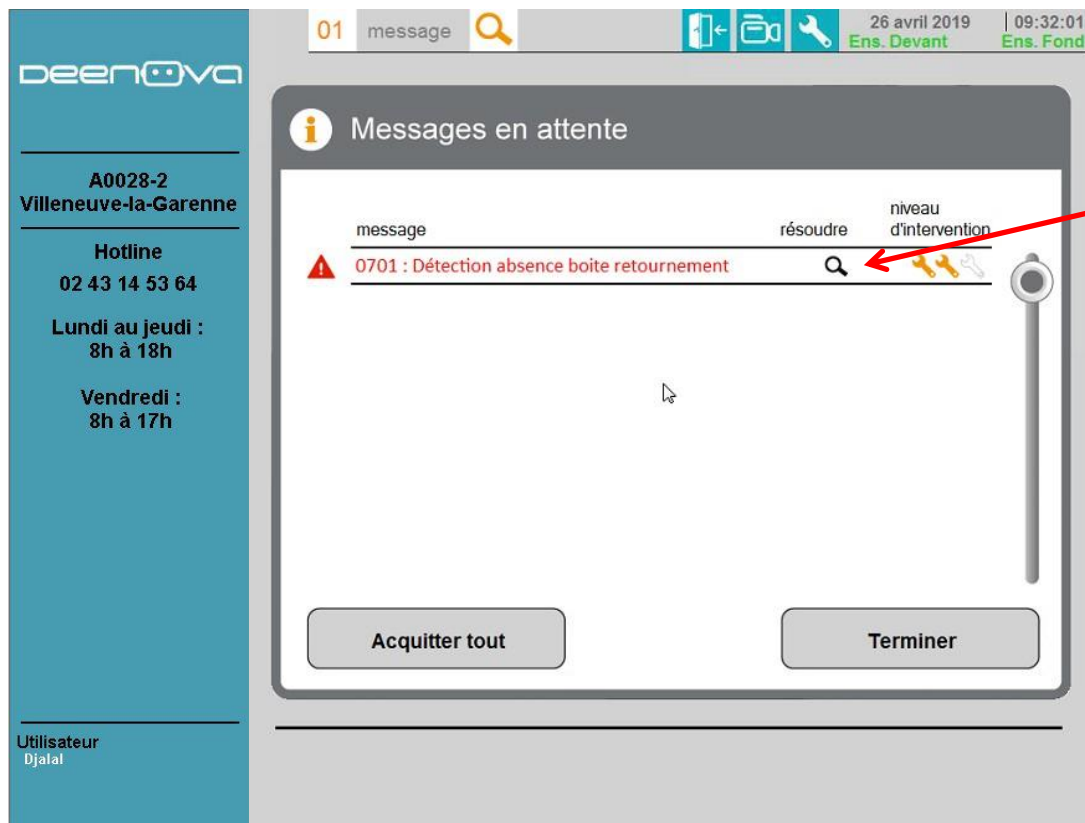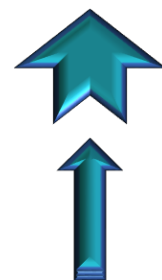


Le message 0701 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée à l'emplacement de retournement. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

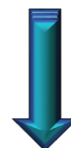


Comment réagir aux messages

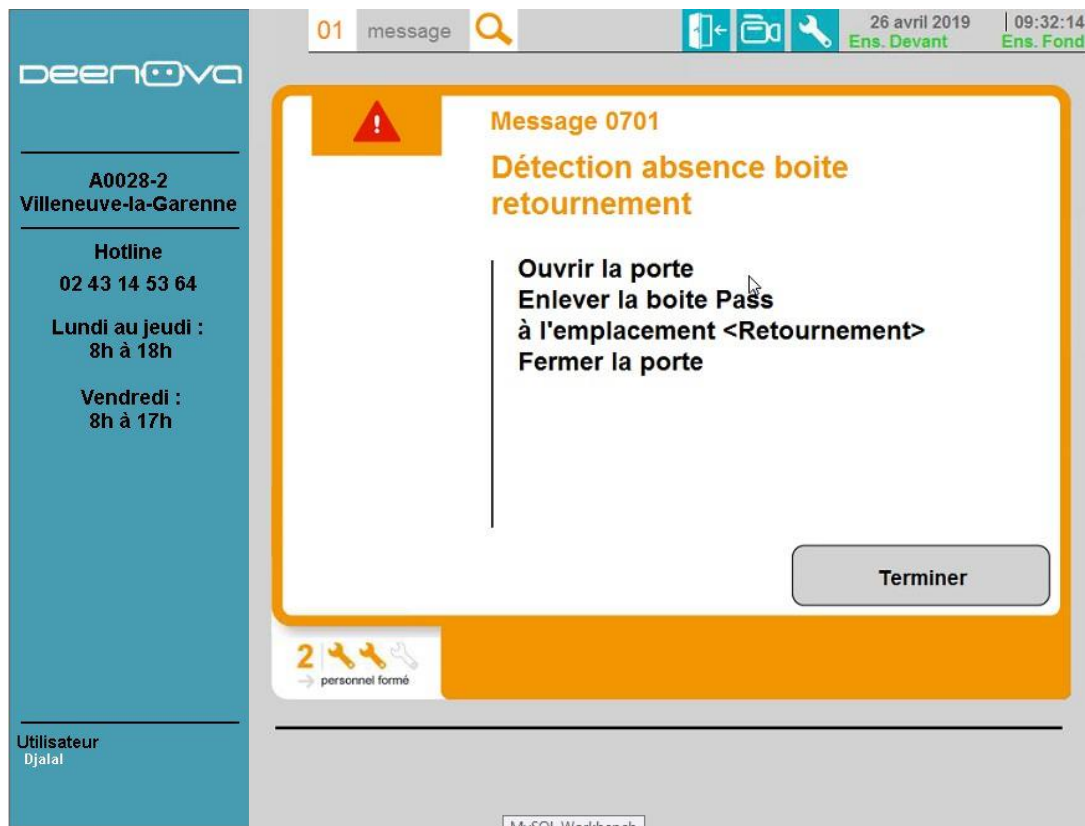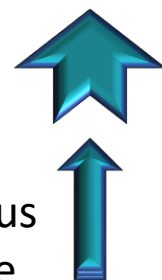



Le message 0701 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée à l'emplacement de retournement. Suivez les instructions. S'il n'y a pas de boîte, vérifier le poussoir au fond de l'emplacement ainsi que le capteur.

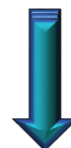



Comment réagir aux messages

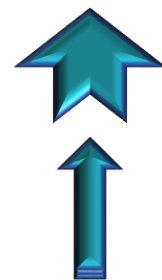

Emplacement Boite de Production

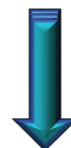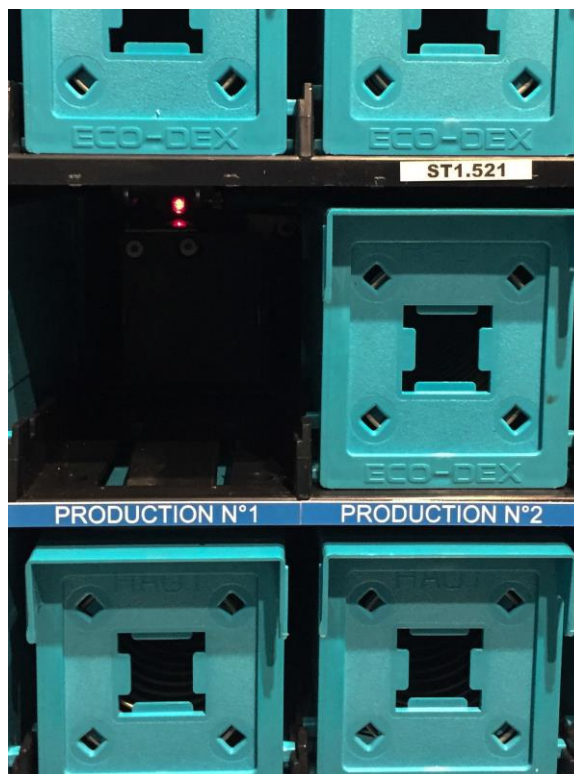


Comment réagir aux messages

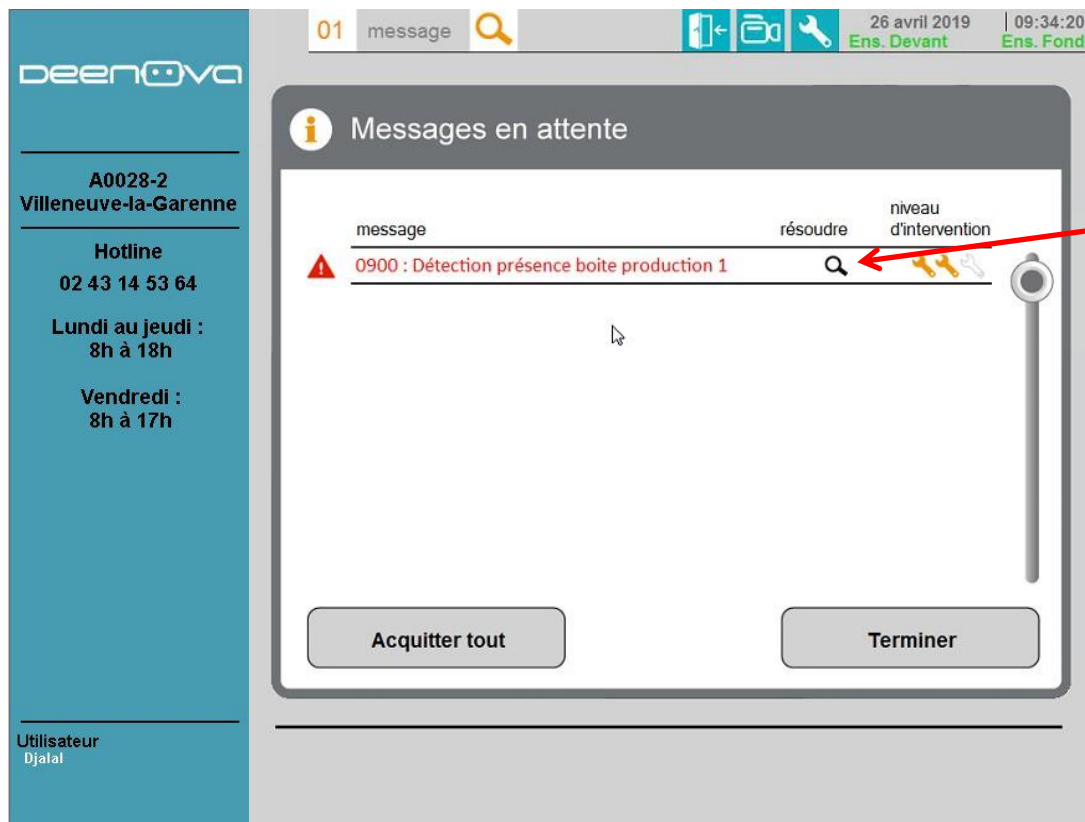
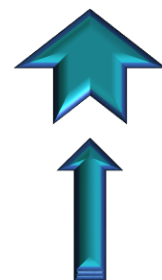


Le message 0900 vous informe qu'aucune boîte n'est détectée à l'emplacement de production 1. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

Message 0900 boîte production 1 et message 0902 boîte production 2

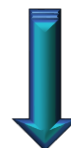


Comment réagir aux messages

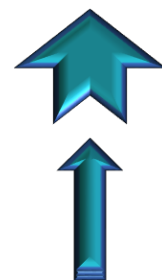
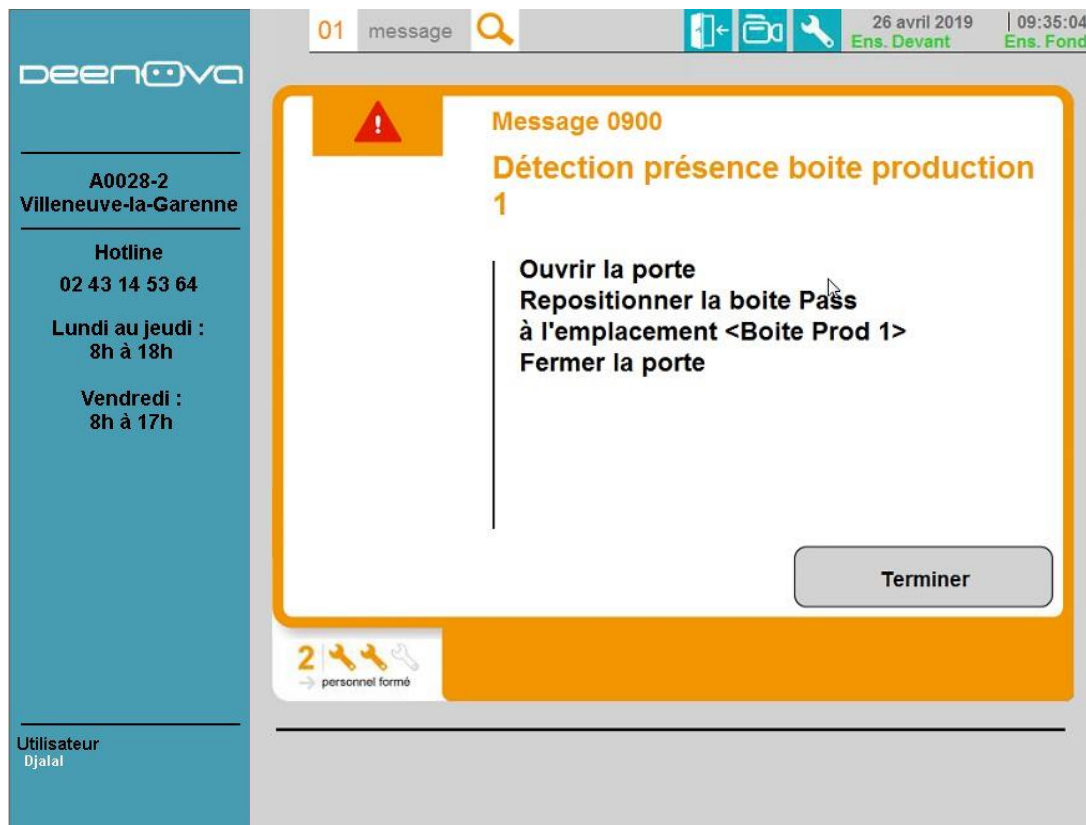
The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area displays a message titled 'Message 0900 Détection présence boîte production 1'. The message content instructs the user to 'Ouvrir la porte', 'Repositionner la boîte Pass à l'emplacement <Boîte Prod 1>', and 'Fermer la porte'. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a section for 'personnel formé' with a '2' and icons of tools.

Le message 0900 vous informe qu'aucune boîte n'est détectée à l'emplacement de production 1. Suivez les instructions.

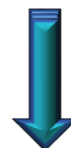


Message 0900 boîte production 1 et message 0902 boîte production 2

Comment réagir aux messages

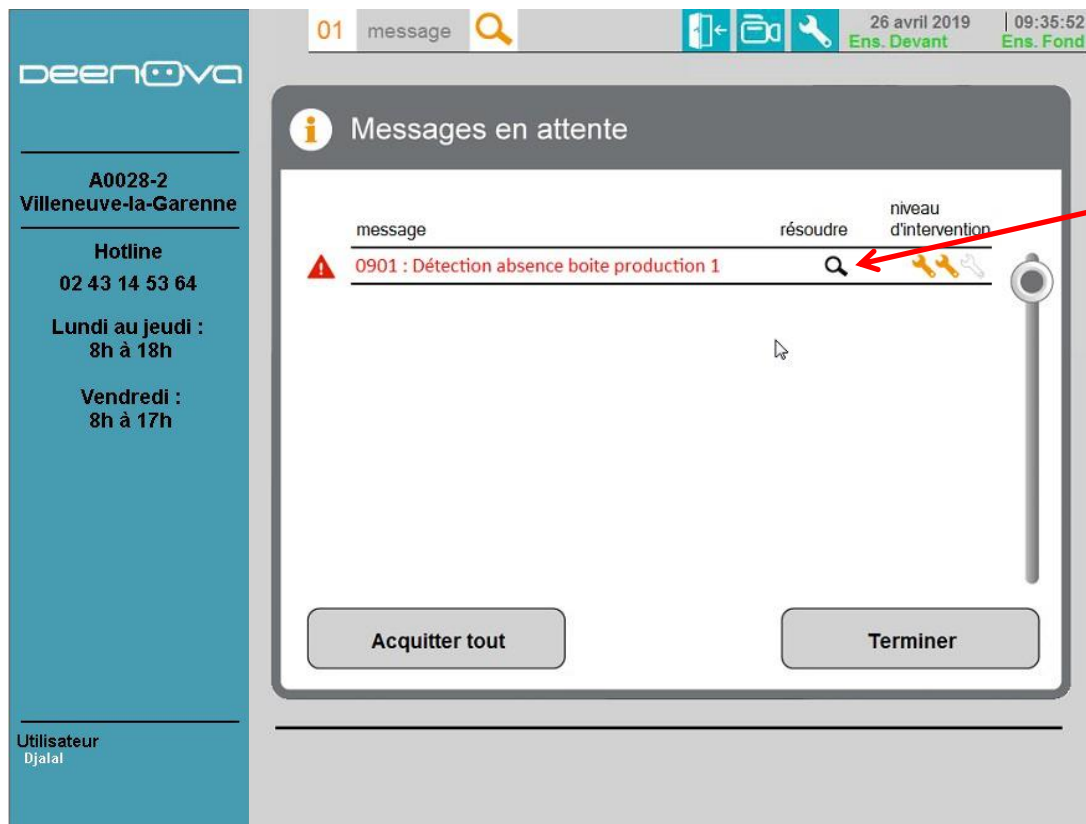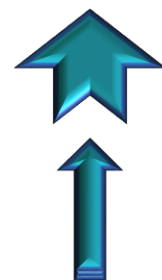


Le message 0901 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée à l'emplacement de production 1. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.



Message 0901 boîte production 1 et message 0903 boîte production 2

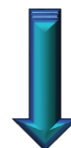

Comment réagir aux messages

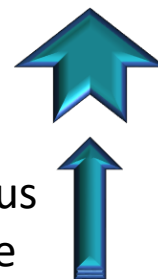


Le message 0901 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée à l'emplacement de production 1. Suivez les instructions. S'il n'y a pas de boîte, vérifier le poussoir au fond de l'emplacement ainsi que le capteur.

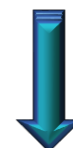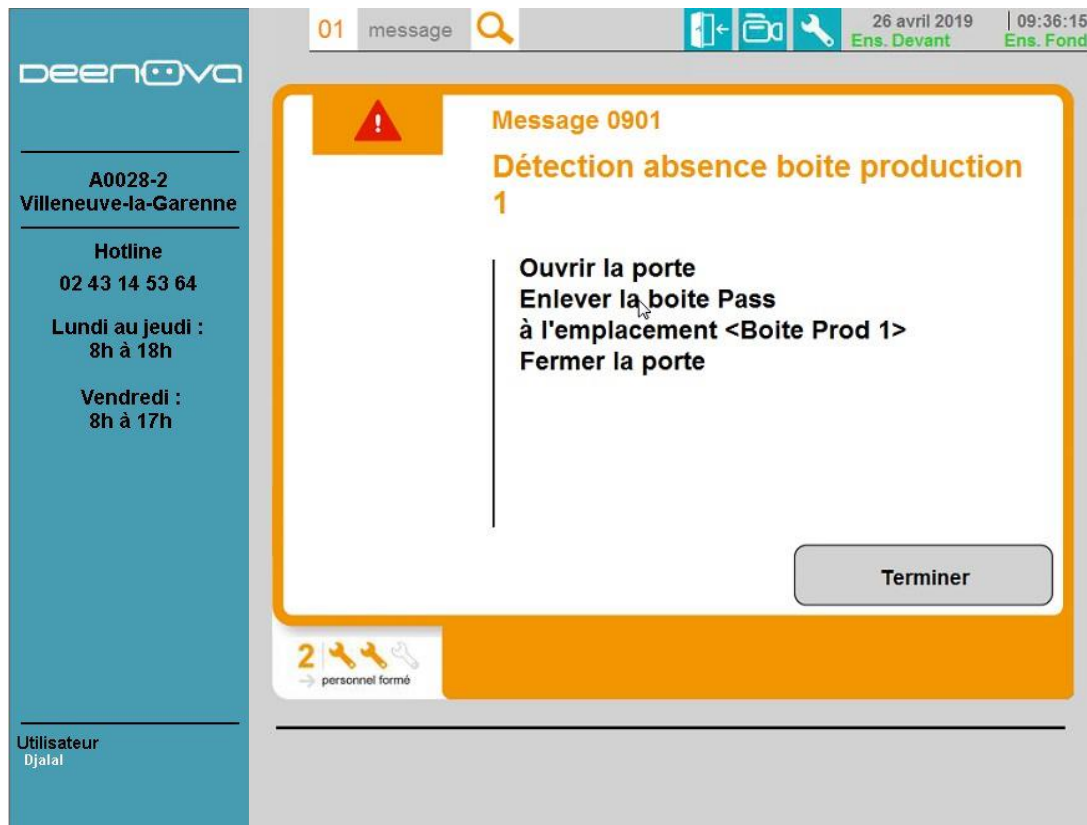


Message 0901 boîte production 1 et message 0903 boîte production 2


Comment réagir aux messages

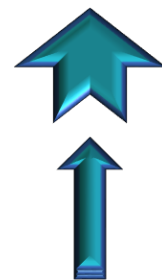


Emplacement SAS

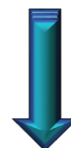



Comment réagir aux messages

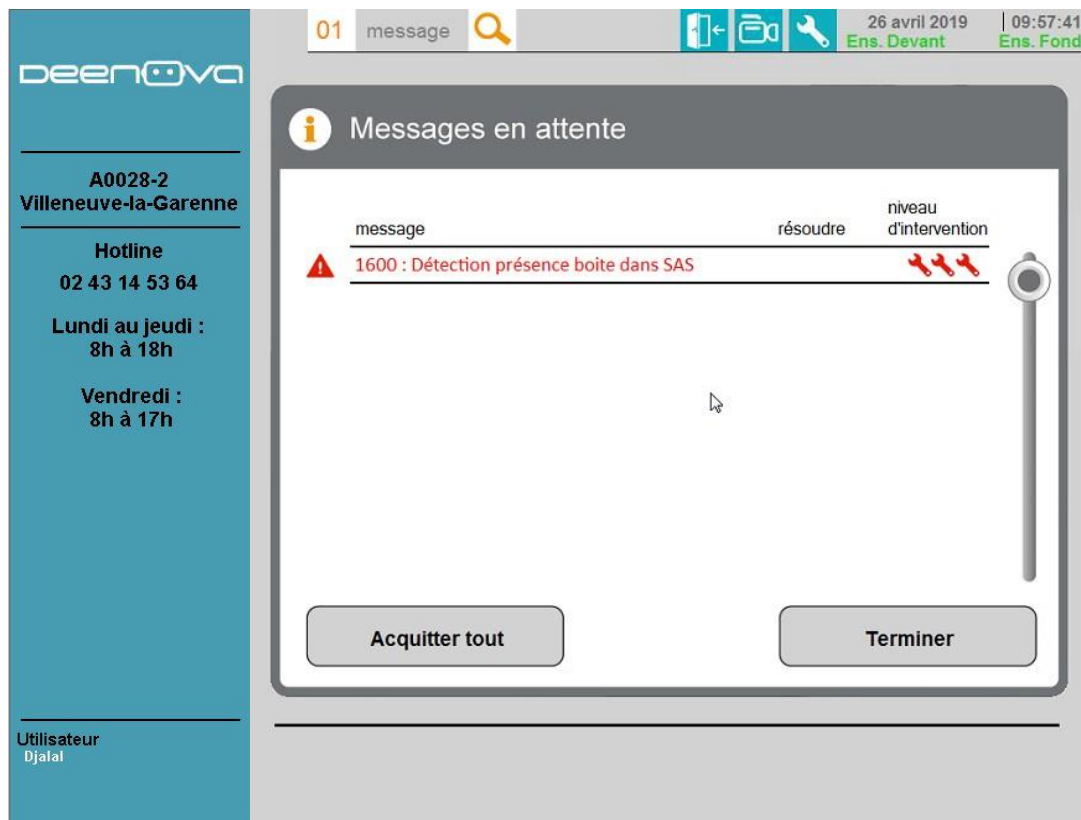


Le message 1600 vous informe qu'aucune boîte n'est détectée à l'emplacement SAS. (Re)positionner la boîte PASS dans l'emplacement.

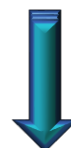

Comment réagir aux messages

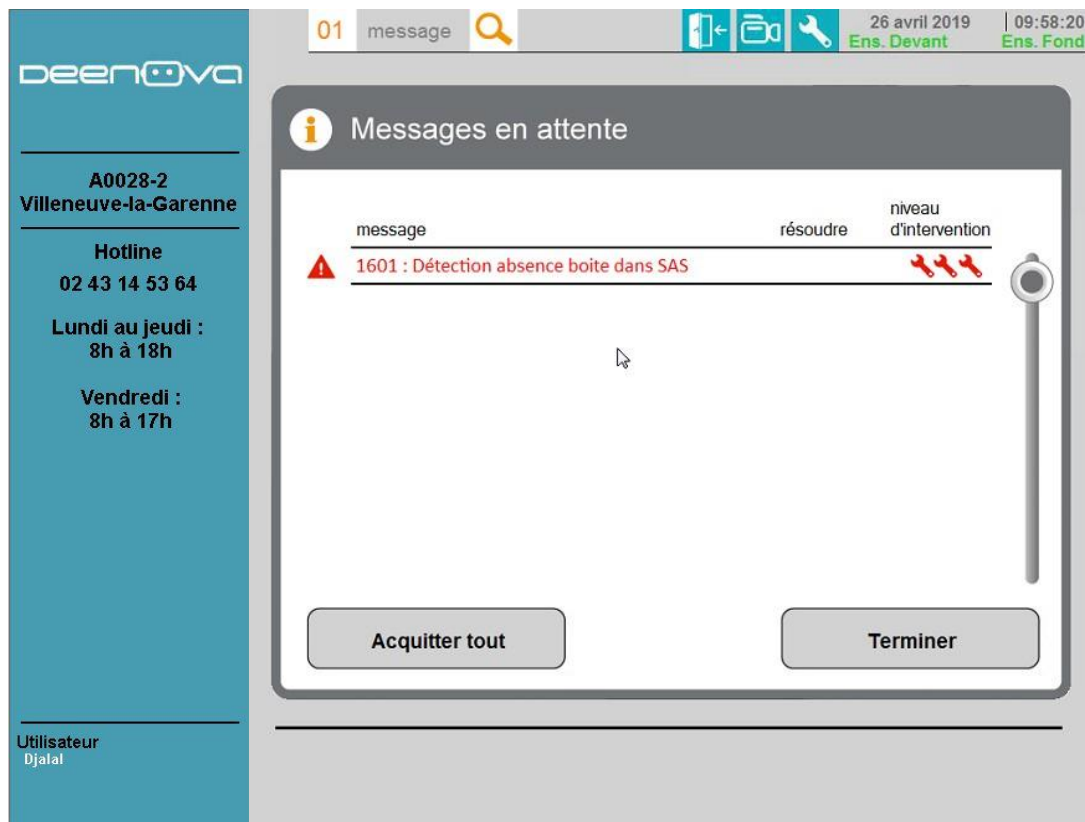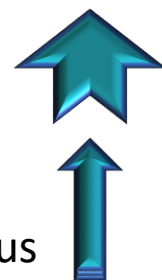


Le message 1601 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée à l'emplacement SAS. Retirer la boîte. S'il n'y a pas de boîte, vérifier le poussoir au fond de l'emplacement et le capteur.

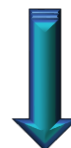

Comment réagir aux messages


Emplacement Boite rejet

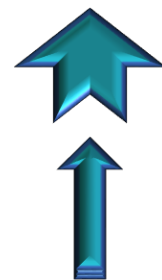

Rejet cueillette



Rejet coupe

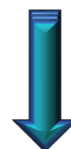


Comment réagir aux messages




The screenshot shows the 'Messages en attente' (Waiting Messages) section of the deenova software. The interface includes a top status bar with the date '23 février 2021' and time '15:40:49'. The left sidebar displays contact information for 'A0028-2 Villeneuve-la-Garenne' and 'Hotline 02 43 14 53 64'. The main area lists a message with ID '1800 : Vider la boîte rejet'. Above this message, the words 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention' are visible. A magnifying glass icon is positioned to the right of the message text. A red arrow points from the explanatory text on the right to this magnifying glass icon. At the bottom of the message list, there are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

Le message 1800 vous informe que la boîte rejet cueillette est en attente de vidage. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

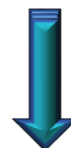


Comment réagir aux messages

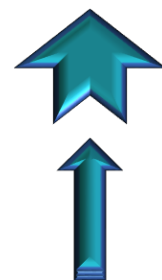


The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area displays a message titled 'Message 1800' with the instruction 'Vider la boîte rejet'. The message content lists steps: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Vider la boîte rejet', 'Confirmer la résolution du problème en appuyant sur le bouton <Boîte vide>', and 'Fermer la porte'. At the bottom of the message area are two buttons: 'Boîte vide' and 'Terminer'. A status bar at the top right shows the date '23 février 2021' and time '15:42:06'. A bottom status bar indicates 'Intervention facile'.


Le message 1800 vous informe que la boîte rejet cueillette est en attente de vidage. Suivez les instructions.

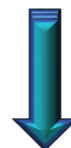


Comment réagir aux messages

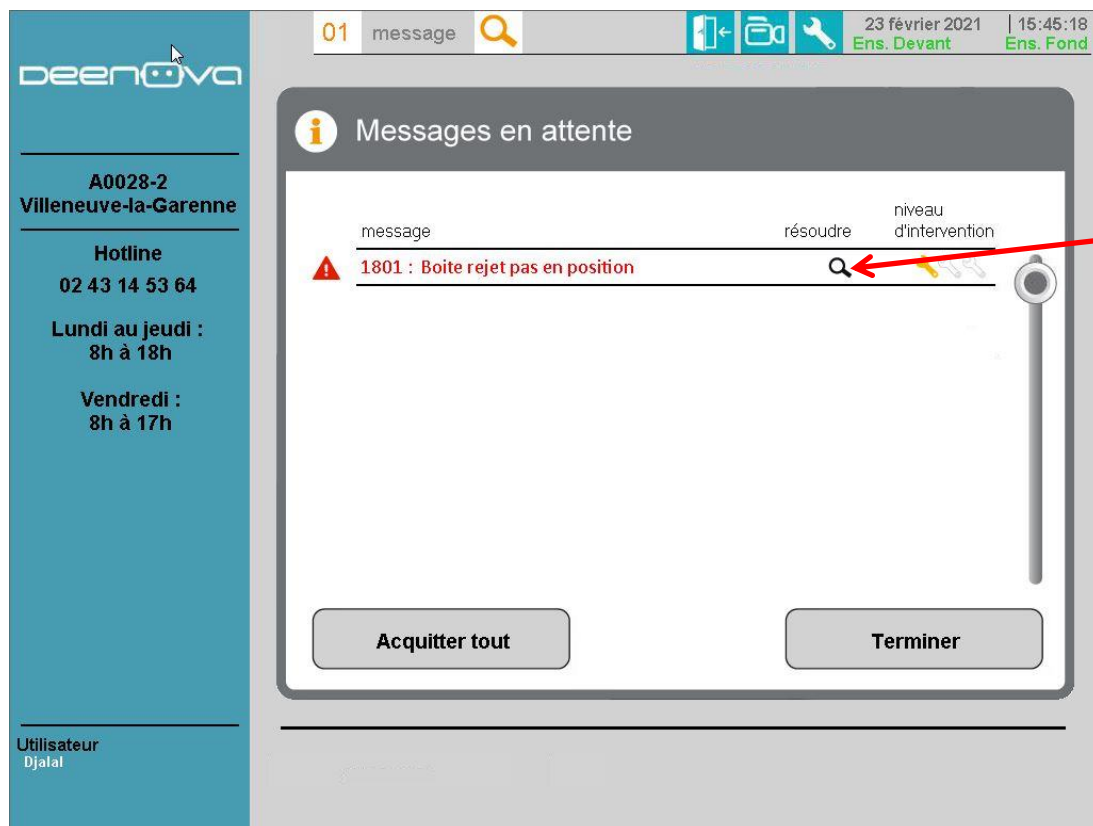

Le message 1801 vous informe que la boite rejet cueillette n'est pas en position. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.


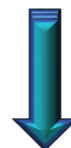


Comment réagir aux messages

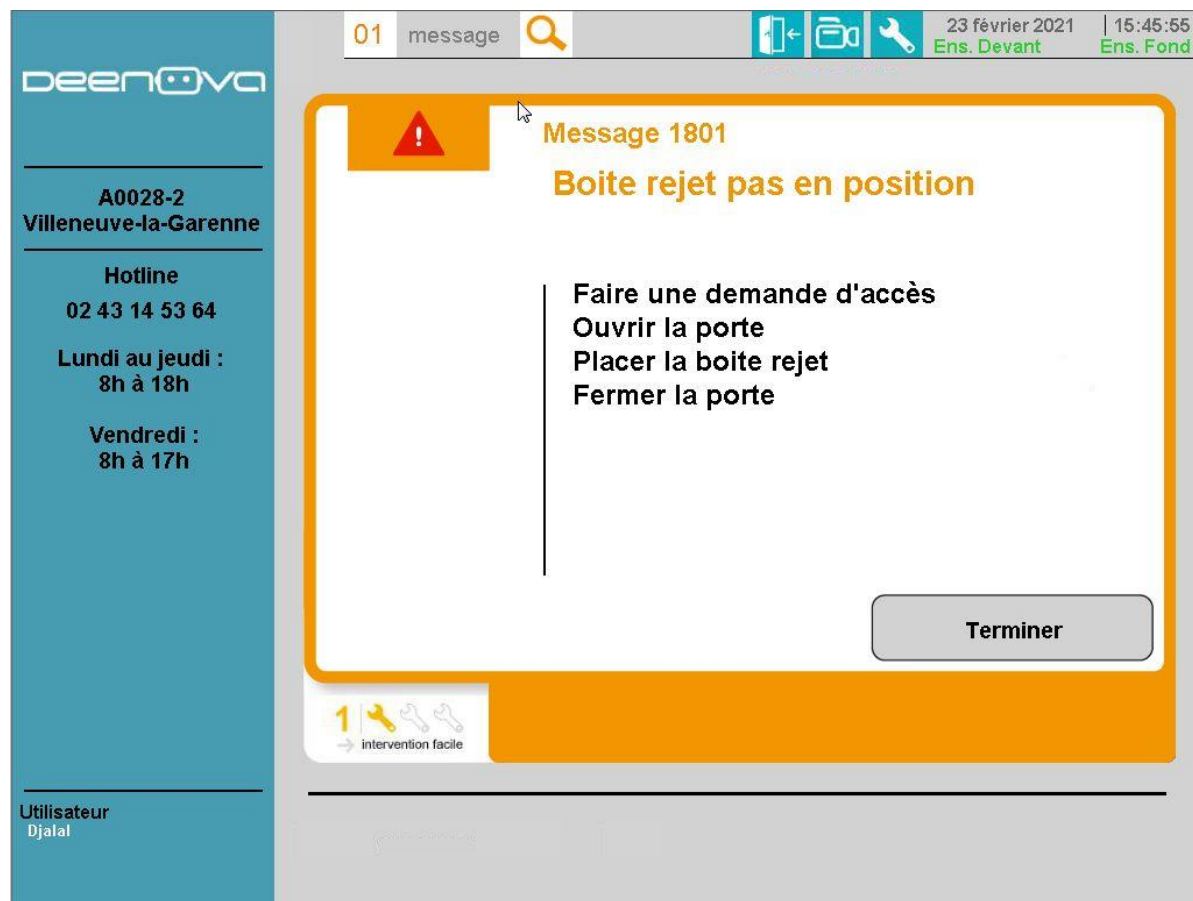


Le message 1801 vous informe que la boite rejet cueillette n'est pas en position. Suivez les instructions.


Comment réagir aux messages

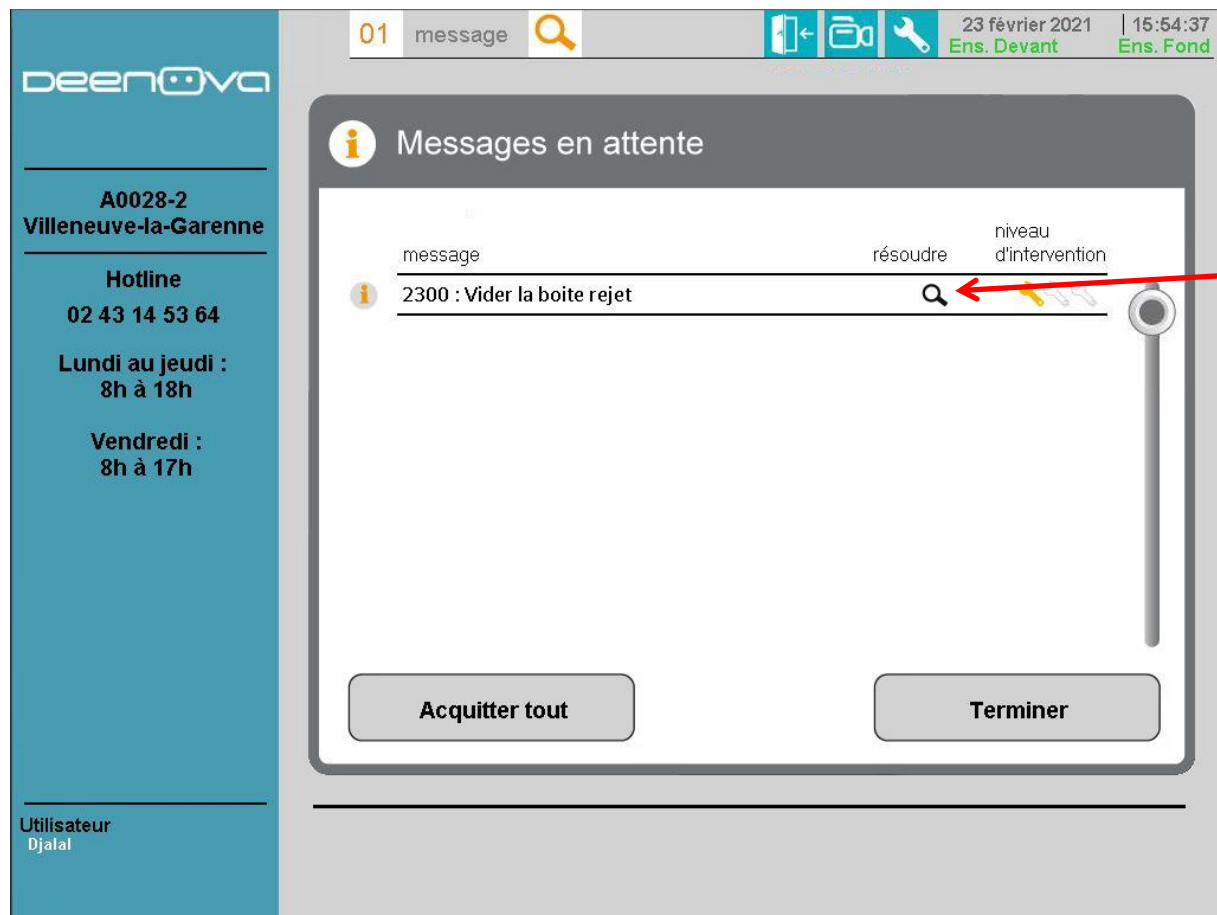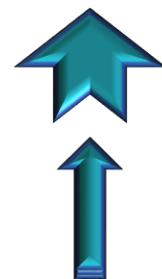

Le message 2300 vous informe que la boîte rejet coupe est en attente de vidage. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

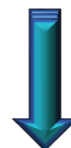

Comment réagir aux messages

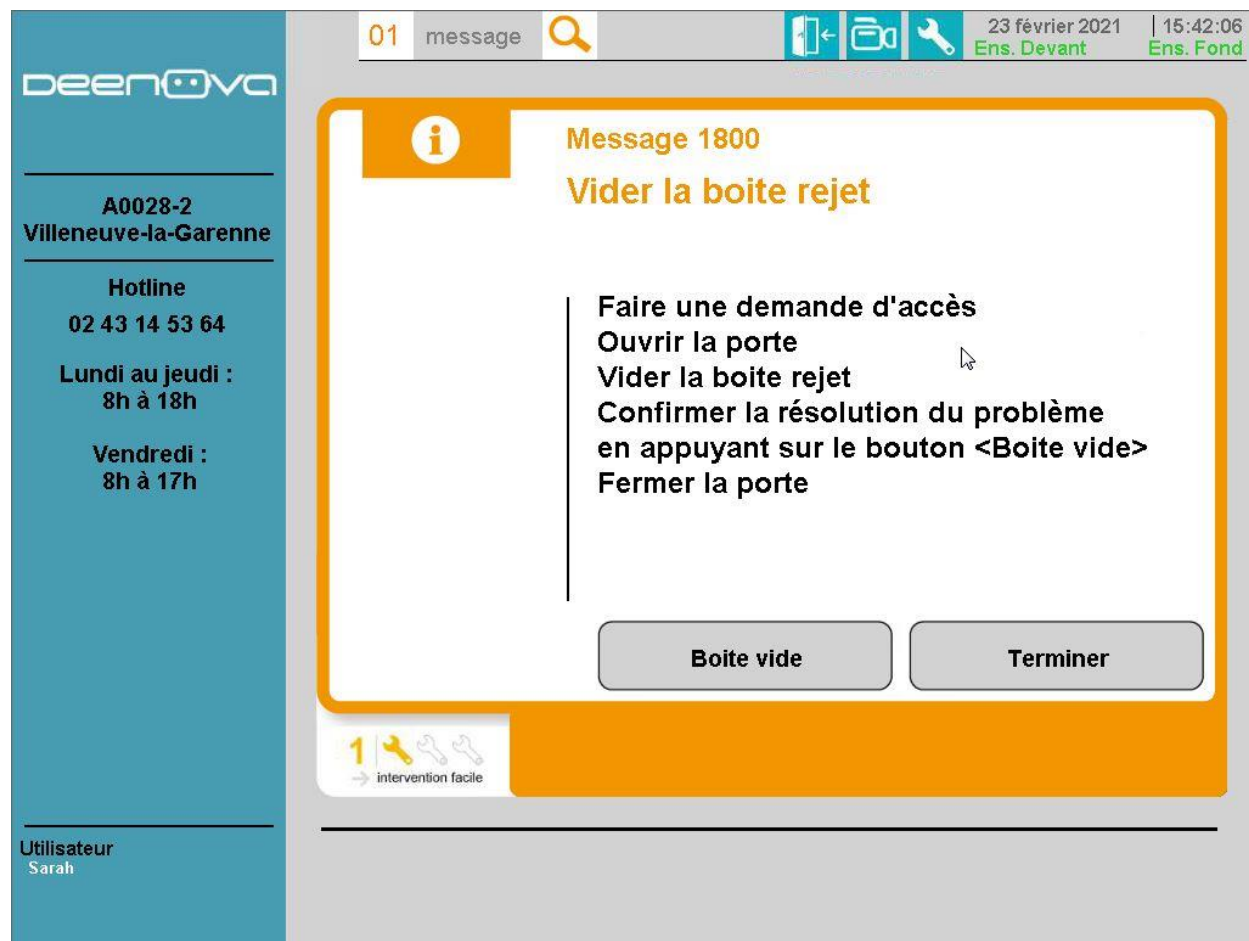

Le message 2300 vous informe que la boîte rejet coupe est en attente de vidage. Suivez les instructions.

Comment réagir aux messages



deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


23 février 2021 | 15:53:35
Ens. Devant | Ens. Fond

Messages en attente

message	résoudre	niveau d'intervention
2301 : Boite rejet pas en position		

Acquitter tout **Terminer**

Le message 2301 vous informe que la boite rejet coupe n'est pas en position. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

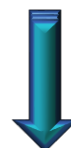

Comment réagir aux messages

The screenshot displays the deenova user interface. On the left is a blue sidebar with the company logo and contact information. The main area shows a message box with a red warning icon and orange text. The message title is 'Message 2301' and the content is 'Boite rejet pas en position'. Below this, a list of instructions is provided: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Placer la boîte rejet', and 'Fermer la porte'. At the bottom left of the message box, there is a '1' icon and the text 'intervention facile'. The top of the interface includes a status bar with the date '23 février 2021', time '15:52:36', and location 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Message 2301
Boite rejet pas en position

Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Placer la boîte rejet
Fermer la porte

1 intervention facile


Utilisateur
Djalal

01 message


23 février 2021 | 15:52:36
Ens. Devant Ens. Fond

Le message 2301 vous informe que la boîte rejet coupe n'est pas en position.
Suivez les instructions.

Comment réagir aux messages

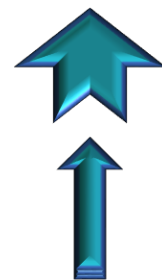


Chargeur plateau CPU

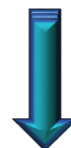



Comment réagir aux messages



Le message 1100 vous informe qu'un plateau dépasse du CPU côté opérateur.
Ouvrir la porte du CPU via le menu système.
Remettre le plateau dans le CPU.

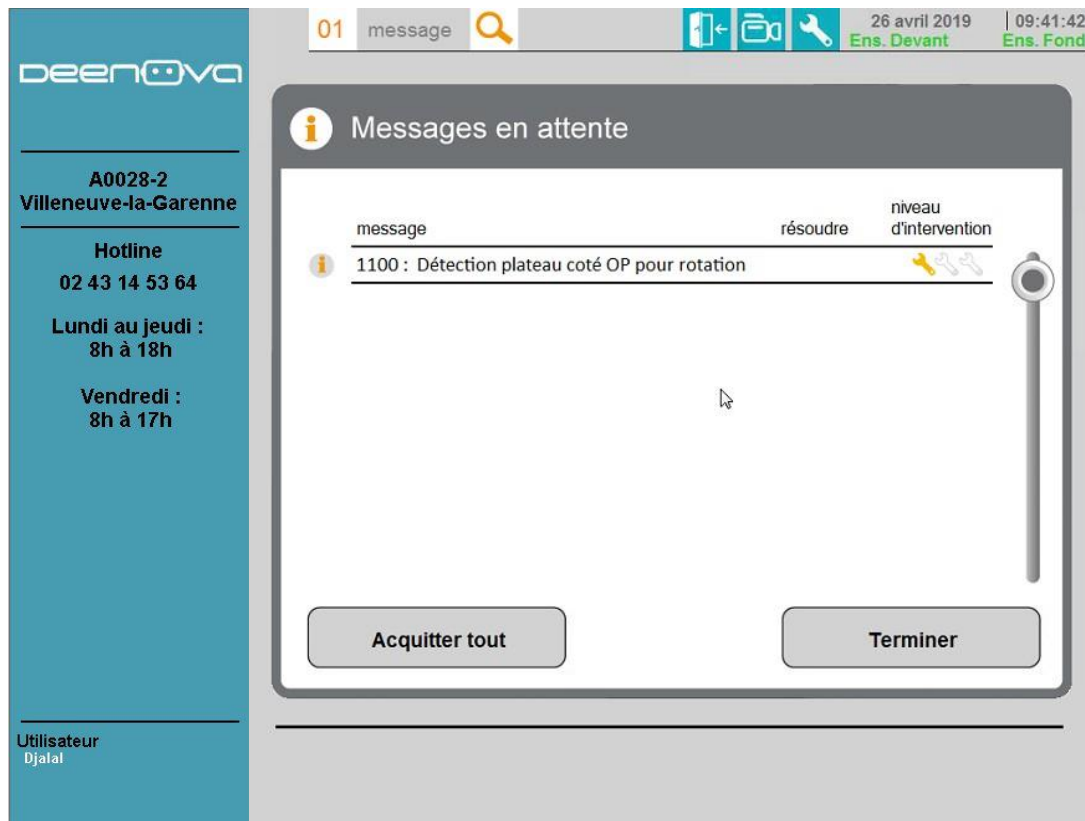



Comment réagir aux messages

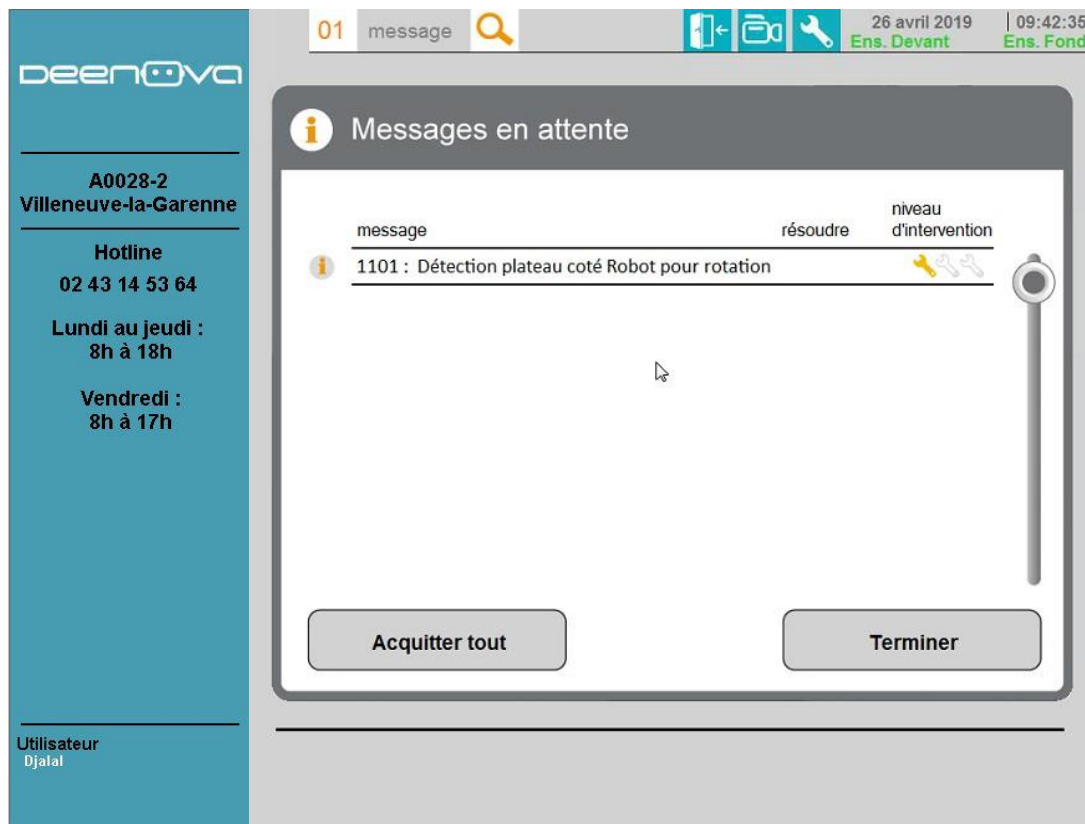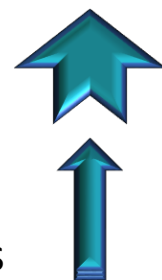

Le message 1101 vous informe qu'un plateau dépasse du CPU côté robot. Ouvrir la porte de l'ACCED via une demande d'accès. Remettre le plateau dans le CPU.



Comment réagir aux messages

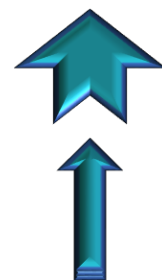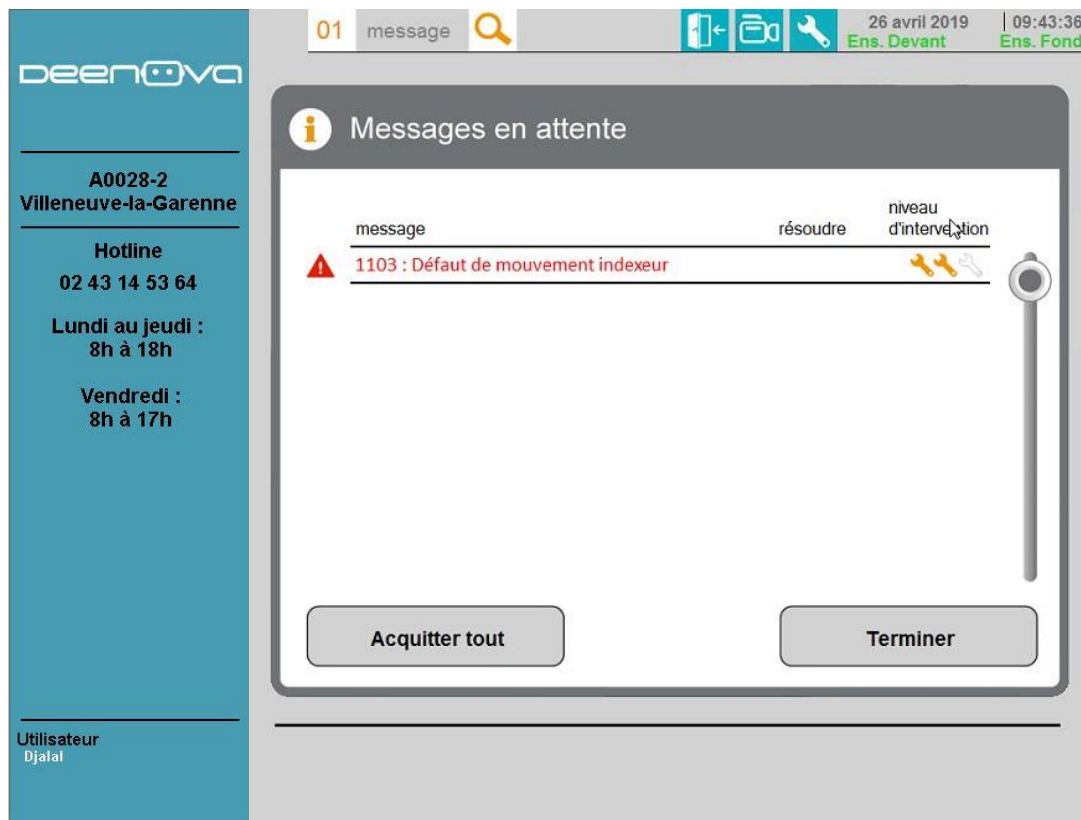The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a list of messages under the heading 'Messages en attente'. A specific message is highlighted with a red warning icon and text: '1103 : Défaut de mouvement indexeur'. To the right of the message text are columns for 'résoudre' and 'niveau d'intervention'. At the bottom of the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:43:36
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente



message	résoudre	niveau d'intervention
 1103 : Défaut de mouvement indexeur		  

Acquitter tout Terminer


Le message 1103 vous informe que l'indexeur ne parvient pas à faire son mouvement. Contacter la hotline.

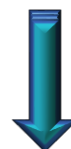


Comment réagir aux messages

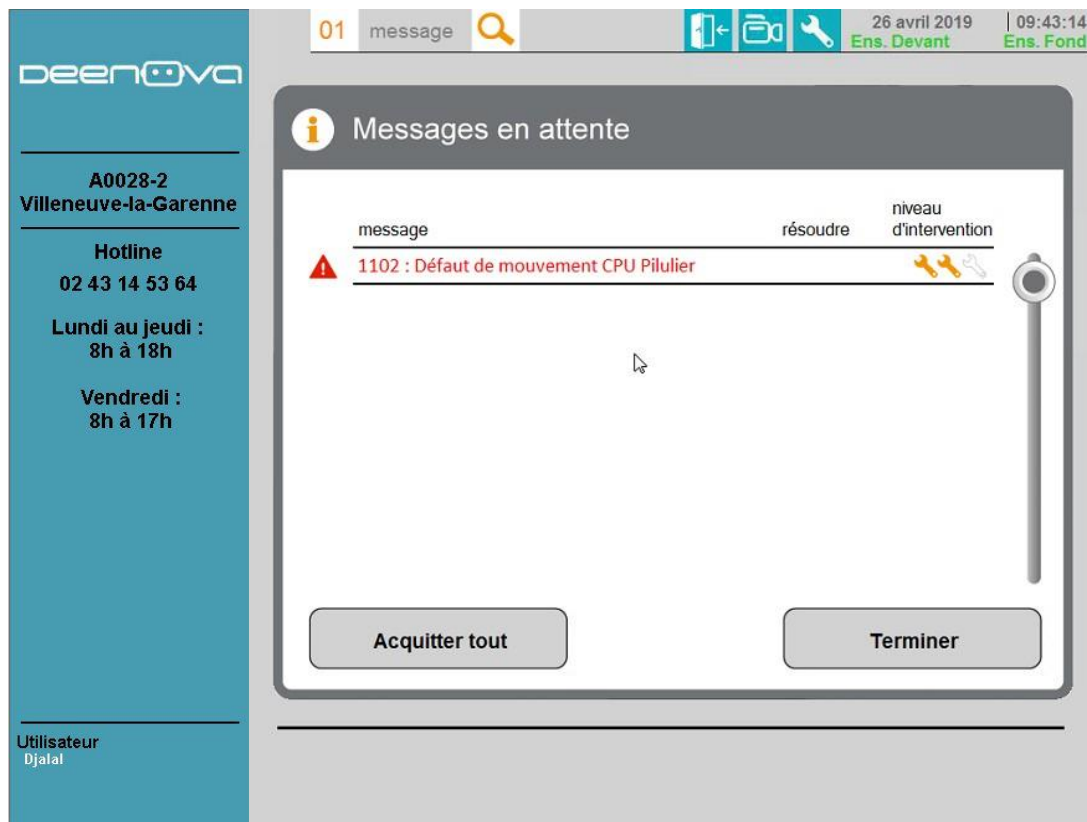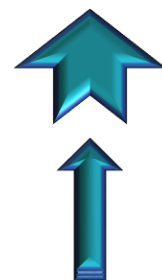



Le message 1102 vous informe que le CPU pilulier ne parvient pas à faire son mouvement.
Contacter la hotline.

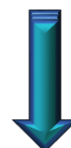



Comment réagir aux messages

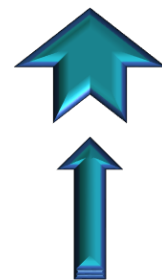


Convoyeur pilulier

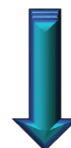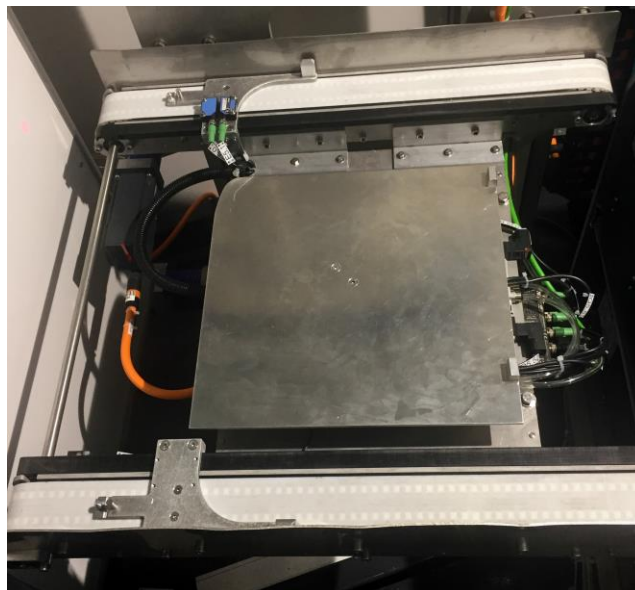



Comment réagir aux messages

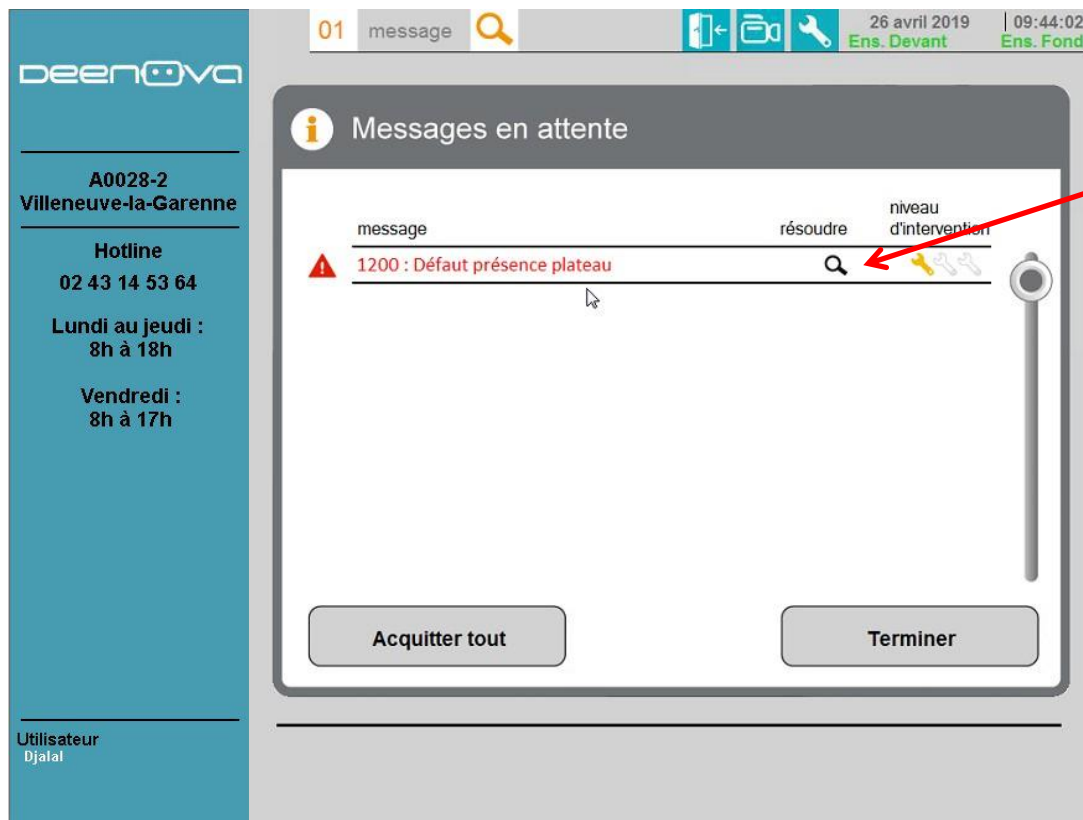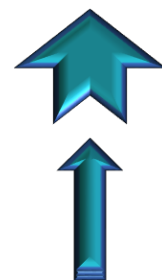


Le message 1200 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur suite à un défaut de prise plateau dans le CPU. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

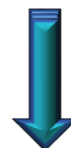



Comment réagir aux messages

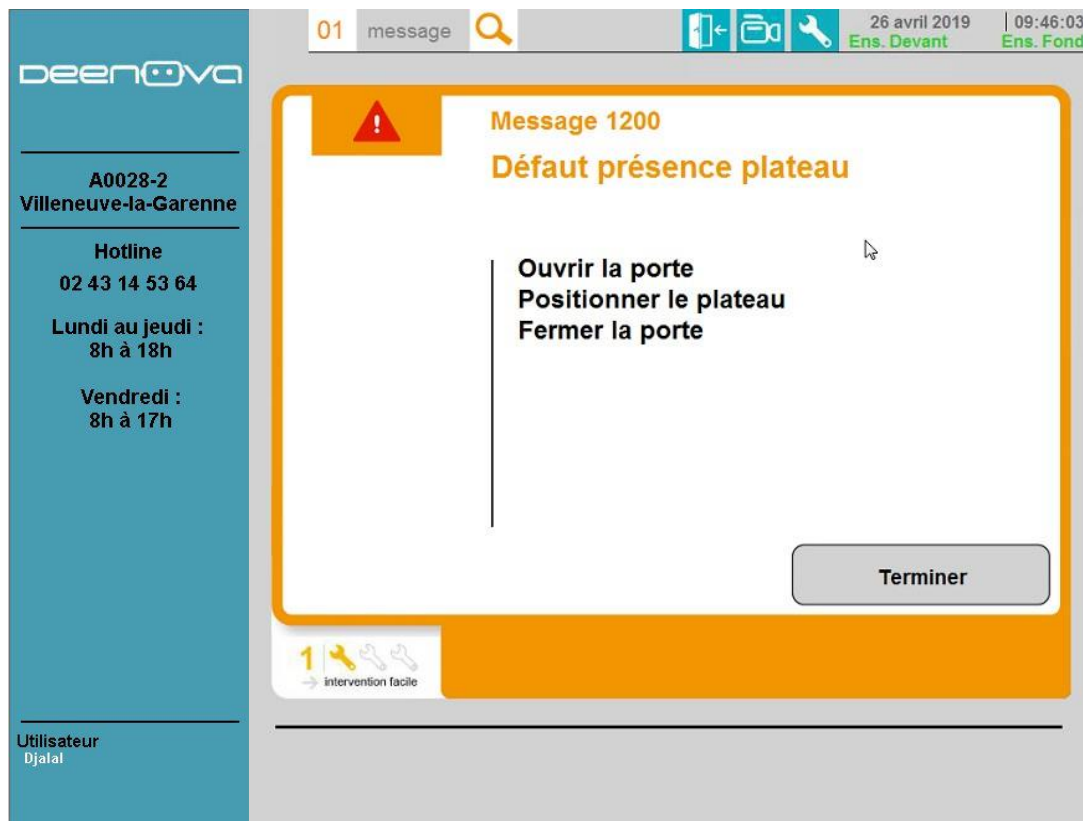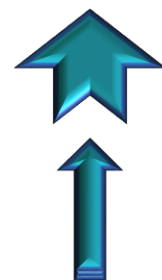


Le message 1200 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur suite à un défaut de prise plateau dans le CPU. (Re)positionner le plateau sur le convoyeur.

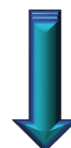



Comment réagir aux messages

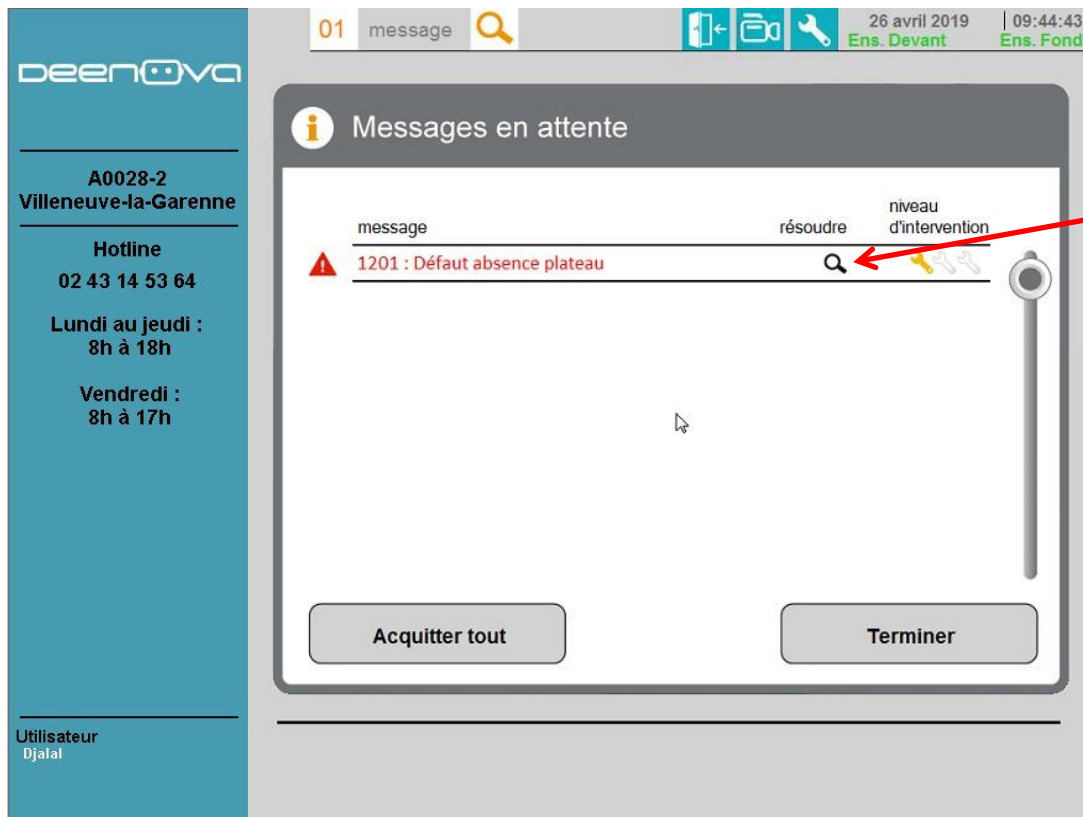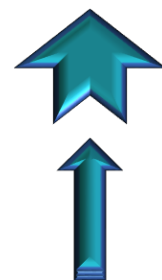

Le message 1201 vous informe qu'un plateau non attendu est détecté sur le convoyeur. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

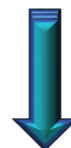



Comment réagir aux messages

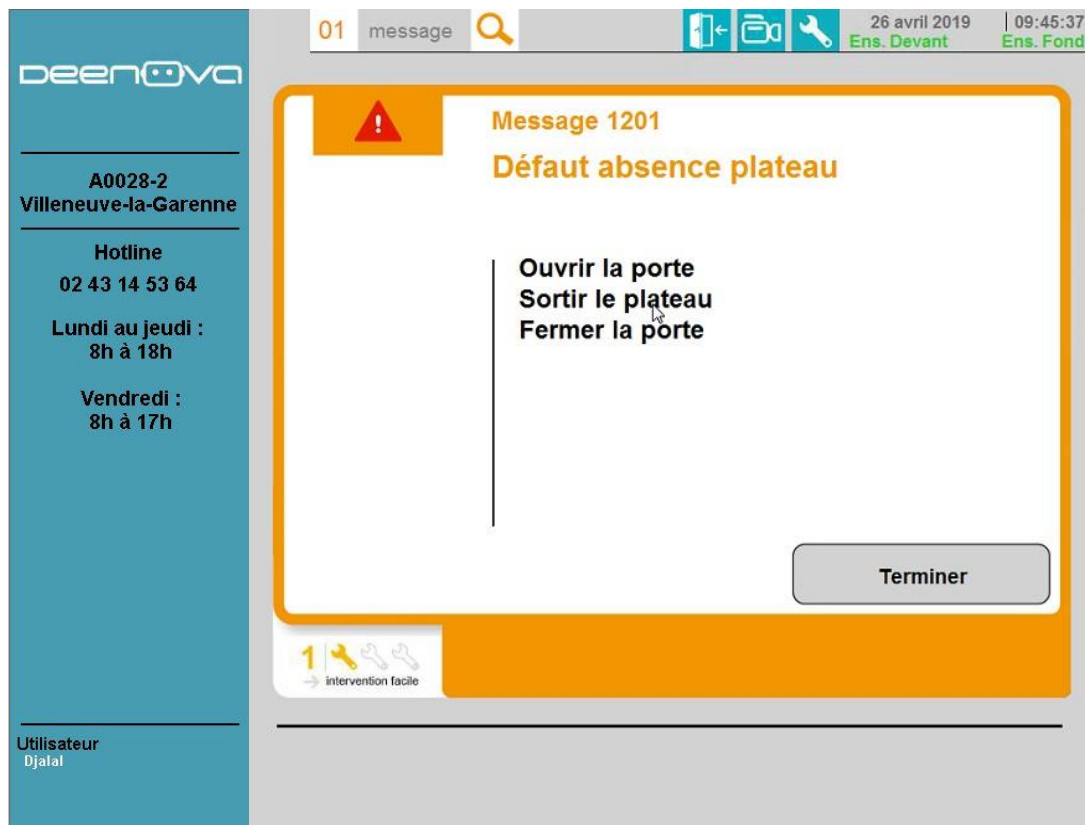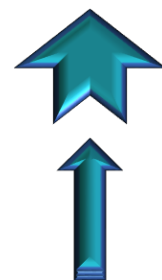


Le message 1201 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur. Retirer le plateau S'il n'y a pas de plateau, vérifier le capteur.




Comment réagir aux messages

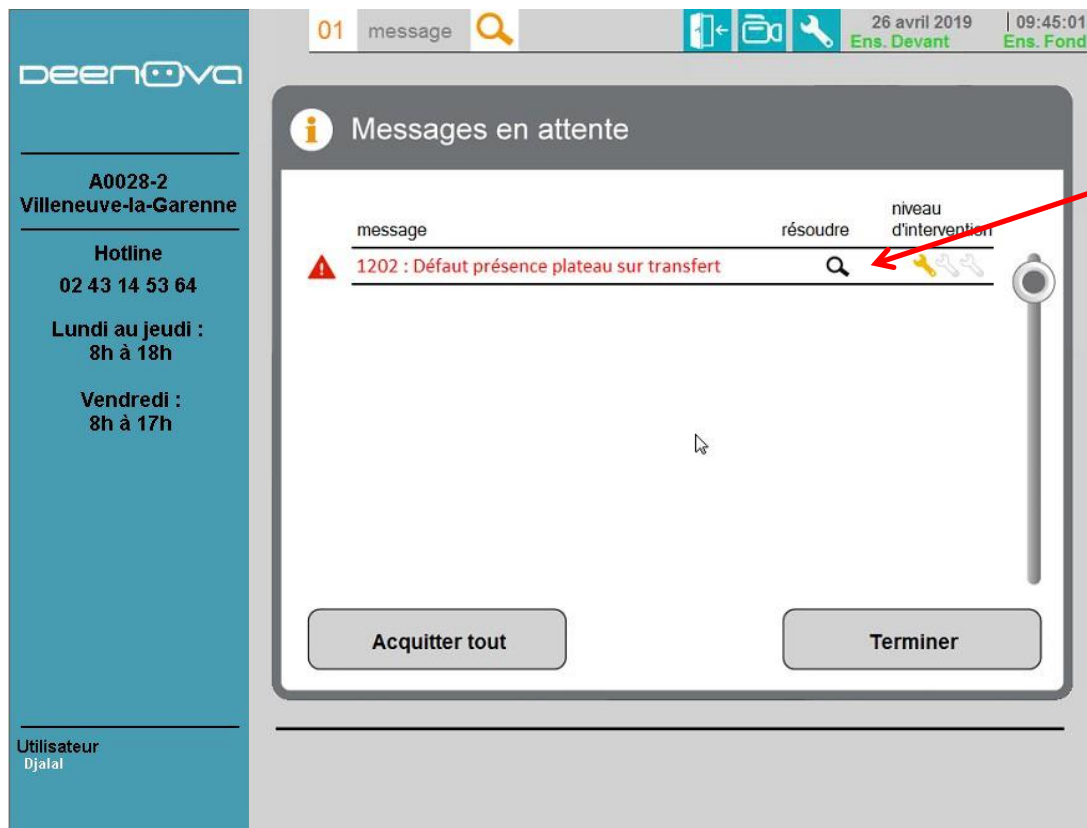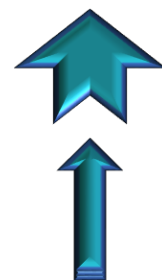


Le message 1202 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur suite à un défaut de prise plateau dans le dépileur.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

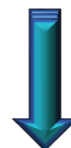



Comment réagir aux messages

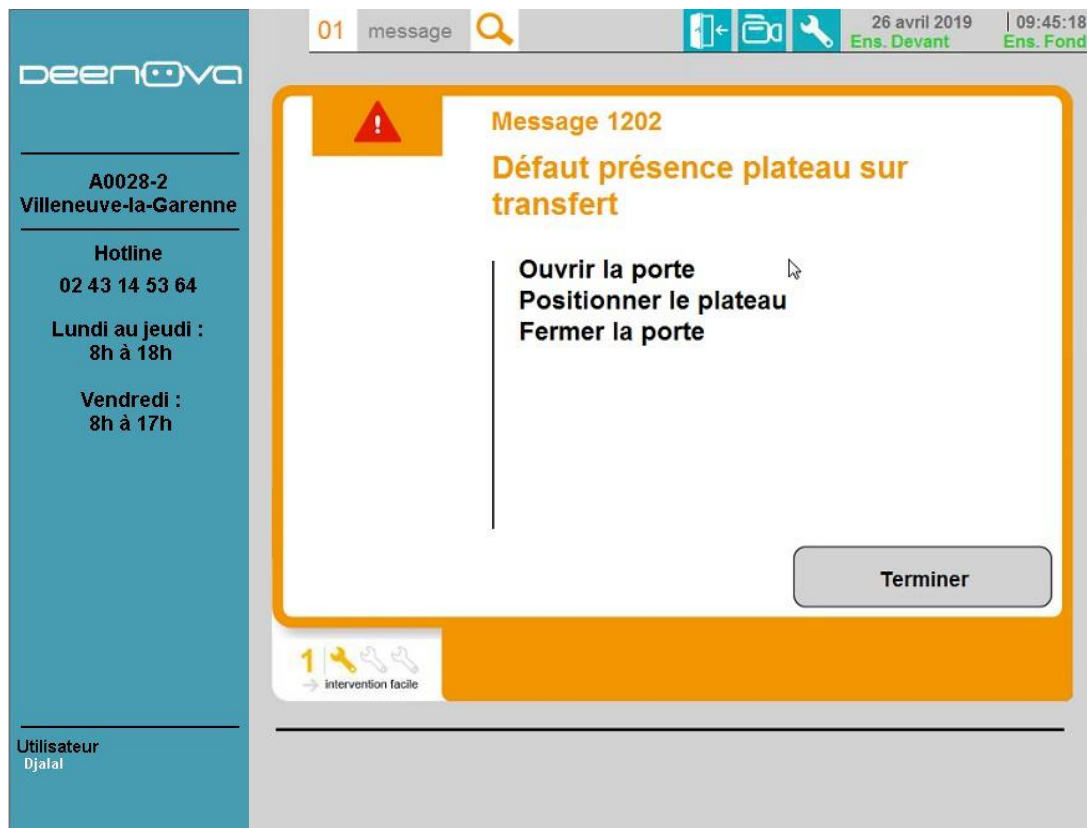


Le message 1202 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur suite à un défaut de prise plateau dans le dépileur.
(Re)positionner le plateau sur le convoyeur.

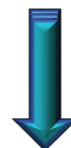


Comment réagir aux messages

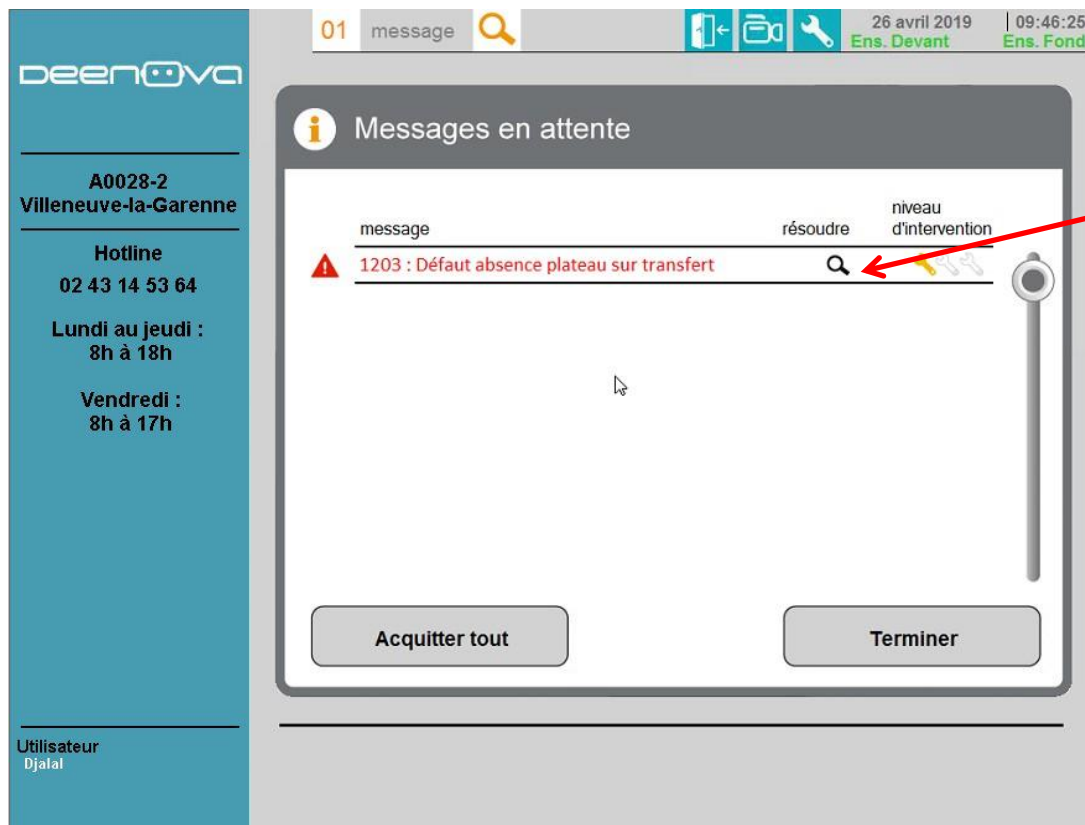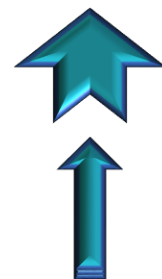

Le message 1203 vous informe qu'un plateau non attendu est détecté sur le convoyeur côté dépileur. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

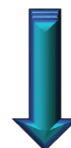



Comment réagir aux messages

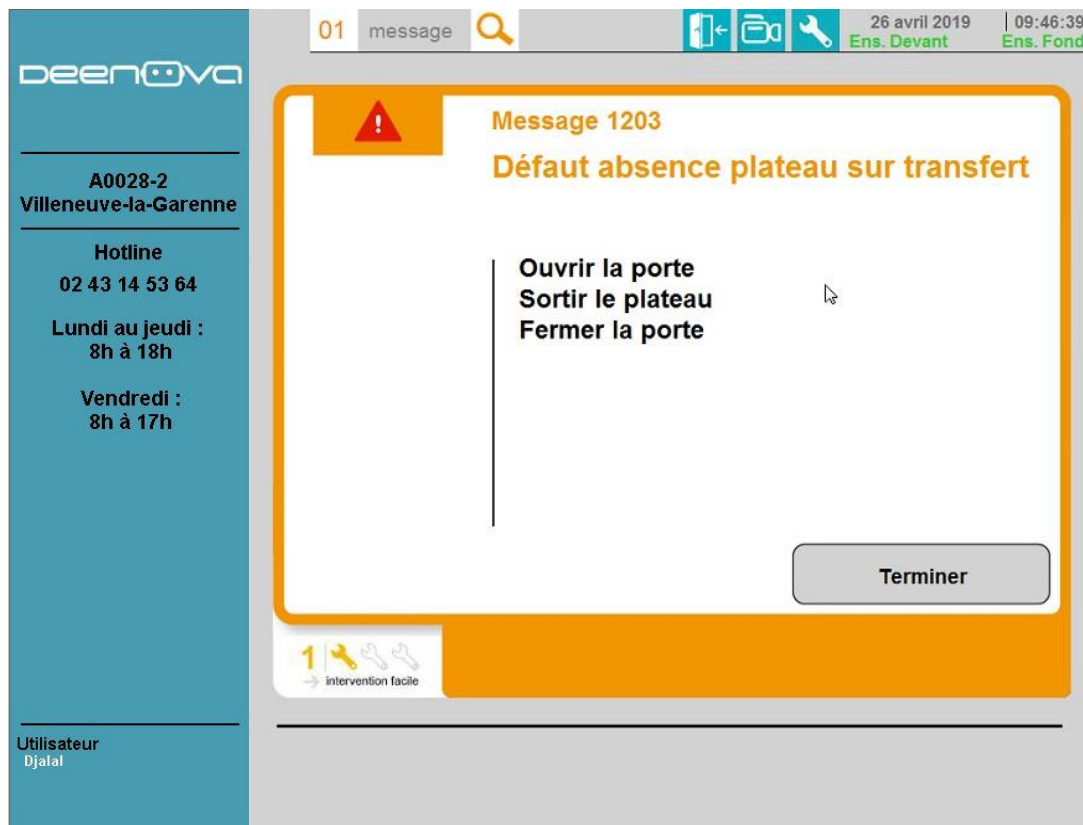

Le message 1203 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le convoyeur côté dépileur.
Retirer le plateau.
S'il n'y a pas de plateau, vérifier le capteur.




Comment réagir aux messages

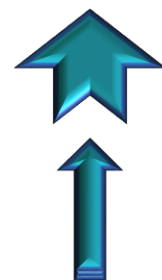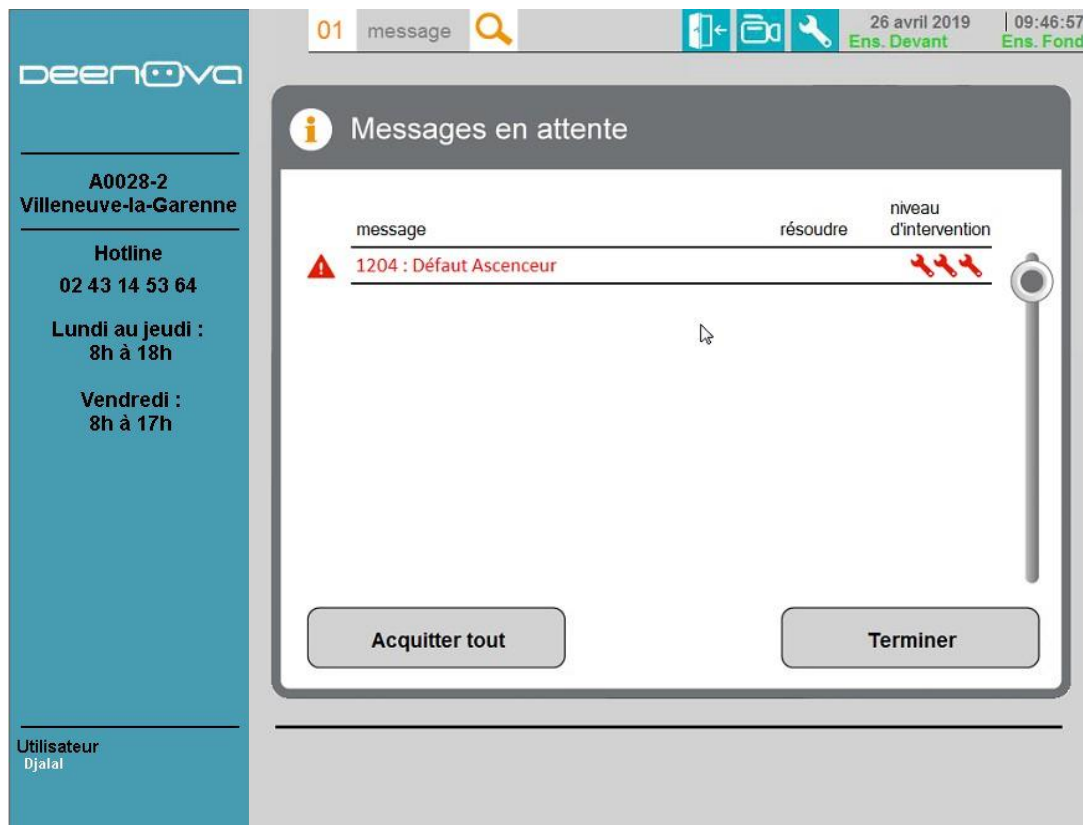
The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a list of messages under the heading 'Messages en attente'. A single message is visible: '1204 : Défaut Ascenseur', which is marked as a warning (red triangle) and has a 'niveau d'intervention' of 3 (indicated by three red wrench icons). The interface includes buttons for 'Acquitter tout' and 'Terminer' at the bottom.

message	résoudre	niveau d'intervention
1204 : Défaut Ascenseur		3

Le message 1204 vous informe que l'ascenseur est en défaut.

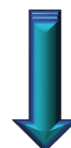

Comment réagir aux messages

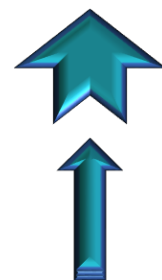

The screenshot shows the Deenova software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a list of messages under the heading 'Messages en attente'. A single message is visible: '1205 : Défaut axe convoyeur', which is marked as a warning (red triangle icon) and has a 'niveau d'intervention' of 3 (indicated by three red wrench icons). The message is in the 'résoudre' state. At the bottom of the message list are two buttons: 'Acquitter tout' and 'Terminer'.

deenoVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:47:32
Ens. Devant Ens. Fond

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
1205 : Défaut axe convoyeur		

Acquitter tout Terminer

Le message 1205 vous informe que l'axe du convoyeur est en défaut.

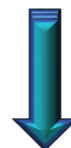

Comment réagir aux messages

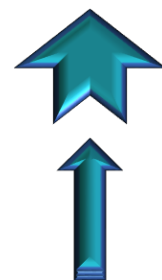

The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main window displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) section. At the top of this section, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. A message is listed with the ID '1206' and the text 'Défaut axe Z'. To the right of the message text are three red wrench icons, indicating a critical issue. At the bottom of the message list, there are two buttons: 'Acquitter tout' (Dismiss all) and 'Terminer' (End).

DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h


Utilisateur
Djalal

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
 1206 : Défaut axe Z		

Acquitter tout **Terminer**



Le message 1205 vous informe que l'axe Z est en défaut.

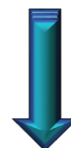



Comment réagir aux messages

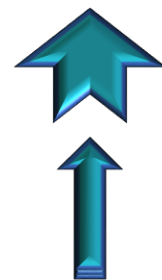


Dépilleur

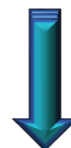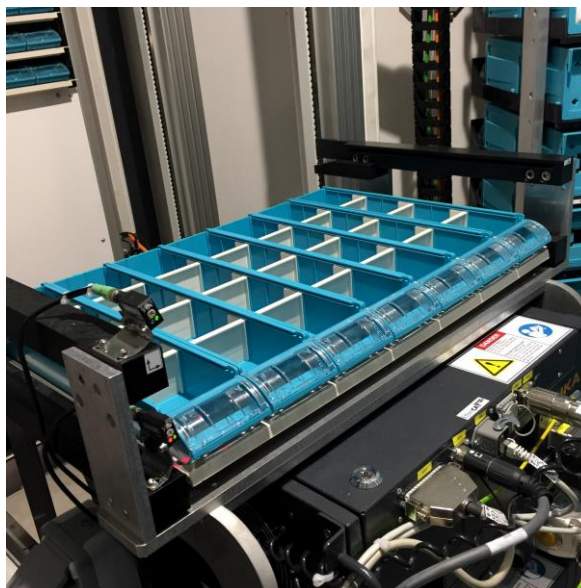

Comment réagir aux messages

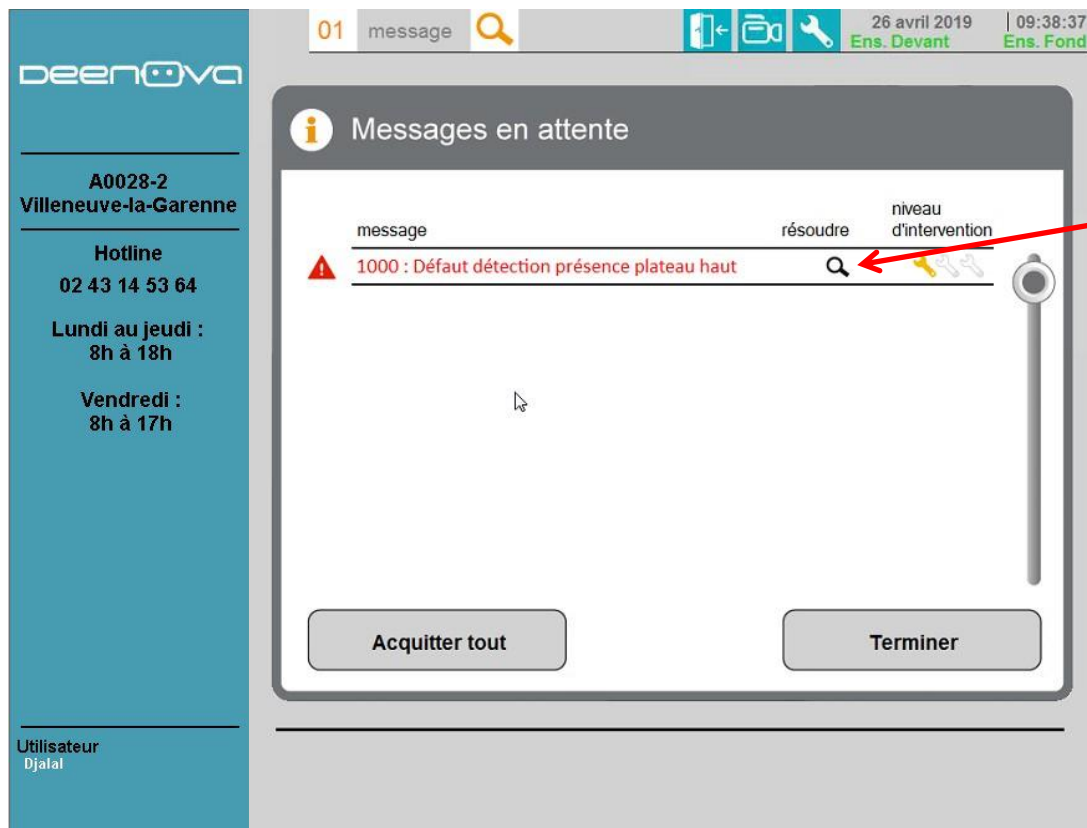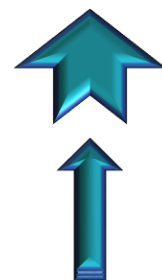

Le message 1000 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le support haut du dépileur. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez de plus d'informations.

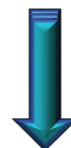


Comment réagir aux messages




The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 1000' with a warning icon. The message content is 'Défaut détection présence plateau haut' (High platform presence detection fault). Below this, instructions are listed: 'Ouvrir la porte' (Open the door), 'Positionner le plateau' (Position the platform), and 'Fermer la porte' (Close the door). A 'Terminer' (End) button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '1' icon and the text 'intervention facile' (easy intervention). The top of the interface shows a status bar with the date '26 avril 2019', time '09:39:21', and user roles 'Ens. Devant' and 'Ens. Fond'.


Le message 1000 vous informe qu'aucun plateau n'est détecté sur le support haut du dépileur. Suivez les instructions.

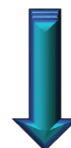

Comment réagir aux messages

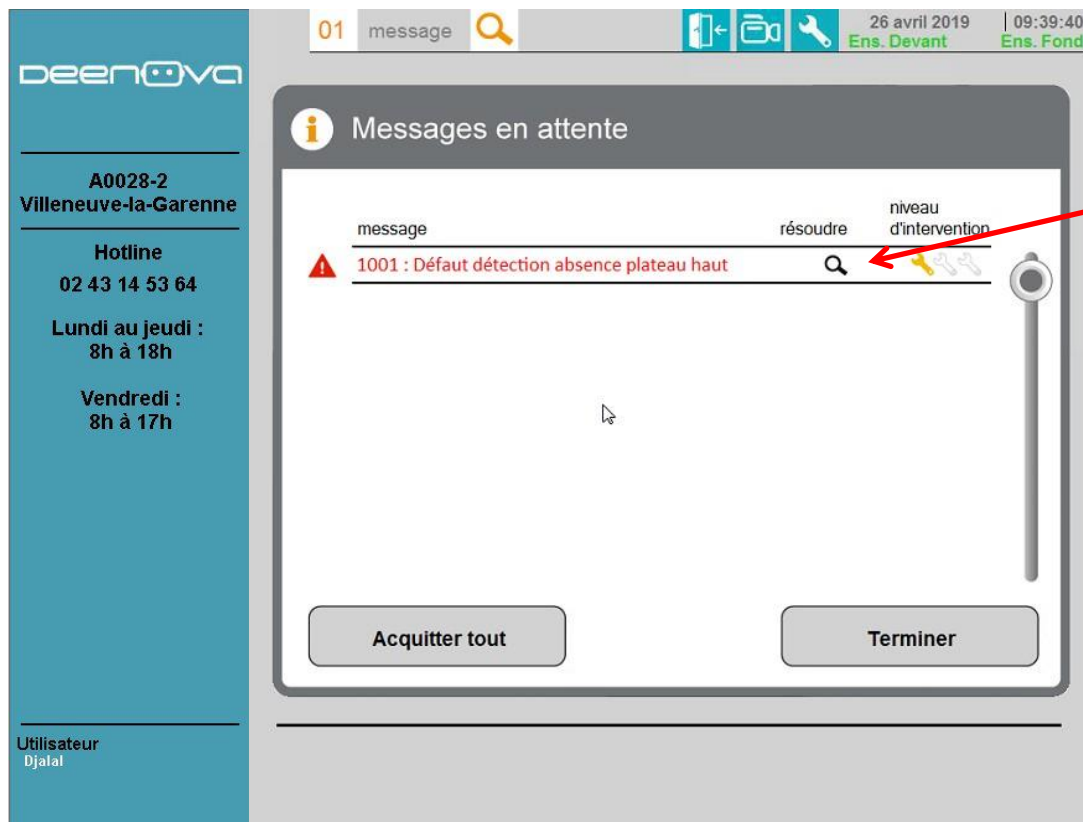

Le message 1001 vous informe qu'un plateau non attendu est détecté sur le support haut du dépileur. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

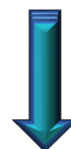


Comment réagir aux messages





The screenshot shows the Deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 1001' with a warning icon. The message content is 'Défaut détection absence plateau haut' and lists instructions: 'Ouvrir la porte', 'Sortir le plateau', and 'Fermer la porte'. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '1' icon and the text 'intervention facile'. The top of the interface shows a status bar with '01 message', a search icon, and system information: '26 avril 2019 | 09:39:55', 'Ens. Devant', and 'Ens. Fond'.

Le message 1001 vous informe qu'un plateau non attendu est détecté sur le support haut du dépileur. Suivez les instructions.


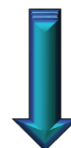


Comment réagir aux messages


Robot de cueillette

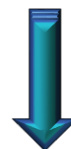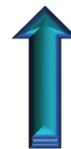

Comment réagir aux messages

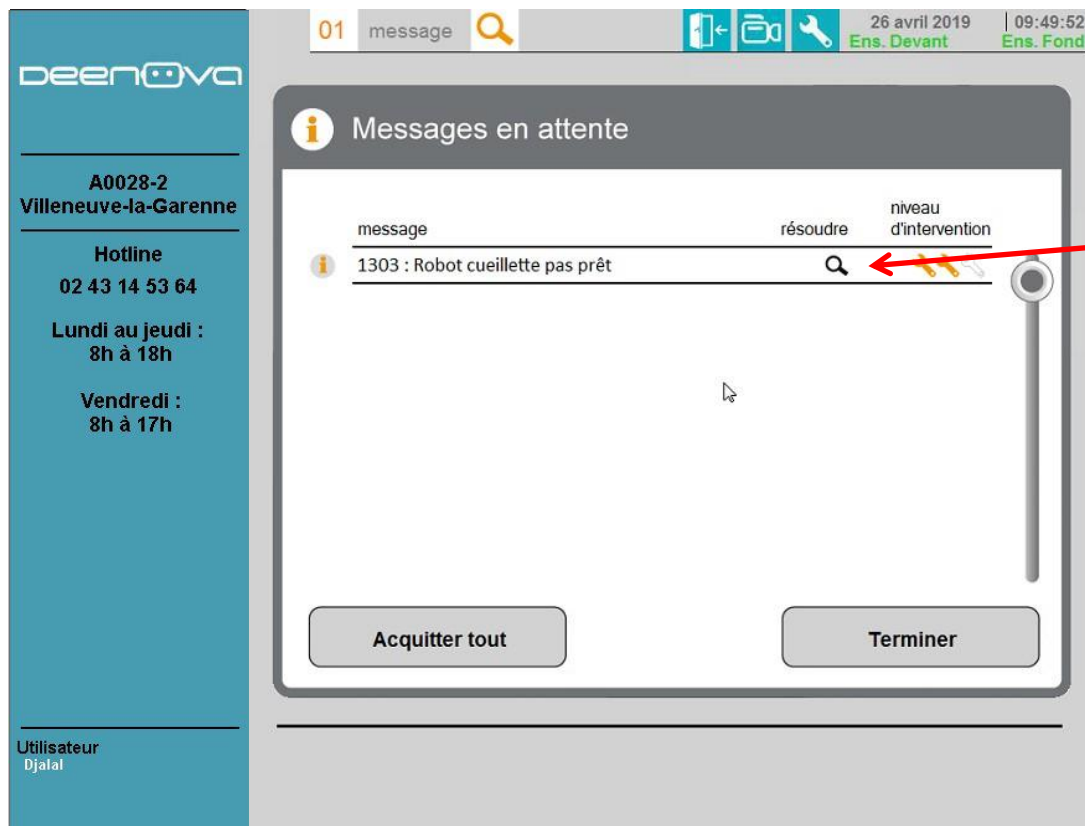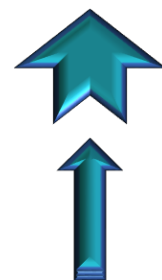

Le message 1303 vous informe que le robot de cueillette n'est pas prêt.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

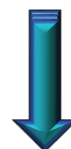


Comment réagir aux messages




The screenshot shows the Deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 1303 Robot cueillette pas prêt'. The message content instructs the user to make an access request, open the door, execute the W_LoopPos trajectory for the KUKA robot, and set it to external mode before closing the door. A 'Terminer' button is at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '2' with a wrench icon and the text 'personnel formé'. The top of the interface shows a status bar with '01 message', a search icon, and system information like the date (26 avril 2019) and time (09:50:04).

Le message 1303 vous informe que le robot de cueillette n'est pas prêt. Suivez les instruction.

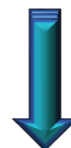

Comment réagir aux messages

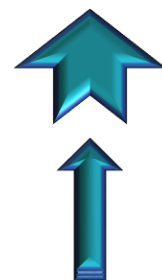

DEENOVA

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message


26 avril 2019 | 09:50:32
Ens. Devant | Ens. Fond

Messages en attente


message	résoudre	niveau d'intervention
1304 : Robot cueillette pas en EXT		

Acquitter tout Terminer

Le message 1304 vous informe que le robot de cueillette n'est pas en EXT.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

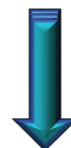


Comment réagir aux messages


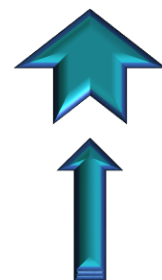


The screenshot shows the DEENOVA interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 1304 Robot cueillette pas en EXT'. The message content instructs the user to 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'mettre le robot en mode EXT', and 'Fermer la porte'. An icon of a robot arm is shown next to the text. At the bottom of the message box is a 'Terminer' button. Below the message box, there is a status bar indicating '2' personnel formé. The top of the interface shows a search bar, navigation icons, and the date/time: 26 avril 2019, 09:50:41.

Le message 1304 vous informe que le robot de cueillette n'est pas en EXT.
Suivez les instruction.

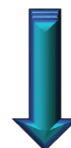


Comment réagir aux messages

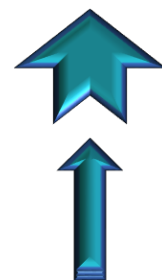
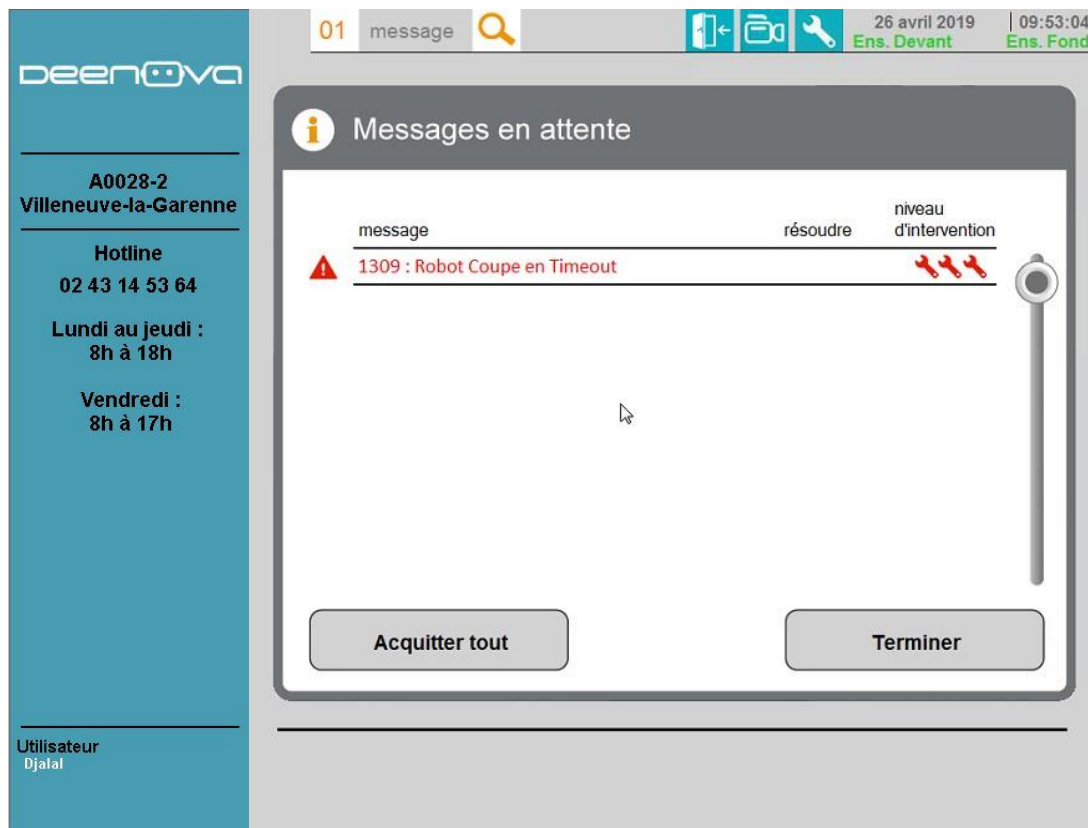
The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information. The main area displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) window. At the top of this window, there's a header with '01 message' and a search icon. Below this, a table lists messages. The first message is '1309 : Robot Coupe en Timeout', marked with a red warning triangle and three red wrench icons. At the bottom of the message list, there are two buttons: 'Acquitter tout' (Acknowledge all) and 'Terminer' (End).

message	résoudre	niveau d'intervention
1309 : Robot Coupe en Timeout		***

Le message 1309 vous informe que le robot de coupe a dépassé le temps d'attente.

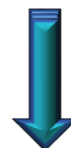

Comment réagir aux messages

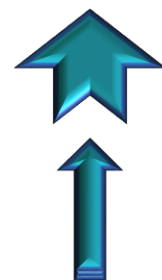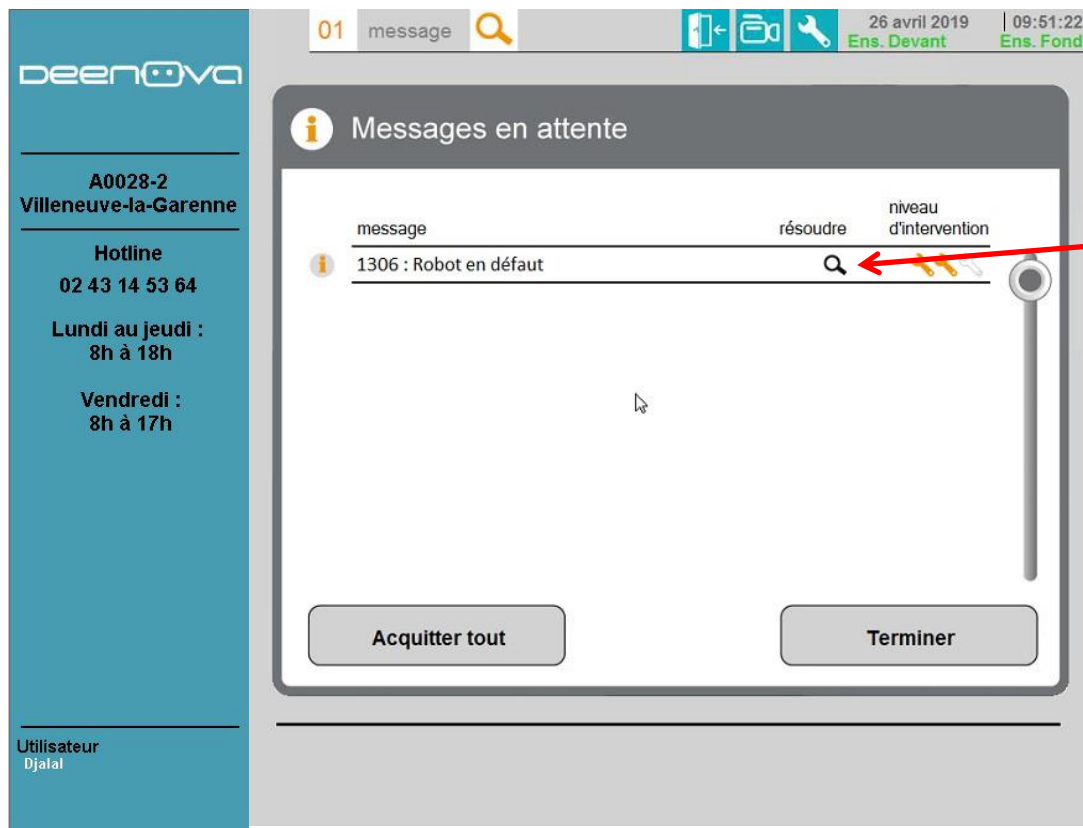01 message

26 avril 2019 | 09:51:22
Ens. Devant Ens. Fond

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h


Utilisateur
Djalal

Messages en attente

message	résoudre	niveau d'intervention
1306 : Robot en défaut		

Acquitter tout **Terminer**

Le message 1306 vous informe que le robot de coupe est en défaut.
En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

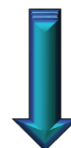


Comment réagir aux messages





The screenshot shows the deenova software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main area displays a message titled 'Message 1306 Robot en défaut'. The message content lists actions: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Visualiser les messages', and 'Fermer la porte'. Below the text is an icon of a robot arm. At the bottom right of the message box is a 'Terminer' button. A status bar at the top right shows the date '26 avril 2019' and time '09:51:38'. A bottom status bar indicates '2 personnes formées'.



Le message 1306 vous informe que le robot de coupe est en défaut. Suivez les instruction.

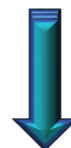


Comment réagir aux messages

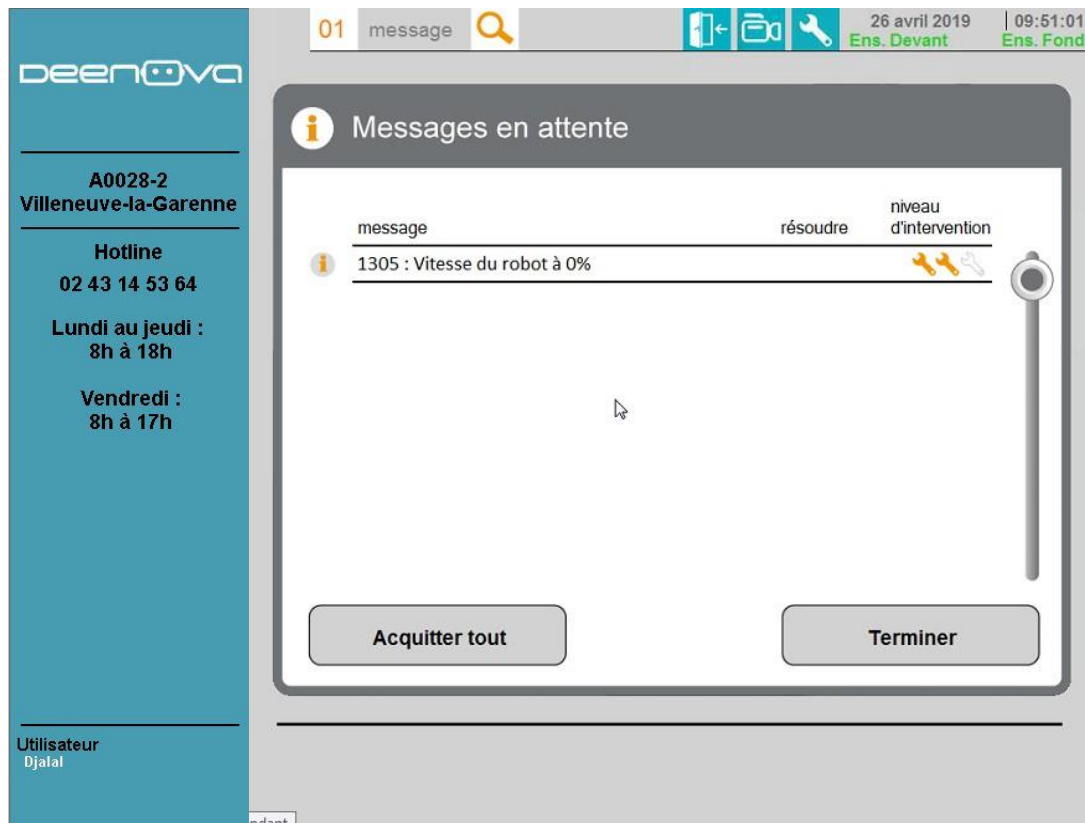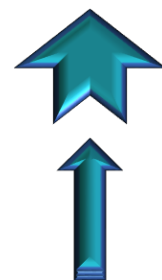

Le message 1305 vous informe que le robot de coupe est à 0% de sa vitesse. Ouvrir la porte (demande d'accès) et mettre le robot à 100%.

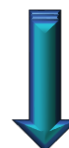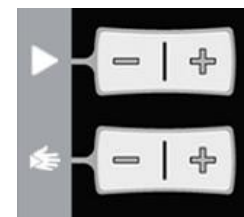



Comment réagir aux messages

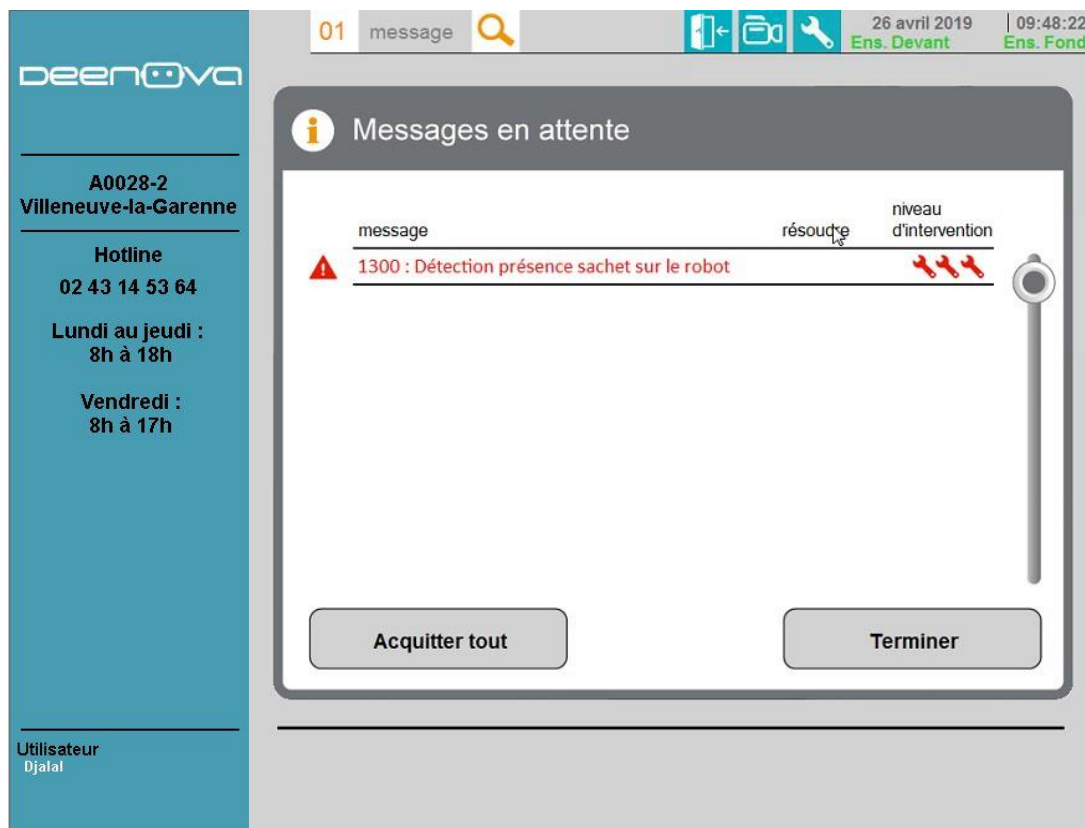


Le message 1300 vous informe qu'un sachet non attendu est détecté sur le robot de coupe. Nettoyer le capteur.




Comment réagir aux messages

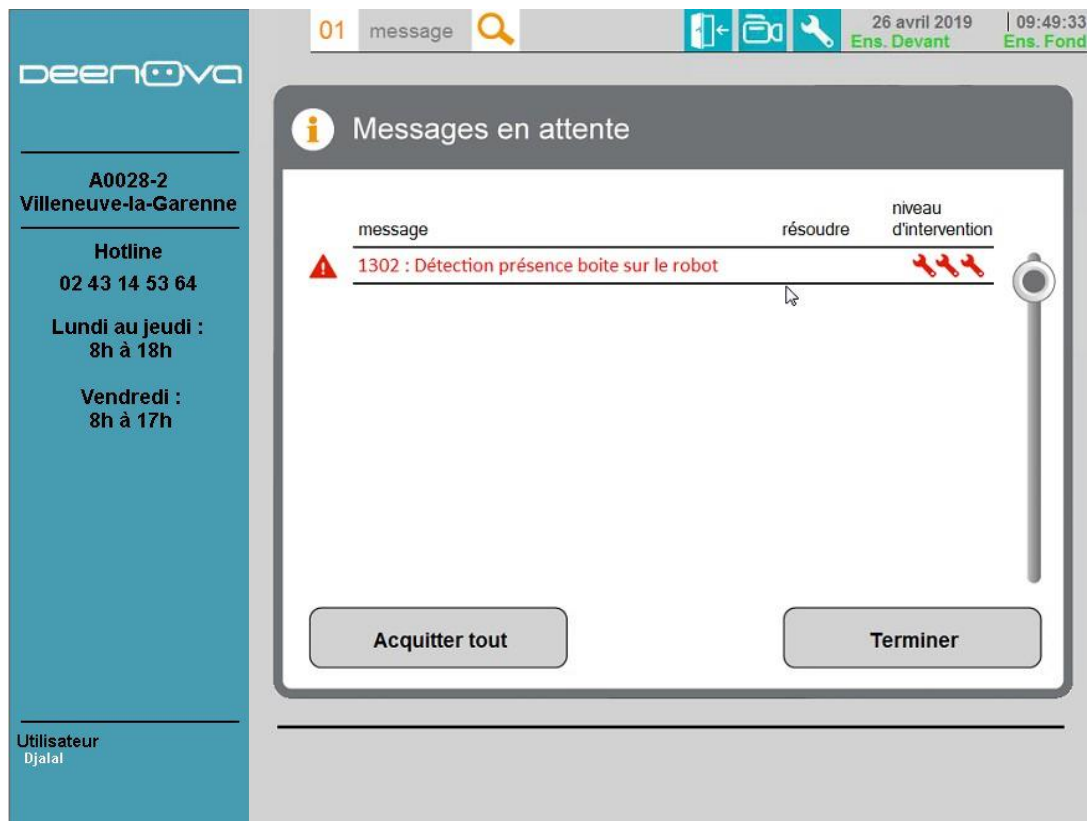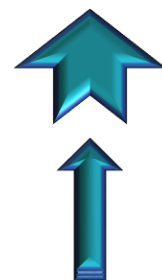


Le message 1302 vous informe qu'une boîte non attendue est détectée sur le robot de coupe. Retirer la boîte PASS. S'il n'y en a pas, nettoyer le capteur.

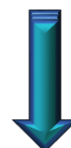



Comment réagir aux messages

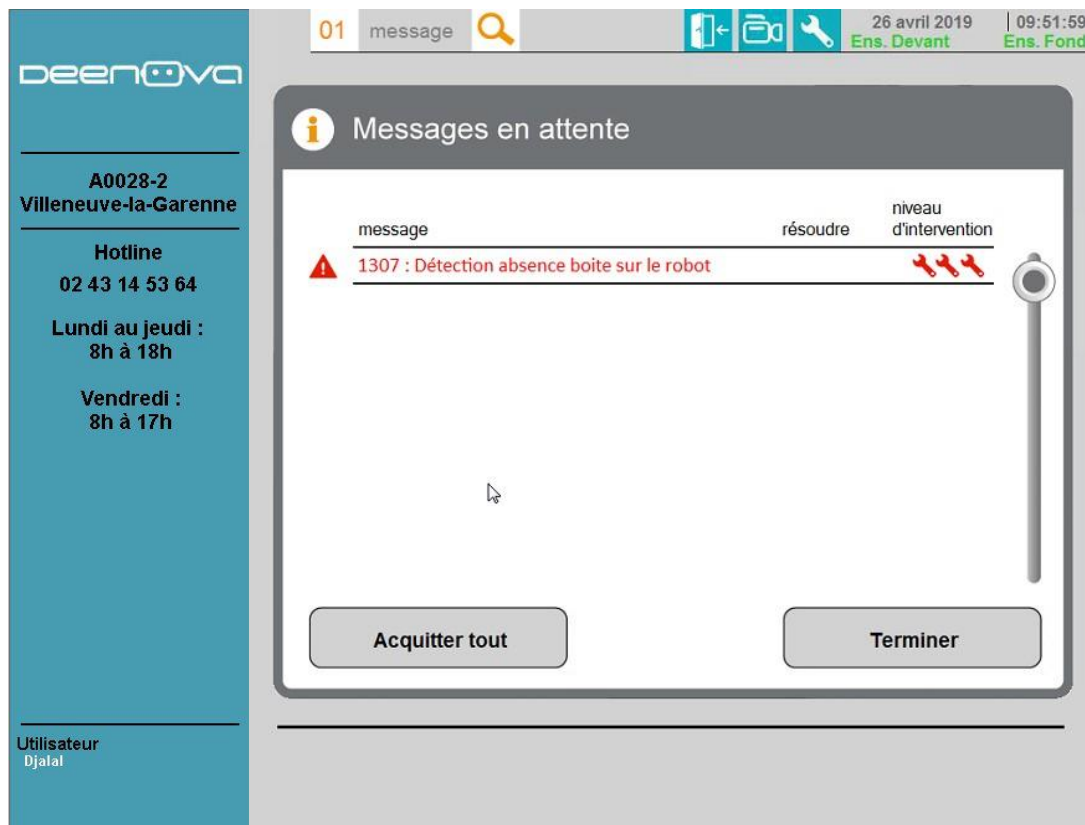

Le message 1302 vous informe qu'une boîte est attendue sur le robot de coupe. (Re)positionner la boîte PASS. S'il y en a déjà une, vérifier le capteur.

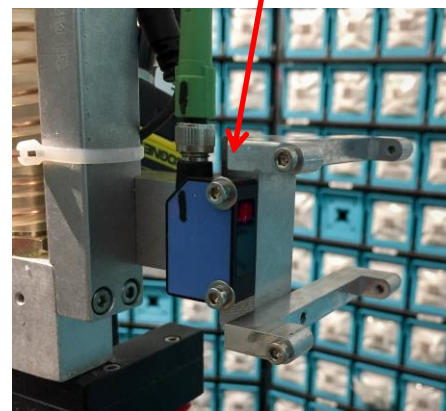


Comment réagir aux messages

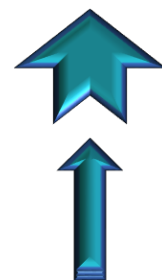
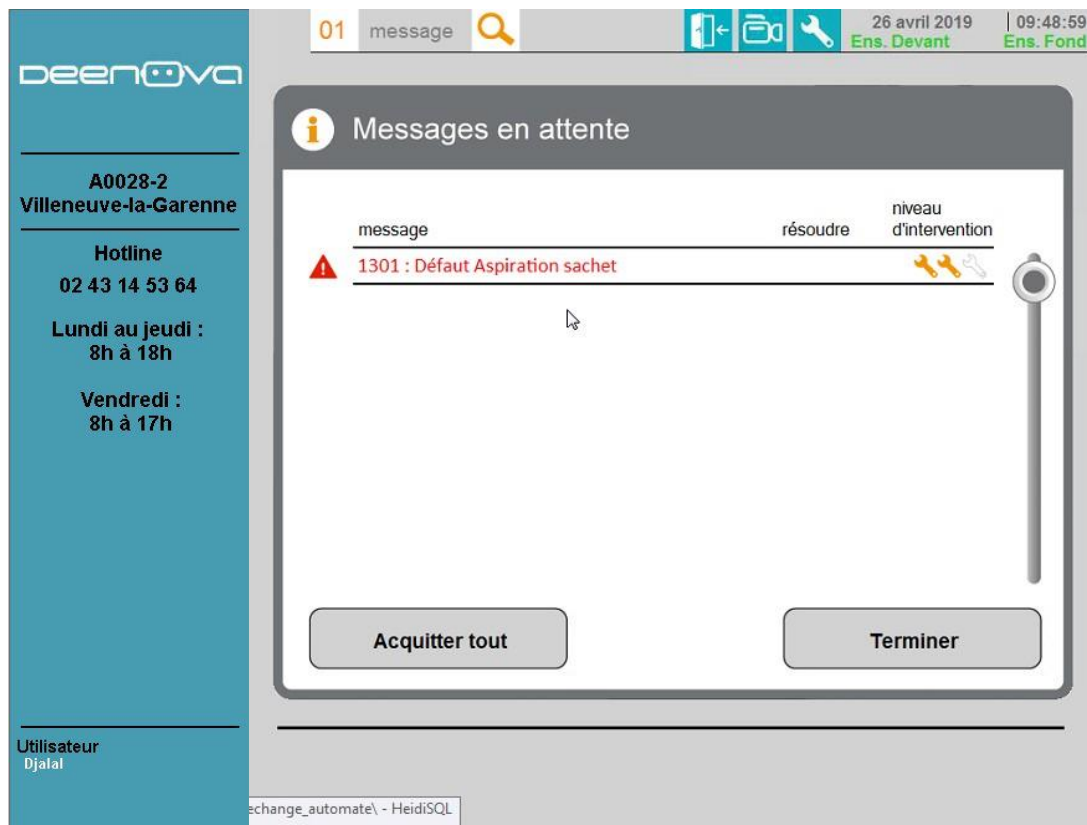



The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with the company logo and contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and operating hours. The main window displays a 'Messages en attente' (Messages in progress) section. At the top of this section, there are tabs for 'message', 'résoudre', and 'niveau d'intervention'. A message with ID 1301 is listed, titled 'Défaut Aspiration sachet'. To the right of the message title are three wrench icons, indicating a maintenance issue. At the bottom of the message list, there are two buttons: 'Acquitter tout' (Dismiss all) and 'Terminer' (End).


Le message 1301 vous informe que l'aspiration sachet est en défaut. Contacter la hotline.

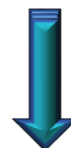



Comment réagir aux messages

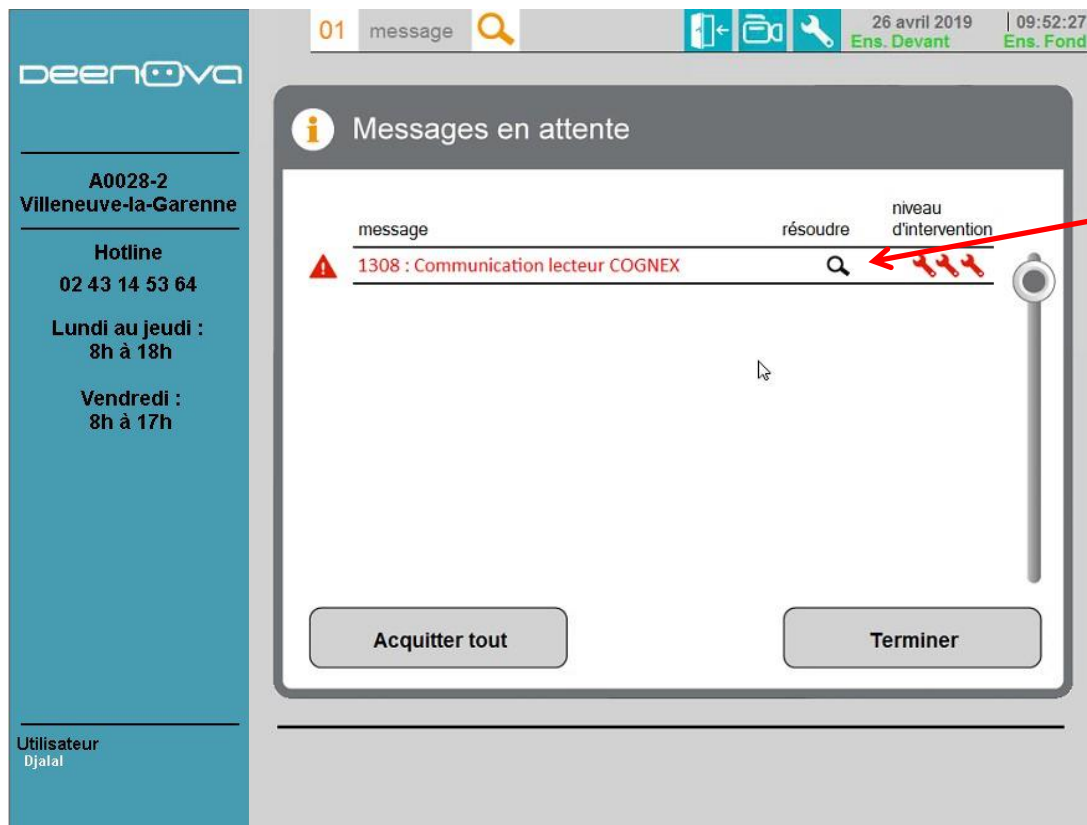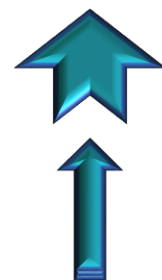


Le message 1308 vous informe que le lecteur datamatrix ne communique plus. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

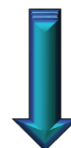


Comment réagir aux messages

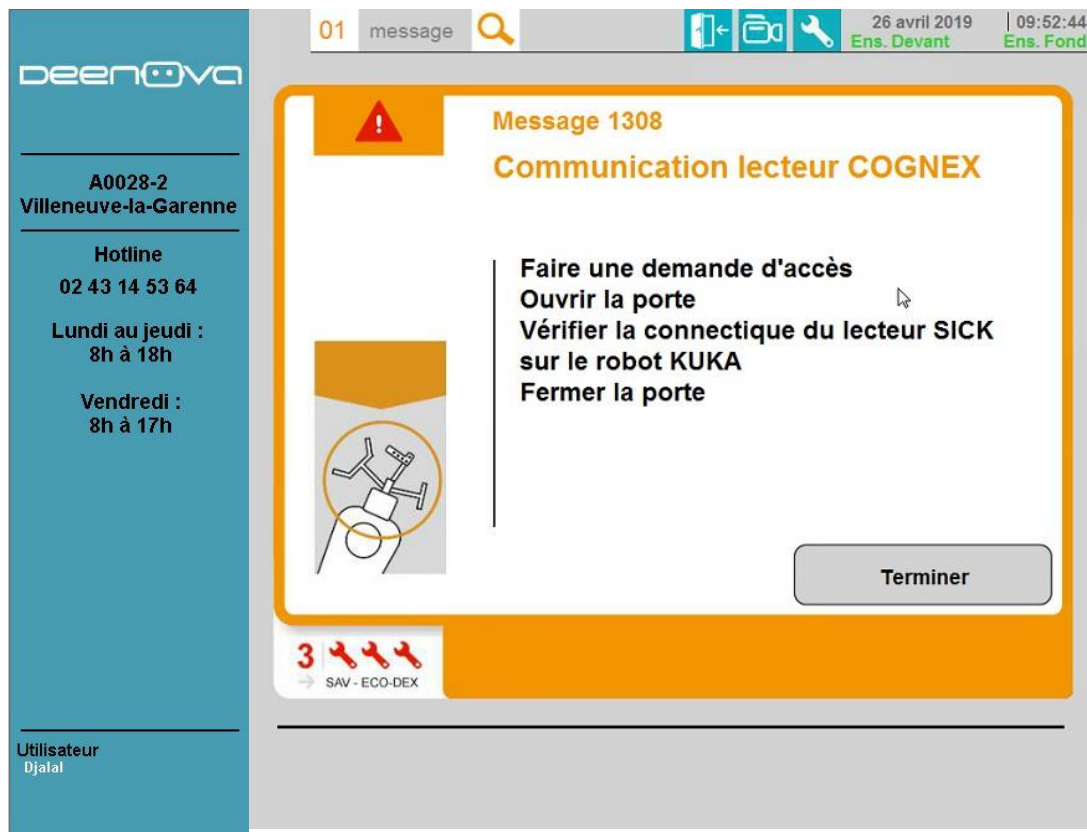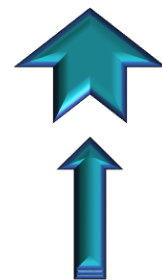


Le message 1308 vous informe que le lecteur datamatrix ne communique plus. Suivez les instructions.

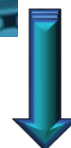



Comment réagir aux messages

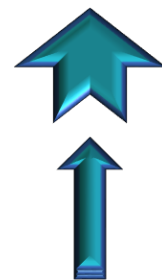


Imprimante ticket

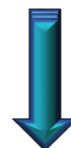



Comment réagir aux messages

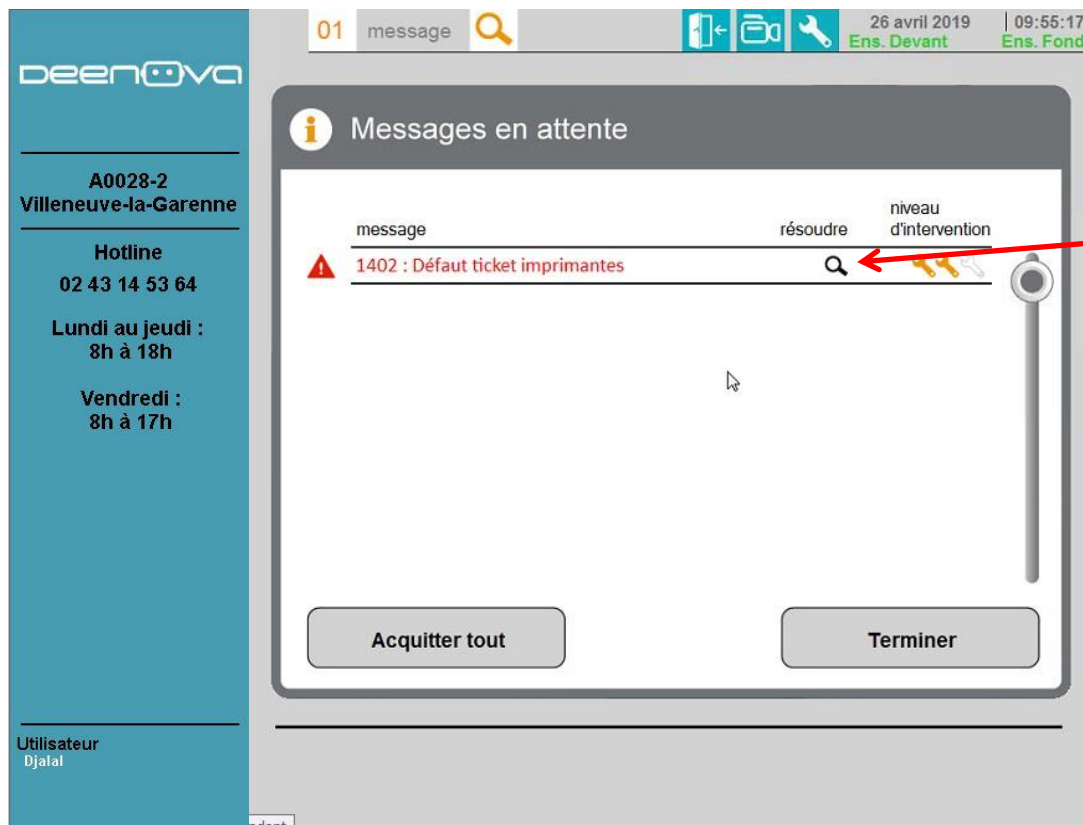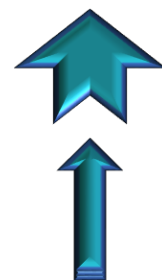

Le message 1402 vous informe que les imprimantes ticket sont en défaut. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

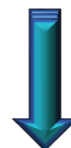


Comment réagir aux messages

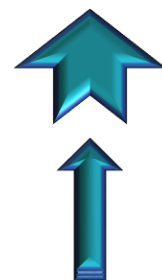
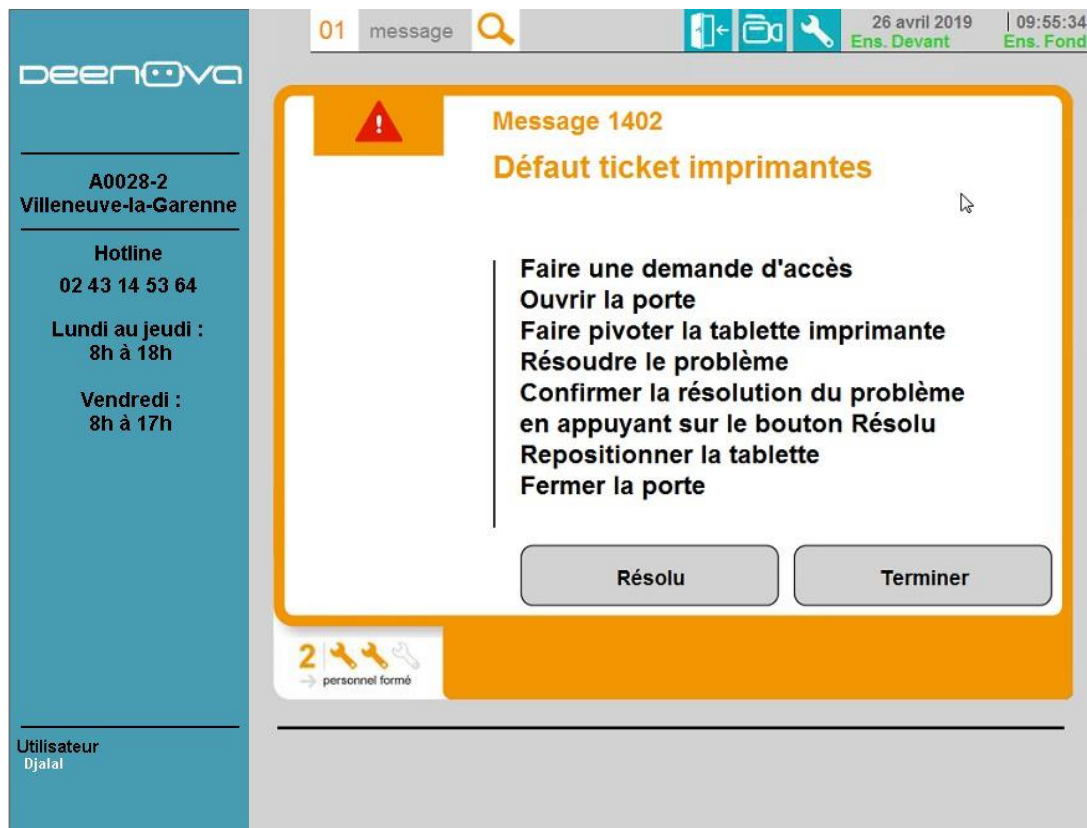



The screenshot shows the DEENOVA software interface. On the left is a sidebar with contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main area displays a message titled 'Message 1402 Défaut ticket imprimantes'. The message content lists steps to resolve the issue: 'Faire une demande d'accès', 'Ouvrir la porte', 'Faire pivoter la tablette imprimante', 'Résoudre le problème', 'Confirmer la résolution du problème en appuyant sur le bouton Résolu', 'Repositionner la tablette', and 'Fermer la porte'. At the bottom of the message box are two buttons: 'Résolu' and 'Terminer'. Below the message box, there is a status bar indicating '2 personnes formées' with icons of two people and a checkmark.

Le message 1402 vous informe que les imprimantes ticket sont en défaut.
Suivez les instructions.

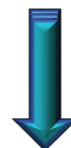


Comment réagir aux messages

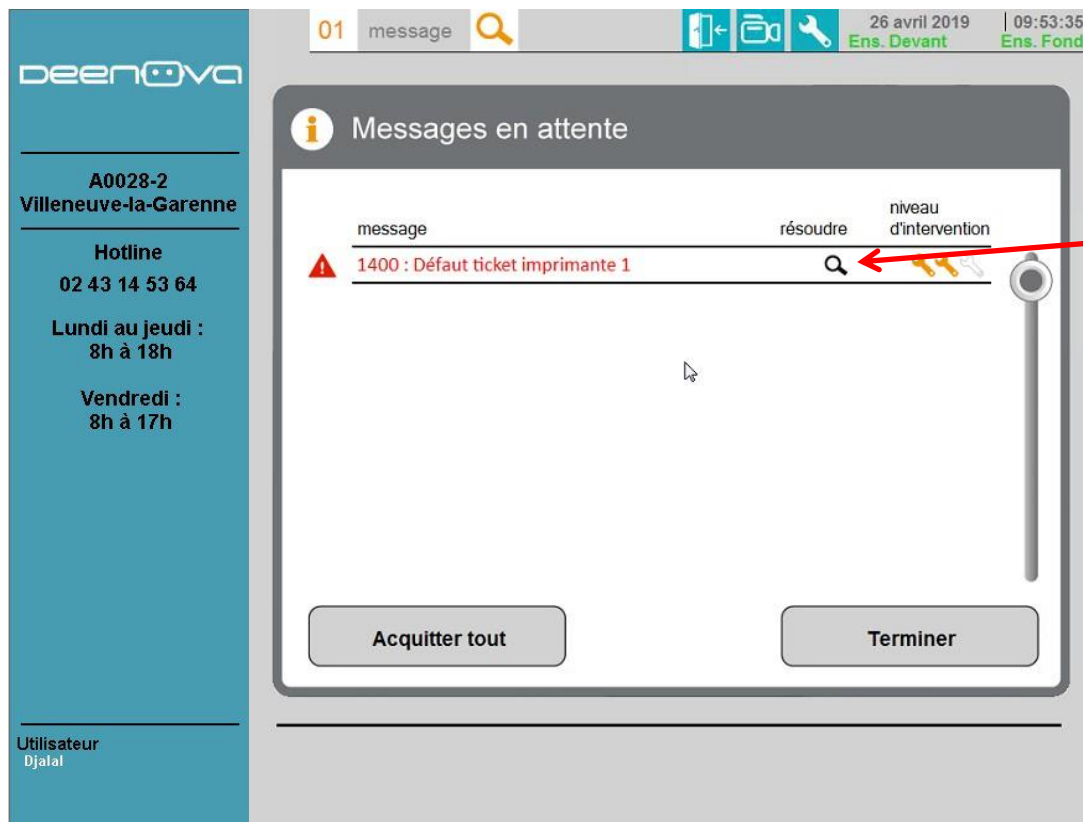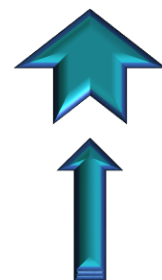


Le message 1400 vous informe que l'imprimante ticket 1 est en défaut. En appuyant sur la loupe vous obtiendrez plus d'informations.

Message 1400 imprimante 1 et message 1401 imprimante 2

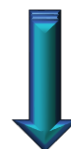

Comment réagir aux messages

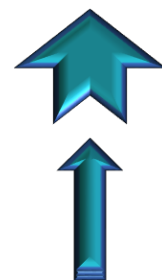

deenova

A0028-2
Villeneuve-la-Garenne

Hotline
02 43 14 53 64

Lundi au jeudi :
8h à 18h

Vendredi :
8h à 17h

Utilisateur
Djalal

01 message

26 avril 2019 | 09:54:05
Ens. Devant Ens. Fond

Message 1400
Défaut ticket imprimante 1


Faire une demande d'accès
Ouvrir la porte
Faire pivoter la tablette imprimante
Résoudre le problème
Confirmer la résolution du problème en appuyant sur le bouton Résolu
Repositionner la tablette
Fermer la porte

Résolu Terminer



2 → personnel formé

Le message 1400 vous informe que l'imprimante ticket 1 est en défaut. Suivez les instructions.


Message 1400 imprimante 1 et message 1401 imprimante 2

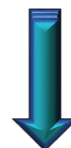


Comment réagir aux messages

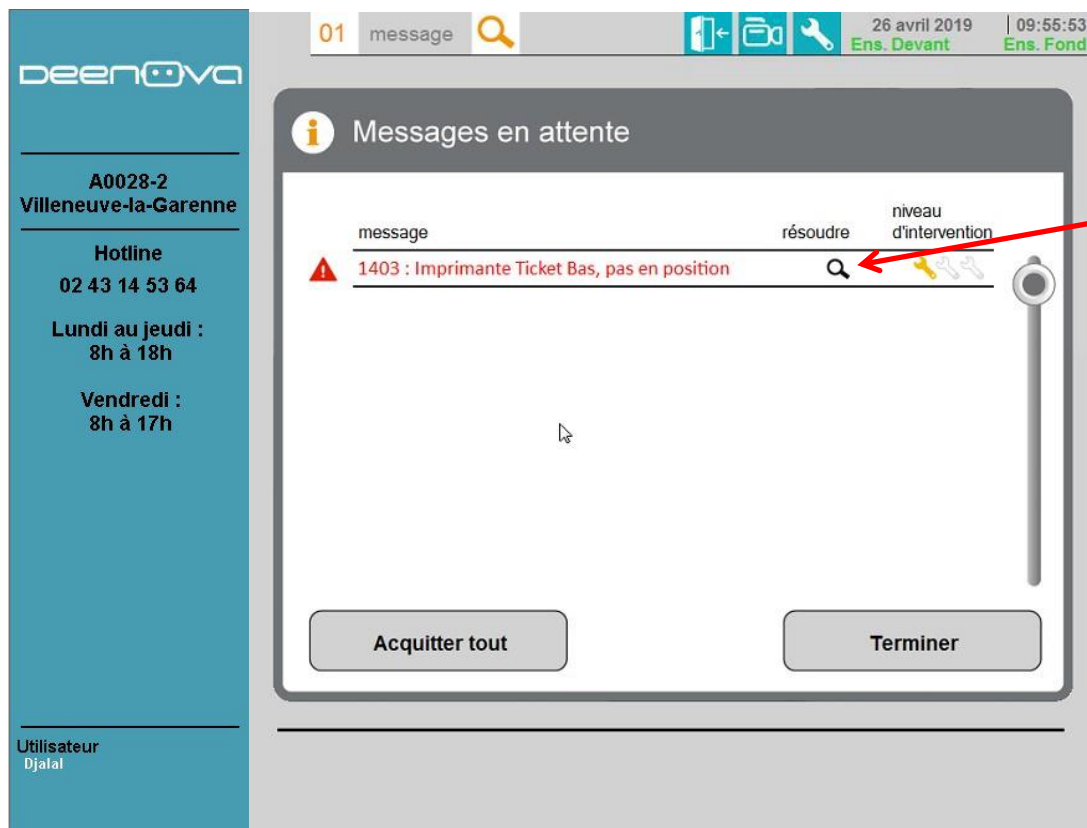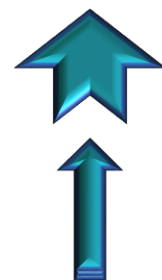

Le message 1403 vous informe que l'imprimante ticket bas n'est pas en position. En appuyant sur la loupe, vous obtiendrez plus d'informations.

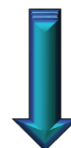


Comment réagir aux messages


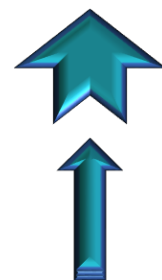


The screenshot shows the DEENOVA interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains contact information for A0028-2 Villeneuve-la-Garenne, including a hotline number and service hours. The main content area displays a message alert with a red warning icon. The message text reads: 'Message 1403 Imprimante Ticket Bas, pas en position'. Below the message, instructions are listed: 'Ouvrir la porte', 'Pousser le tiroir de l'imprimante', and 'Fermer la porte'. A 'Terminer' button is located at the bottom right of the message box. At the bottom left of the message box, there is a '1' icon and the text 'intervention facile'.


Le message 1403 vous informe que l'imprimante ticket bas n'est pas en position. Suivez les instructions.

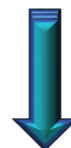

Présentation de MEDIAN

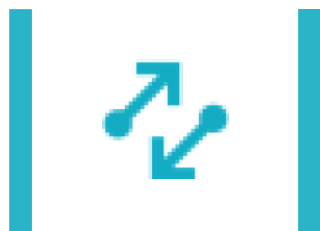
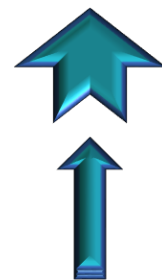


4.T MÉDIAN

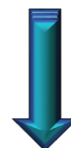

MEDIAN

- ▼ Gestion
 - Références
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires
- ▼ Réassort
 - Zone
 - Préco
- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes
- ▼ Entrées
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Sorties
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Paramétrage
 - Application
 - Utilisateurs
- Identification
- A propos

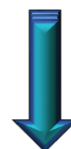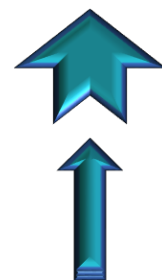

MEDIAN

- ▼ Gestion
 - Références
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires

"Gestion", puis "Références" permet de :

- Consulter les emplacements où sont stockés une référence.
- Paramétrer les seuils mini/maxi d'une référence.
- Consulter l'historique par référence.
- Consulter les statistiques par référence.
- Consulter les listes d'entrées et/ou de sorties.
- Gérer les UCD et CIP d'une référence.



SERVEUR (ecoplate) Echanges Median

Général Gestion - Références

▼ Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

▼ Réassort

- Zone
- Préco

▼ Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

▼ Entrées

- Unitaire
- Listes

▼ Sorties

- Unitaire
- Listes

▼ Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence Désignation

DCI UCD

Commentaires sachet

Nouveau Enregistrer Supprimer

Stock Logistique Historique Statistiques Listes UCD/CIP

Nouveau Supprimer Modifier

Bloquage / Débloquage

Quitter

Dans le cas où Médian est relié à un logiciel de gestion GEF ou à Copilote, le référentiel est automatiquement transféré à Médian afin de pouvoir faire les cueillettes, imprimer les dispensations et faire les coupes. Sinon le produit est créé à sa première cueillette. Il sera alors absent du stock Médian (car il n'a pas pu être coupé) mais pour les cueillettes suivantes, il sera disponible sous réserve d'avoir complété les informations de logistique du produit.



MEDIAN

L'onglet stock permet d'obtenir la liste des emplacements où se trouve la référence saisie dans le champ désignation.

Il est possible de faire une recherche sur les champs "Référence" et "Désignation" à l'aide de la touche F3. La fenêtre de recherche sera pré-remplie par les caractères déjà saisis dans ces champs.


Par exemple si on veut rechercher tous les PARACETAMOL, il est possible de saisir %PARACE dans le champ "Désignation" puis d'appuyer sur F3.

Pour sélectionner une référence, double-cliquez sur la ligne souhaitée ou actionnez le bouton "OK".

La touche F11 permet de rappeler la dernière référence consultée même après fermeture du logiciel.



Clé partielle		Rechercher	Références
%PARACE			
Référence	Désignation		
03/026418	AIG PARACENTESE ADULTE PR MANCHE 7725 80MM		
01/071078	AR PARACETAMOL 100MG SUPPOSITOIRE DOLIPRANE 100MG SUPPO		
01/073055	AR PARACETAMOL 10MG/ML AMP INJ 10ML PARACETAMOL BBM 10MG/ML AMP INJ 10ML		
01/001682	AR PARACETAMOL 150 MG POUDRE POUR SOLUTION BUvable SACHET DOLIPRANE 150MG PDR ORALE SACH HET DOLIP		
01/001683	AR PARACETAMOL 150MG SUPPO DAFALGAN 150MG SUPPO DOLIPRANE		
01/071082	AR PARACETAMOL 200MG SUPPOSITOIRE DOLIPRANE 200MG SUPPO		
01/060245	AR PARACETAMOL 300 MG + OPIUM POUDRE 10 MG + CAFEINE 30 MG GELULE LAMALINE GELULE		
01/001684	AR PARACETAMOL 300 MG SUPPOSITOIRE DOLIPRANE 300MG SUPPO DOLIPRANE		
01/002116	AR PARACETAMOL 500 MG + OPIUM POUDRE 15 MG + CAFEINE 50 MG SUPPOSITOIRE LAMALINE SUPPO		
01/043012	AR PARACETAMOL 500 MG COMPRIME ORODISPERSIB LE DOLIPRANE ORODOZ 500MG CPR ORODISPERSIBLE		
01/001685	AR PARACETAMOL 500 MG GELULE DOLIPRANE 500MG GELULE		
01/041768	AR PARACETAMOL 600 MG SUPPOSITOIRE DAFALGAN 600MG SUPPO		
01/001681	AR PARACETAMOL 80MG SUPPO DAFALGAN 80MG SUPPO DOLIPRANE		
01/060251	AR TRAMADOL 37.5 MG + PARACETAMOL 325 MG COMPRIME TYDRIM 37.5MG/325MG CPR TYDRIM		

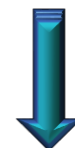

L'onglet "Stock" permet :

- D'obtenir la liste des emplacements où se trouve la référence saisie dans le champ "Désignation".
- De créer une entrée dans le stock.
- De supprimer une ligne de stock.
- De modifier (déplacer ou changer la quantité) d'une ligne de stock.



SERVERE (ecopilote) Echanges Median

Général Gestion - Références

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassurance

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence 01/043012 Désignation AR PARACETAMOL 500 MG COMPRIME ORODISPERSIB LE DOLIPRANE ORODOZ 500MG CPR ORODISPERSIBLE

DCI PARACETAMOL 500 MG COMPRIME O UCD 9217824

Commentaires sachet

Stock : 238 Dispo : 238 Commandé : 0

Nouveau Enregistrer Supprimer


[Stock] Logistique Historique Statistiques Listes UCD/CIP

Blo	Emplacement	Quantité	ucd	contenant	Fraction	Info	Der. Entrée	Der. Sortie	Der. Invent.	N° de lot	Péréemption
ST2. 53. 1		4	9217824	000000102	100		01/04/2019 18:20:16	// : :	// : :	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST2.140. 1		11	9217824	000001318	100		10/04/2019 09:07:36	// : :	15/04/2019 15:59:56	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST1.122. 1		12	9217824	000002572	100		01/04/2019 14:44:36	// : :	15/04/2019 15:58:41	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST2. 49. 1		24	9217824	000000101	100		01/04/2019 14:52:24	// : :	// : :	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST1.122. 3		24	9217824	000000098	100		01/04/2019 15:00:41	// : :	15/04/2019 15:59:10	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST2. 49. 3		7	9217824	000002575	100		01/04/2019 15:06:21	// : :	// : :	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST2. 49. 3		17	9217824	000002575	100		01/04/2019 15:06:21	// : :	// : :	EU1850	01/06/2021 00:00:00
ST1. 47. 1		24	9217824	000000100	100		01/04/2019 15:11:09	// : :	// : :	EU1850	01/06/2021 00:00:00

Nouveau Supprimer Modifier

Bloquage / Débloquage

Quitter

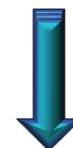

L'onglet "Logistique" vous permet de renseigner les seuils mini et maxi de la référence saisie dans le champs "Désignation".

Les seuils mini et maxi permettent de déclencher une demande de réapprovisionnement quand le stock devient trop faible. Ce stock est paramétrable par module.



SERVEUR (ecopilote)

Echanges

Median

Général

Gestion - Références

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence

01/000368

Désignation

AR SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME ALDACTONE 75MG CPR

DCI

SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME

UCD

9002130

Commentaires sachet

Stock : 0

Dispo : 0

Commandé : 18

Nouveau

Enregistrer

Supprimer

Stock

Logistique

Historique

Statistiques

Listes

UCD/CIP

Changement de code

Anciennement

Nouveau code

Avancé...

Appliquer

Format

Capacité


Appliquer à...

Modifier

Réassort de zone à zone

Zone	Fraction	Stk min	Stk max
ACCED_ST	100	7	9
AIDE_ST2	100	7	9

Modifier

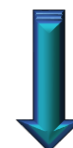

L'onglet "Historique" permet de consulter l'historique de la référence saisie dans le champ "Désignation". C'est le même fonctionnement que l'écran "Consultation" puis "Historique".



SERVER (ecopilot) Echanges Median

Général **Gestion - Références**

- Gestion
 - Références
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires
- Réassort
 - Zone
 - Préco
- Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes
- Entrées
 - Unitaire
 - Listes
- Sorties
 - Unitaire
 - Listes
- Paramétrage
 - Application
 - Utilisateurs
 - Identification
 - A propos

Référence Désignation

DCI UCD

Commentaires sachet

Stock Logistique **Historique** Statistiques Listes UCD/CIP

Emplacement Type Mvt.

Utilisateur Fraction (nb. ligne)

Dates à

Heures à


N° de lot

Liste

Service

Contenant

No Série

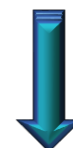

MEDIAN

- Gestion
 - Références**
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires

L'onglet "Statistique" vous permet de consulter les statistique de la référence saisie dans le champ "Désignation".



SERVER (ecopilote) Echanges Median

Général Gestion - Références

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence Désignation

DCI UCD

Commentaires sachet

Stock Logistique Historique Statistiques Listes UCD/CIP

Période à analyser à Service x jours


PUI

Stocks		Nombre	Quantité	Moyenne Qtés	Valeur €
Mini	Entrées				
Maxi	Sorties				
Référence créée le //	Retours				
Consommation / jour	Conso.				
	Inventaires				

Détail Par jour Par mois

Actuellement >> Stock Valeur € PMP € Prix unitaire € Couverture (j)

Au

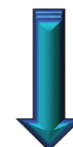

MEDIAN

- Gestion
 - Références**
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires

L'onglet "Liste" vous permet de consulter les listes d'entrées (demande de réappro) et de sorties (dispensation) de la référence saisie dans le champ "Désignation".



SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général **Gestion - Références**

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage


- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence: 01/000368 Désignation: AR SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME ALDACTONE 75MG CPR
 DCI: SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME UCD: 9002130
 Commentaires sachet:
 Stock : 0 Dispo : 0 Commandé : 18

Stock Logistique Historique Statistiques **Listes** UCD/CIP


Fusion	Liste	Liste	Code UF	N°Item	Qté. Dem.	Qté. Serv.	Fraction	Péréemption	N° de lot
REASSORT	ACCED_ST1 PAR ecopilote LE 2019-04-25 No 01051	Entrée	TRAN	0002	9	0	100	/ / : :	
REASSORT	AIDE_ST2 PAR ecopilote LE 2019-04-25 No 01052	Entrée	TRAN	0002	9	0	100	/ / : :	

< > Quitter

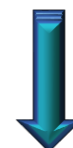

- Gestion
 - Références**
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires

L'onglet "UCD/CIP" vous permet de gérer les informations liées au boitage de la référence saisie dans le champ "Désignation".

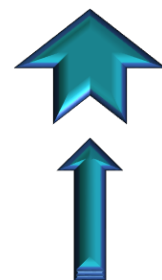

SERVER (ecopilote) Echanges Median

Général **Gestion - Références**

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence: 01/000368 Désignation: AR SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME ALDACTONE 75MG CPR

DCI: SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME UCD: 9002130

Commentaires sachet:

Stock : 0 Dispo : 0 Commandé : 18

Nouveau Enregistrer Supprimer

Stock Logistique Historique Statistiques Listes **UCD/CIP**

Ref : 01/000368
 UCD : 9002130
 CIP : 3400932608072 v1

Code UCD:


Ajouter UCD
Retirer UCD

Code CIP:

Qté boîte: 0
 Qté blister: 0
 Qté PASS: 0
 Dossier:

Modifier CIP
Retirer CIP

Quitter


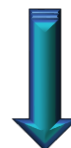


MEDIAN

- ▼ Gestion
 - Références
 - **Magasins**
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires

"Gestion" puis "Magasins" permet de consulter et modifier l'allocation des différents automates.

ici l'ACCED (ST1) peut servir l'ACCED (ST1) ET l'AIDE ST2.

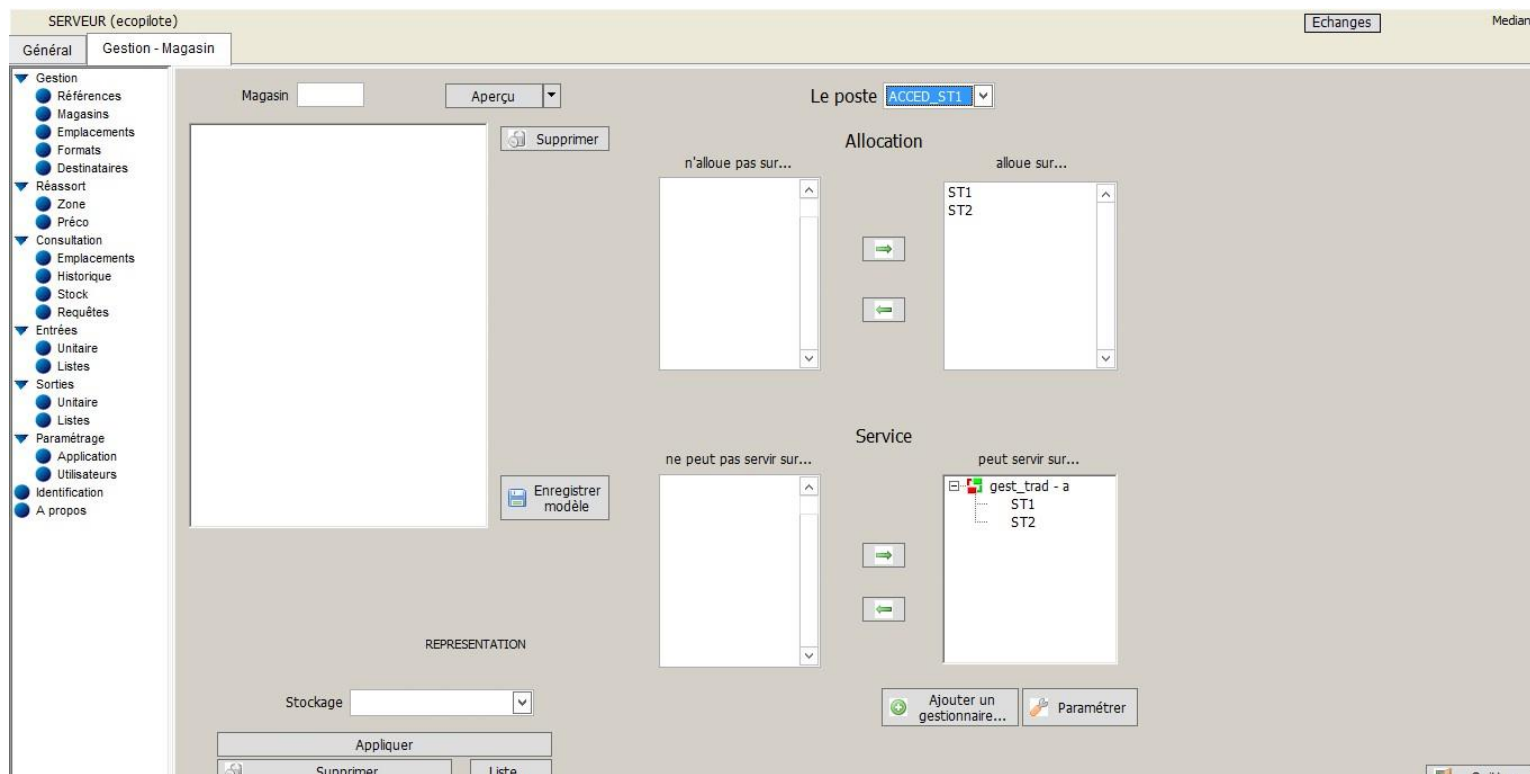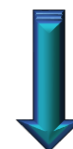"Gestion" puis "Destinataires " permet :

- Consulter les différents destinataires créés.
- De paramétrer un destinataire en modifiant le moment de début (matin/midi/soir /coucher), les heures de prises.



SERVER (ecopilot) Echanges Median

Général Gestion Destinataires

Service Pole
UG Visualiser R.A.Z


Nouveau... Modifier... Supprimer Information aux services...

	Service	Libellé	type_dest	UG	Pole	Info aux serv	Resp.service	Cadre sup.	Nb. max. cde	Nb. max. BU	Nb. max. ligne	Type de peigr	Moment de début
☒	796	A DEFINIR 796	SERVICE						0	0	0	1	matin
☐	ECO-TEST	TEST ECO-DEX							0	0	0	1	matin

Les services font partie du flux prescription et sont automatiquement créés par l'interface d'échange. Néanmoins il y a des informations spécifiques à Médian qu'il faut configurer (moments, tri, ...).

Pour paramétrer un service, cliquez sur le bouton "Modifier".

(2 lignes)

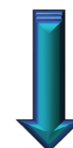

MEDIAN

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

"Gestion" puis "Destinataires" permet :

- Consulter les différents destinataires paramétrés.
- De créer un nouveau destinataire.
- De modifier le moment de début (matin/midi/soir /coucher), les heures de prises.



Gestion Destinataires

Service

Service

Libellé

Type (Pharm/Service)

UG

Pole

Resp. service

Cadre sup.

Type de peigne 0

Moment de debut

Matin 0

Midi 0

Soir 0

Coucher 0


Tri

☐ Autoriser un patient sur 2 peignes

Enregistrer Quitter

Sur cette fenêtre vous devez paramétrer le type de peigne utilisé par le service (en général c'est fixe d'un service à l'autre), les heures des moments (sous la forme HHMM, ex 1800 pour 18h, 1230 pour 12h30), et le moment du début qui correspond au premier moment distribué dans les piluliers (par exemple, si le moment de début est SOIR ce qui signifie que les piluliers distribués pour ce service commenceront le soir (soir, coucher, matin, midi). Le mode de répartition des moments dans le pilulier est paramétrable :

Par défaut l'automate ne sépare pas les piluliers d'un même patient sur 2 peignes différents (dans le cas d'une cueillette sur plusieurs jours). L'option « Autoriser un patient sur 2 peignes » permet de remplir tous les piluliers du peigne. Ainsi un patient peut se retrouver sur 2 peignes.

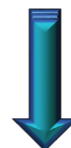


MEDIAN



"Réassort" puis "Préco" permet :

- De calculer les besoins de l'automate.
- Créer les listes d'entrées autorisant l'introduction des produits dans le module.


Après avoir choisi une ligne de cueillette destinatrice (si l'ACCED possède plusieurs lignes de cueillette), cliquez sur le bouton « Calculer ». La coche ignorer les seuils minimum permet de forcer le calcul même si la quantité en stock n'est pas inférieure au seuil minimum.

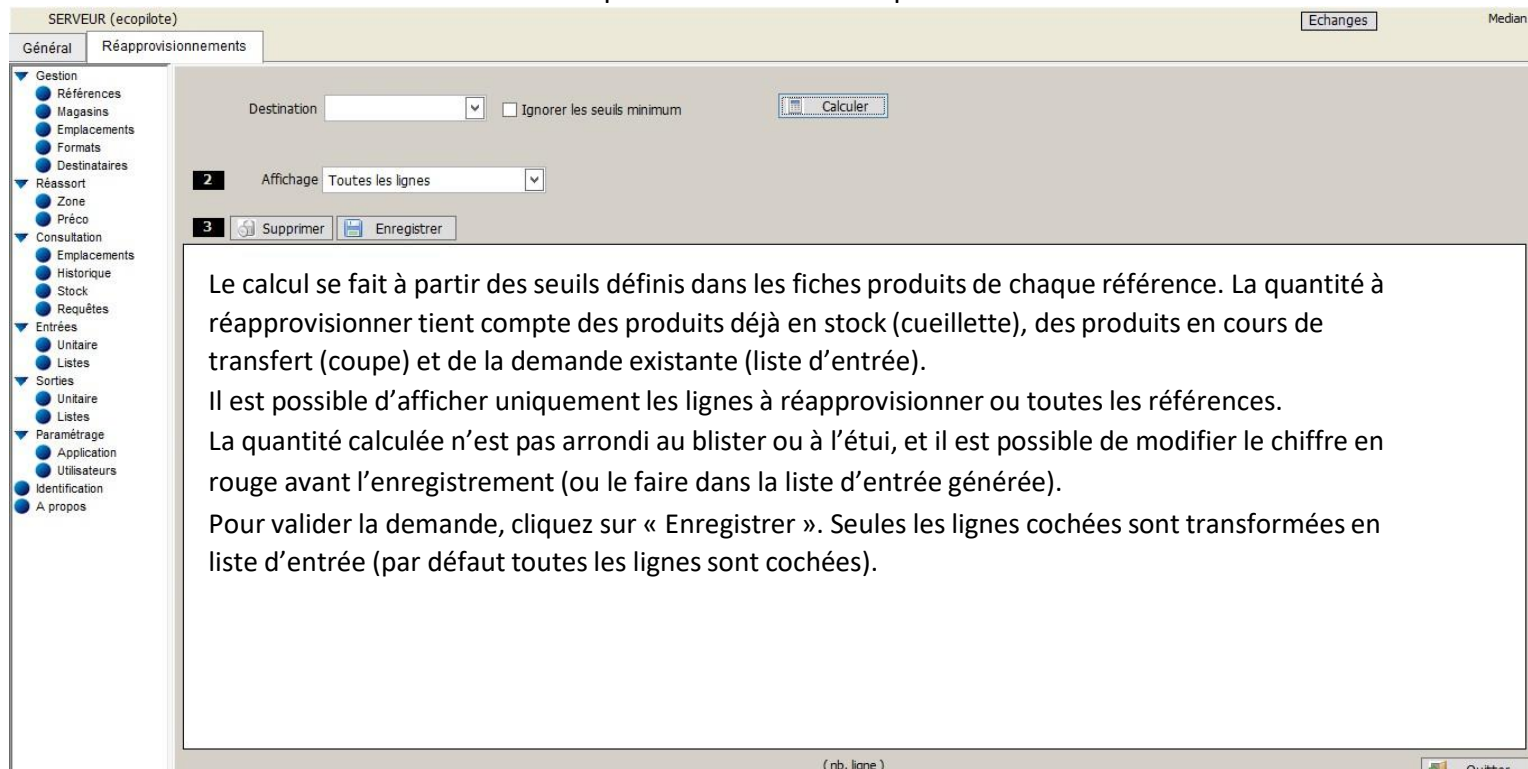Le calcul se fait à partir des seuils définis dans les fiches produits de chaque référence. La quantité à réapprovisionner tient compte des produits déjà en stock (cueillette), des produits en cours de transfert (coupe) et de la demande existante (liste d'entrée).

Il est possible d'afficher uniquement les lignes à réapprovisionner ou toutes les références. La quantité calculée n'est pas arrondi au blister ou à l'étui, et il est possible de modifier le chiffre en rouge avant l'enregistrement (ou le faire dans la liste d'entrée générée).

Pour valider la demande, cliquez sur « Enregistrer ». Seules les lignes cochées sont transformées en liste d'entrée (par défaut toutes les lignes sont cochées).

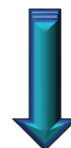

"Réassort" puis "Préco" permet :

- De calculer les besoins de l'automate.
- De créer les listes d'entrées autorisant l'introduction des produits dans le module.

ici on recherche les besoins de L'ACCED_ST1



SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Réapprovisionnements

Gestion
 ● Références
 ● Magasins
 ● Emplacements
 ● Formats
 ● Destinataires
 Réassort
 ● Zone
 ● Préco
 Consultation
 ● Emplacements
 ● Historique
 ● Stock
 ● Requêtes
 Entrées
 ● Unitaire
 ● Listes
 Sorties
 ● Unitaire
 ● Listes
 Paramétrage
 ● Application
 ● Utilisateurs
 Identification
 ● A propos

Destination: ACCED_ST1 ☐ Ignorer les seuils minimum Calculer


2 Affichage: Toutes les lignes

3 Supprimer Enregistrer

(nb. ligne)

Quitter

Sélectionner le module à réapprovisionner

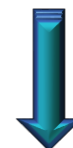




MEDIAN



"Réassort" puis "Préco" permet :

- De calculer les besoins de l'automate.
- De créer les listes d'entrées autorisant l'introduction des produits dans le module.

ici on recherche les besoins de L'ACCED_ST1 et on consulte uniquement les références à réapprovisionner

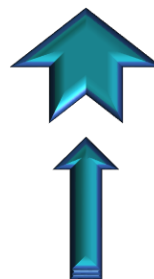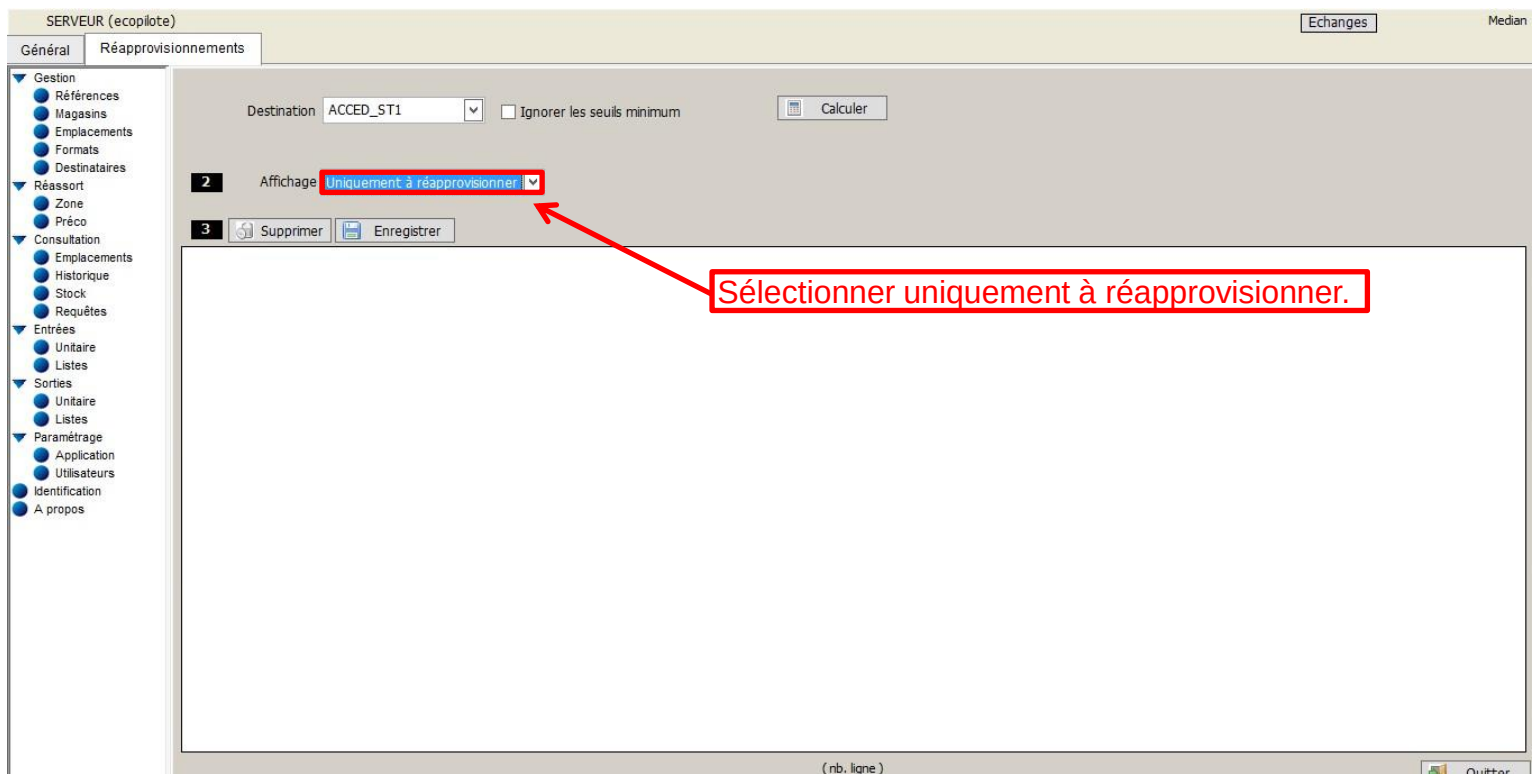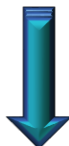"Réassort" puis "Préco" permet :

- De calculer les besoins de l'automate.
- De créer les listes d'entrées autorisant l'introduction des produits dans le module.

ici on calcule les besoins de L'ACCED_ST1 et on consulte uniquement les références à réapprovisionner. La liste d'entrée sera créée après l'enregistrement.



SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Réapprovisionnements


Destination: ACCED_ST1 ☐ Ignorer les seuils minimum **Calculer**

Affichage: Uniquement à réapprovisionner

3 **Supprimer** **Enregistrer**

✓	Référence	Désignation	fraction	A transférer	Qté.préconisé	Stk.Cueille	Stk.mini
✓	01/000366	AR SPIRONOLACTONE 25 MG + ALTIZIDE 15 MG COMPRIME ALDACTAZINE CPR	100	9	9	0	7
✓	01/000368	AR SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME ALDACTONE 75MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/000498	AR MIANSERINE 60 MG COMPRIME MIANSERINE ARW 60MG CPR ATHYMI	100	10	10	0	7
✓	01/000593	AR PROPRANOLOL 40MG COMPRIME PROPRANOLOL 40MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/000831	AR SULFAMETHOXAZOLE 800 MG + TRIMETHOPRIM 160MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/001658	AR PREDNISON 20 MG COMPRIME CORTANCYL 20MG CPR	100	50	50	0	33
✓	01/001661	AR MOLSIDOMINE 2 MG COMPRIME MOLSIDOMINE EG 2MG CPR	100	8	8	0	7
✓	01/001804	AR DIGOXINE 0,25 MG COMPRIME DIGOXINE NAT 0,25MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/001835	AR HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG COMPRIME ESIDREX 25MG CPR	100	47	47	0	31
✓	01/001845	AR URAPIDIL 30 MG GELULE EUPRESSYL 30MG GELULE	100	11	11	0	7
✓	01/001847	AR URAPIDIL 60 MG GELULE EUPRESSYL 60MG GELULE	100	26	26	0	17
✓	01/001913	AR FLECAINIDE 100 MG COMPRIME FLECAINIDE ARW 100MG CPR	100	20	20	0	13
✓	01/001925	AR FLUDROCORTISONE 50 MICROGRAMMES COMPRIME FLUCORTAC 50MG CPR	100	8	8	0	7
✓	01/002111	AR HYDROXYCARBAMIDE 500 MG GELULE HYDREA 500MG GELULE	100	8	8	1	7
✓	01/002196	AR BACLOFENE 10 MG COMPRIME BACLOFENE ZEN 10MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/002205	AR VERAPAMIL 120 MG GELULE A LIBERATION IMMEDIATE ISOPTINE 120MG GELULE	100	9	9	0	7
✓	01/002412	AR PENICILLINE V 1 MUI COMPRIME ORACILLINE 1MUI CPR	100	9	9	0	7
✓	01/002418	AR CEFIXIME 200 MG COMPRIME CEFIXIME ARW 200MG CPR OKROEN	100	8	8	0	7
✓	01/002470	AR MESALAZINE 500 MG COMPRIME PENTASA 500MG CPR	100	12	12	0	8
✓	01/002766	AR LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG LP COM PRIME A LIBERATION PROLONGEE CARBIDOPA LEVOD TVC LP 50/2	100	8	8	0	7
✓	01/002767	AR CLONAZEPAM 2 MG COMPRIME RIVOTRIL 2MG CPR	100	10	10	0	7
✓	01/002768	AR ACENOCOUMAROL 4 MG COMPRIME SINTROM 4MG CPR	100	9	9	0	7
✓	01/002828	AR ANETHOLTRITHIONE 25 MG COMPRIME SULFARLEM S 25MG CPR	100	9	9	0	7

(160 lignes)

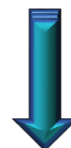

MEDIAN

- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes

"Consultation" puis "Emplacements" permet :

- D'afficher la liste des emplacements libres ou occupés.
- D'afficher la liste des emplacements bloqués.
- De calculer le taux d'occupation du module.
- De bloquer ou débloquent un emplacement.
- De créer informatiquement un contenant (boite PASS).



SERVEUR (ecopilote)
Echanges
Median

Général
Consultation - Historique
Consultation - Emplacements

- ▼ Gestion
 - Références
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires
- ▼ Réassort
 - Zone
 - Préco
- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes
- ▼ Entrées
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Sorties
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Paramétrage
 - Application
 - Utilisateurs
 - Identification
 - A propos

Magasin	Stockage	Etat
☐ ST1	ACCED_ST1	☐ Libre
☐ ST2	AIDE_ST2	☐ Occupé

☐ Bloquée

☒ Visualiser

Magasins

Il existe plusieurs types de magasins dans un ACCED :

- STx : stock ligne de cueillette
- DCx : stock ligne de coupe
- REX : stock zone « retour »
- CHR : chariot (transfert entre sites)

(nb. ligne)

- Consultation
 - Emplacements**
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes

"Consultation" puis "Emplacements" :

ici on visualise la liste des emplacements du stock ST1 ACCED_ST1



Selectionner le stock

Cliquer sur visualiser

Cocher pour visualiser uniquement les boites bloquées

Visualiser

Aperçu

Bloquée

Etat

Libre

Occupé

Magasin

Stockage

ST1 ACCED_ST1

ST2 AIDE_ST2


Etat

Contenant

Commentaire

Blo	Emplacement	Etat	Contenant	Commentaire
ST1. 1. 1	Occupé	000000003		
ST1. 1. 3	Occupé	000000005		
ST1. 2. 1	Occupé	000000004		
ST1. 2. 3	Occupé	000000009		
ST1. 3. 1	Occupé	000002460		
ST1. 3. 3	Occupé	000002465		
ST1. 4. 1	Occupé	000002493		
ST1. 4. 3	Occupé	000002498		
ST1. 5. 1	Occupé	000000008		
ST1. 5. 3	Occupé	000001265		
ST1. 6. 1	Occupé	000002985		
ST1. 6. 3	Libre	000003167		
ST1. 7. 1	Occupé	000000002		
ST1. 7. 3	Libre	000002524		
ST1. 16. 1	Occupé	000000424		
ST1. 16. 3	Occupé	000000423		
ST1. 17. 1	Occupé	000002500		
ST1. 17. 3	Occupé	000002505		
ST1. 18. 1	Occupé	000002510		
ST1. 18. 3	Occupé	000002512		
ST1. 19. 1	Occupé	000002517		
ST1. 19. 3	Occupé	000002519		
ST1. 20. 1	Occupé	000000068		
ST1. 20. 3	Occupé	000002526		
ST1. 21. 1	Occupé	000002528		
ST1. 21. 3	Occupé	000002530		
ST1. 22. 1	Occupé	000000073		
ST1. 22. 3	Occupé	000000070		
ST1. 31. 1	Occupé	000000013		
ST1. 31. 3	Occupé	000002875		
ST1. 32. 1	Occupé	000002483		

(946 lignes)

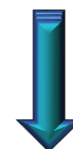

"Consultation" puis "Emplacements" :

Au niveau des états des emplacements, il y a 2 notions pour se repérer :

- Etat libre sans contenant : l'emplacement est vide et sans boîte.
- Etat libre avec contenant : l'emplacement a une boîte vide.
- Etat occupé (forcément avec contenant) : l'emplacement a une boîte avec des produits.



SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Consultation - Historique Consultation - Emplacements

▼ Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

▼ Réassort

- Zone
- Préco

▼ Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

▼ Entrées

- Unitaire
- Listes

▼ Sorties

- Unitaire
- Listes

▼ Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Magasin	Stockage
☐ ST1	ACCED_ST1
☐ ST2	AIDE_ST2

Etat

☐ Libre

☐ Occupé

☐ Bloquée

Visualiser Aperçu

Visualiser

Occupation...


Bloquage / Débloquage

(nb. ligne)

Boîte Pass...

Quitter

A partir de cette écran il est possible de déclarer ou supprimer une boîte PASS d'un emplacement à l'aide du bouton "boîte PASS" situé sous le tableau.

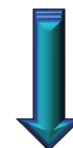


MEDIAN

- ▼ Consultation
- **Emplacements**
- Historique
- Stock
- Requêtes

"Consultation" puis "Emplacements" :

Lors de la déclaration ou la suppression d'une boîte PASS, ces deux messages apparaîtront :

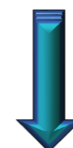

- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - **Historique**
 - Stock
 - Requêtes

"Consultation" puis "Historique" permet de faire des recherches sur l'historique de tous les mouvements de stock dans l'automate.



SERVER (ecoplate) Echanges Median

Général Consultation - Historique

- ▼ Gestion
 - Références
 - Magasins
 - Emplacements
 - Formats
 - Destinataires
- ▼ Réassort
 - Zone
 - Préco
- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - Requêtes
- ▼ Entrées
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Sorties
 - Unitaire
 - Listes
- ▼ Paramétrage
 - Application
 - Utilisateurs
 - Identification
 - A propos

Référence

Emplacement

Utilisateur

Dates à

Heures à

Type Mvt.

Fraction

(nb. ligne)

N° de lot

Liste

Service


Contenant

No Série

Le formulaire de recherche permet de faire des recherches sur beaucoup de critères. Il est possible de faire des recherches génériques en indiquant une valeur partielle en utilisant le caractère joker %. Par exemple si on veut chercher tous les mouvements sur les lots H121 et H122, on va renseigner H12% dans le champ n° de lot. La recherche va alors filtrer tous les lots commençants par H12. De la même manière, sur les emplacements il est possible de faire des recherches du type « ST1.2.4% ». Dans ce cas, la recherche listera tous les mouvements sur la colonne 4.

Autre exemple, pour faire une recherche par n° de boîte, on peut saisir dans le champ n° de série les 10 premiers caractères du n° de série imprimé suivi d'un % (ex : 140516B007%). La recherche affichera tous les mouvements des sachets provenant de cette boîte.


Le caractère « % » peut être utilisé sur tous les champs « texte » : référence, emplacement, n° de lot, n° de série, ...

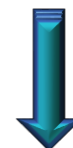

- Consultation
 - Emplacements
 - Historique**
 - Stock
 - Requêtes

"Consultation" puis "Historique" :

ici on visualise l'historique de tous les mouvements du 18/04/2019 00h01 au 19/04/2019 00h.

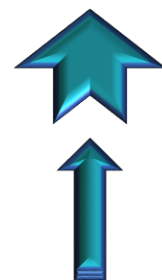

SERVEUR (ecopilote) Echanges Median

Général Consultation - Historique

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties


- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs
- Identification
- A propos

Référence Type Mvt. N° de lot
 Emplacement Fraction Liste
 Utilisateur Service
 Dates à Contenant
 Heures à No Série
 (393 lignes)

Date	Référence	Fraction	Désignation	Fraction	Type Mvt.	Emplacement	Départ
19/04/2019 17:55:49	01/059049	100	AR ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIME ALPRAZOLAM MYL 0,25MG CPR XANAX 0.25MG	100	Entrée	ST1.199. 1	
19/04/2019 17:55:35	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1. 64. 1	
19/04/2019 17:55:19	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1. 64. 1	
19/04/2019 17:54:26		100	(Référence inconnue)	100	Transfert	ST1. 64. 1	
19/04/2019 17:54:16	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Transfert	ST1. 64. 1	
19/04/2019 17:52:47	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:52:37	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:52:27	01/001745	100	AR VALPROATE DE SODIUM LP 500 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE DEPAKINE CHRONO	100	Entrée	ST1.206. 1	
19/04/2019 17:52:18	01/059049	100	AR ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIME ALPRAZOLAM MYL 0,25MG CPR XANAX 0.25MG	100	Entrée	ST1.199. 1	
19/04/2019 17:52:15	01/059049	100	AR ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIME ALPRAZOLAM MYL 0,25MG CPR XANAX 0.25MG	100	Transfert	ST1.199. 1	
19/04/2019 17:51:16	01/059049	100	AR ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIME ALPRAZOLAM MYL 0,25MG CPR XANAX 0.25MG	100	Transfert	ST1.199. 1	
19/04/2019 17:50:57	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:50:47	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:50:38	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:50:28	01/062088	100	HO DABIGATRAN 75MG GELULE PRADAXA 75MG GELULE	100	Entrée	ST1.205. 1	
19/04/2019 17:50:18	01/001666	100	AR PANCREATINE 10000 U GELULE CREON 10000U GELULE	100	Entrée	ST1.200. 1	
19/04/2019 17:50:09	01/001666	100	AR PANCREATINE 10000 U GELULE CREON 10000U GELULE	100	Entrée	ST1.200. 1	
19/04/2019 17:49:59	01/001666	100	AR PANCREATINE 10000 U GELULE CREON 10000U GELULE	100	Entrée	ST1.200. 1	
19/04/2019 17:49:49	01/001745	100	AR VALPROATE DE SODIUM LP 500 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE DEPAKINE CHRONO	100	Entrée	ST1.206. 1	
19/04/2019 17:49:40	01/001745	100	AR VALPROATE DE SODIUM LP 500 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE DEPAKINE CHRONO	100	Entrée	ST1.206. 1	
19/04/2019 17:49:30	01/001745	100	AR VALPROATE DE SODIUM LP 500 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE DEPAKINE CHRONO	100	Entrée	ST1.206. 1	
19/04/2019 17:49:20	01/001745	100	AR VALPROATE DE SODIUM LP 500 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE DEPAKINE CHRONO	100	Entrée	ST1.206. 1	
19/04/2019 17:49:10	01/001666	100	AR PANCREATINE 10000 U GELULE CREON 10000U GELULE	100	Entrée	ST1.200. 1	

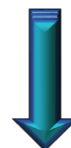

MEDIAN

- ▼ Consultation
- Emplacements
- **Historique**
- Stock
- Requêtes

"Consultation" puis "Historique" :

Les différents types de mouvements.



- TOUS
- Sortie
- Entrée
- Inventaire
- Coupe
- Livraison
- Liste
- Pilotage
- Référence
- Transfert
- Directe

Mouvements de sortie provenant des cycles de cueillette (Nominatives en piluliers) ou des cycles de sorties globales.


Mouvements des entrées provenant des cycles de conditionnement ou des cycles de retour produits.

Mouvements provenant des inventaires effectués lorsque le robot détecte une boîte PASS vide qui était informatiquement pleine.

Mouvements d'entrées provenant des cycles de conditionnement.

Mouvements provenant des imports du référentiel.



Mouvements provenant des transferts de boîte entre l'ACCED et l'AIDE ainsi que les permutations faites par le robot.

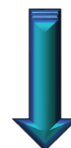

MEDIAN

- ▼ Consultation
 - Emplacements
 - Historique
 - Stock
 - **Requêtes**



"Consultation" puis "Requêtes" permet d'afficher la liste des requêtes MEDIAN.
 Cette liste peut varier selon votre groupe d'utilisateur (préparateur, pharmacien, référent).

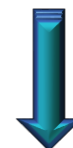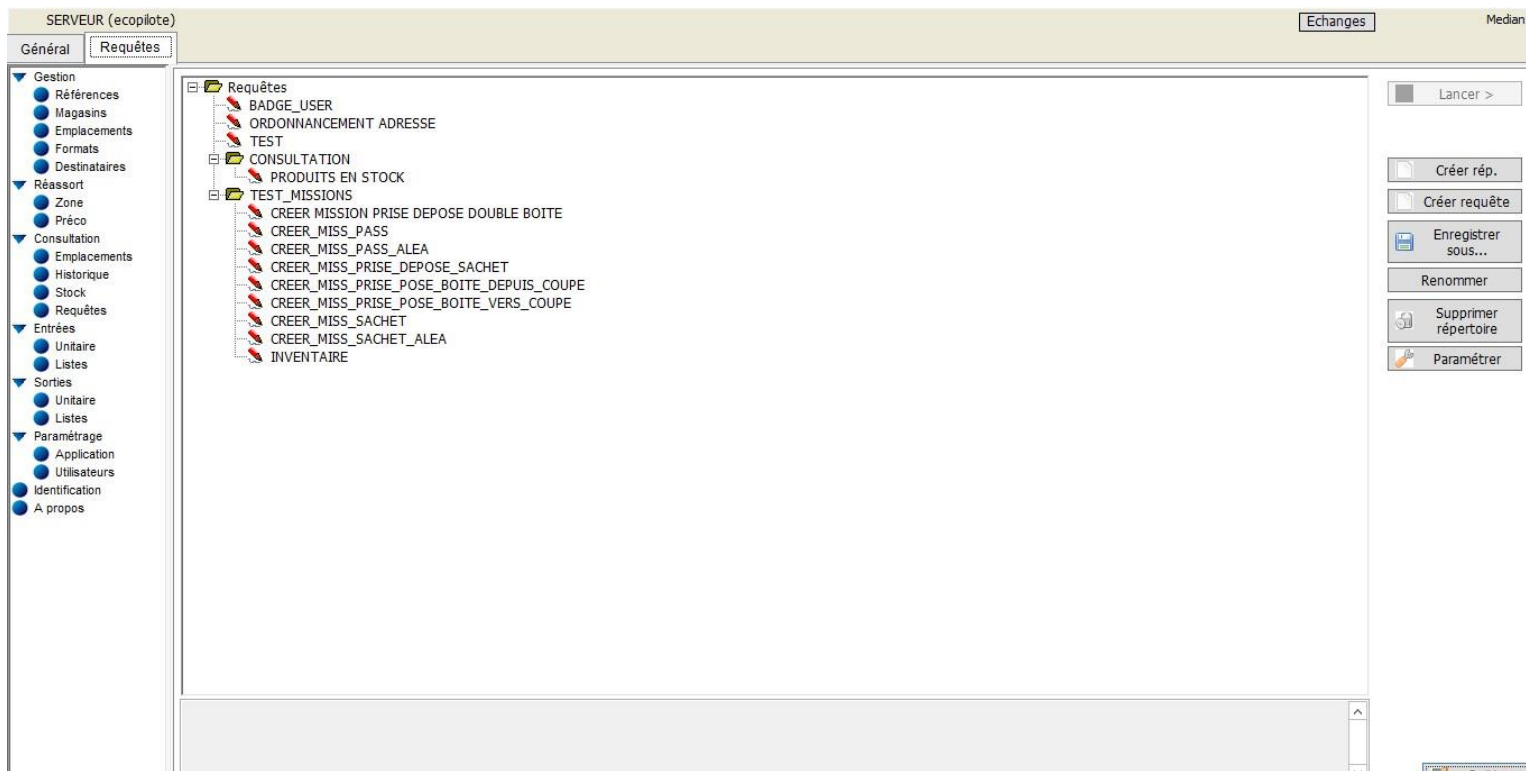

MEDIAN



"Entrées" puis "Listes" permet de visualiser et modifier les listes créées lors des demandes de réapprovisionnement.

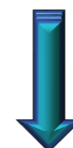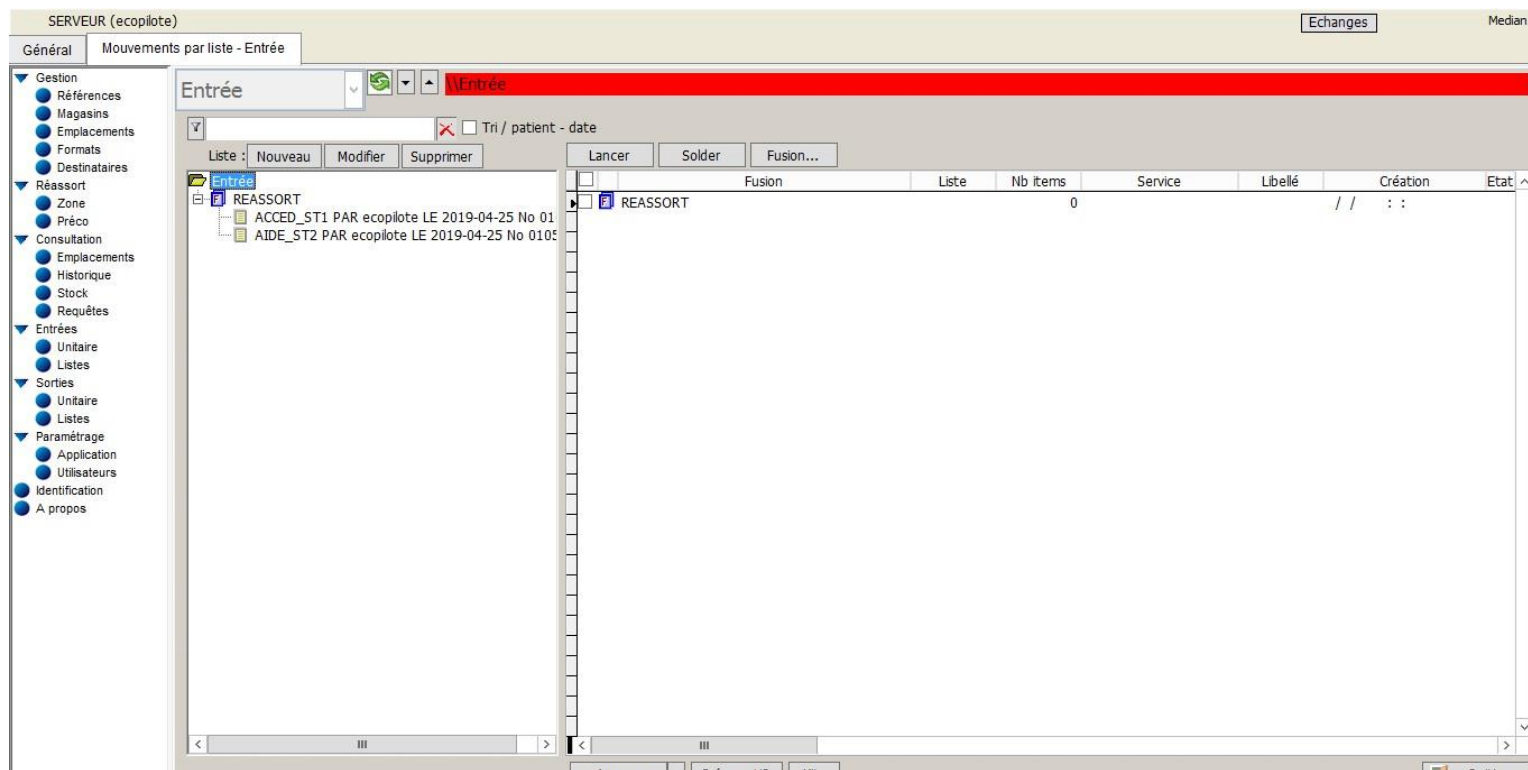

MEDIAN



"Entrées" puis "Listes" permet de visualiser et modifier les listes créées lors des demandes de réapprovisionnement.

ici on visualise la liste d'entrée de l'ACCED_ST1



SERVEUR (ecopilot) Echanges Median

Général Mouvements par liste - Entrée

Entrée


Item : Nouveau Modifier Supprimer

REASSORT

ACCED_ST1 PAR ecopilot LE 2019-04-25 No 01053

AIDE_ST2 PAR ecopilot LE 2019-04-25 No 01053



Item	Référence	Désignation	Etat
0001	01/000366	AR SPIRONOLACTONE 25 MG + ALTIZIDE 15 MG CO MPRIME ALDACTAZINE CPR	Vierge
0002	01/000368	AR SPIRONOLACTONE 75 MG COMPRIME ALDACTONE 75MG CPR	Vierge
0003	01/000498	AR MIANSERINE 60 MG COMPRIME MIANSERINE ARW 60MG CPR ATHYMIL	Vierge
0004	01/000593	AR PROPRANOLOL 40MG COMPRIME PROPRANOLOL EG 40MG CPR	Vierge
0005	01/000831	AR SULFAMETHOXAZOLE 800 MG + TRIMETHOPRIME 160 MG COMPRIME BACTRIM FORTE 800MG/160MG	Vierge
0006	01/001658	AR PREDNISONE 20 MG COMPRIME CORTANCYL 20MG CPR	Vierge
0007	01/001661	AR MOLSIDOMINE 2 MG COMPRIME MOLSIDOMINE EG 2MG CPR	Vierge
0008	01/001804	AR DIGOXINE 0,25 MG COMPRIME DIGOXINE NAT 0,25MG CPR	Vierge
0009	01/001835	AR HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG COMPRIME ESIDREX 25MG CPR	Vierge
0010	01/001845	AR URAPIDIL 30 MG GELULE EUPRESSYL 30MG GELULE	Vierge
0011	01/001847	AR URAPIDIL 60 MG GELULE EUPRESSYL 60MG GELULE	Vierge
0012	01/001913	AR FLECAINIDE 100 MG COMPRIME FLECAINIDE ARW 100MG CPR	Vierge
0013	01/001925	AR FLUDROCORTISONE 50 MICROGRAMMES COMPRIME FLUCORTAC 50MG CPR	Vierge
0014	01/002111	AR HYDROXYCARBAMIDE 500 MG GELULE HYDREA 500MG GELULE	Vierge
0015	01/002196	AR BACLOFENE 10 MG COMPRIME BACLOFENE ZEN 10MG CPR	Vierge
0016	01/002205	AR VERAPAMIL 120 MG GELULE A LIBERATION IMMEDIATE ISOPTINE 120MG GELULE	Vierge
0017	01/002412	AR PENICILLINE V 1 MUI COMPRIME ORACILLINE 1MUJ CPR	Vierge
0018	01/002418	AR CEFIXIME 200 MG COMPRIME CEFIXIME ARW 200MG CPR OROKEN	Vierge
0019	01/002470	AR MESALAZINE 500 MG COMPRIME PENTASA 500MG CPR	Vierge
0020	01/002766	AR LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG LP COM PRIME A LIBERATION PROLONGEE CARBIDOPA LEVO	Vierge
0021	01/002767	AR CLONAZEPAM 2 MG COMPRIME RIVOTRIL 2MG CPR	Vierge
0022	01/002768	AR ACENOCOUMAROL 4 MG COMPRIME SINTROM 4MG CPR	Vierge
0023	01/002828	AR ANETHOLTRITHIONE 25 MG COMPRIME SULFARLEM S 25MG CPR	Vierge
0024	01/002874	AR CARBAMAZEPINE LP 200 MG COMPRIME A LIBERATION PROLONGEE CARBAMAZEPINE MYL LP 200MG	Vierge
0025	01/002899	AR LORAZEPAM 1 MG COMPRIME TEMESTA 1MG CPR	Vierge
0026	01/002900	AR AMISULPRIDE 200 MG COMPRIME AMISULPRIDE ARW 200MG CPR	Vierge
0027	01/002901	AR LORAZEPAM 2,5 MG COMPRIME TEMESTA 2,5MG CPR	Vierge

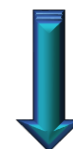

MEDIAN




" Sorties" puis "Listes " permet de visualiser les listes de dispensation, de sortie de périmés et de sortie globale.

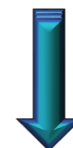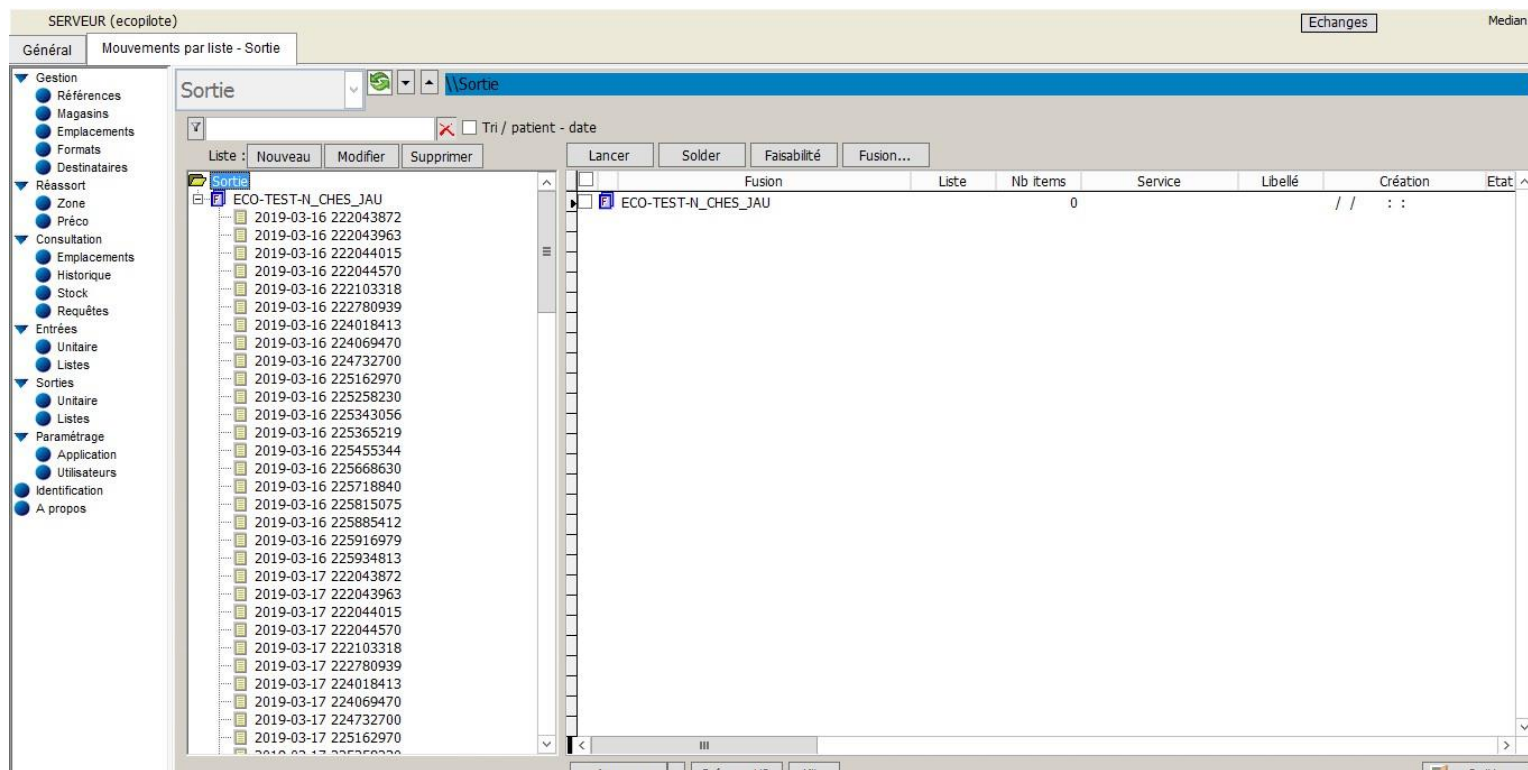



" Sorties" puis "Listes " permet de visualiser les listes de dispensation, de sortie de périmés et de sortie globale.

Ici on visualise les listes de sorties du service ECO-TEST

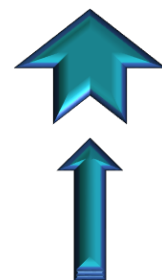

SERVER (ecopilot) Echanges Median


Général Mouvements par liste - Sortie

Sortie

Tri / patient - date

Liste : Nouveau Modifier Supprimer Lancer Solder Faisabilité Fusion...

Sortie	Liste	Etat	Nb items	Création	Modification	Service	Libellé	Patient
2019-03-16 222043872	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT FRANC
2019-03-16 222043963	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARIE
2019-03-16 222044015	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT GISELE
2019-03-16 222044570	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MICHEI
2019-03-16 222103318	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT JACQU
2019-03-16 222780939	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT SIMON
2019-03-16 224018413	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARTH
2019-03-16 224069470	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT ELISE
2019-03-16 224732700	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARCE
2019-03-16 225162970	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT YVETT
2019-03-16 225258230	Vierge		0	15/03/2019 11:18:53	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT HELEN
2019-03-16 225343056	Vierge		0	15/03/2019 11:18:53	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT CLAUD
2019-03-16 225365219	Vierge		0	15/03/2019 11:18:53	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MONIQ
2019-03-16 225455344	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT BERNA
2019-03-16 225668630	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT GABRI
2019-03-16 225718840	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MICHEI
2019-03-16 225815075	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARGL
2019-03-16 225885412	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT ALEXA
2019-03-16 225916979	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT ELIE
2019-03-16 225934813	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT CLAUD
2019-03-17 222043872	Vierge		0	15/03/2019 11:18:53	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT FRANC
2019-03-17 222043963	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARIE
2019-03-17 222044015	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT GISELE
2019-03-17 222044570	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MICHEI
2019-03-17 222103318	Vierge		0	15/03/2019 11:18:51	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT JACQU
2019-03-17 222780939	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT SIMON
2019-03-17 224018413	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	PATIENT MARTH
2019-03-17 224069470	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	
2019-03-17 224732700	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	
2019-03-17 225162970	Vierge		0	15/03/2019 11:18:52	// : :	ECO-TEST	TEST ECO-DEX	

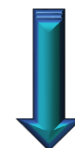



MEDIAN



" Sorties " puis " Listes " permet de visualiser les listes de dispensation, de sortie de périmés et de sortie globale.

Ici on visualise la liste de sortie d'un patient présent dans le service ECO-TEST



SERVEUR (ecoplate) Echanges Median

Général Mouvements par liste - Sortie

Sortie

Item : Nouveau Modifier Supprimer Lancer Solder Faisabilité Service Lot/peremption N° définitif

Sortie

ECO-TEST-N_CHES_JAU

2019-03-16 222043872

2019-03-16 222043963

2019-03-16 222044015

2019-03-16 222044570

2019-03-16 222103318

2019-03-16 222780939

2019-03-16 224018413

2019-03-16 224069470

2019-03-16 224732700

2019-03-16 225162970

2019-03-16 225258230

2019-03-16 225343056

2019-03-16 225365219

2019-03-16 225455344

2019-03-16 225668630

2019-03-16 225718840

2019-03-16 225815075

2019-03-16 225885412

2019-03-16 225916979

2019-03-16 225934813

2019-03-17 222043872

2019-03-17 222043963

2019-03-17 222044015

2019-03-17 222044570

2019-03-17 222103318

2019-03-17 222780939


2019-03-17 224018413

2019-03-17 224069470

2019-03-17 224732700

2019-03-17 225162970

Item	Référence	Désignation	Etat
0001	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0002	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0003	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0004	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0005	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0006	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0007	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0008	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge
0009	9000009	SACHET VIDE POUR DEVERMINAGE - ECO-DEX	Vierge

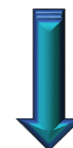

MEDIAN



"Paramétrage" puis "Utilisateurs" permet de créer, modifier, consulter les utilisateurs.

SERVER (ecopilot)

Echanges

Median

Général

Profils

Gestion

- Références
- Magasins
- Emplacements
- Formats
- Destinataires

Réassort

- Zone
- Préco

Consultation

- Emplacements
- Historique
- Stock
- Requêtes

Entrées

- Unitaire
- Listes

Sorties

- Unitaire
- Listes

Paramétrage

- Application
- Utilisateurs

Identification

A propos

Utilisateur

Groupe

Utilisateur

Description

Mot de passe

Mot de passe bis

Service

Groupe


Stupéfiant

Emprunts

Aperçu

Supprimer

Enregistrer

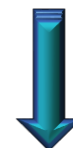


Pour créer un utilisateur, renseigner les champs encadrés en rouge, puis cliquer sur "enregister".





MEDIAN

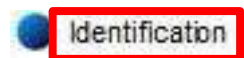

"Identifiacion" permet de vous identifier.

